


AETERDERM®

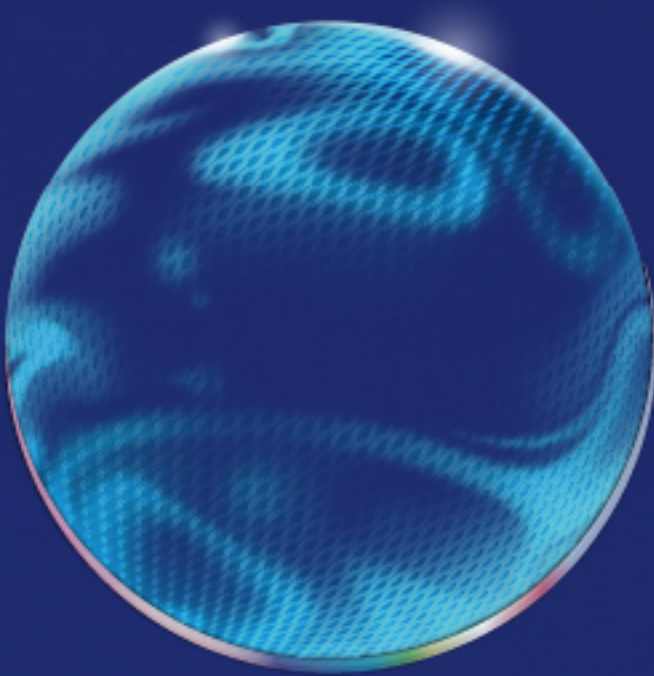

AETERDERM® PURI EYES

AETERDERM® PURI EYES PRO

AETERDERM® PURI EYES PDRN PATCH



AETERDERM®

PURRI EYES PDRN PATCH

AETERDERM®

PURRI EYES PRO

AETERDERM®

PURRI EYES




عيون أكثر مرونة وحيوية




AETERDERM®
PURI EYES
Polynucleotide 2mg

- ألم منخفض مع فترة تعافٍ قصيرة
- إجراء سلس ولطيف على البشرة

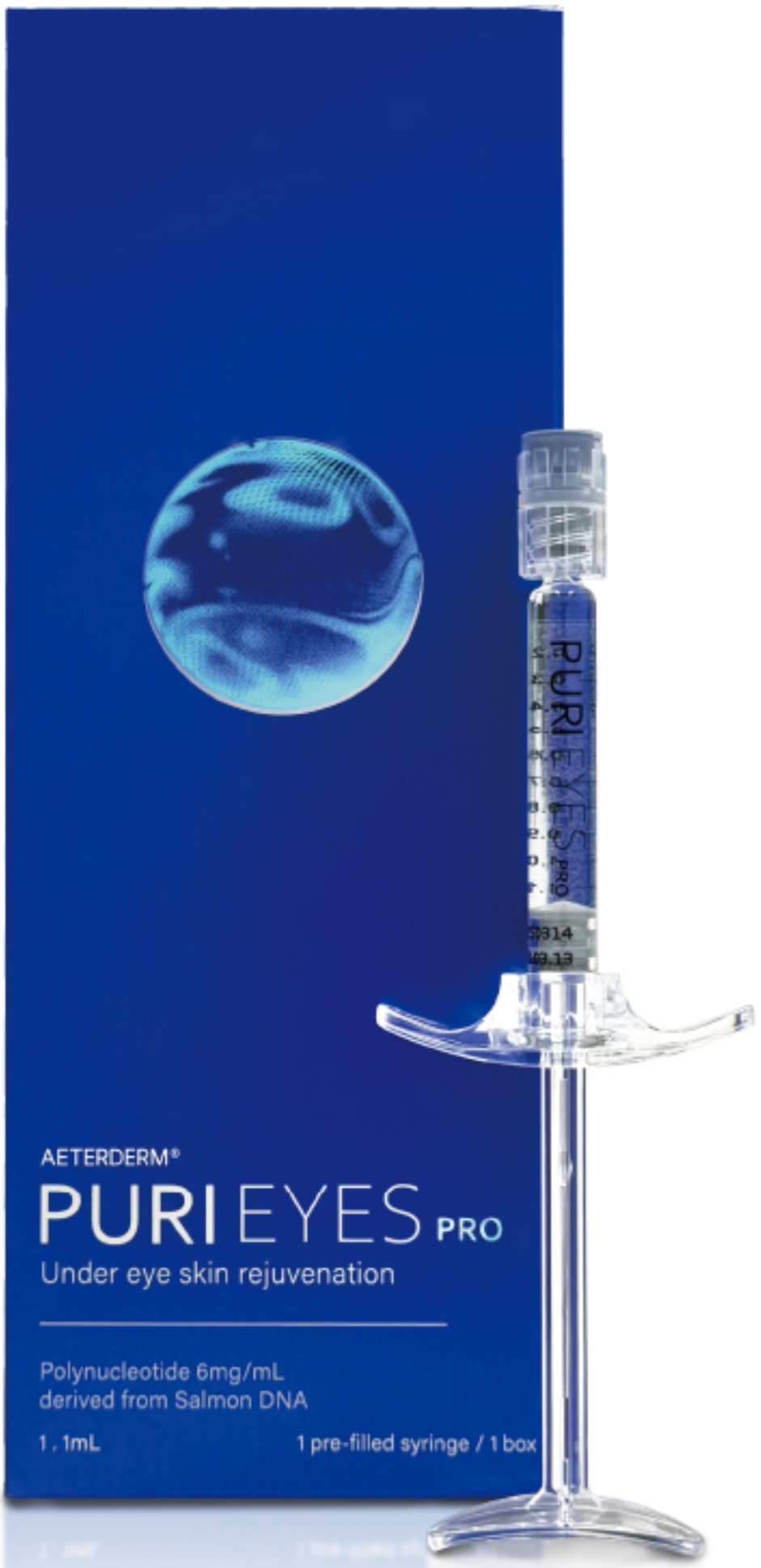

AETERDERM®
PURI EYES PRO
Polynucleotide 6mg

- تجديد مكثّف مع تعزيز التماسك
- تحسّات أكثر وضوحًا

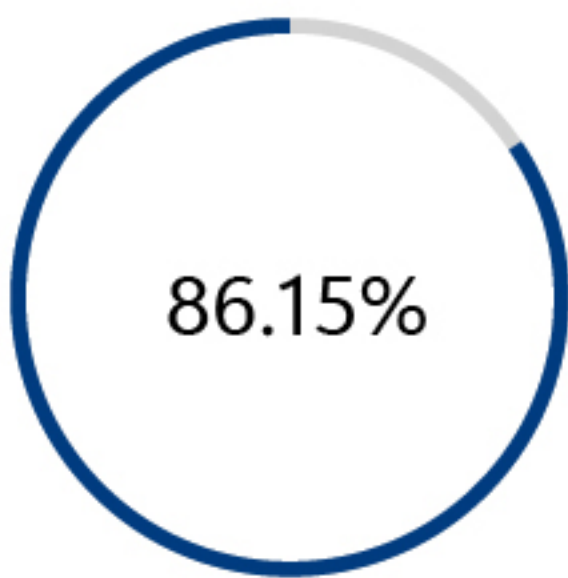


التعافي

تحقق التئام جروح خلايا الأدمة
بنسبة تزيد عن 86%

تقليل التجاعيد

تجديد البشرة

تحسين لون البشرة وكثافتها

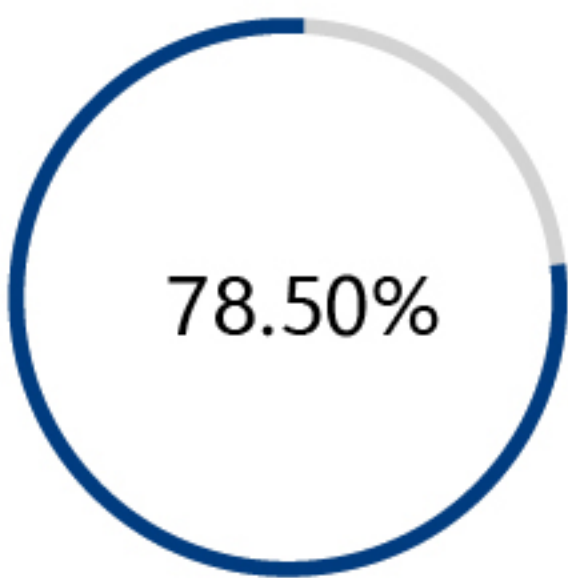

الشّدّ

تأثير شّدّ ناتج عن تحسين الكثافة
عبر تحفيز تكاثر خلايا الأدمة

ترطيب البشرة

شّدّ المسام

تحسين مرونة البشرة

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

for use with AETERDERM®PURI EYES




عيناك تعبّران عنك أكثر من أي شيء آخر،
لكن بشرتهما هي الأرقّ في الوجه،
لذلك تكونان أول ما تظهر عليه علامات التقدّم في العمر.


امنح بشرتك المتعبة القوة التي تحتاجها،
فالبشرة تتذكّر العناية التي تتلقاها.

PURI EYES PDRN PATCH


تأثيرات تكاملية لتهدئة البشرة
المتهيّجة بعد علاج PURI EYES

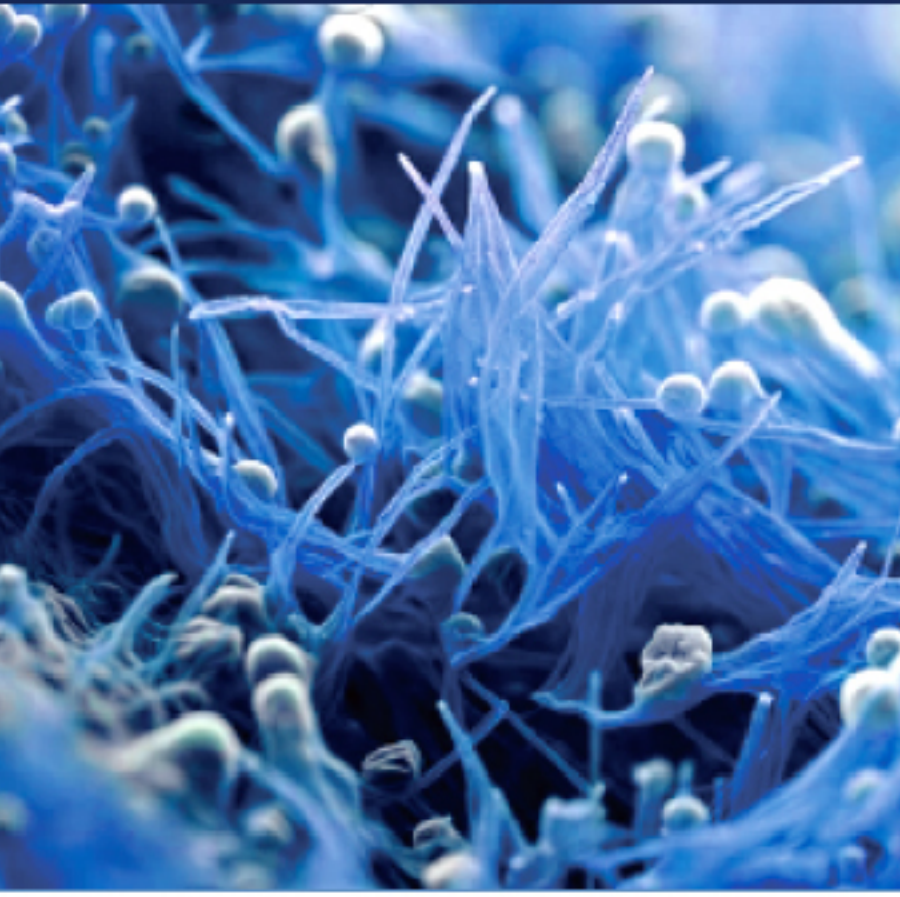

بوليمرات طبيعية مشتقة من النباتات

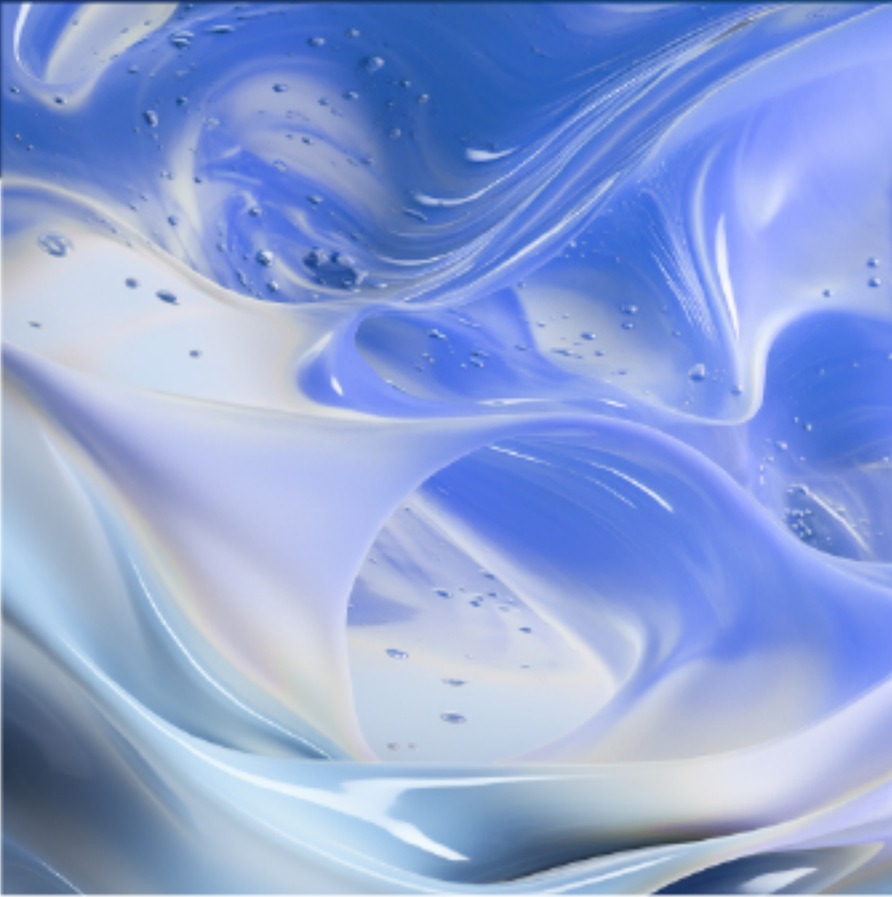


شهادة اعتماد MFDS للشريحة مزدوجة الوظيفة

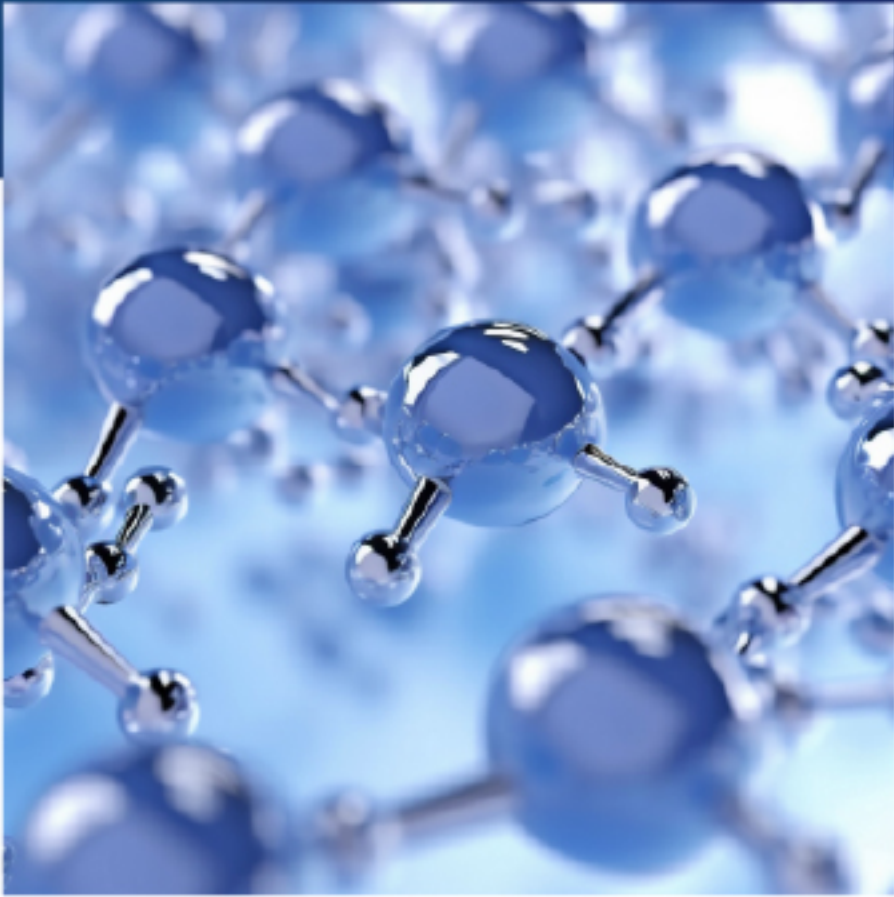

جزيئات هلامية مستجيبة لدرجة الحرارة

مكوّن موصوف خصيصًا



للعناية اللاحقة بعد علاج PURI EYES

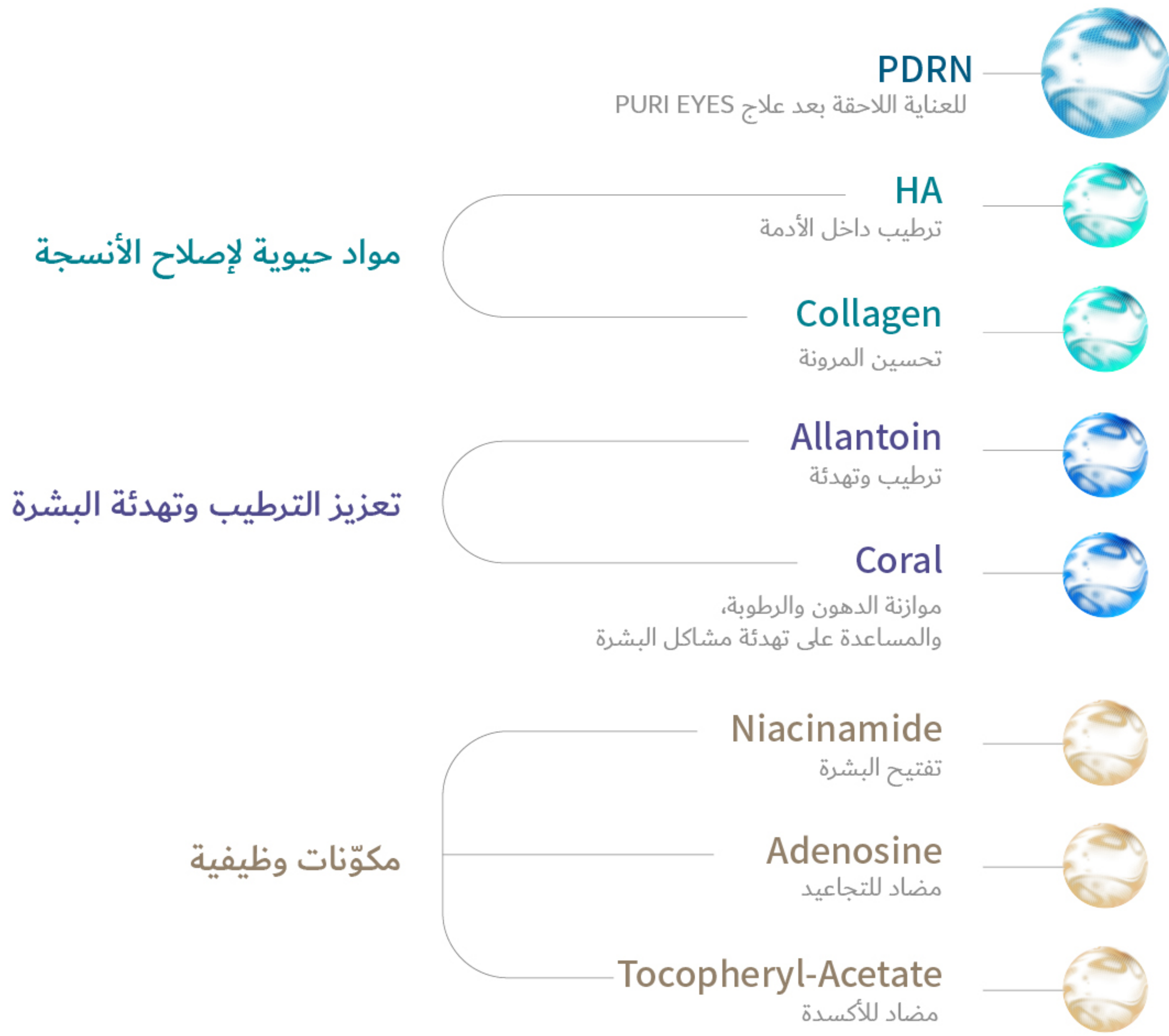



قبل وبعد

اختبار الخدش لهجرة الخلايا

AETERDERM®PURI EYES

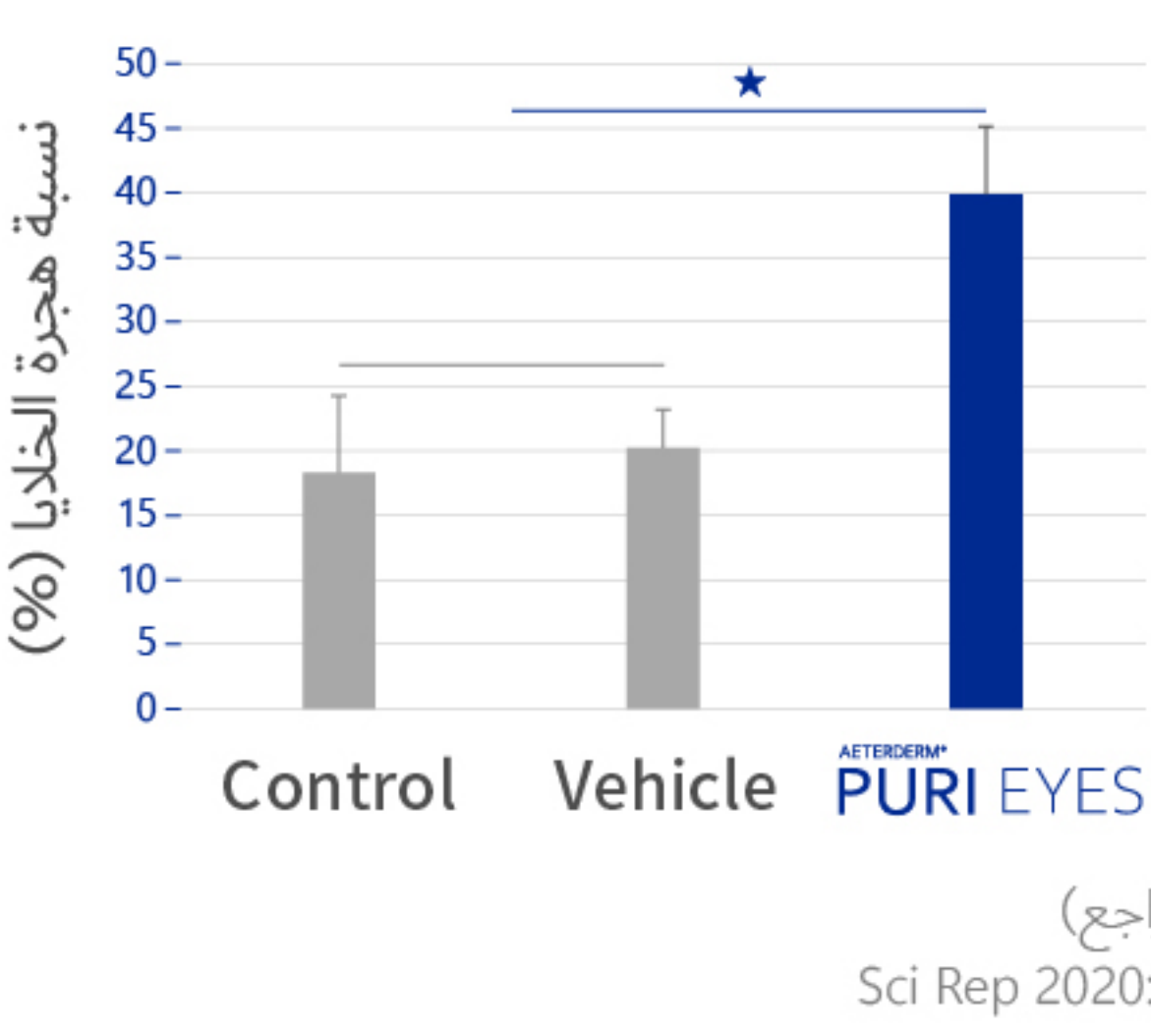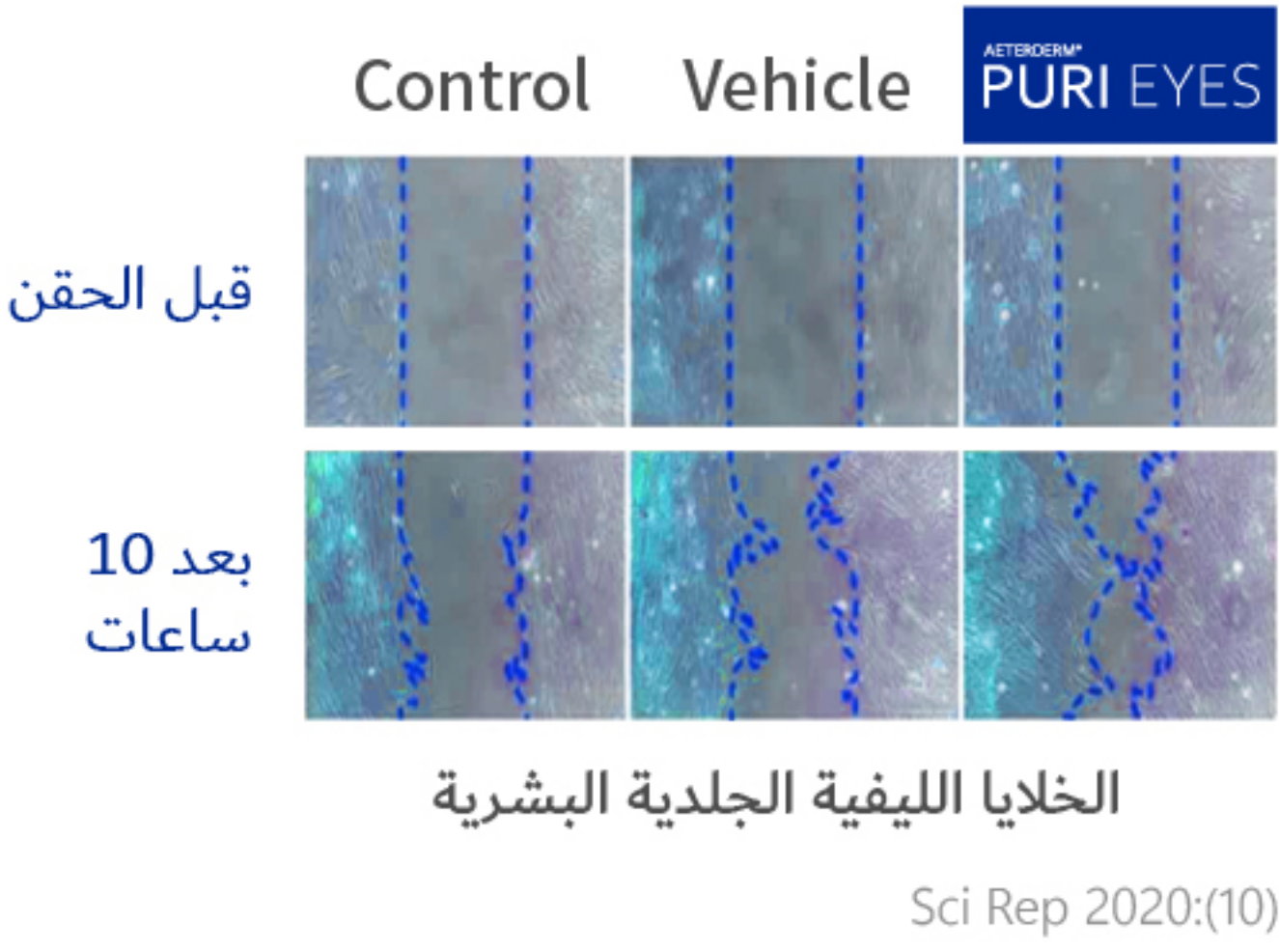

تحسن الخلايا الميتة في البشرة ومستوى الترطيب

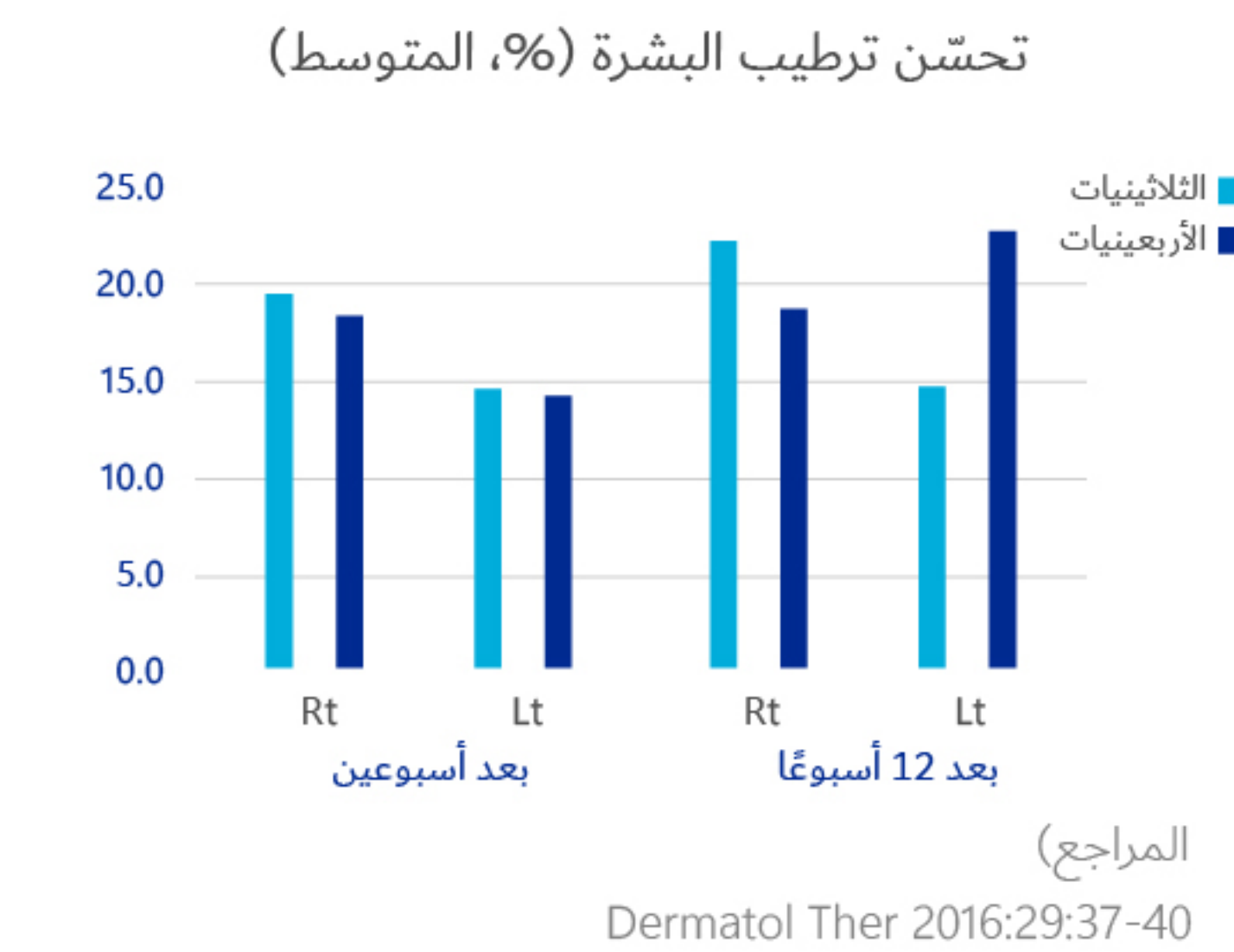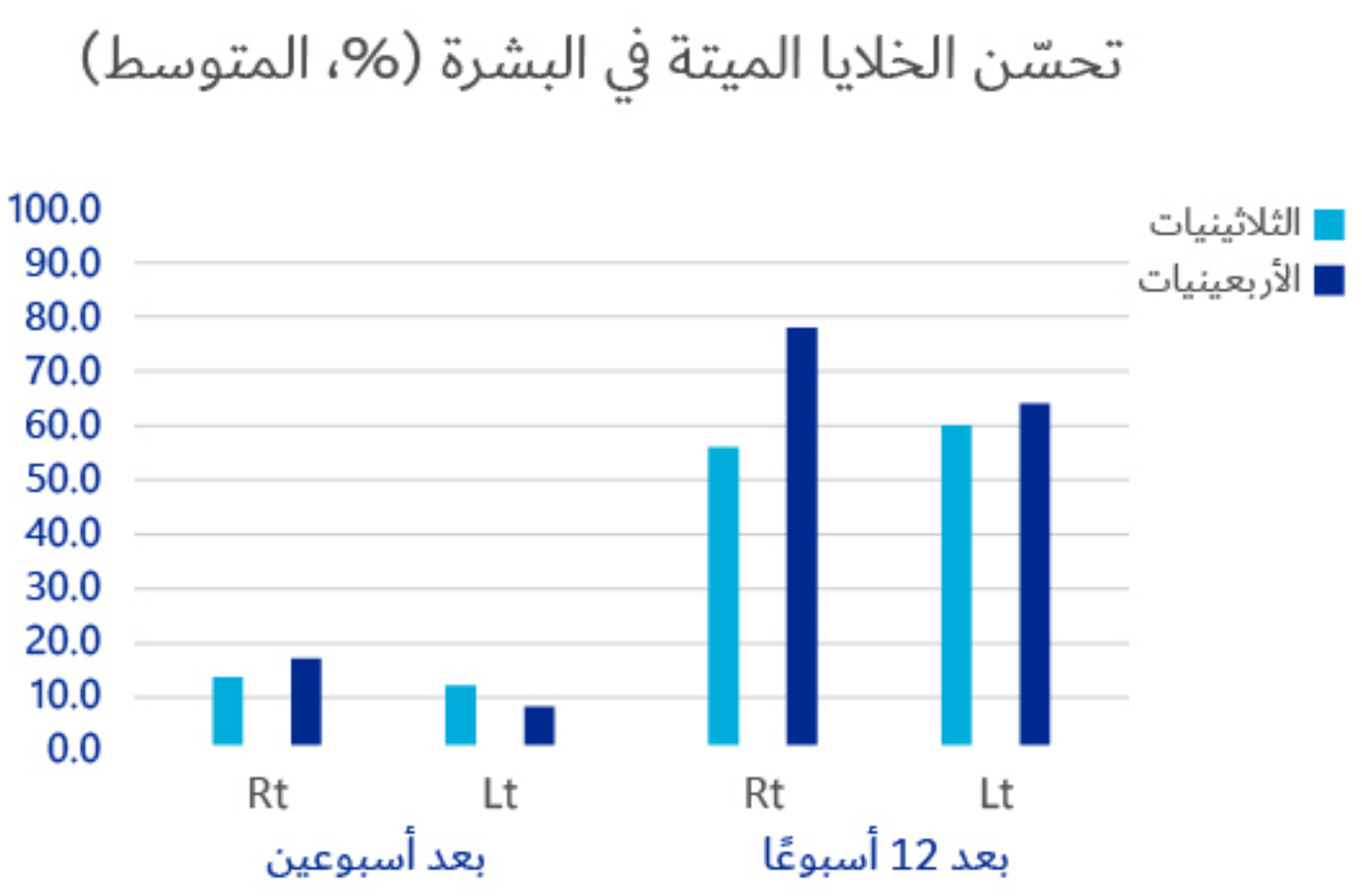

تفتيح البشرة وتحسين ملمس

بعد 12 أسبوعًا من العلاج



قبل العلاج






المراجع
تحسن لون البشرة بعد 12 أسبوعًا من الحقن، موثّق باستخدام جهاز (VISIA-CR)
Clinical trials by Dermatol Ther 2016:29:37-40

خشونة البشرة وحجم المسام

حجم المسام

خشونة البشرة

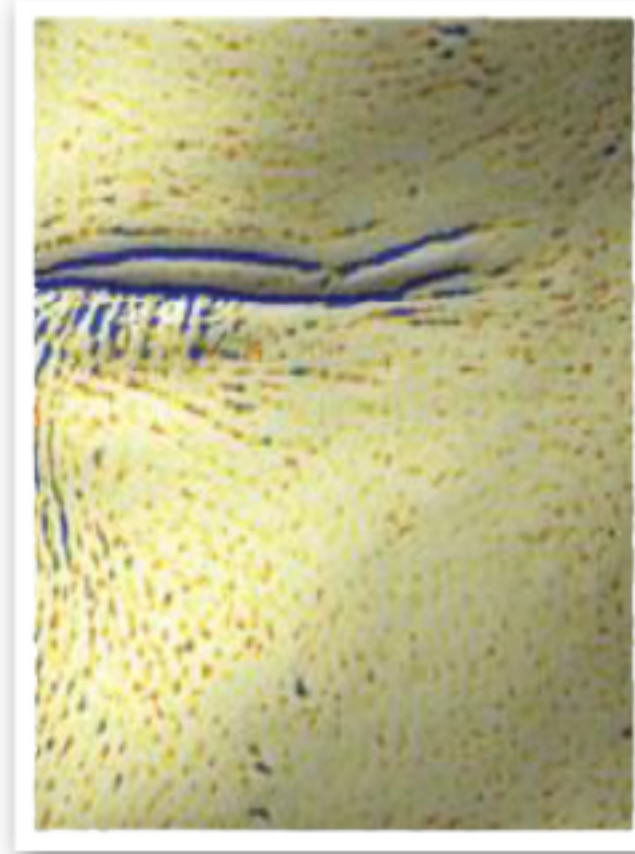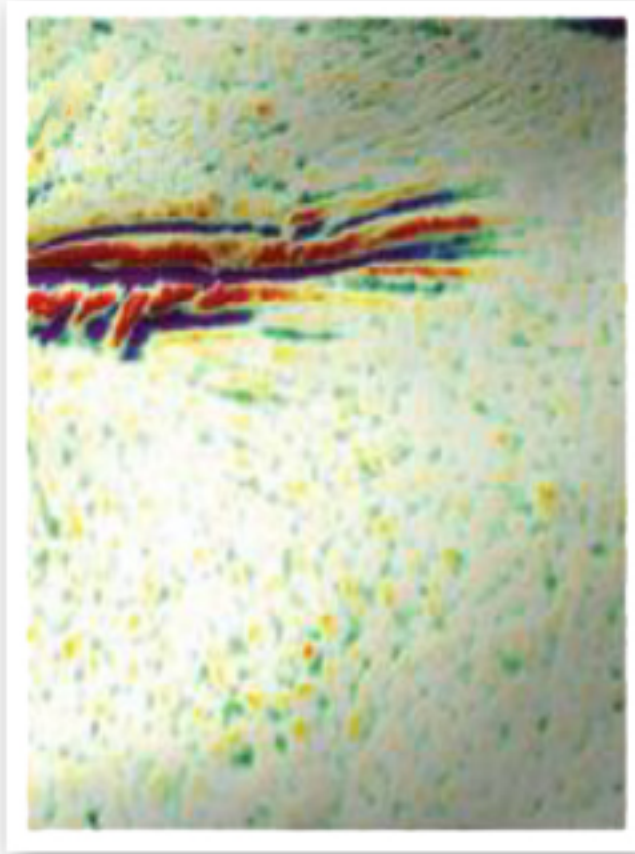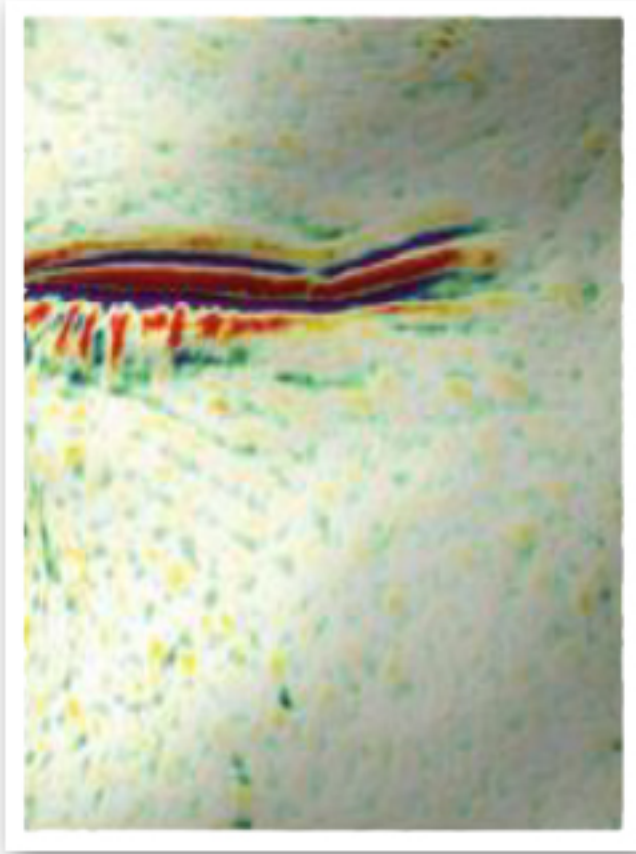

بعد 16 أسبوعًا

قبل العلاج



بعد 16 أسبوعًا

قبل العلاج


المراجع (J Dermatol Treat 2022;e33)

تجديد الأنسجة

قبل العلاج

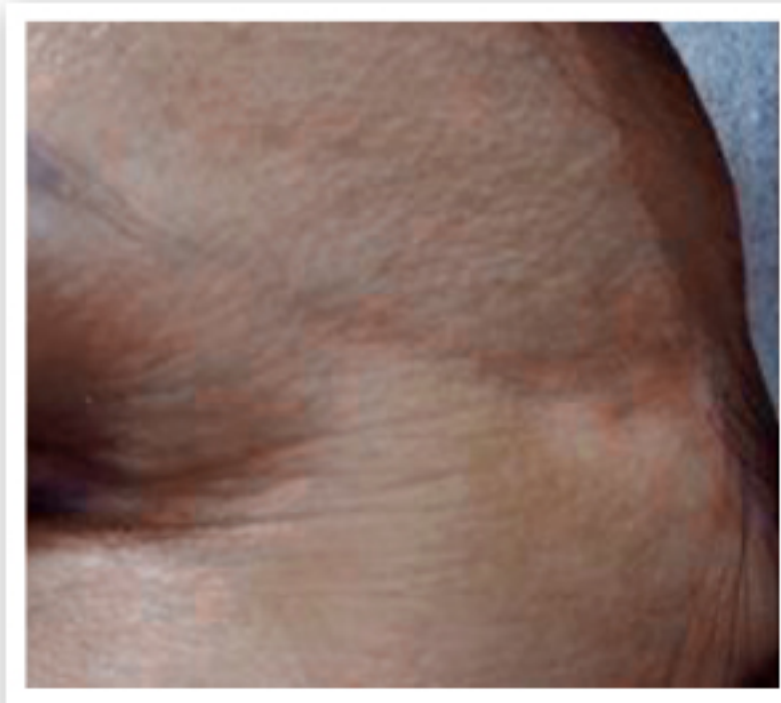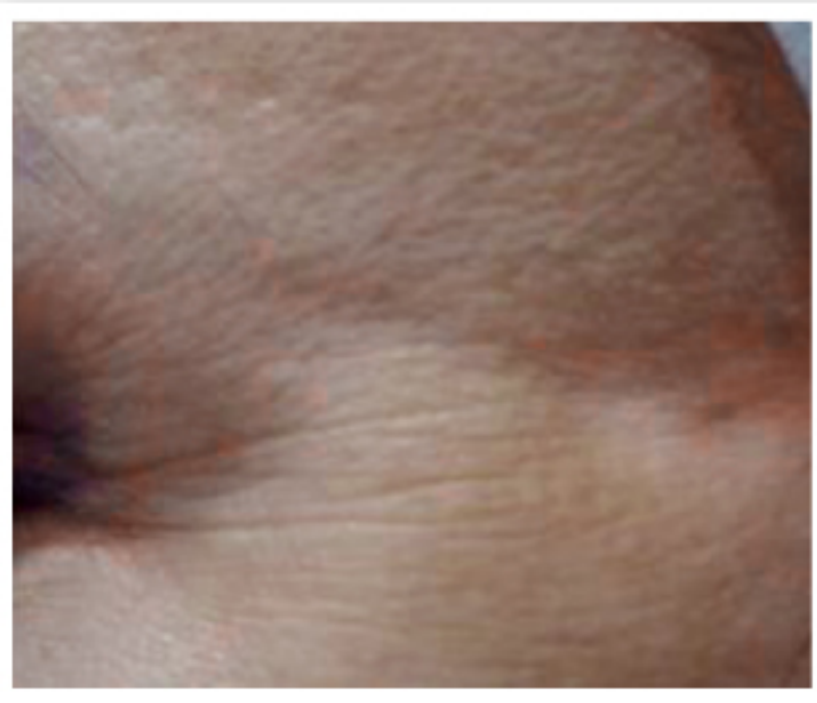

بعد شهرين من الجلسة السادسة

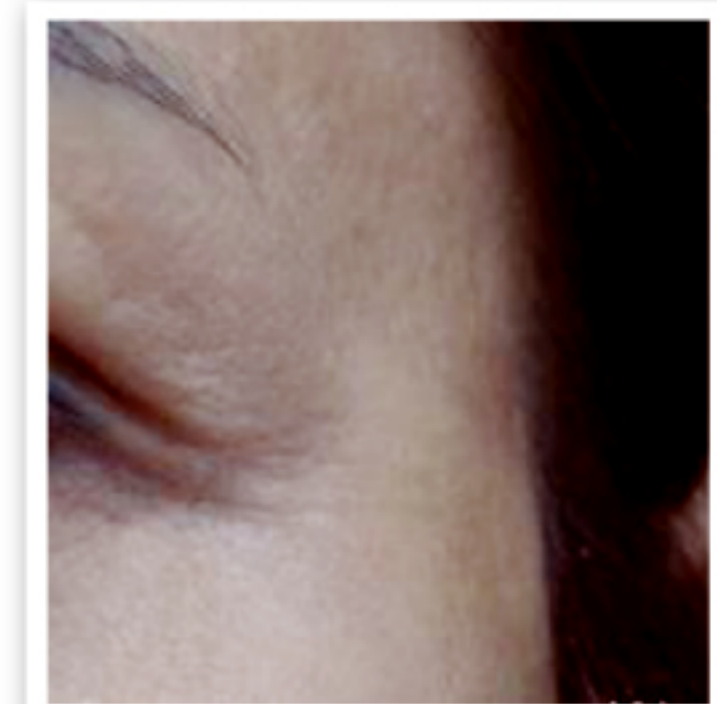

تجديد الندبات الغائرة

قبل العلاج



بعد شهرين من أربع جلسات



المراجع (Skin Res Technol 2023;29(8): e13439)

AETERDERM®

PURI EYES



دليل الاستخدام

الخطوة 1 AETERDERM®PURI EYES

خطوات العلاج



الإبرة الموصى بها

إبرة ميزو 32G~34G

زاوية إدخال الإبرة

بزاوية 10°-15° داخل الأدمة

تفاصيل الحقن

0.02-0.035 مل لكل نقطة حقن

تشكيل بروزات صغيرة

فاصل 6-8 مم بين النقاط

15-30 نقطة لكل عين

الخيارات العلاجية المساعدة

■ أجهزة RF والليزر (مثل Potenza، Secret RF، وغيرها)
تُحفّز تجديد الكولاجين وتعزّز التأثير التآزري لعلاج PURI EYES.

■ أجهزة التعافي غير الجراحية (مثل LED، LDM، Cryocell وغيرها)
تدعم تهدئة الجلد والتعافي بعد العلاج، مما يعزّز النتائج الإجمالية عند استخدامها مع PURI EYES.

1. اغسل وجه المريض جيدًا.
2. ضع كريم الليدوكائين على منطقة العلاج أولاً، وبعد اكتمال التخدير الموضعي نظف المنطقة جيدًا.
3. عقم منطقة العلاج باستخدام مسحات كحولية.
4. اطلب من المريض فتح عينيه والاسترخاء وتجنّب تضيق العينين.
5. قم بحقن المادة حول منطقة العلاج بلطف ودقة قدر الإمكان لتقليل احتمالية الكدمات والتورّم.
6. دلك المنطقة بلطف بعد الإجراء، واطلب من المريض تدليك منطقة العلاج بلطف أيضًا لمدة بضعة أيام للمساعدة على توزيع المنتج.
7. يمكن استخدام جميع تقنيات الحقن التجميلية في الطبقة السطحية من النسيج تحت الجلدي.

الخطوة 2 AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH

العناية بعد الاستخدام



1. قم بتطهير منطقة العلاج بلطف باستخدام مسحات كحولية.
2. ثبت شريحة العين AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH على المنطقة المعالجة بعد تبريدها مسبقًا.
3. بعد 20 دقيقة، قم بإزالة الشريحة وتدليك المصل المتبقي بلطف حتى يتم امتصاصه بالكامل.
4. اطلب من المريض استخدام شريحة العين AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH لمدة 2-3 أيام بعد العلاج.



نتيجة ما بعد العلاج

PURI EYES

ملمس ناعم للبشرة
بشرة أكثر صفاءً
توازن أفضل للزيوت في البشرة

الجلسة الأولى

عادةً تستمر نتائجها لمدة 4 أسابيع

PURI EYES PATCH

يعزز PDRN شفاء الجروح بسرعة
يدعم HA والكولاجين البشرة بالمغذيات
يهدئ البشرة الساخنة
يخفف الجفاف الناتج عن العلاج

الجلسة الثانية

بعد 2-4 أسابيع
عادةً تستمر نتائجها لمدة 3 أشهر

تعزيز حاجز البشرة المتضرر
تهديء حرارة البشرة المستمرة
يعيد PDRN نسيج البشرة بسرعة

الجلسة الثالثة

بعد شهر
عادةً تستمر نتائجها لمدة 6 أشهر

تحسن عام في حالة البشرة
تبدو البشرة أكثر صحة بشكل ملحوظ
تبدو البشرة أكثر إشراقًا ومشدودة


يمنع تصبغ الميلانين
يعمل على تفتيح وترطيب البشرة



AETERDERM®


الآثار الجانبية الشائعة للحقن

الإجراءات التي تقوم بحقن المواد الفعالة مباشرة في البشرة قد تسبب بعض التهيجات الجلدية والآثار الجانبية.

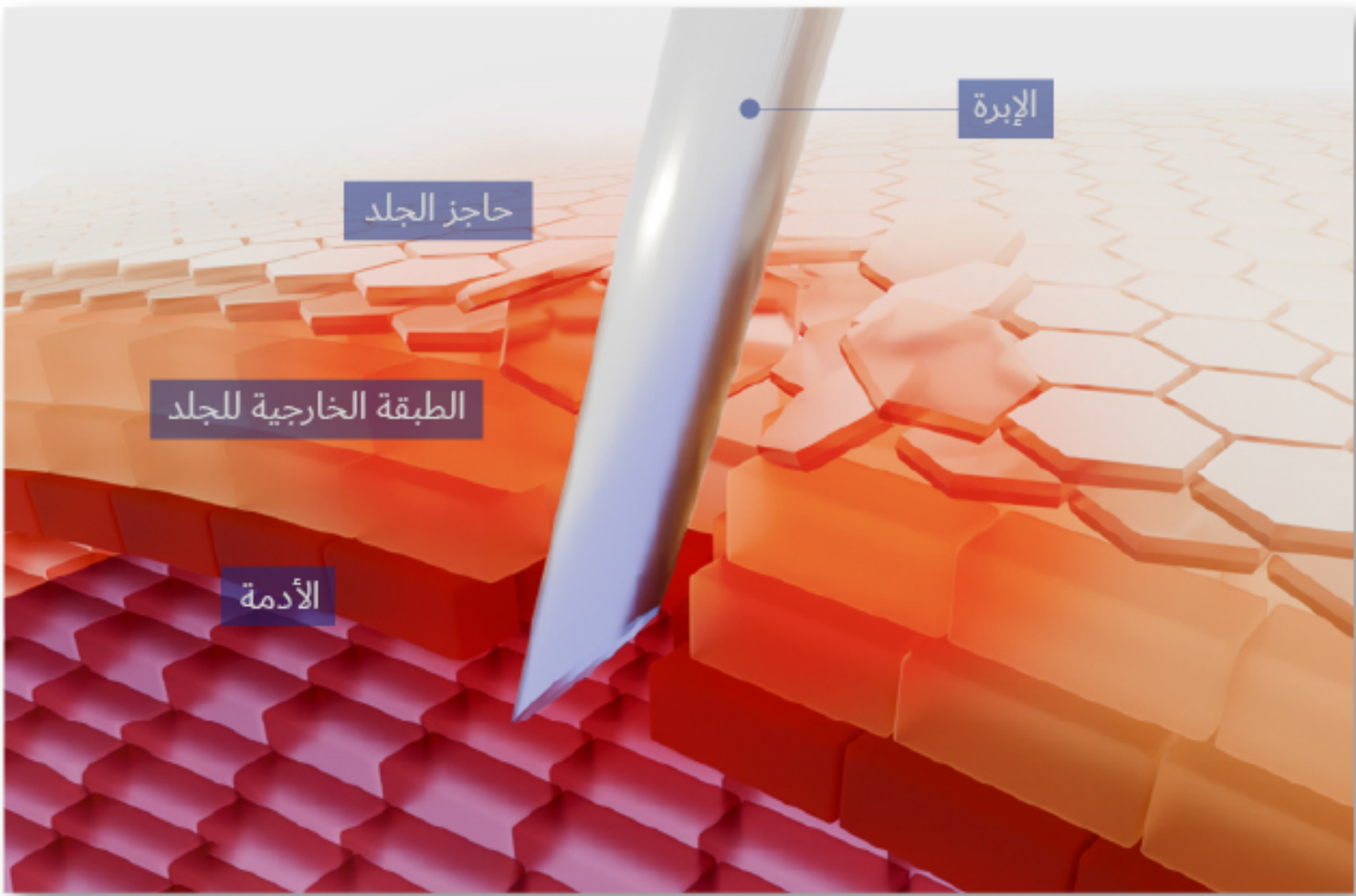


دخول الإبرة إلى الجلد يسبب تهيجًا ملحوظًا في البشرة وطبقة الأدمة.

الحرارة الناتجة عن التهيج
التبخّر وجفاف البشرة الناتج عن الحرارة
تلف حاجز الجلد

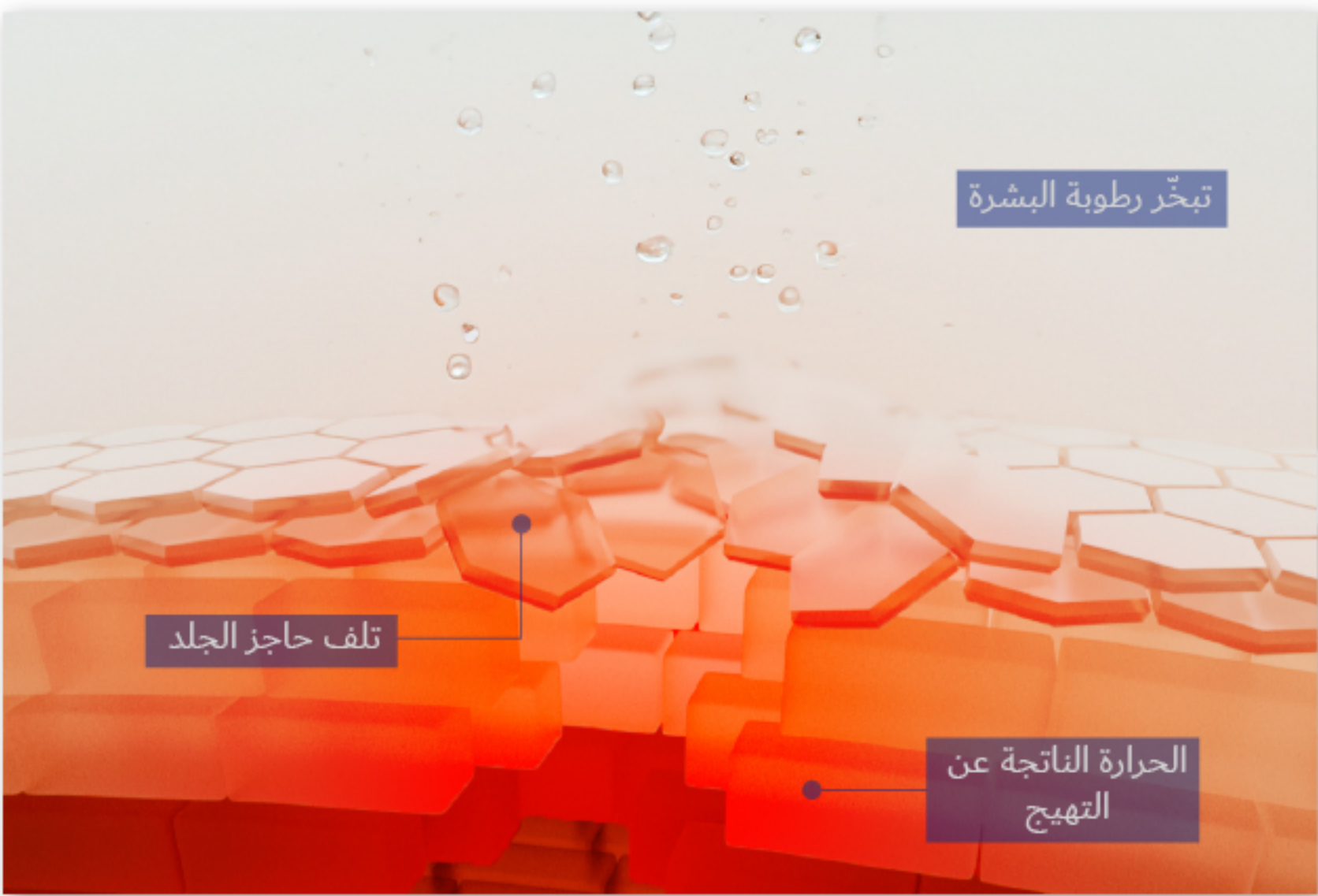

تسرب الدواء مع الدم نتيجة ارتفاع الضغط داخل الأدمة ووجود فتحة حقن صغيرة لم تلتئم بعد.

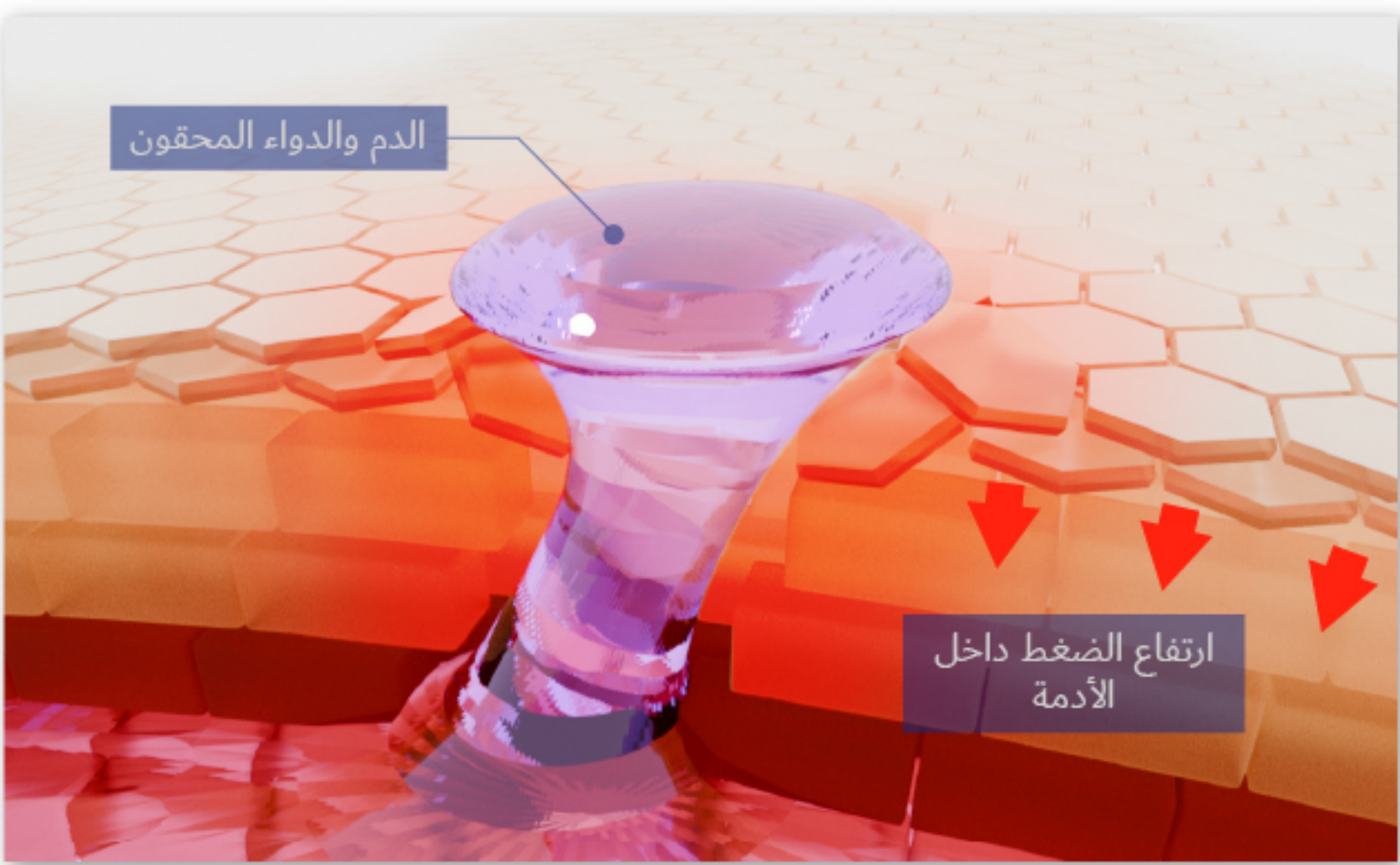


AETER PURI EYES PDRN PATCH

هي منتج للعناية بعد الإجراء، صُمم لتحسين المشاكل المزمنة الناتجة عن عمليات الحقن داخل الأدمة، وتهدئة البشرة المتهيجة بسرعة.


العمل المشترك

PURI EYES PDRN PATCH و PURI EYES J

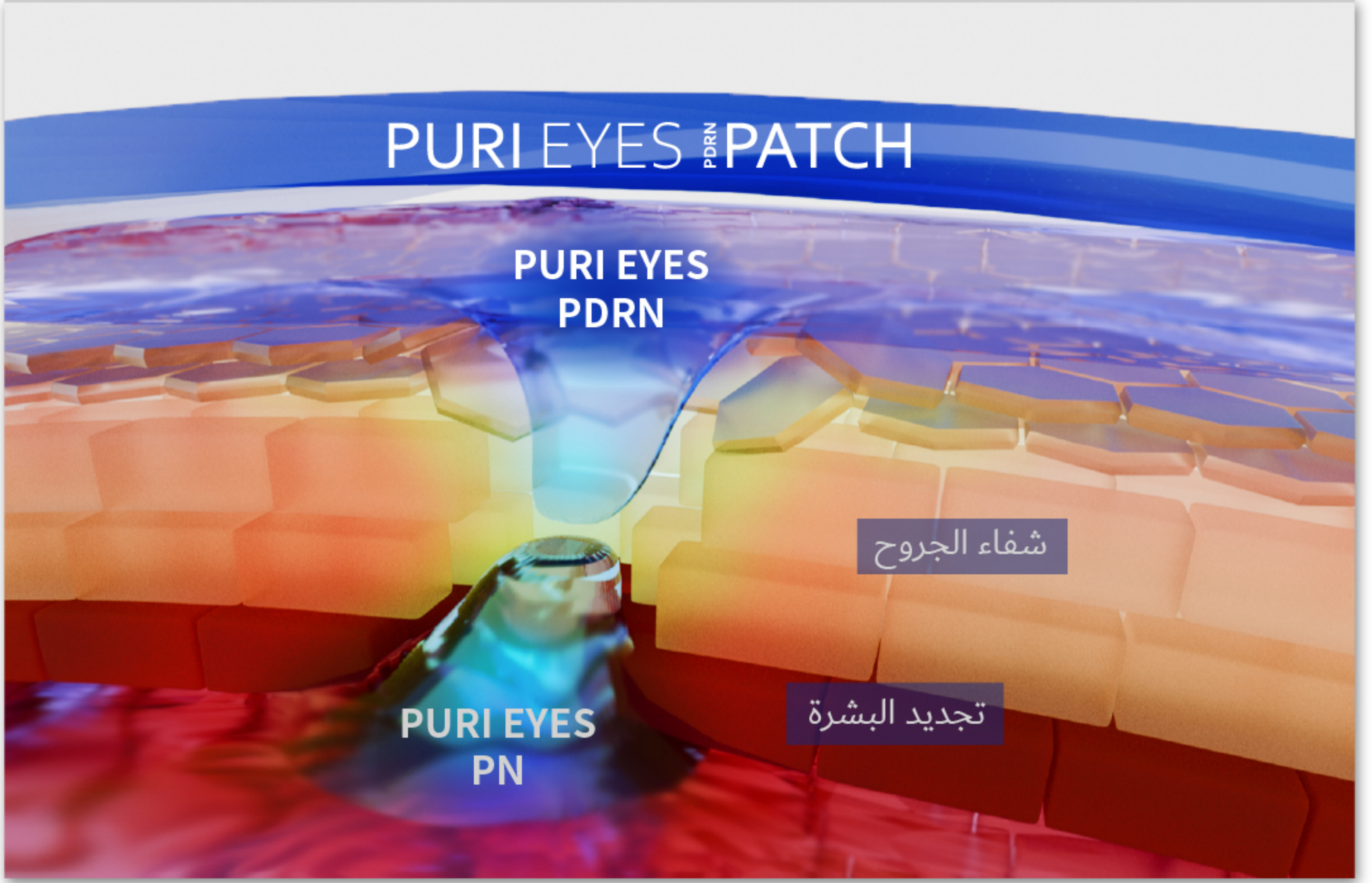


■ عند تطبيق PDRN عالي التركيز الذي يمتلك نفس الخصائص الفيزيائية لـ PURI EYES PN على البشرة، فإنه يمنع تسرب الأدوية المحقونة داخل الأدمة نتيجة للأسموزية.

■ يعمل كل من PDRN و PN على كل من البشرة والأدمة لإصلاح الجروح وتجديد النسيج داخليًا وخارجيًا.

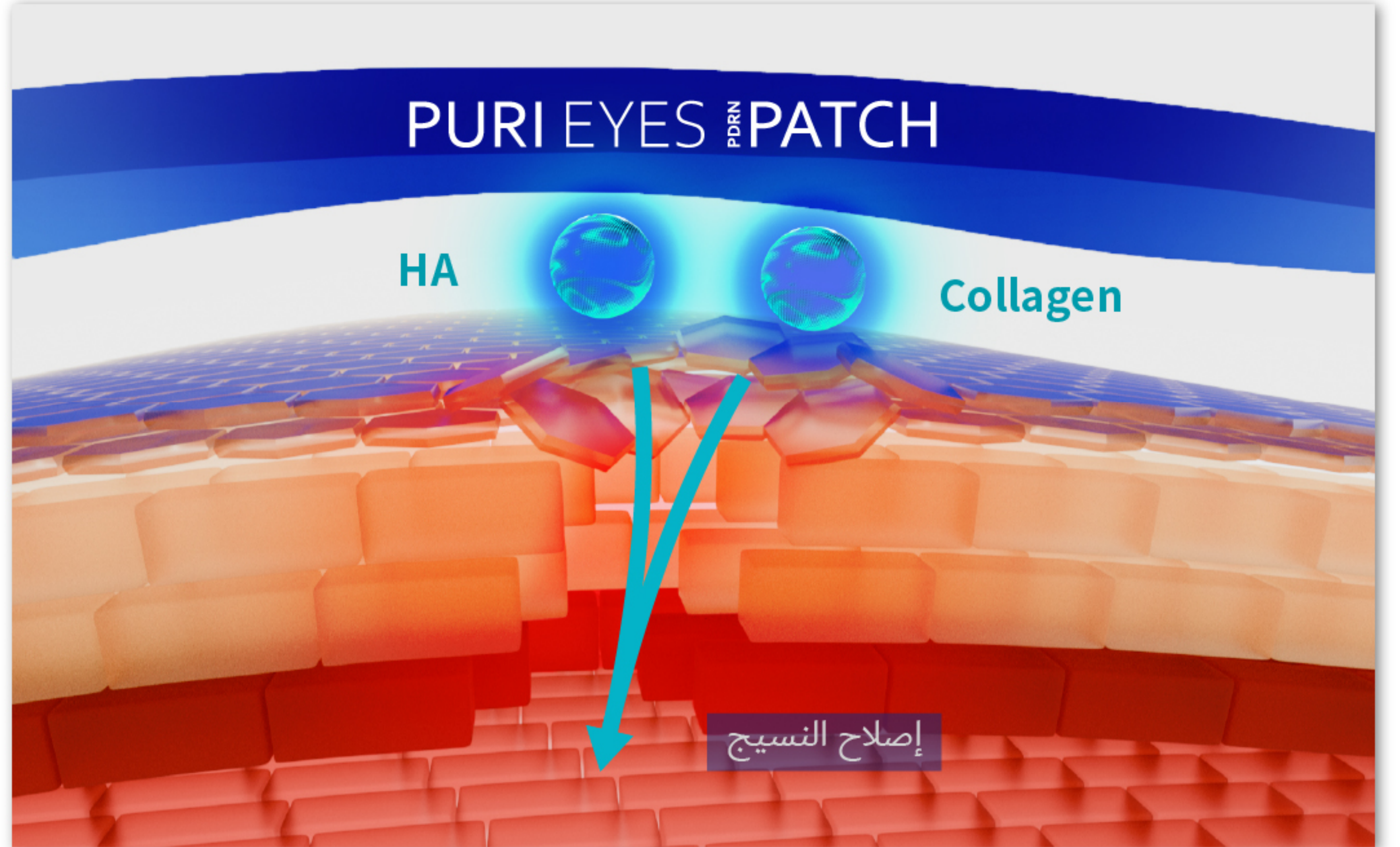


■ يمكن لمواد HA والكولاجين المتحلل، وهي مواد حيوية مخصصة لإصلاح النسيج، أن تدخل إلى الأدمة عبر الفتحة التي تتكون أثناء عملية الحقن.

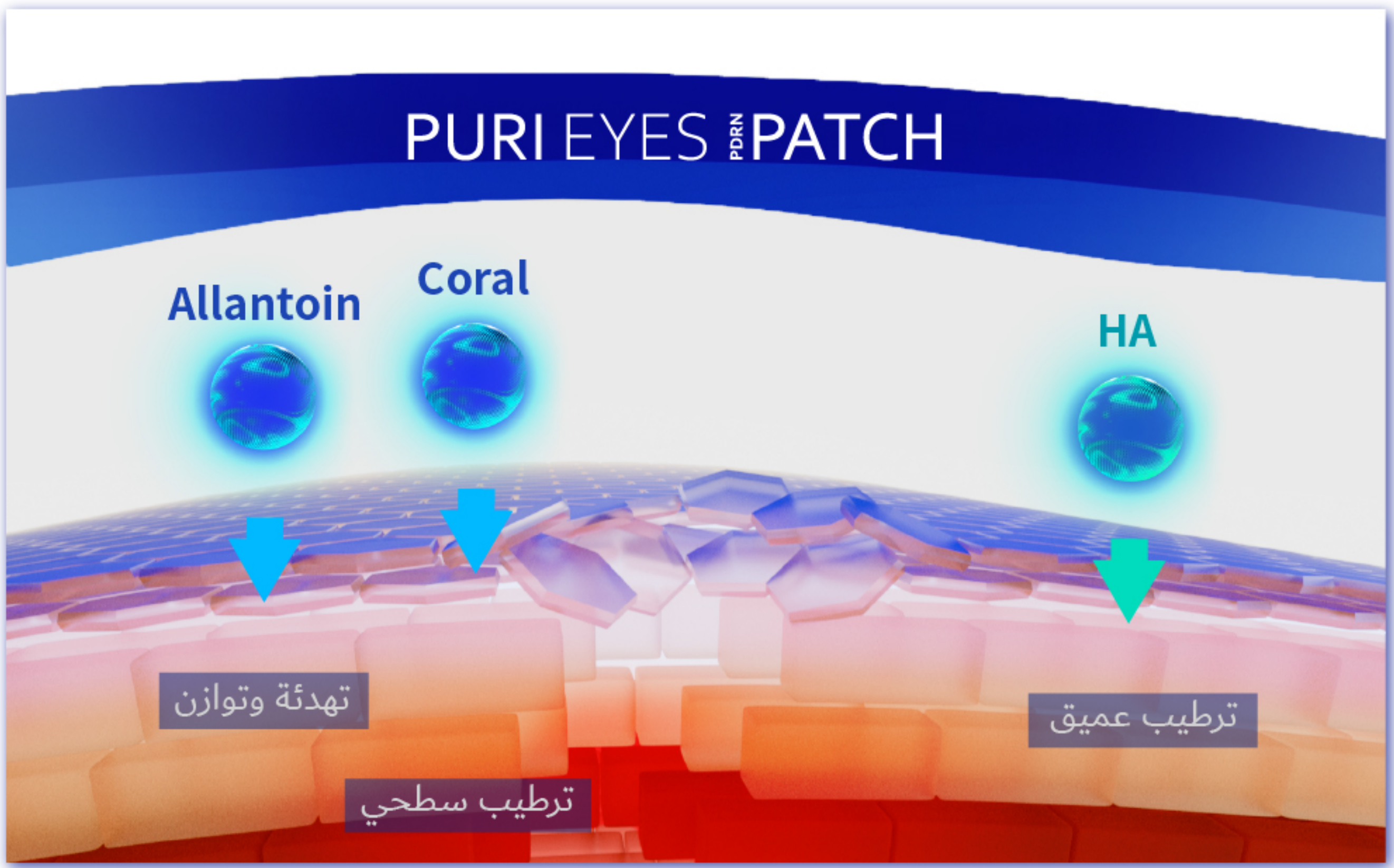


■ يقوم الألاتونين بتهدئة البشرة المتهيجة، بينما توفر مكونات الكورال المتحلل وHA الرطوبة الكافية للبشرة الجافة الناتجة عن الحرارة.

■ لتحقيق أقصى فاعلية في تهدئة البشرة، يُفضّل تجهيز شريحة PURI EYES PDRN وتطبيقها وهي باردة.

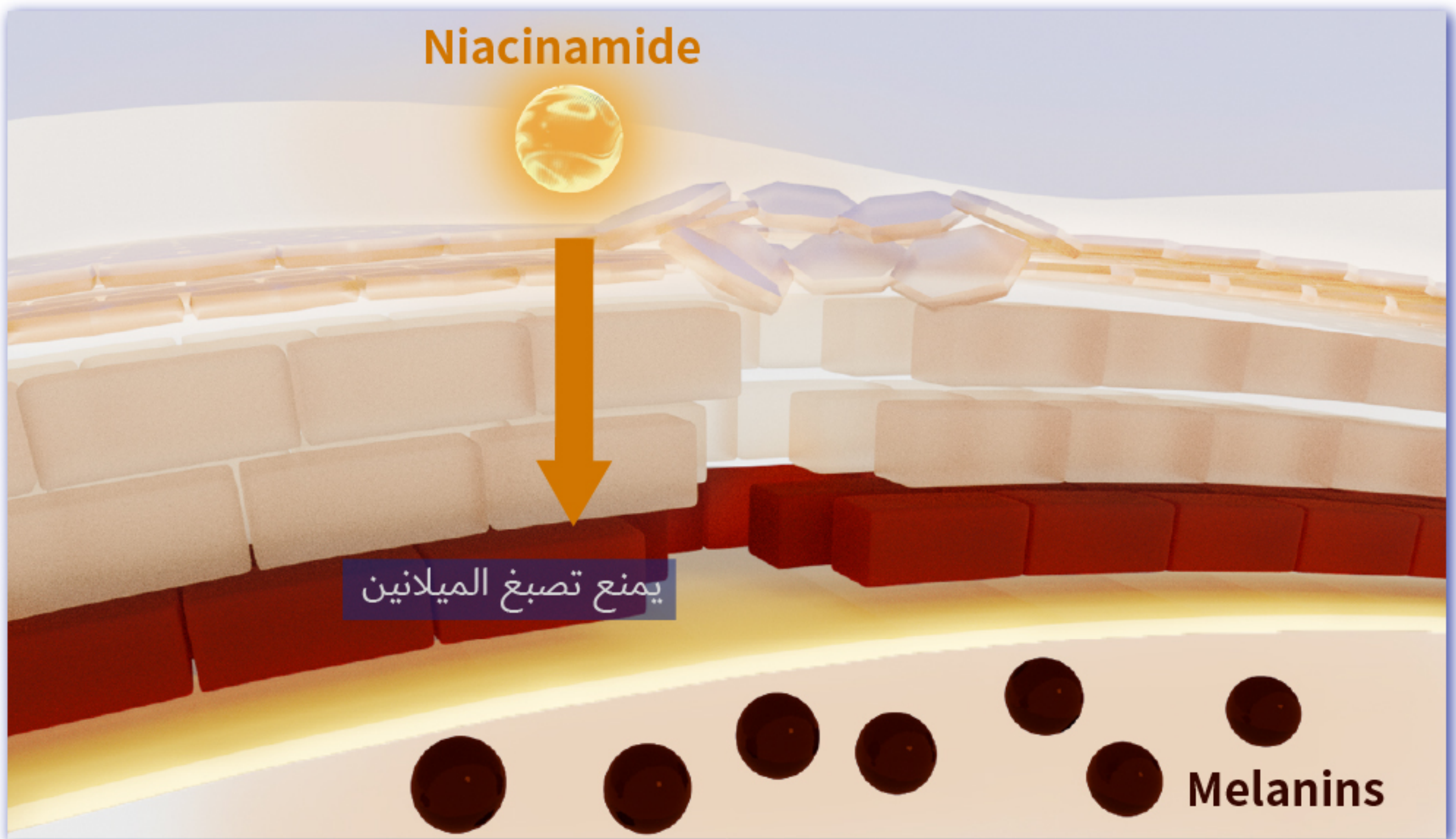

■ عند تعرض البشرة المتهيجة والضعيفة لتحفيز مفرط من أشعة UV، فإنها تفرز صبغة الميلانين بشكل زائد. يعمل النياسيناميد على منع ترسب صبغة الميلانين في البشرة، مما يساعد في الوقاية من آثار التصبغ والبقع.

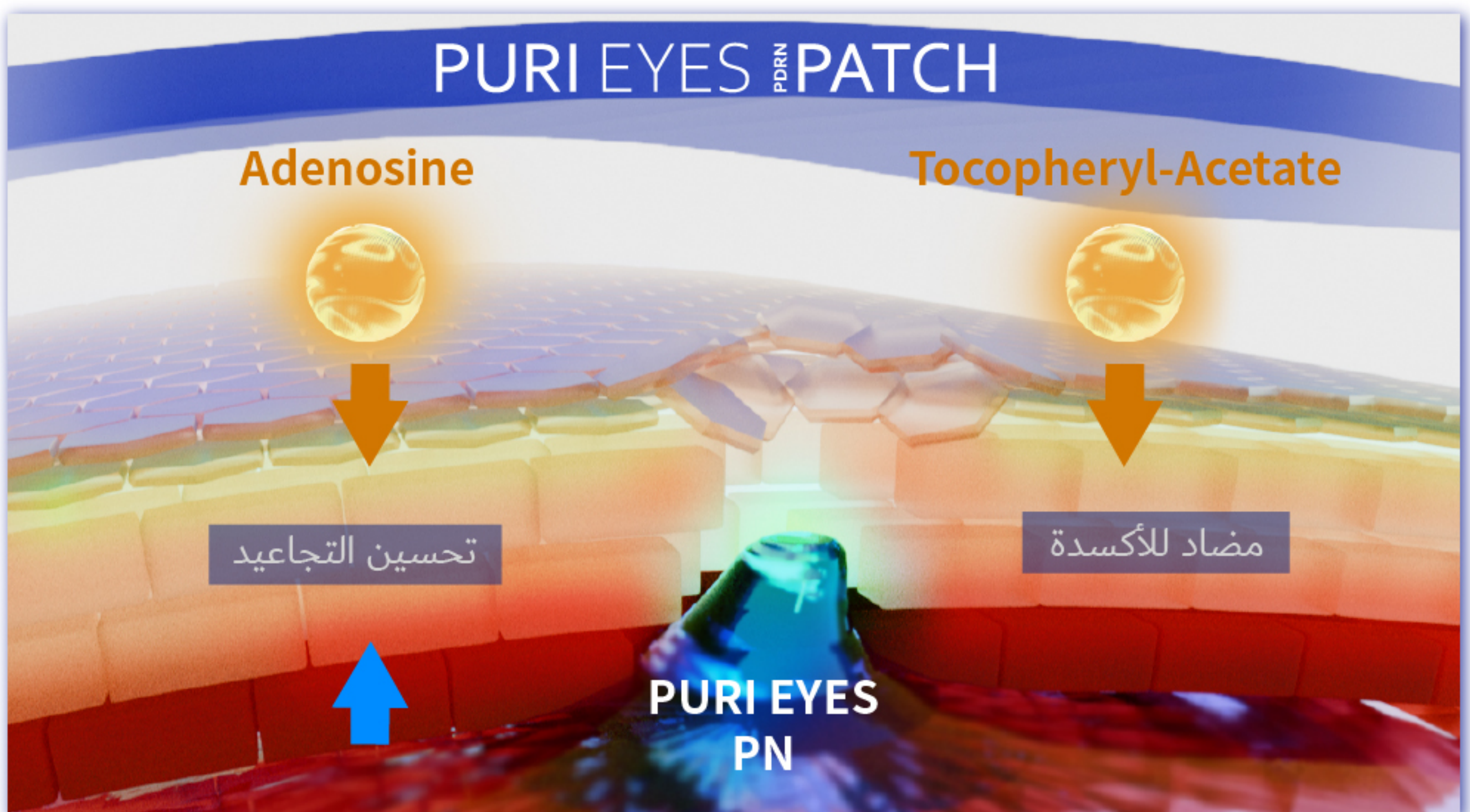

■ أدينوسين له تأثير ممتاز في تحسين التجاعيد، ومع PURI EYES، يعزز من فعالية العلاج من خلال تحسين التجاعيد في البشرة من الداخل والخارج.

■ توكوفيريل أسيتات هو مضاد أكسدة متخصص ويعمل على منع أكسدة البشرة والشيخوخة التي تتسارع بسبب الحرارة.

يعزز التجدد ويشد نسيج الجلد



الآلية

التأثير الدوائي المزدوج للبولىنيوكليوتيد

منبه لمستقبلات A2A

يرتبط البولىنيوكليوتيد في AETERDERM®PURI EYES بشكل انتقائي بمستقبل A2A ويحفز الانتقال إلى الحالة المضادة للالتهاب.



كما يقوم بتحفيز 3 عوامل نمو لإعادة تجديد الأنسجة التالفة.




يحفّز تكوّن الأوعية الدموية من خلال إفراز عامل نمو بطانة الأوعية الدموية (VEGF)، ويساهم في تحسين الشعيرات الدموية الجلدية التي تقلّ مع التقدّم في العمر. إن زيادة عدد الشعيرات الدموية في الجلد تساعد على الوقاية من الشيخوخة وتحسين صحة الجلد عبر توفير إمدادٍ سليمٍ ومنتظم بالعناصر الغذائية الضرورية.




مسار الإنقاذ

يقوم مسار الإنقاذ بإنتاج الأحماض النووية بسرعة وباستهلاك طاقة أقل، كما يحفّز تجديد الخلايا.

مسار الإنتاج من جديد (De novo pathway) بدون PN

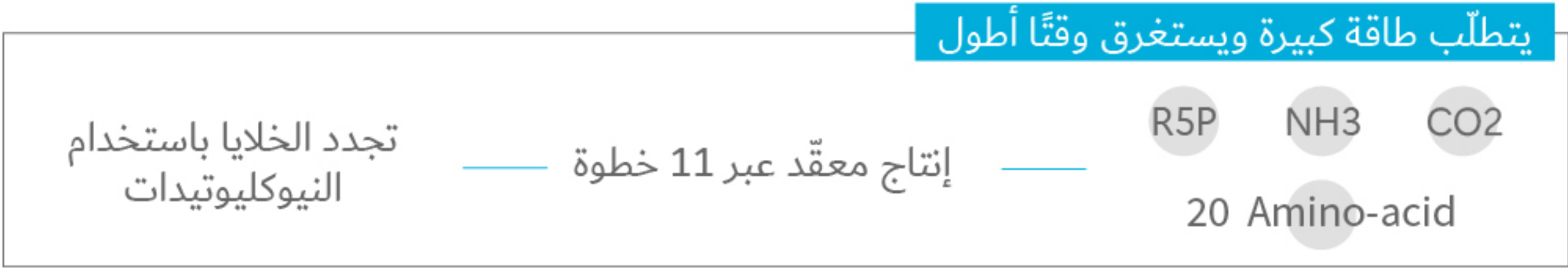

مسار الإنقاذ مع PN

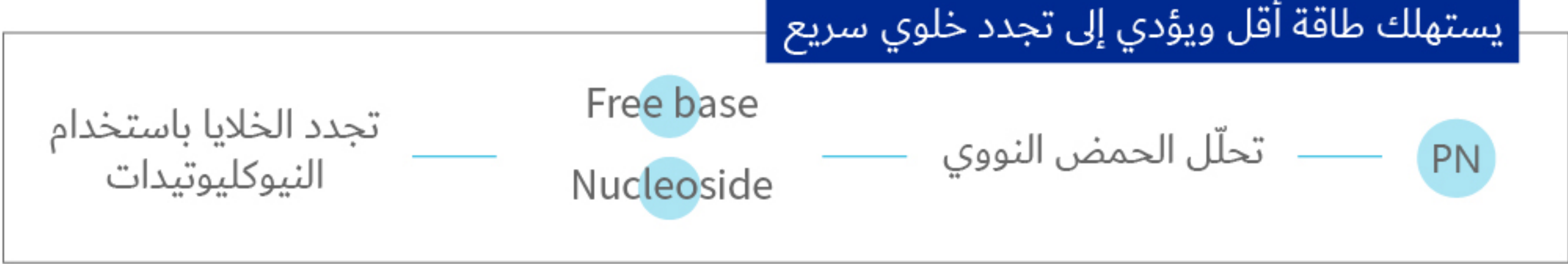

AETERDERM®

PURI EYES

Under eye skin rejuvenation

[المكوّنات]

بولينيوكليوتيد الصوديوم 2 مل
محلول ملحي منظم بالفوسفات q . s

[التعبئة]

1.1 مل × حقنة واحدة / علبة

AETERDERM®

PURI EYES PRO

Under eye skin rejuvenation

[المكوّنات]

بولينيوكليوتيد الصوديوم 6 مل
محلول ملحي منظم بالفوسفات q . s

[التعبئة]

1.1 مل × حقنة واحدة / علبة

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

Reduce aging of the skin

Eye patch for improving under-eye skin wrinkles

[المكوّنات]

Water(Aqua), Glycerin, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Chondrus Crispus Powder, Benzyl Glycol, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum,PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Panthenol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Dipotassium glycyrrhizate, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Adenosine, Raspberry Ketone, Ultramarines(CI 77007), Disodium EDTA, Synthetic Fluorphlogopite, Butylene Glycol, Calcium Lactate, 1,2-Hexanediol, Fragrance(Parfum), Titanium Dioxide(CI 77891),Hydrolyzed Collagen, Sodium Hyaluronate, Sodium DNA, Hydrolyzed Coral

[التعبئة]

90 غ / 3.17 أونصة (60 شريحة)