


AETERDERM®

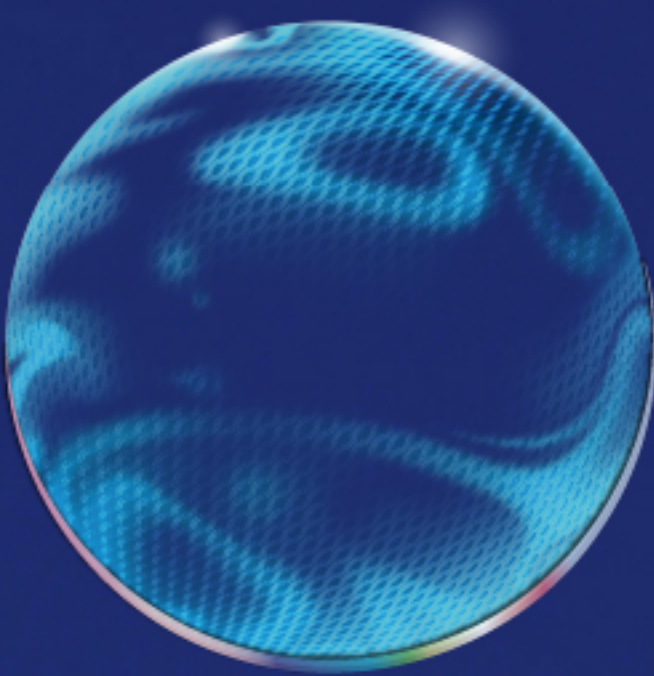

AETERDERM® PURI EYES

AETERDERM® PURI EYES PRO

AETERDERM® PURI EYES PDRN PATCH



AETERDERM®


PURRI EYES PDRN PATCH

AETERDERM®

PURRI EYES PRO

AETERDERM®

PURRI EYES

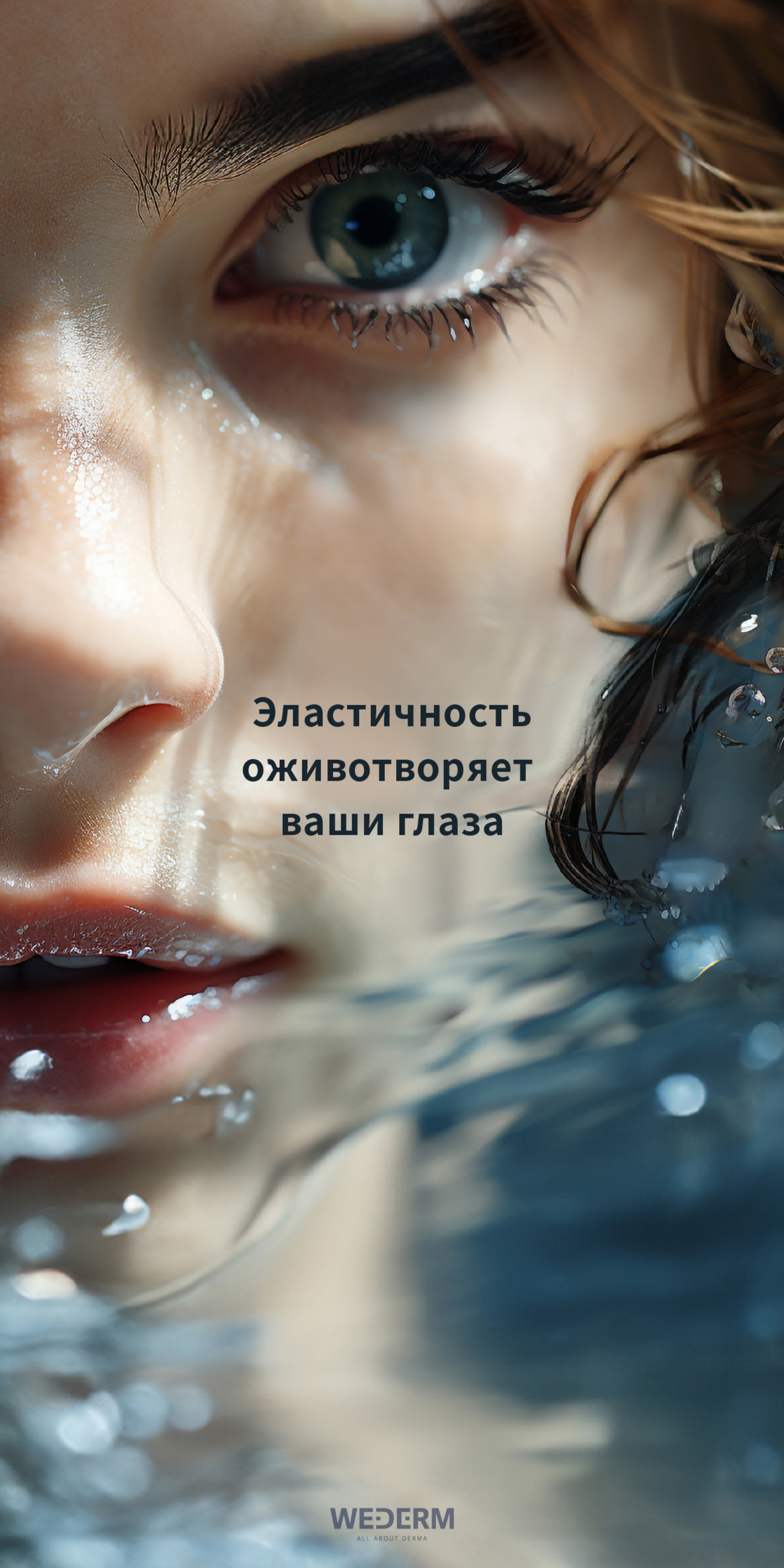
A close-up, artistic photograph of a woman's face, focusing on her eyes and nose. Her skin is wet, with numerous water droplets visible on her forehead, nose, and cheeks. Her hair is also wet and dripping with water. The lighting is soft and warm, creating a serene and refreshing atmosphere. The text is centered over the lower part of her face.

**Эластичность
оживотворяет
ваши глаза**




AETERDERM®
PURI EYES
Полинуклеотиды 2 мг

- Минимальные болевые ощущения, короткий восстановительный период
- Нежная и комфортная процедура

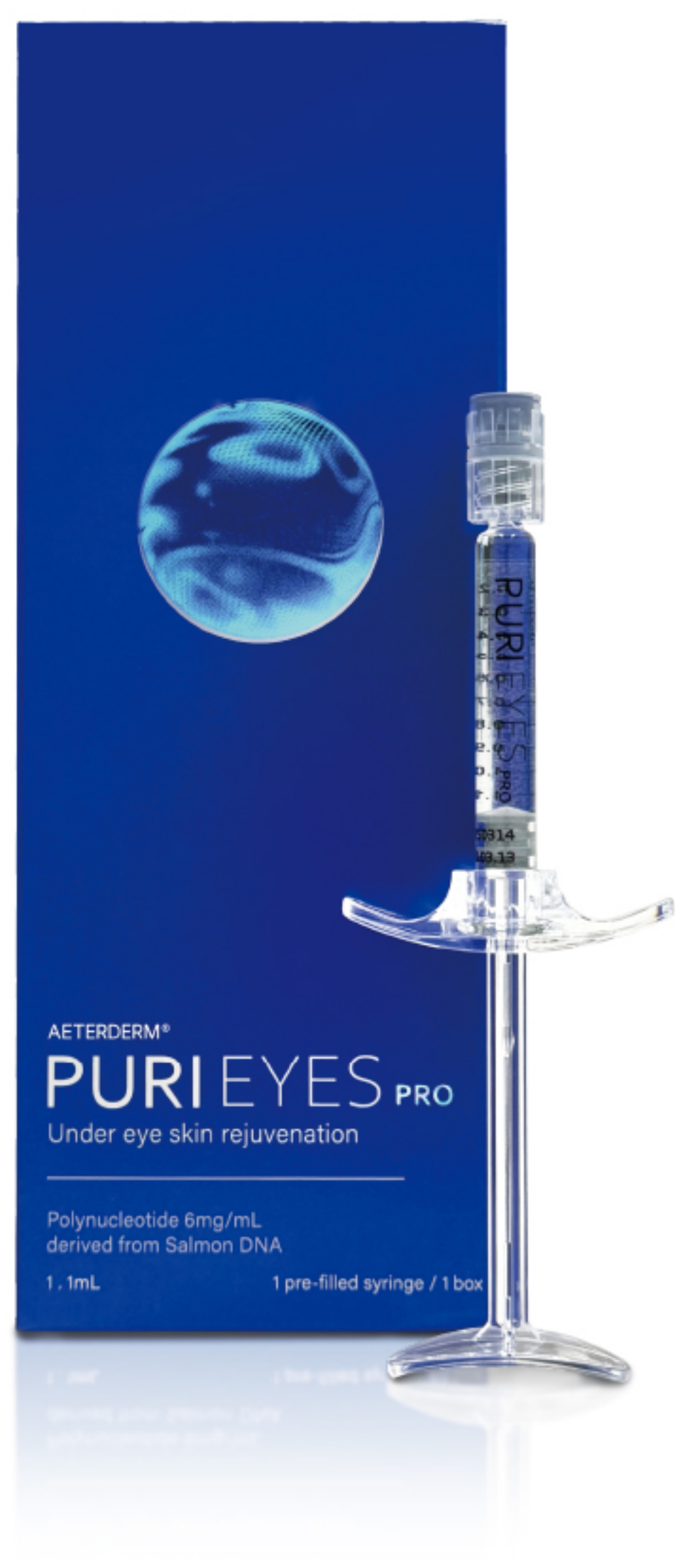

AETERDERM®
PURI EYES PRO
Полинуклеотиды 6 мг

- Интенсивное омоложение с эффектом уплотнения и укрепления кожи
- Более выраженные результаты

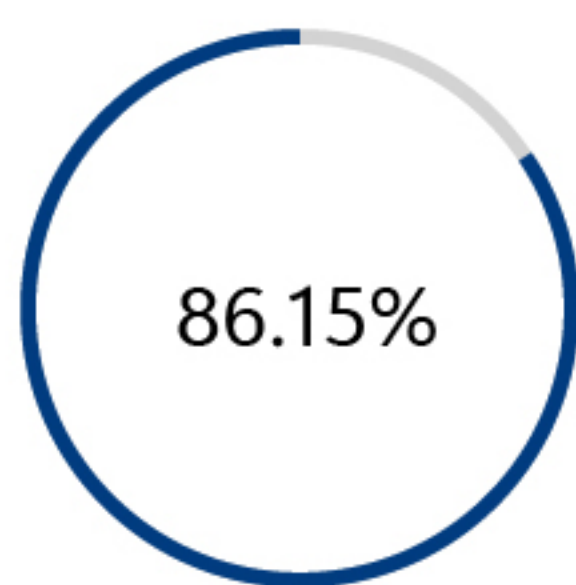


Восстановление

Более чем в 86% случаев повреждения дермальных клеток были восстановлены

Уменьшение морщин

Регенерация кожи

Цвет и плотность кожи

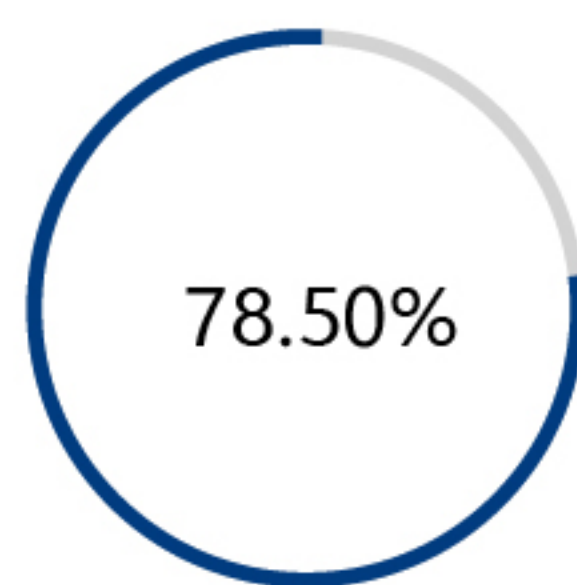

Лифтинг

Лифтинг-эффект за счёт повышения плотности кожи посредством пролиферации дермальных клеток

Увлажнение кожи

Сужение пор


Повышение эластичности кожи

Относитесь к своей коже как к лечению, а не как к косметической процедуре

PN

ДНК - полимер

Фосфатные группы

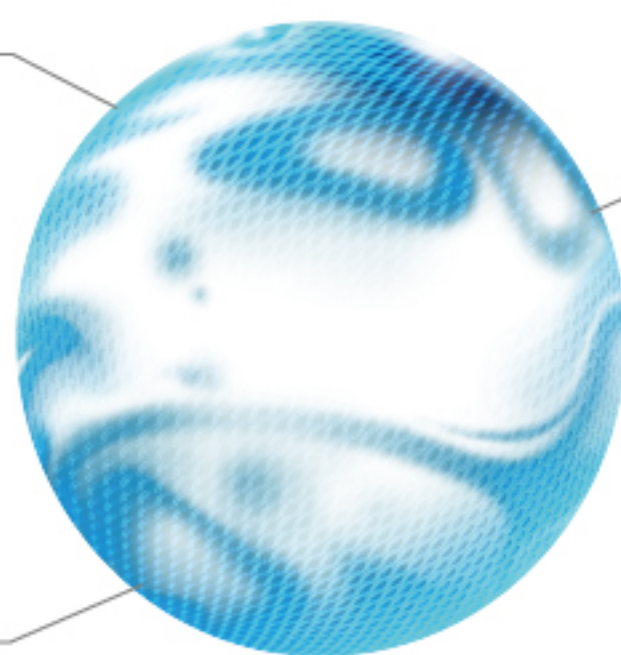

Азотистые основания

Активируют клеточную секрецию

- Интерлейкин 10 (IL-10) Цитокины
- Эпидермальный фактор роста (EGF)
- Факторы роста фибробластов (FGF)
- Инсулиноподобный фактор роста (IGF)
- Факторы роста эндотелия сосудов (VEGF-A)

Полинуклеотид (PN) медицинского назначения стимулирует заживление ран, повышая скорость роста фибробластов. Он также способствует синтезу коллагена и эластина для увеличения плотности и толщины дермы кожи.

Безопасность и стабильность

AETERDERM®PURI EYES использует только сертифицированные PN медицинского назначения, добившиеся высоких результатов в анализе CoA.

AETERDERM®PURI EYES также производится в стерилизованных помещениях, сертифицированных GMP и ISO.

[illegible]

Сертификат анализа (CoA)
(HTL Биотехнология, медицинский уровень)

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

for use with AETERDERM®PURI EYES



Ваши глаза выражают вас больше всего

Но у них самая тонкая кожа на вашем лице

Поэтому у них появляются морщины в первую очередь


Придайте силы вашей уставшей коже
Кожа помнит о вашей заботе

PURI EYES PDRN PATCH


Совместный эффект
Успокаивает раздраженную кожу
После процедуры PURI EYES



Натуральные полимеры
на растительной основе

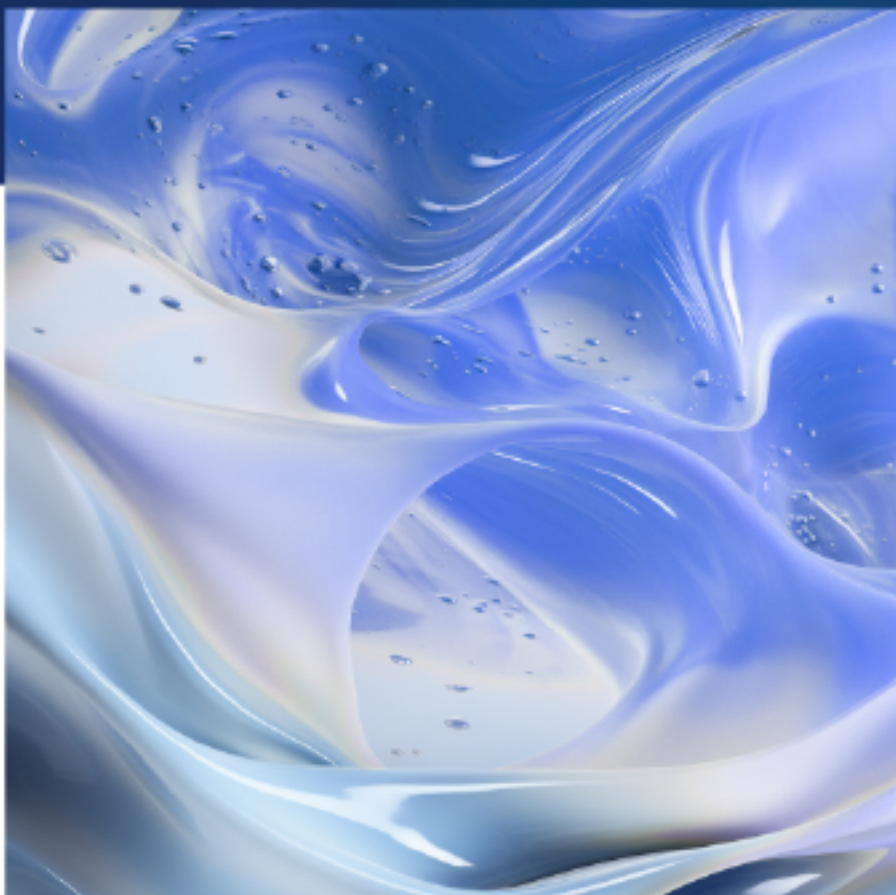

Сертификация двойного
функционального патча
MFDS
(Корейское Управление
по контролю качества
продуктов и лекарств)

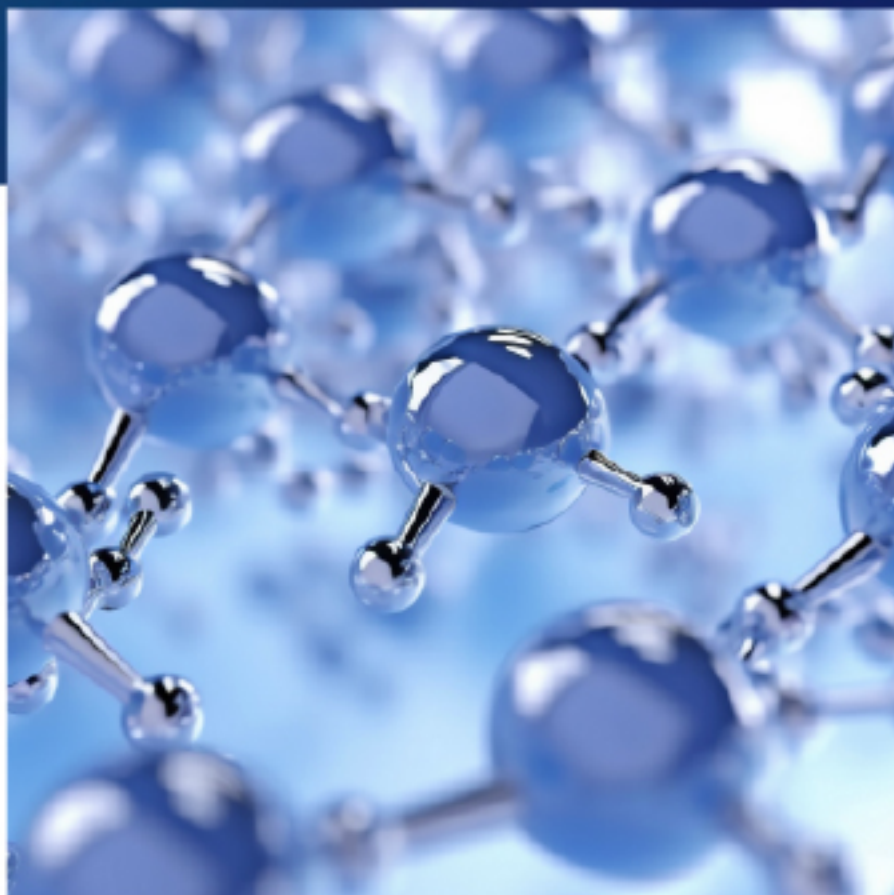

Частицы геля, чувстви
тельные к температуре

Специальный рецептурный ингредиент для последующего ухода за процедурой PURI EYES



PDRN
Ингредиент для регенерации тканей, обладающий теми же свойствами, что и в нашем препарате PURI EYES PN



HA
Внутрикожное увлажнение



Collagen
Повышение эластичности



Allantoin
увлажняющий и успокаивающий



Coral
Балансирует жир и влагу, избавляет от проблем



Niacinamide
Отбеливание кожи



Adenosine
Против морщин



Tocopheryl-Acetate
Антиоксидант

**Биоматериалы для
восстановления тканей**


**Увлажнение и
успокаивающее действие**

**Функциональные
ингредиенты**


До & После

Скретч-тест клеточной миграции

AETERDERM®PURI EYES

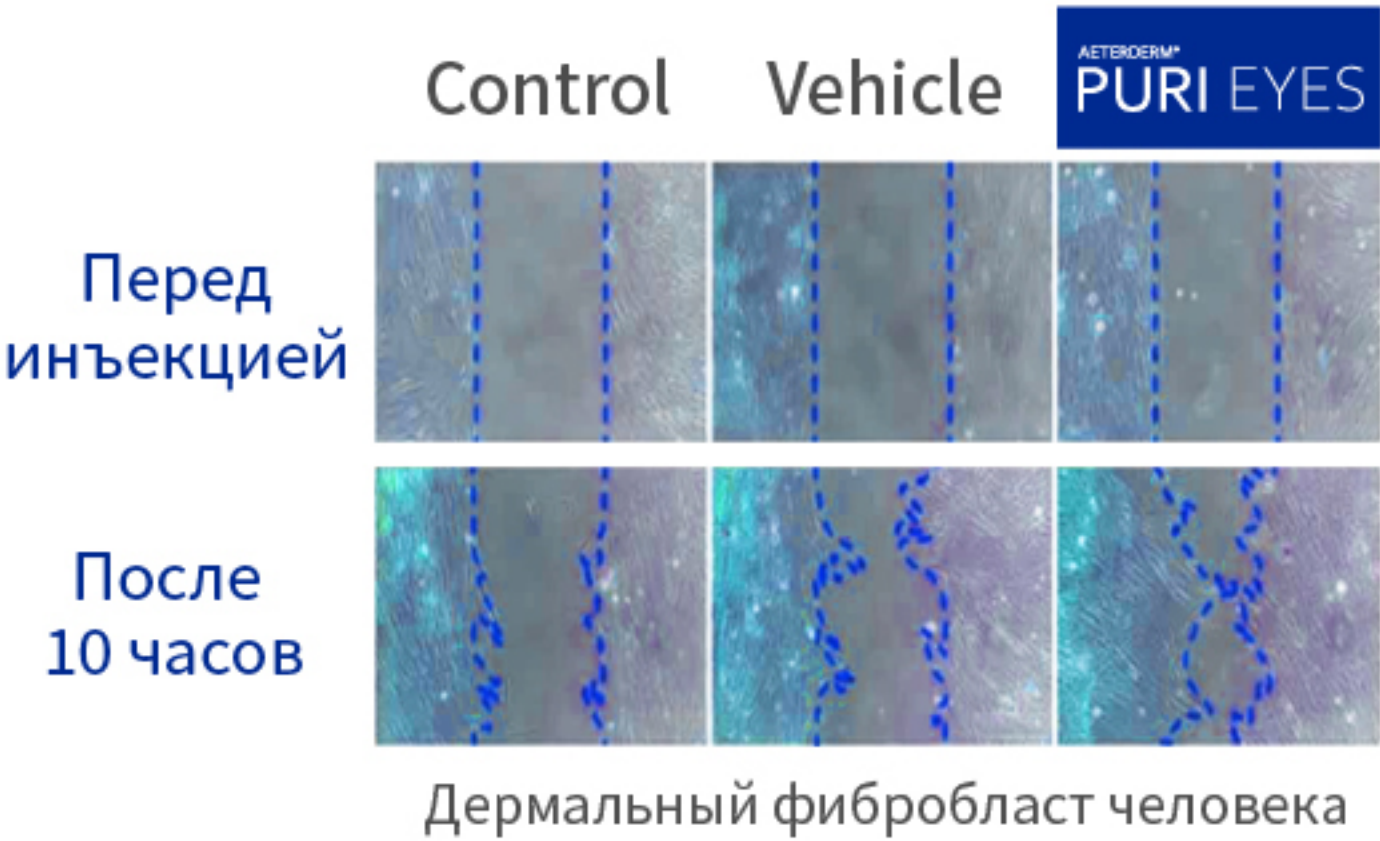


Sci Rep 2020:(10)

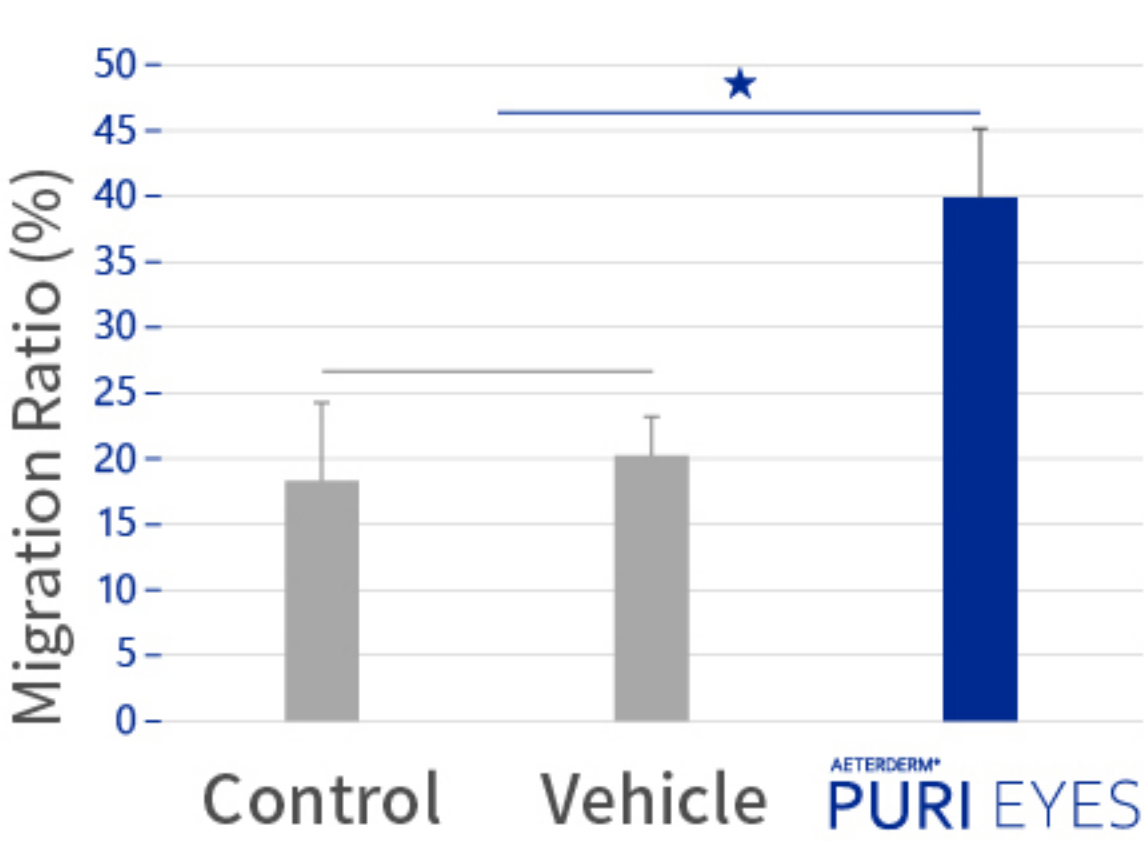


Сноска) Научный журнал Sci Rep 2020:(10)

Улучшение омертвевших клеток кожи и влаги

Улучшение количества мертвых клеток кожи
(%, среднее значение)

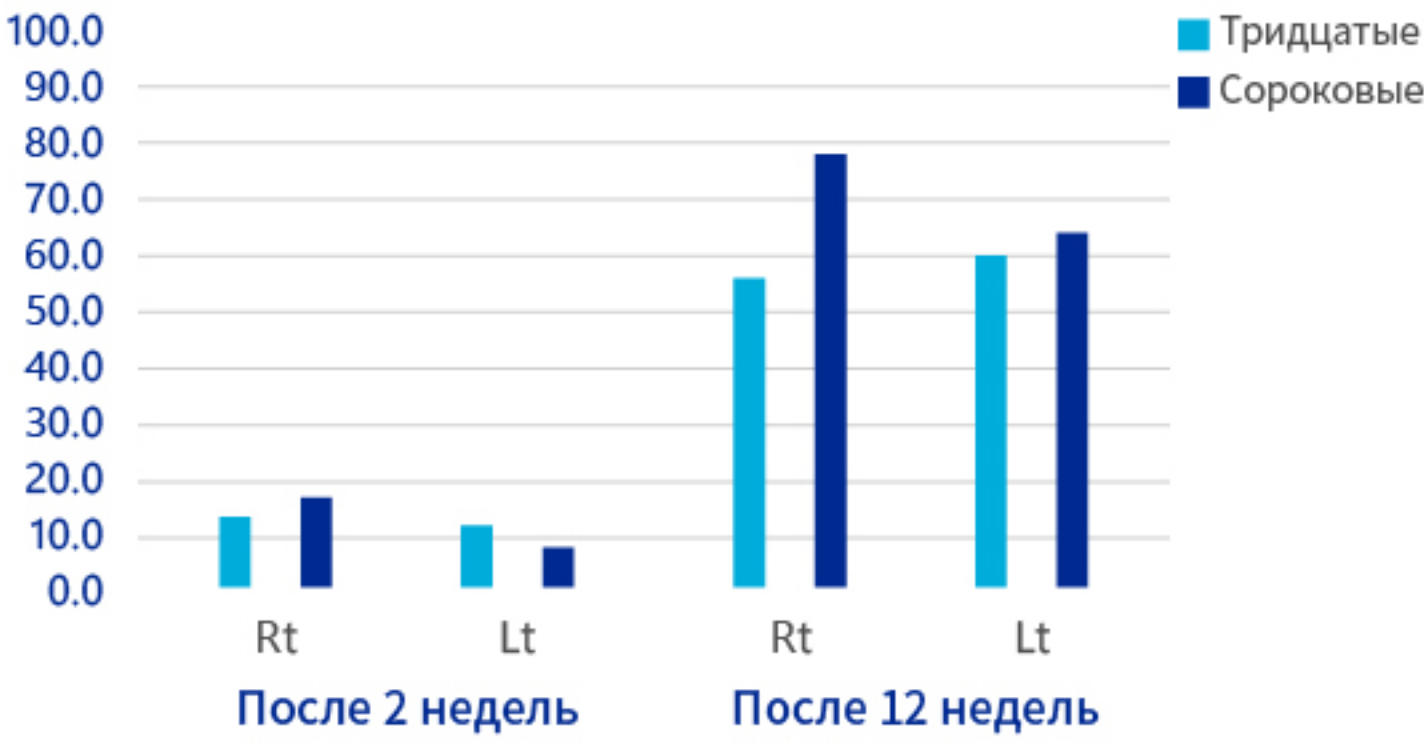

Улучшение количества мертвых клеток кожи
(%, среднее значение)

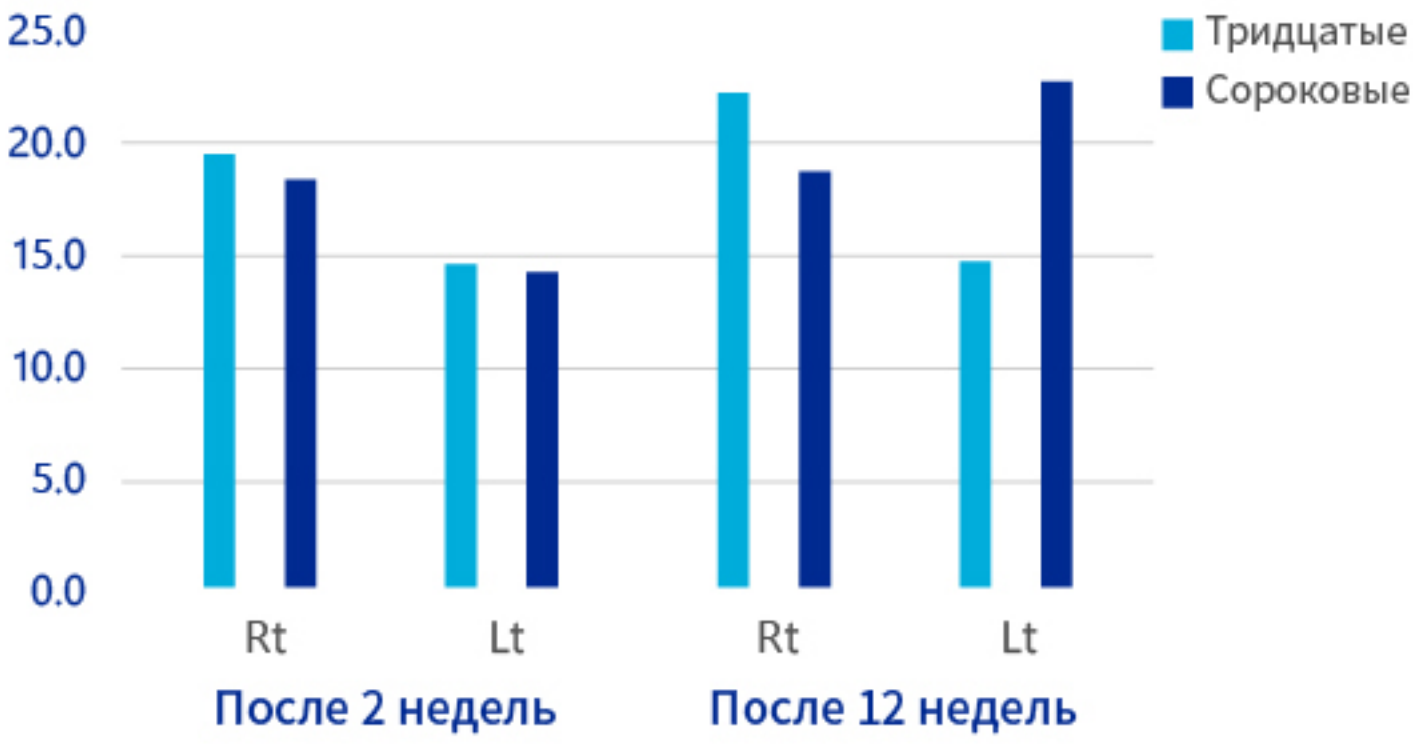

Сноска) Дерматол-терапия 2016:29:37-40

Осветление и улучшение текстуры

До лечения

12 Недель после лечения



Правая сторона

Левая сторона


Правая сторона

Левая сторона


Сноска) Улучшение кожи через 12 недель после инъекции, снято с помощью VISIA-CR
Клинические испытания Дерматол-терапия 2016:29:37-40

Шероховатость & Объем пор

Шероховатость

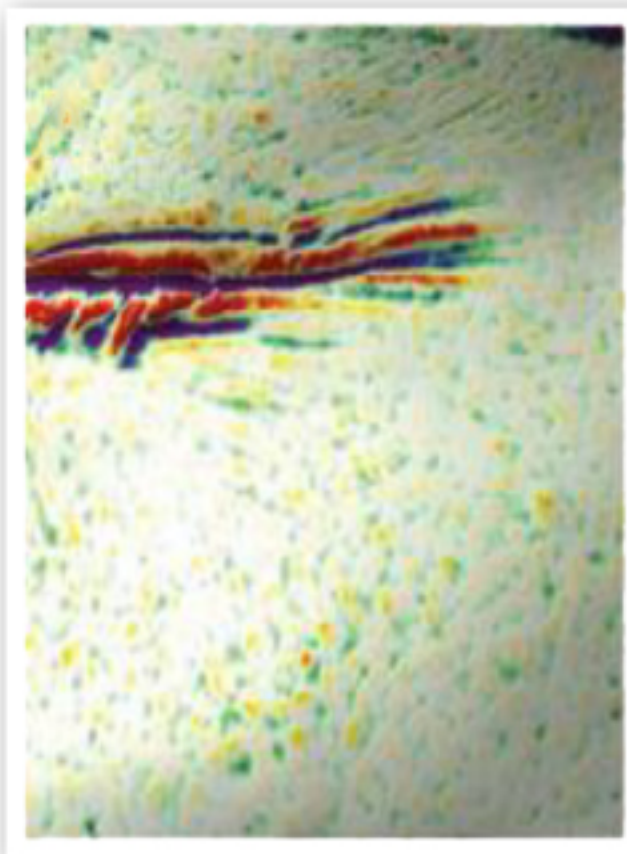

Начальная стадия

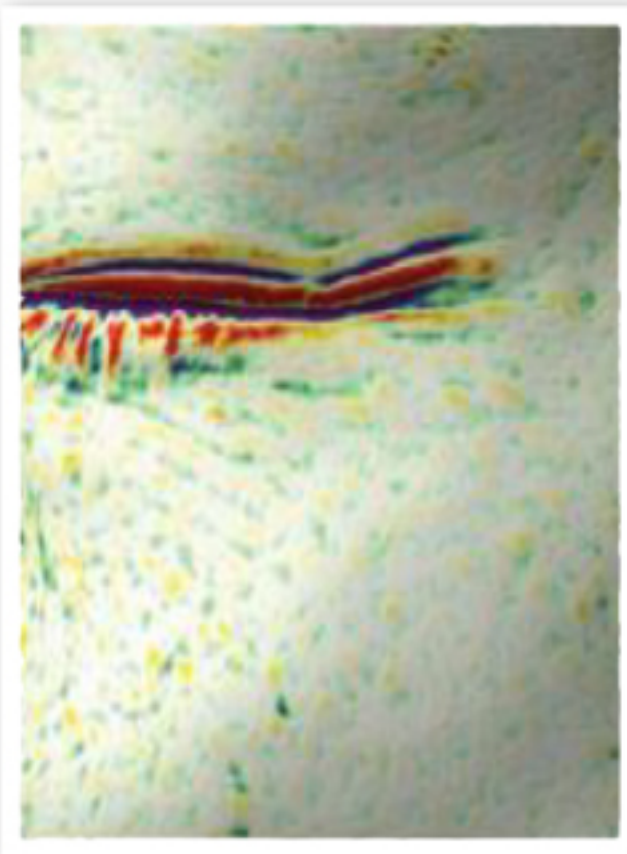


После 16 недель

Объем пор



Начальная стадия


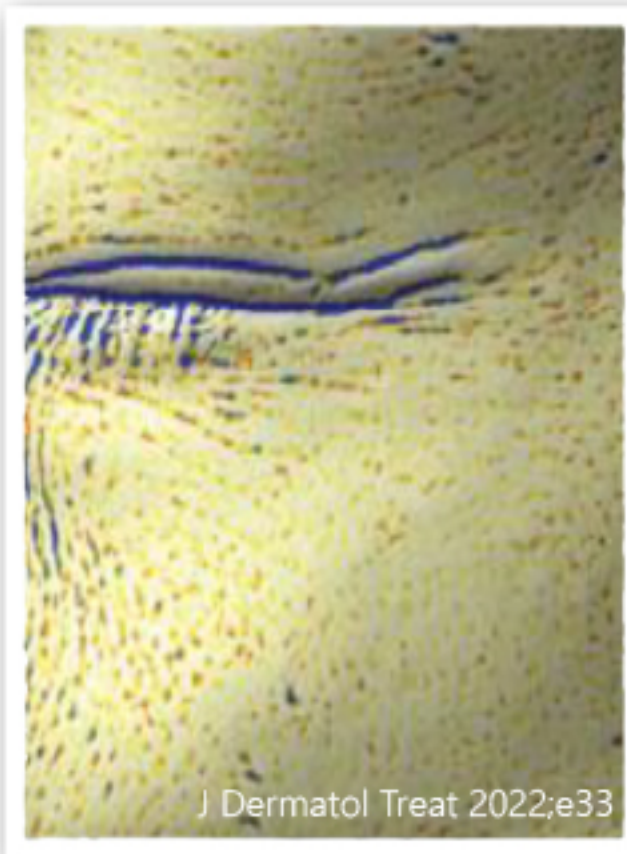


После 16 недель


Сноска) научный журнал J Dermatol Treat 2022;e33

Регенерация тканей

До лечения

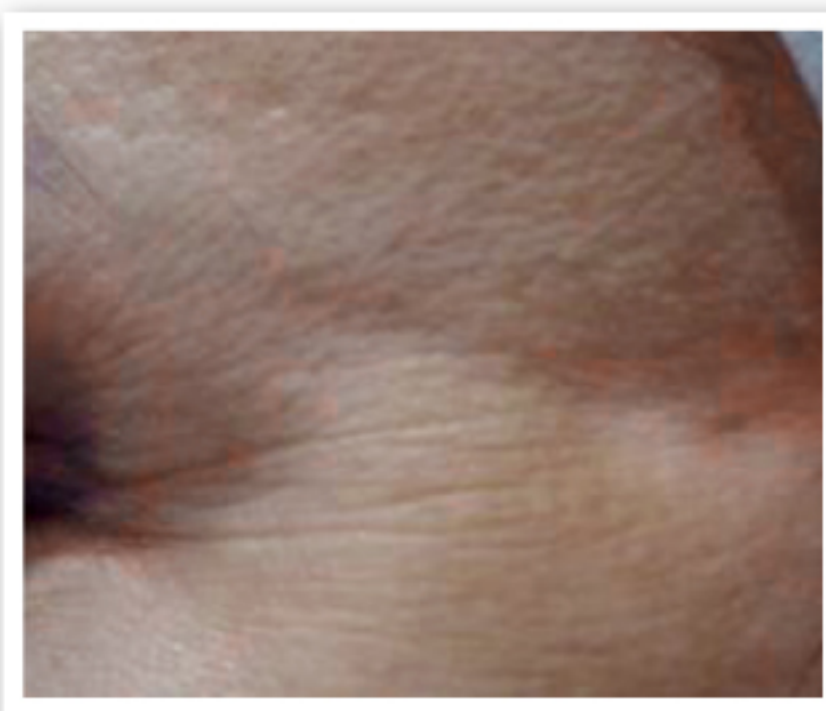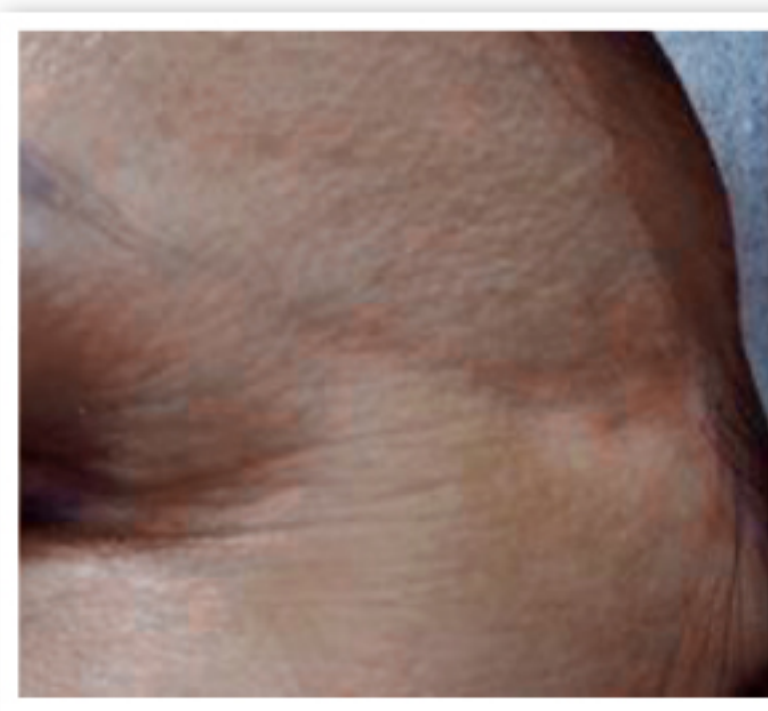

Через 2 месяца после шестого лечения

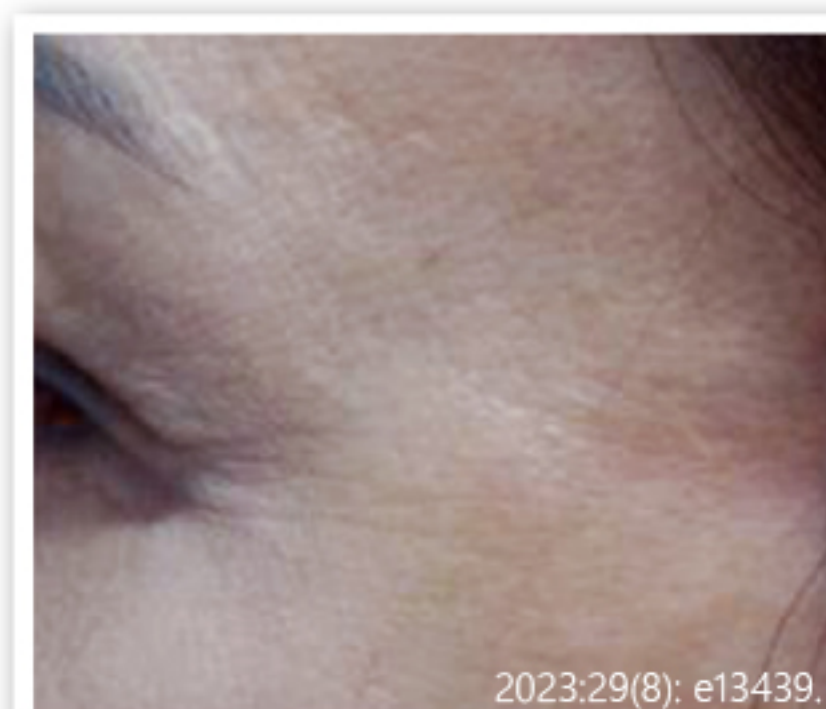

2023:29(8); e13439.

Регенерация язвенных шрамов

До лечения



2 месяца после четырех процедур.



Сноска) Технология восстановления кожи 2023:29(8); e13439.

AETERDERM®

PURI EYES



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

STEP 1. AETERDERM®PURI EYES

Процесс лечения



Рекомендуемая игла

32G~34G Мезо иглы

Угол введения иглы

∠10°~15° внутрикожный



Детали инъекции

0.02 ~ 0.035(куб.см)на одну точку, делая небольшое тиснение с интервалом 6~8мм
15 ~ 30 точек на одну область глаза

1. Тщательно вымойте лицо пациента.
2. Сначала нанесите крем с лидокаином на обрабатываемую область. После наркоза, протрите.
3. Продезинфицируйте обрабатываемую зону спиртовыми тампонами.
4. Дайте пациенту открыть глаза, пусть он расслабится и постарается не щуриться.
5. Наносите материал вокруг обрабатываемой области как можно деликатнее и аккуратнее, чтобы уменьшить вероятность образования синяков и отеков.
6. Позже, аккуратно помассируйте эту область и попросите пациента также аккуратно массировать обрабатываемую область в течение нескольких дней, чтобы распределить продукт.
7. Все эстетические инъекционные техники можно применять в поверхностном подкожном слое.



AETERDERM®
PURI EYES PRO
AETERDERM®
PURI EYES PDRN PATCH

Дополнительные варианты применения

I РУЧНАЯ ТЕХНИКА ————— Для продвинутых инъекционных техник

PURI EYES обеспечивает точную доставку активных компонентов, способствуя быстрому улучшению состояния кожи при минимальном периоде восстановления.

- Микропапульная техника (Nappage)

I Аппаратное введение ————— Для точного контроля глубины введения и равномерного распределения препарата

Точное воздействие обеспечивает стабильность процедуры и способствует воспроизводимым результатам.

- Мезопистолет / инжекторный пистолет
- MTS (микронидлинг)

I Комбинированные протоколы и постпроцедурный уход ————— Варианты сочетания с PURI EYES

При использовании в сочетании с PURI EYES данные методики способствуют стимуляции выработки коллагена, ускоряют восстановление после процедуры и улучшают общий результат терапии.

- RF-микронидлинг и фракционные лазеры (Secret RF, Potenza, CO2 и др.)
- Неинвазивные восстановительные аппараты (Cryocell, LDM, LED и др.)

After Care

STEP 2. AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH

Восстановительный уход



1. Пожалуйста, подготовьте холодные патчи AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH заранее.
2. Тщательно вымой лицо, аккуратно промокните его мягким полотенцем, чтобы удалить влагу.
3. Используйте тоник для подготовки кожи.
4. Достаньте патчи для глаз с помощью ложки, находящейся внутри продукта, хорошо распределите их по форме тонкой кожи под гла зами и нанесите его.
5. Примерно через 15-20 минут снимите пластырь и слегка постучите по оставш емуся содержимому, чтобы оно впиталось.

AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH адаптируется к температуре кожи, обеспечивая глубокую доставку активных ингредиентов и поддерживая процессы восстановления кожи.



Результат после лечения

PURI EYES

Более гладкая текстура кожи
Более чистый цвет лица
Улучшение масляного баланса.

Первая сессия

Обычно длится 4 недели

Повышение эластичности кожи
Улучшение морщин
Уменьшение пор.

Вторая сессия

Через 2-4 недели
Обычно длится 3 месяца

Улучшение общего состояния кожи
Кожа выглядит заметно здоровой
Кожа выглядит светлее и более упругой.

Третья сессия

Через 1 месяц
Обычно длится 6 месяцев

PURI EYES PATCH

ПДРН быстро заживляет раны, добавки с ГК и коллагеном успокаивают разгоряченную кожу.

Снимает сухость кожи, вызванную лечением.

Укрепление нарушенного кожного барьера. Успокаивает стойкое тепло кожи.

ПДРН быстро восстанавливает ткани кожи.


Предотвращает пигментацию меланином, отбеливая и увлажняя кожу.



AETERDERM®



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИНЪЕКЦИЙ

Процедуры, при которых эффективные ингредиенты непосредственно вводятся в кожу, вызывают множествораздражений кожи и побочных эффектов.

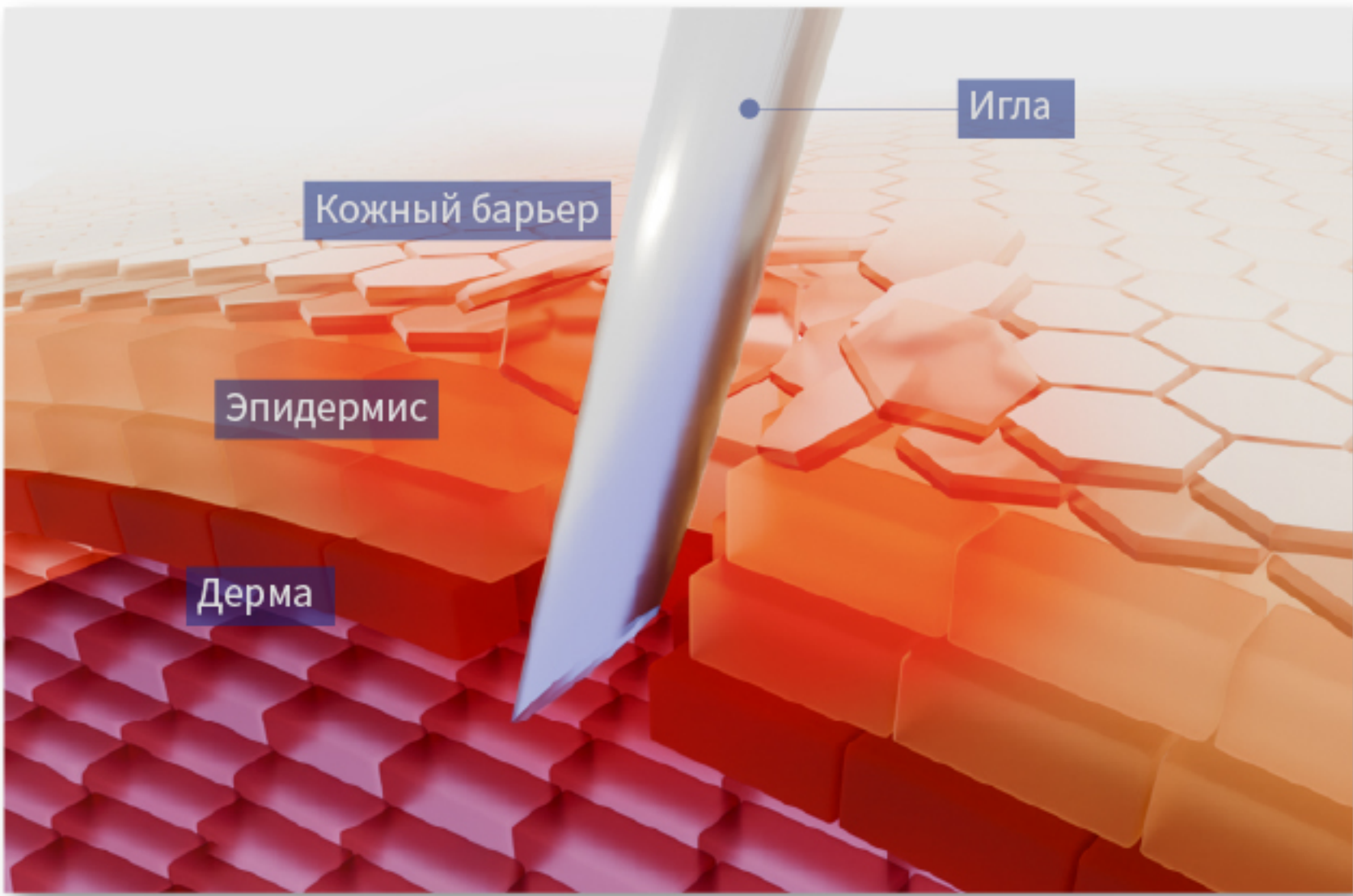

При попадании иглы в кожу она вызывает сильное раздражение эпидермиса и дермы.

Нарушенный кожный барьер.
Испарение и сухость кожи из-за высокой температуры.
Высокая температура, вызванная раздражением.

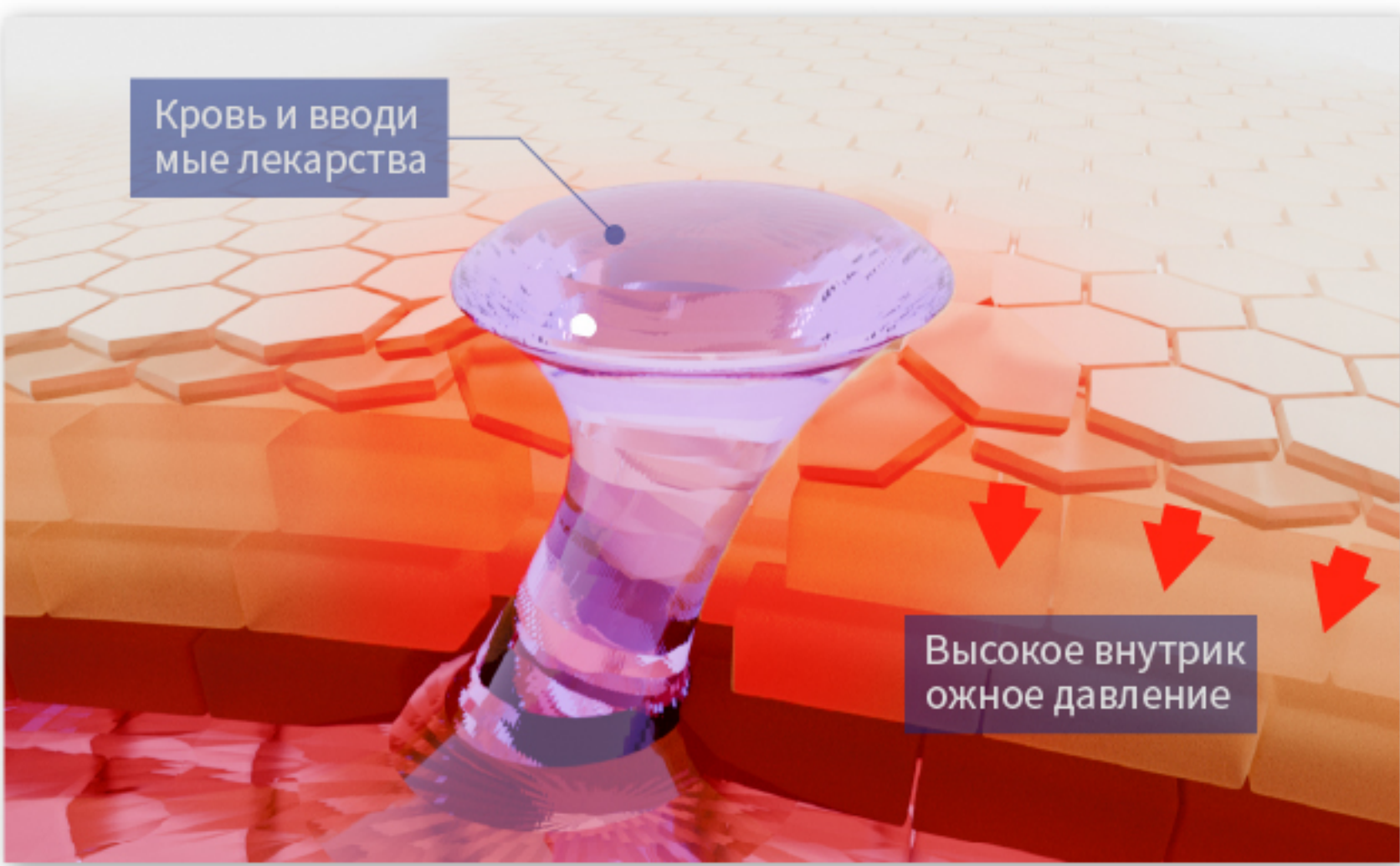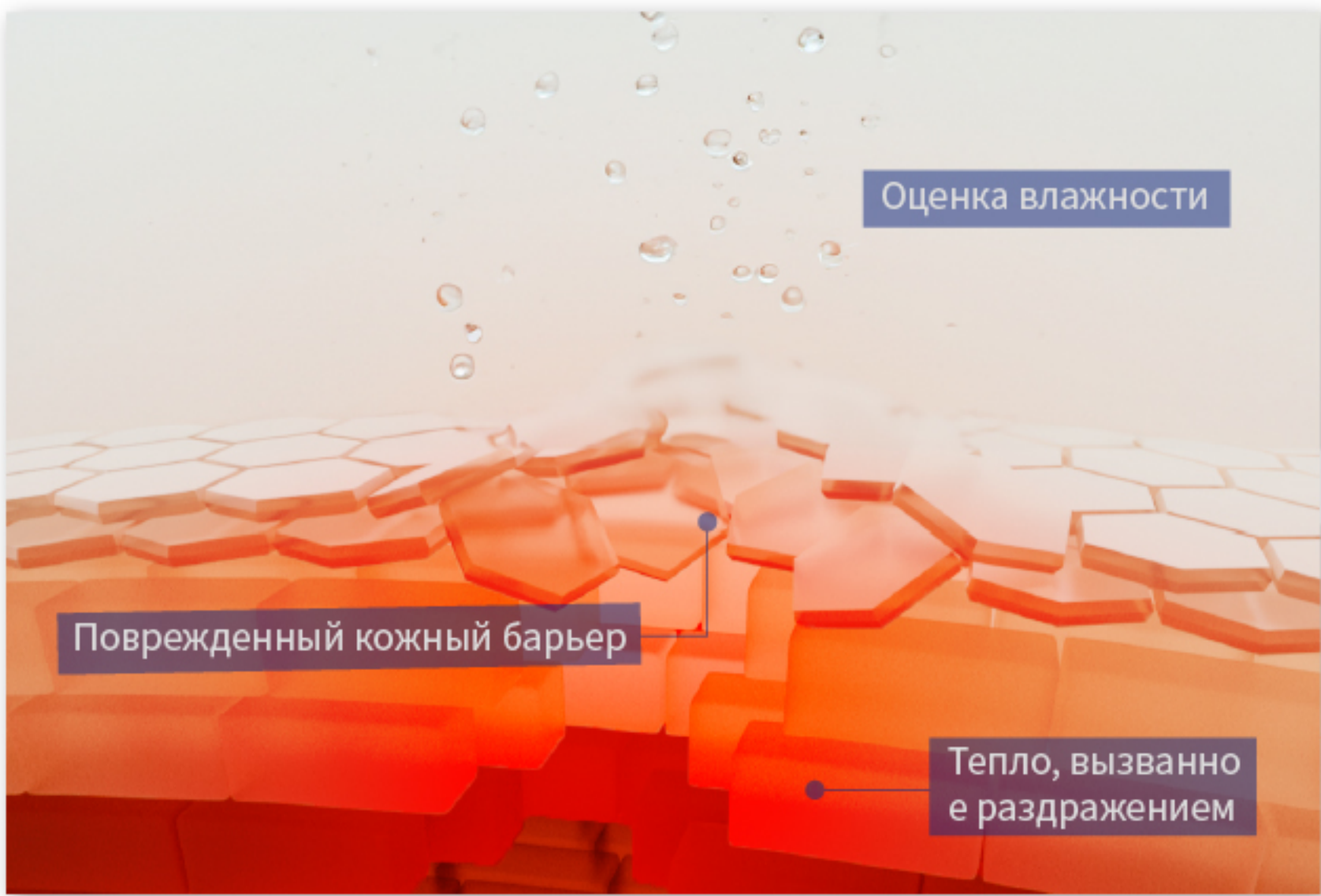


Утечка лекарства вместе с кровью из-за высокого внутрикожного давления и небольшого незажившего отверстия для инъекции.

AETER PURI EYES PDRN PATCH


представляет собой пластырь послеоперационного ухода, созданный для решения хронических проблем, связанных с процедурами дермальных инъекций и быстрого успокоения раздраженной кожи.

КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ


препарата PURI EYES и PURI EYES PDRN PATCH

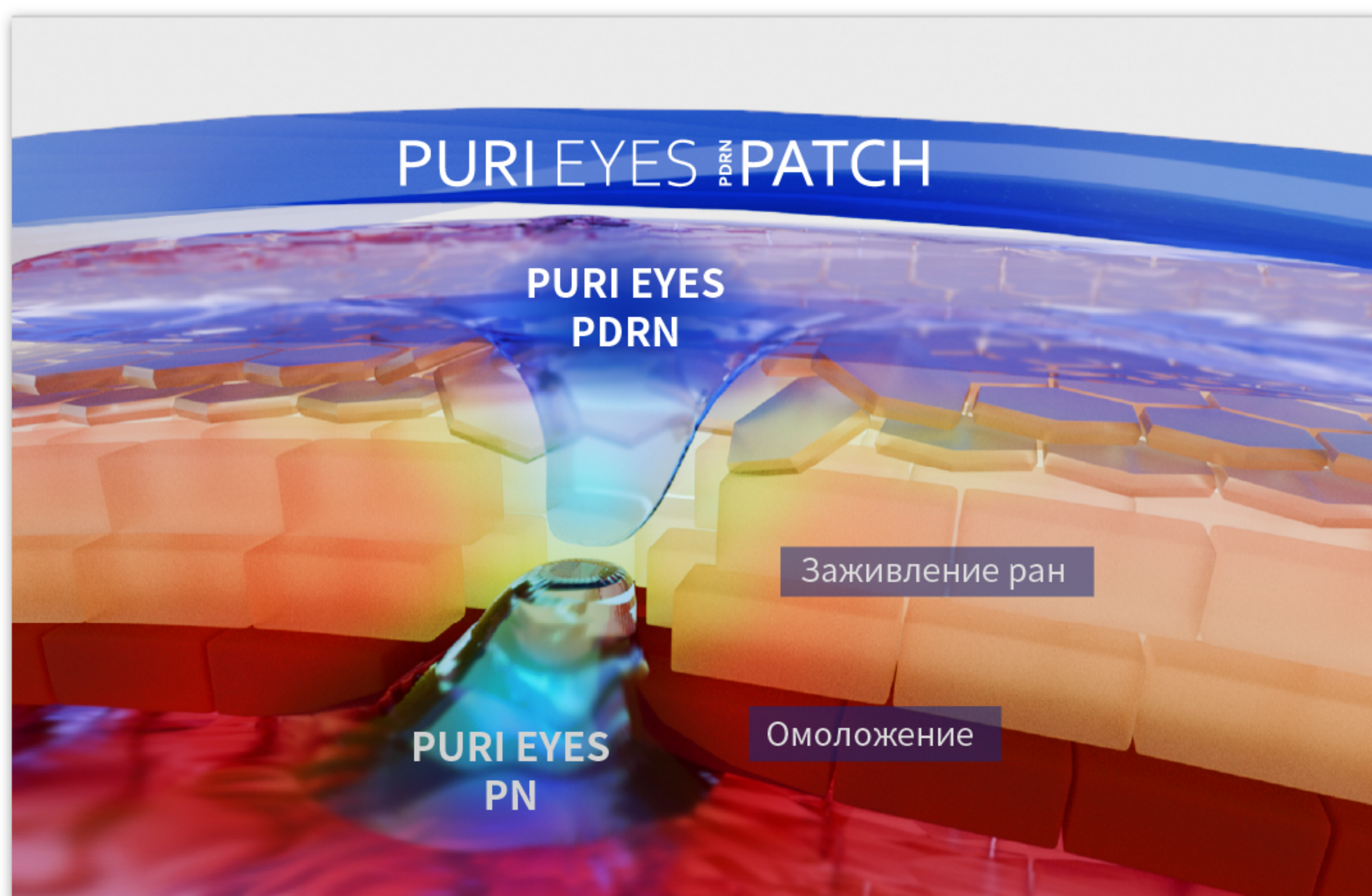


- Нанося на кожу PDRN высокой концентрации, который имеет те же физические свойства, что и PURI EYES PN, он предотвращает отток внутрикожных препаратов за счет осмоса.
- PDRN и PN воздействуют как на эпидермис, так и на дерму, восстанавливая раны и регенерируя ткани внутри и снаружи.

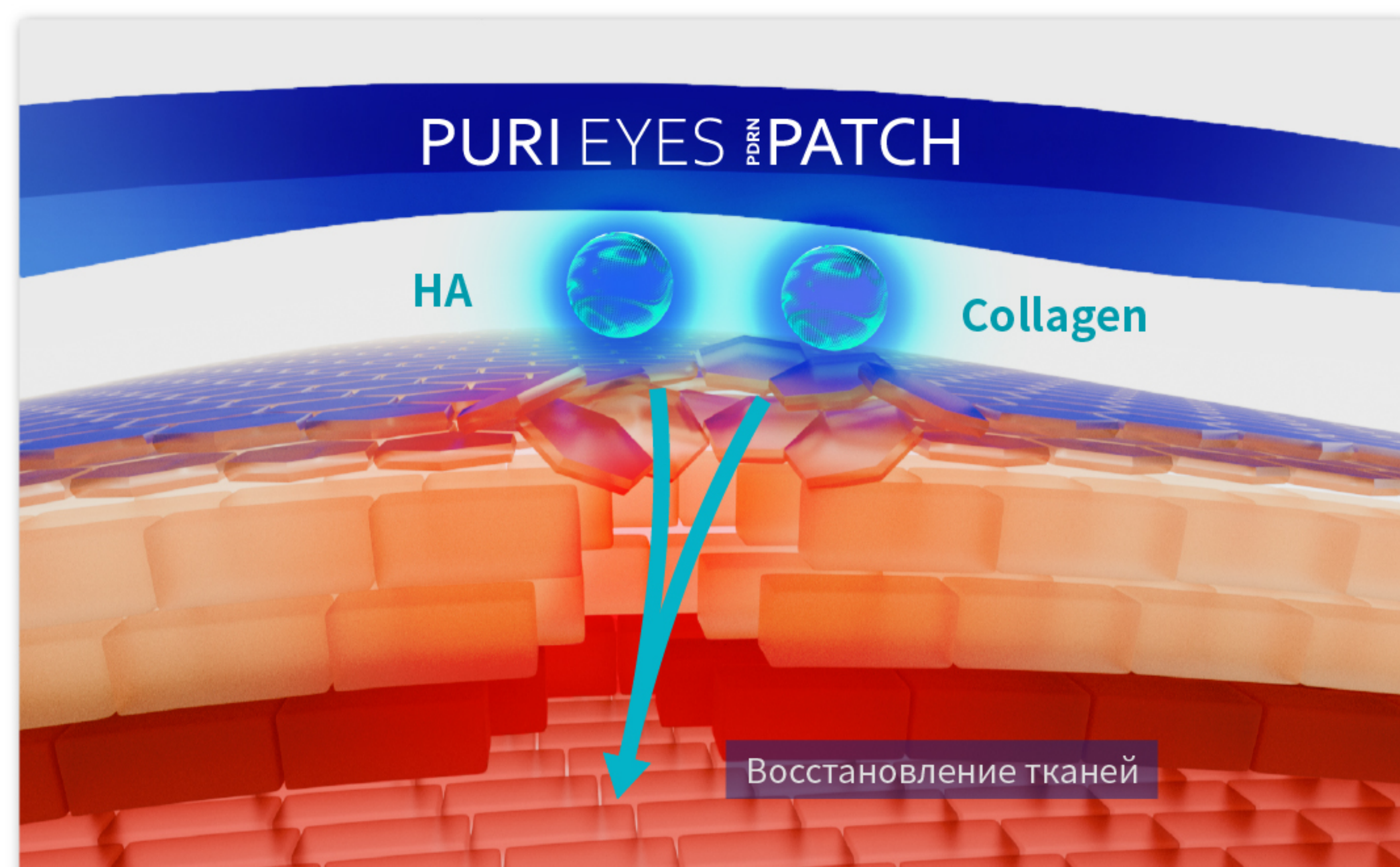


- HA и гидролизированный коллаген, биоматериалы для восстановления тканей, могут проникать в дерму через отверстие, образовавшееся во время процедуры инъекции.

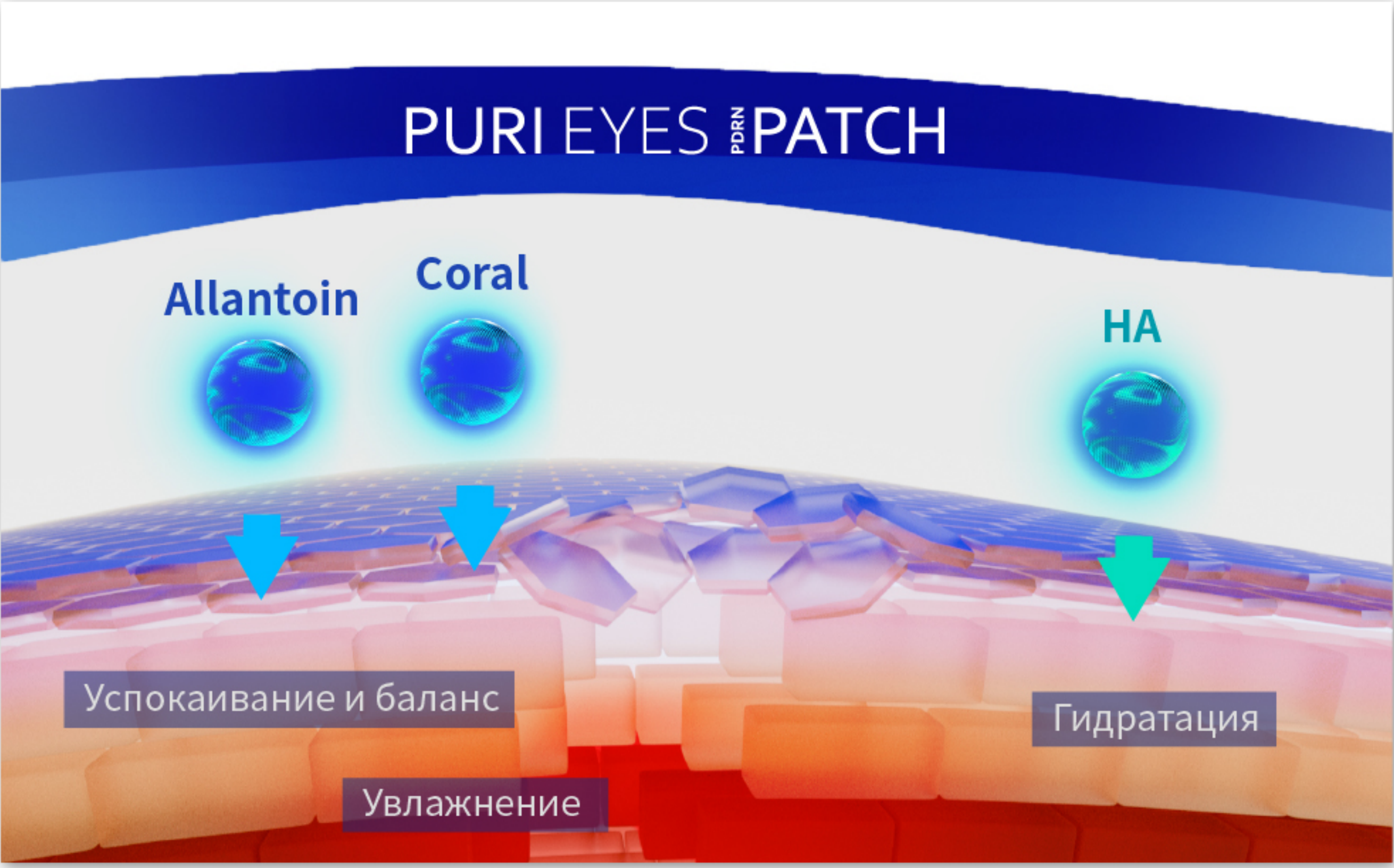

- Аллантоин успокаивает раздраженную кожу, а гидролизированные ингредиенты коралла и HA обеспечивают достаточное увлажнение сухой кожи из-за высокой температуры.
- Чтобы добиться максимального успокаивающего эффекта на кожу, приготовьте и нанесите PURI EYES PDRN PATCH, пока он холодный.

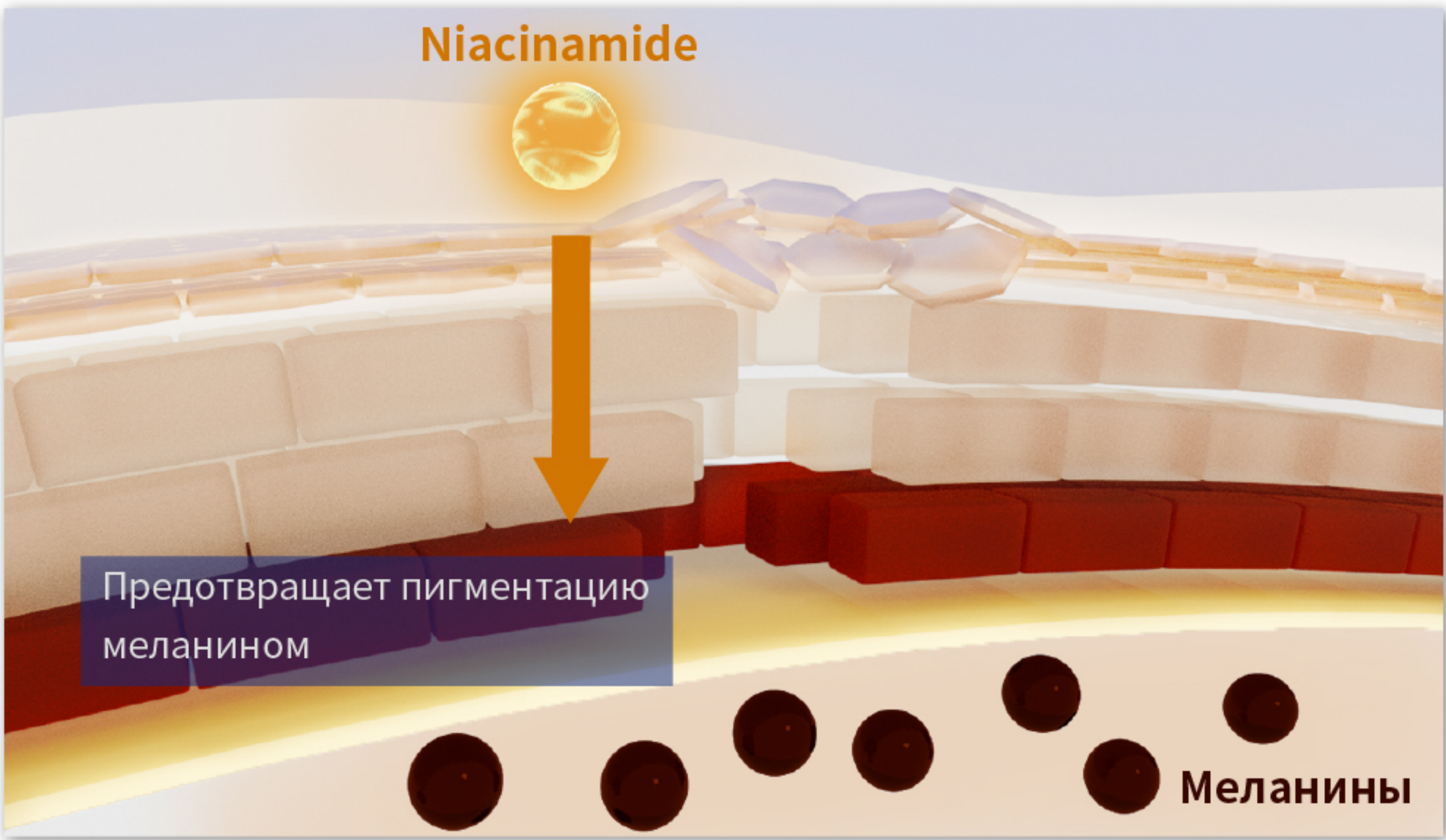

- Когда раздраженная и ослабленная кожа получает чрезмерную стимуляцию от ультрафиолетовых лучей, она перепроизводит пигмент меланин. Ниацинамид предотвращает оседание пигмента меланина в коже, предотвращая появление пигментных шрамов.

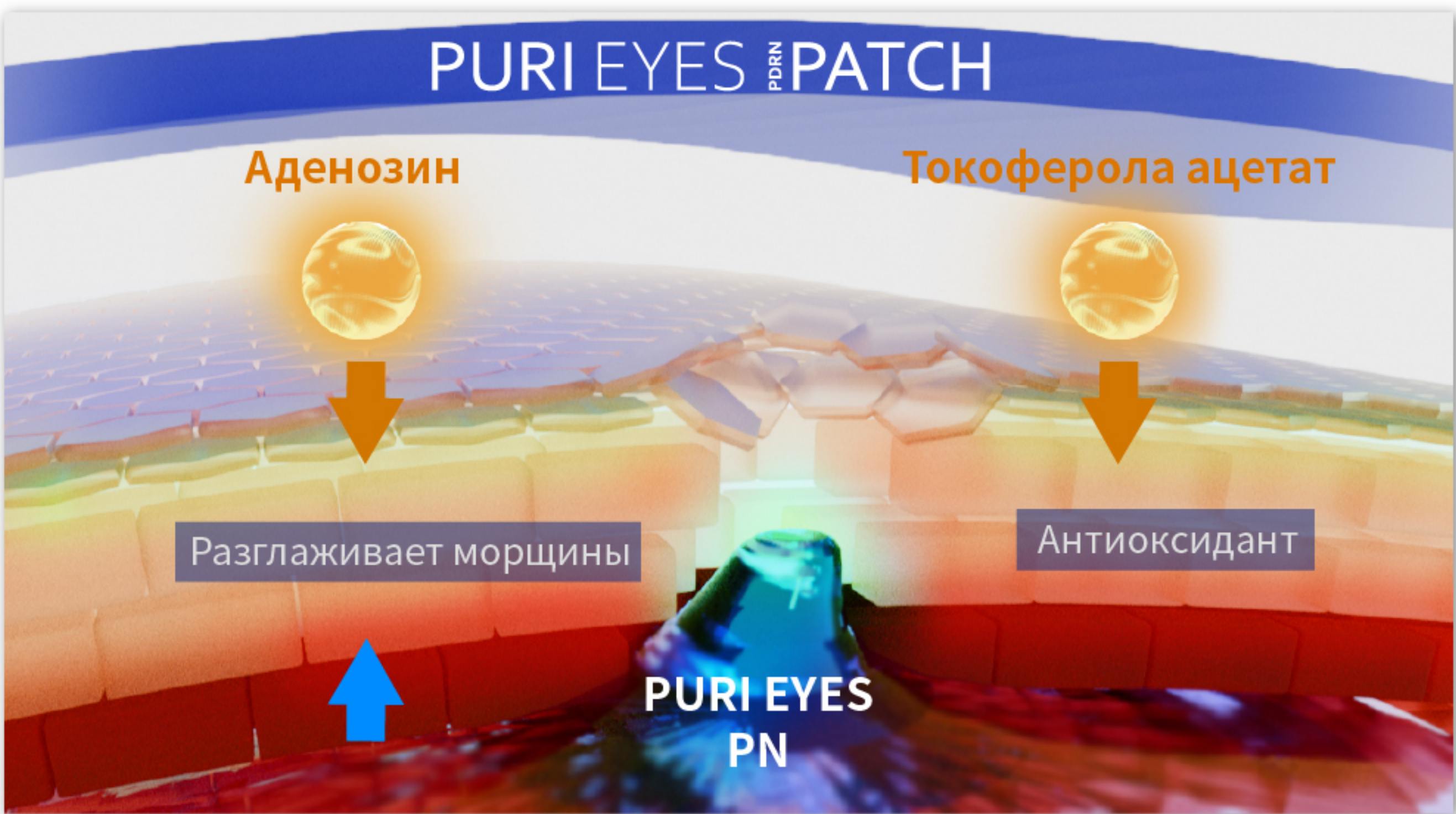

- Аденозин оказывает превосходное воздействие на разглаживание морщин, а вместе с PURI EYES улучшает эффект процедуры, разглаживая морщины на коже изнутри и снаружи.
- Токоферола ацетат является специализированным антиоксидантом и предотвращает окисление кожи и старение, ускоряемое воздействием тепла.

Усиливает регенерацию
Подтягивает структуру кожи



Механизм


Двойное фармакологическое действие полинуклеотида

A2A Агонист рецепторов

AETERDERM®PURI EYES Полинуклеотид избирательно связывается с рецептором A2A и индуцирует переход антиоснования.



Он также активирует 3 фактора роста для регенерации поврежденных тканей

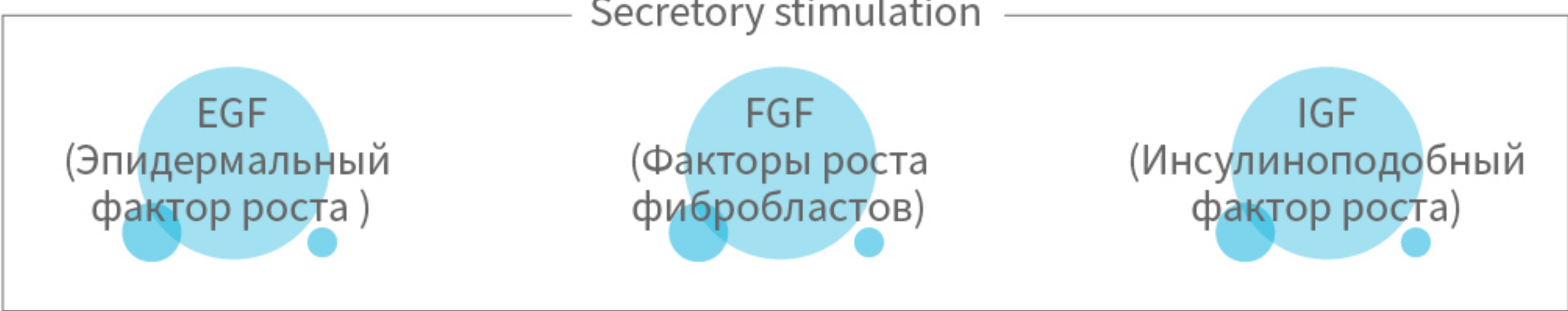


Он индуцирует ангиогенез посредством секреции фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и улучшает состояние капилляров кожи, количество которых уменьшается с возрастом. Увеличение капилляров кожи может предотвратить старение и улучшить здоровье кожи, плавно поставляя необходимые питательные вещества.




Реутилизационный путь

Реутилизационный путь быстро синтезирует нуклеиновые кислоты с меньшими затратами энергии и вызывает регенерацию клеток.

De novo путь без PN

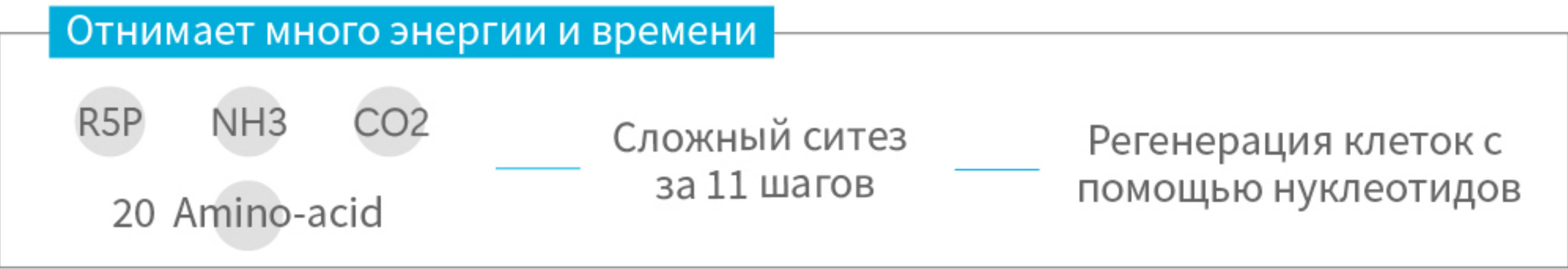

Реутилизационный путь с PN

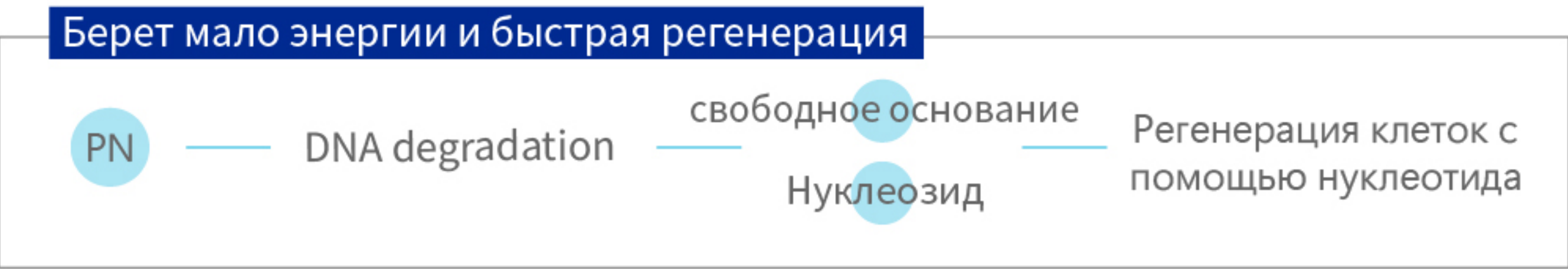

AETERDERM®

PURI EYES

Under eye skin rejuvenation

Состав

Полинуклеотид натрия ————— 2mg/mL
Фосфатно-буферный раствор ————— q . s

УПАКОВКА

1,1 мл × 1 шприц / упаковка

AETERDERM®

PURI EYES PRO

Under eye skin rejuvenation

Состав

Полинуклеотид натрия ————— 6mg/mL
Фосфатно-буферный раствор ————— q . s

УПАКОВКА

1,1 мл × 1 шприц / упаковка

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

Замедляет старение кожи

Патчи для уменьшения морщин под глазами

СОСТАВ

Water(Aqua), Glycerin, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Chondrus Crispus Powder, Benzyl Glycol, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Panthenol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Dipotassium glycyrrhizate, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Adenosine, Raspberry Ketone, Ultramarines(CI 77007), Disodium EDTA, Synthetic Fluorphlogopite, Butylene Glycol, Calcium Lactate, 1,2-Hexanediol, Fragrance(Parfum), Titanium Dioxide(CI 77891), Hydrolyzed Collagen, Sodium Hyaluronate, Sodium DNA, Hydrolyzed Coral

УПАКОВКА

90 г / 3,17 унции (60 шт.)