

AETERDERM®

LEXYFILL

Fill Your Luxury Beauty

&

LEXYFILL VOLUME CREAM






Fill Your Luxury Beauty


CARATTERISTICHE

Bassa viscosità. Massima elasticità.

Senza necessità di miscelazione con soluzione fisiologica, il prodotto può essere aspirato facilmente dal flacone.

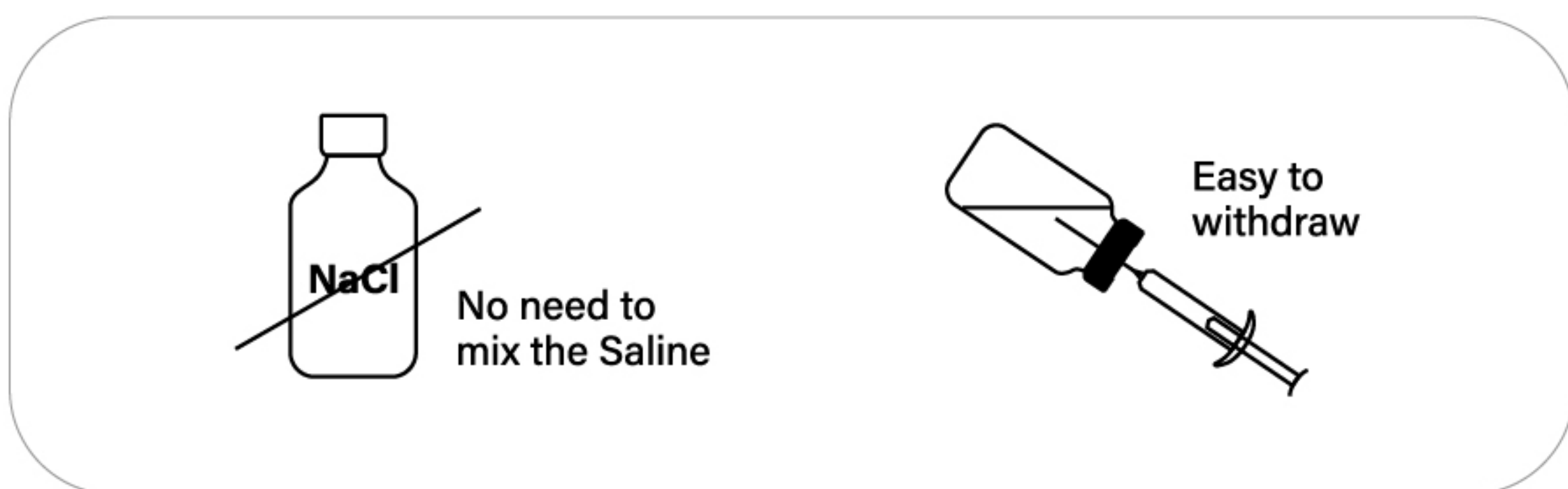

In questo modo, si preserva il volume del prodotto, evitando possibili alterazioni legate alla diluizione. Ne risulta un comportamento elastico ottimale.

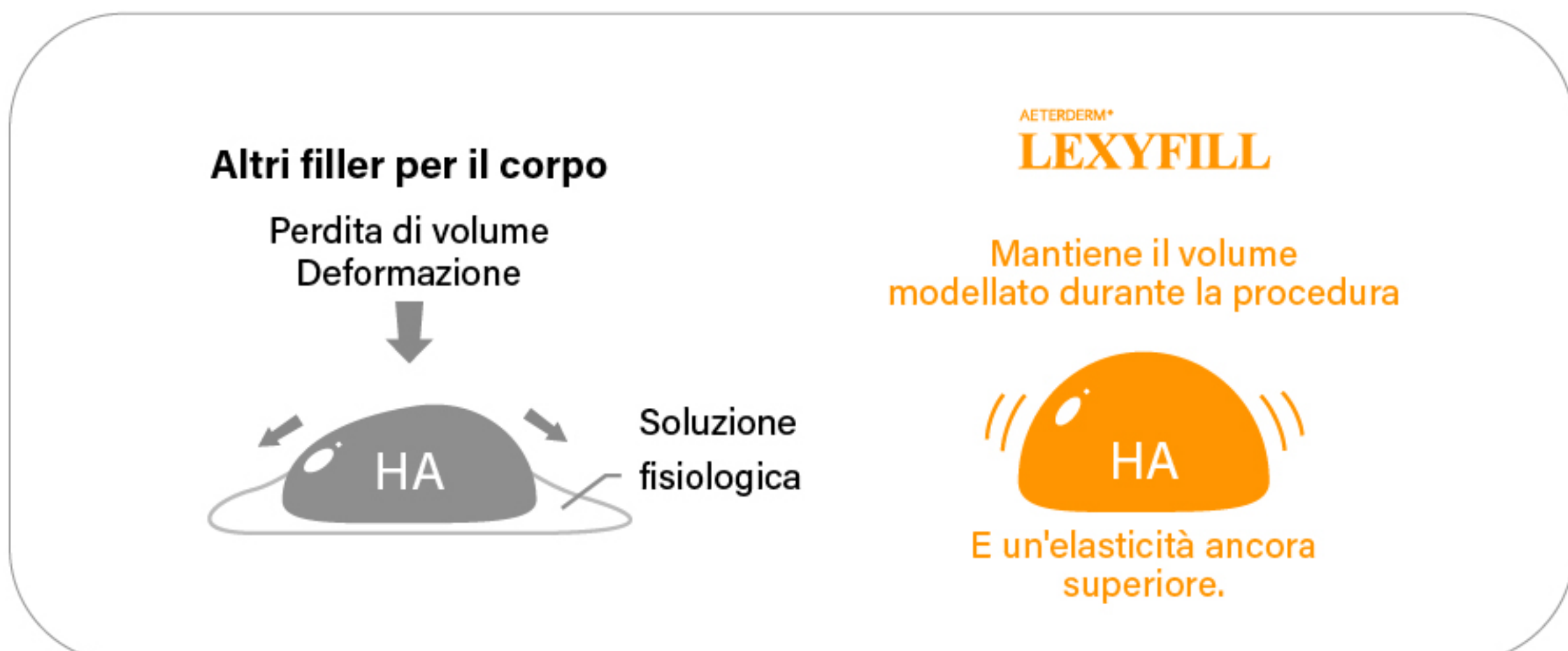

Ciò consente una maggiore precisione e controllo durante il trattamento. ✂


Un filler per il corpo sviluppato con tecnologia di reticolazione a bassa temperatura, per garantire proprietà reologiche ottimali.

Per un rimodellamento corporeo preciso




Perché scegliere **LEXYFILL**?


Altri filler per il corpo

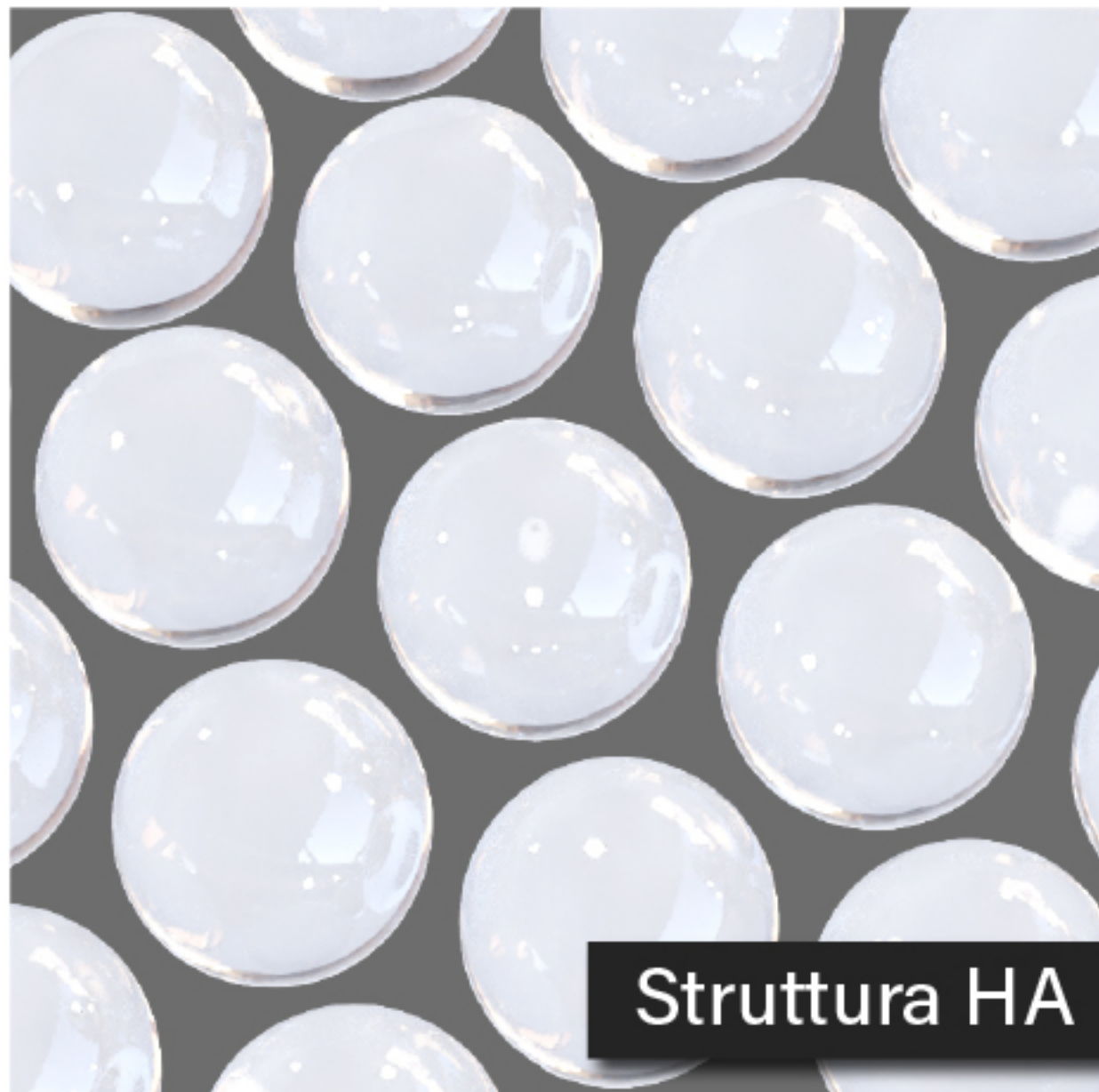

Utilizzando solo grandi molecole di acido ialuronico

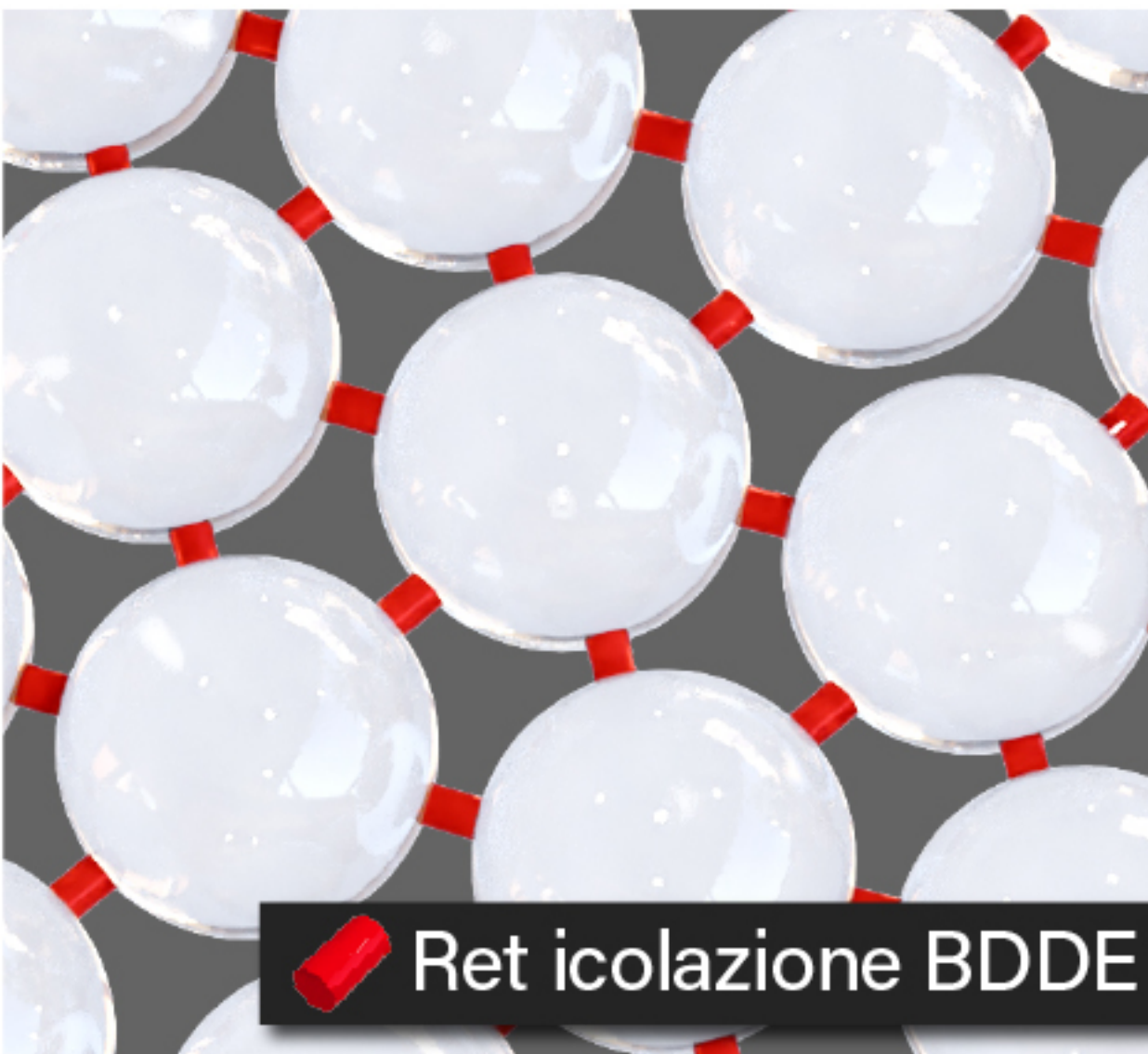

Viene utilizzata una grande quantità di **BDDE** che può comportare effetti indesiderati legati al filler. Inoltre, questi filler sono troppo duri da aspirare dal flacone. Devono quindi essere combinati con soluzione fisiologica e agitati per essere miscelati.

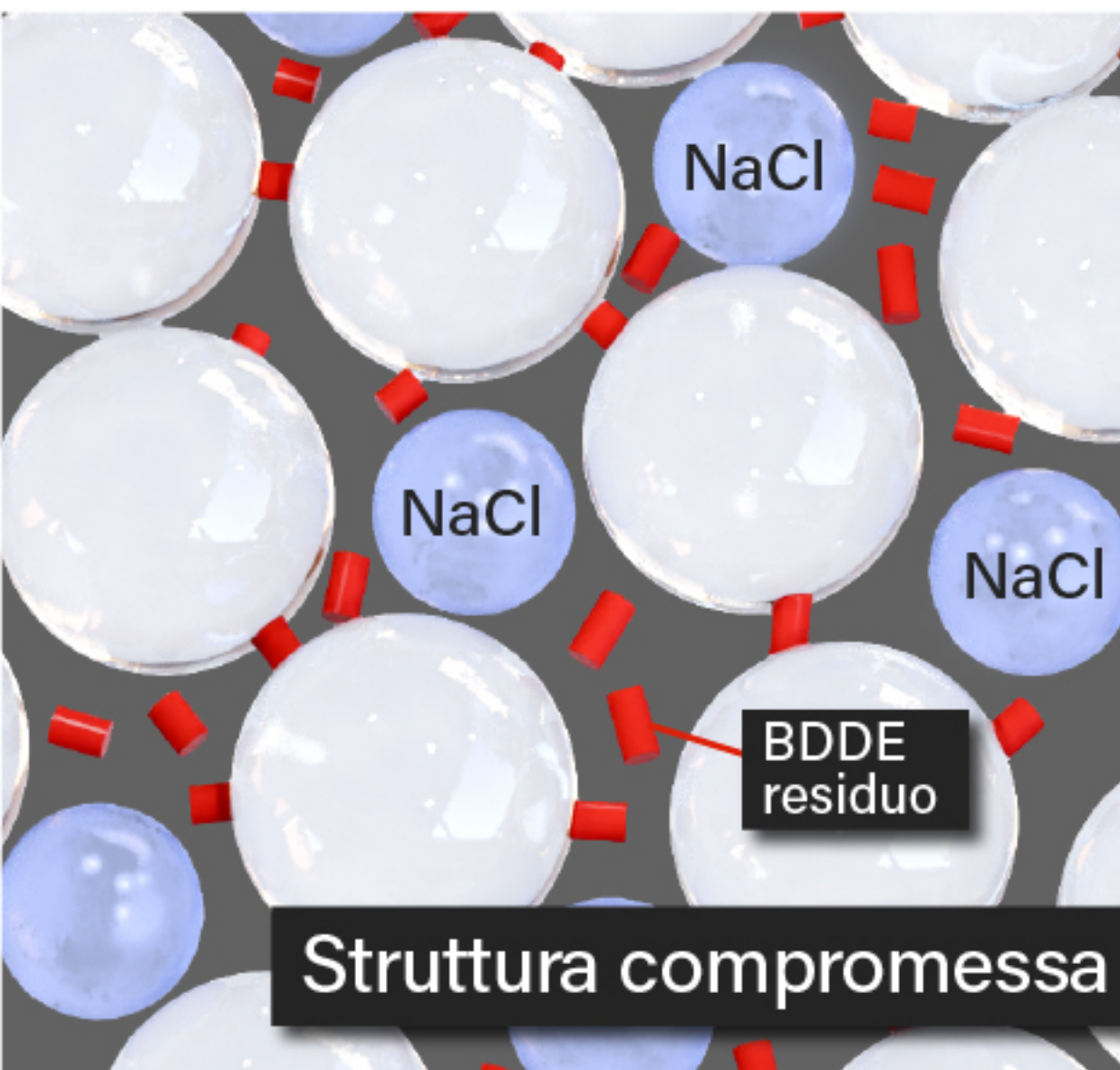

Quando si aggiunge la soluzione fisiologica e si agita per miscelare, la struttura di reticolazione dell'acido ialuronico viene alterata. Ciò causa l'aumento del BDDE residuo e comporta gravi effetti collaterali.


LEXYFILL Body Filler



Piccole molecole di acido ialuronico sono state posizionate tra quelle grandi. Per questo motivo, il prodotto ha una maggiore idratazione ed elasticità.



Grazie a questa particolare struttura dell'acido ialuronico, la reticolazione può essere eseguita utilizzando piccolissime quantità di **BDDE**. Di conseguenza, la probabilità di effetti collaterali è significativamente ridotta.

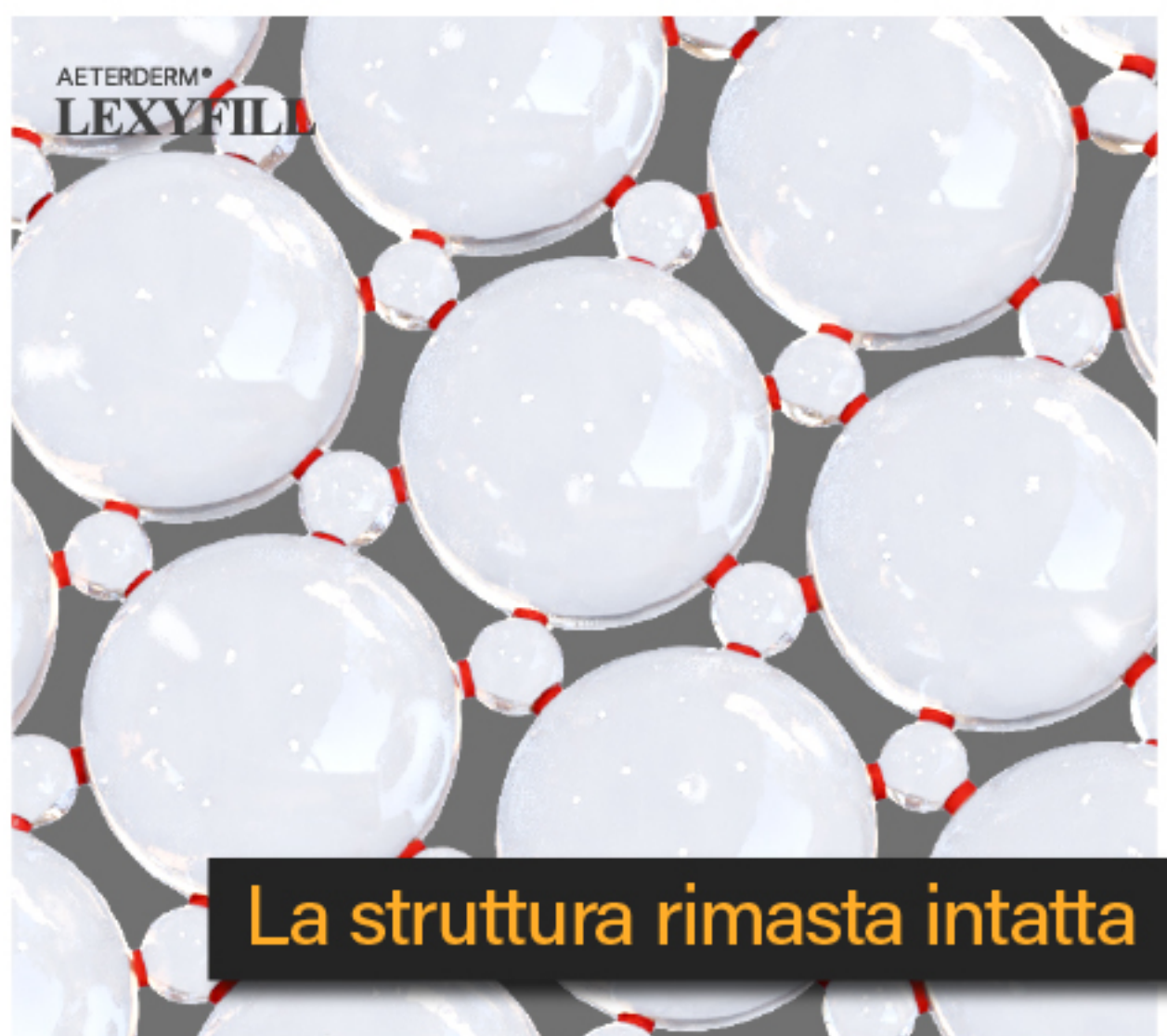


LEXYFILL può essere facilmente aspirato con una siringa senza miscelare soluzione fisiologica, in modo da poter essere iniettato mantenendo intatta la struttura dell'acido ialuronico.

Ingredienti chiave

Acido ialuronico

Acido ialuronico (HA) bifasico reticolato: adatto per la volumizzazione del corpo.

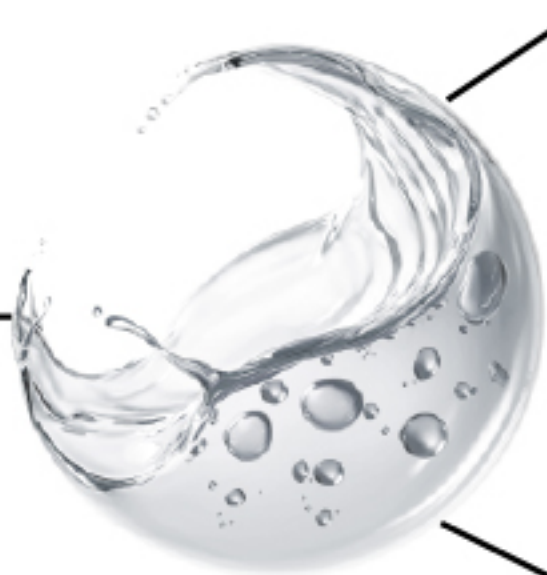

Processo di purificazione ripetuto per ridurre impurità Aiuta a ridurre il rischio di effetti indesiderati

- ⊙ BDDE residuo
- ⊙ Endotossine
- ⊙ Proteine

Favorisce l'elasticità e la ritenzione grazie alla combinazione di molecole di HA di diversa dimensione



Concentrazione di HA	24 mg / mL
MOD (Grado di modificazione, mol%)	3.85 %
Tipo di gel	Bifasico
Modulo di conservazione (G')	100 - 250 Pa
Forza d'iniezione (N) (30G UTW)	20 N

Studi non clinici

Test di viscosità ed elasticità




Initial Shape




Dopo 1 ora



Dopo 6 ore

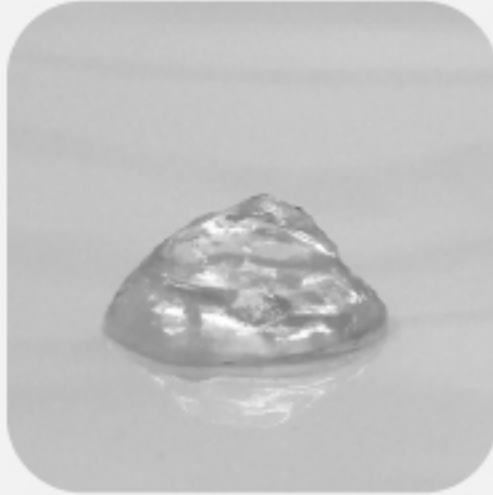

Dopo 12 ore

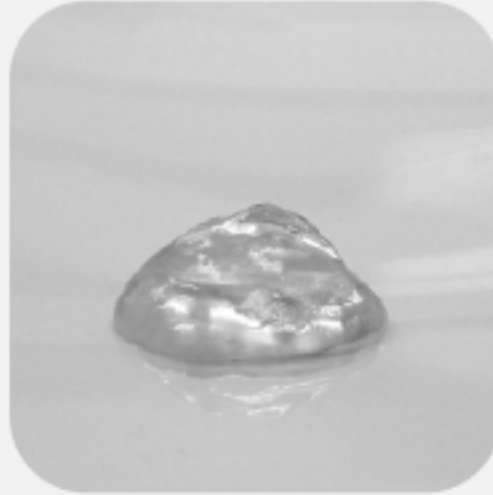

Dopo 24 ore

References) Sci Rep 2024;(5)





AETERDERM®



LEXYFILL

Studi clinici

Rimodellamento del seno

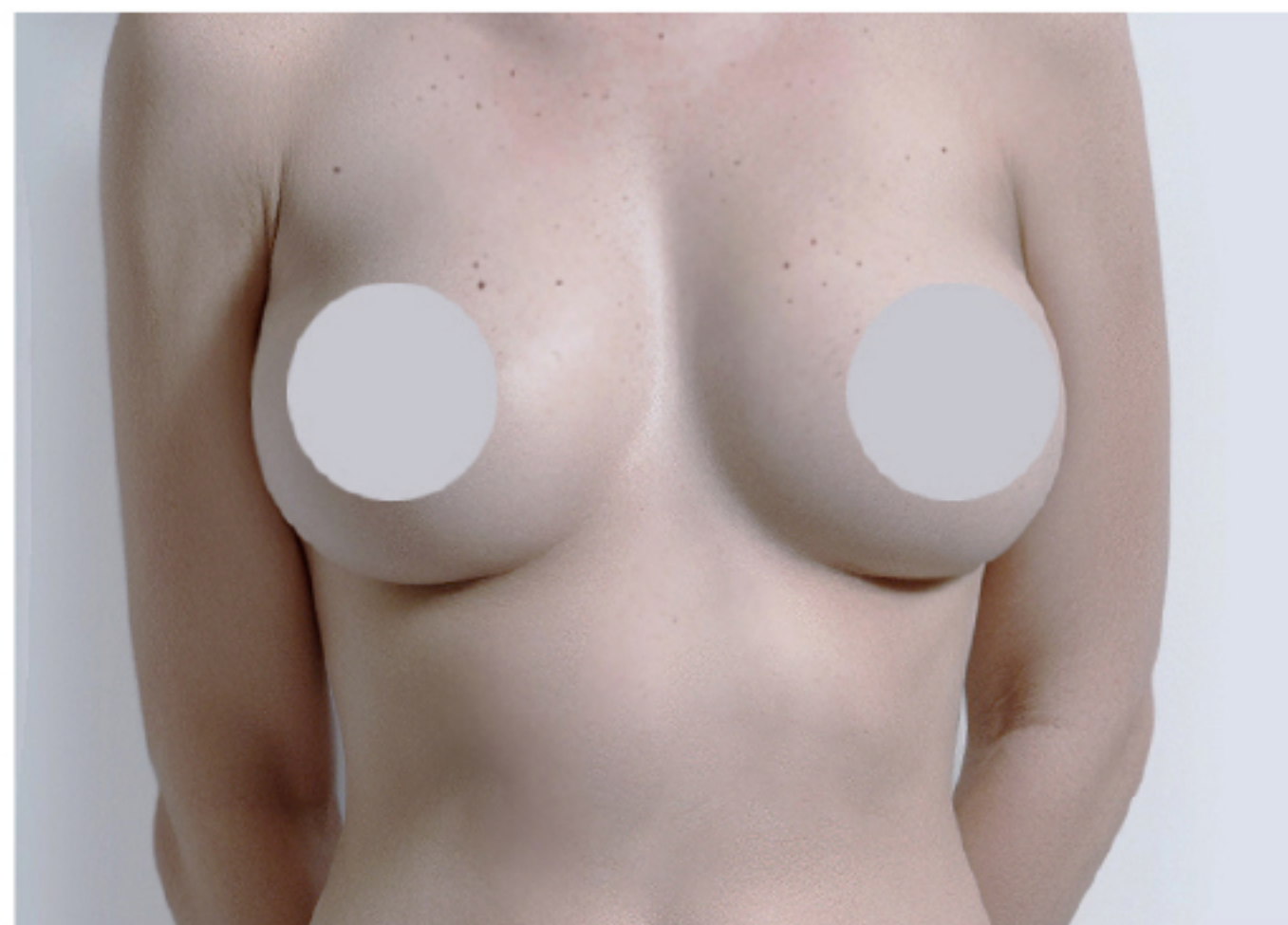
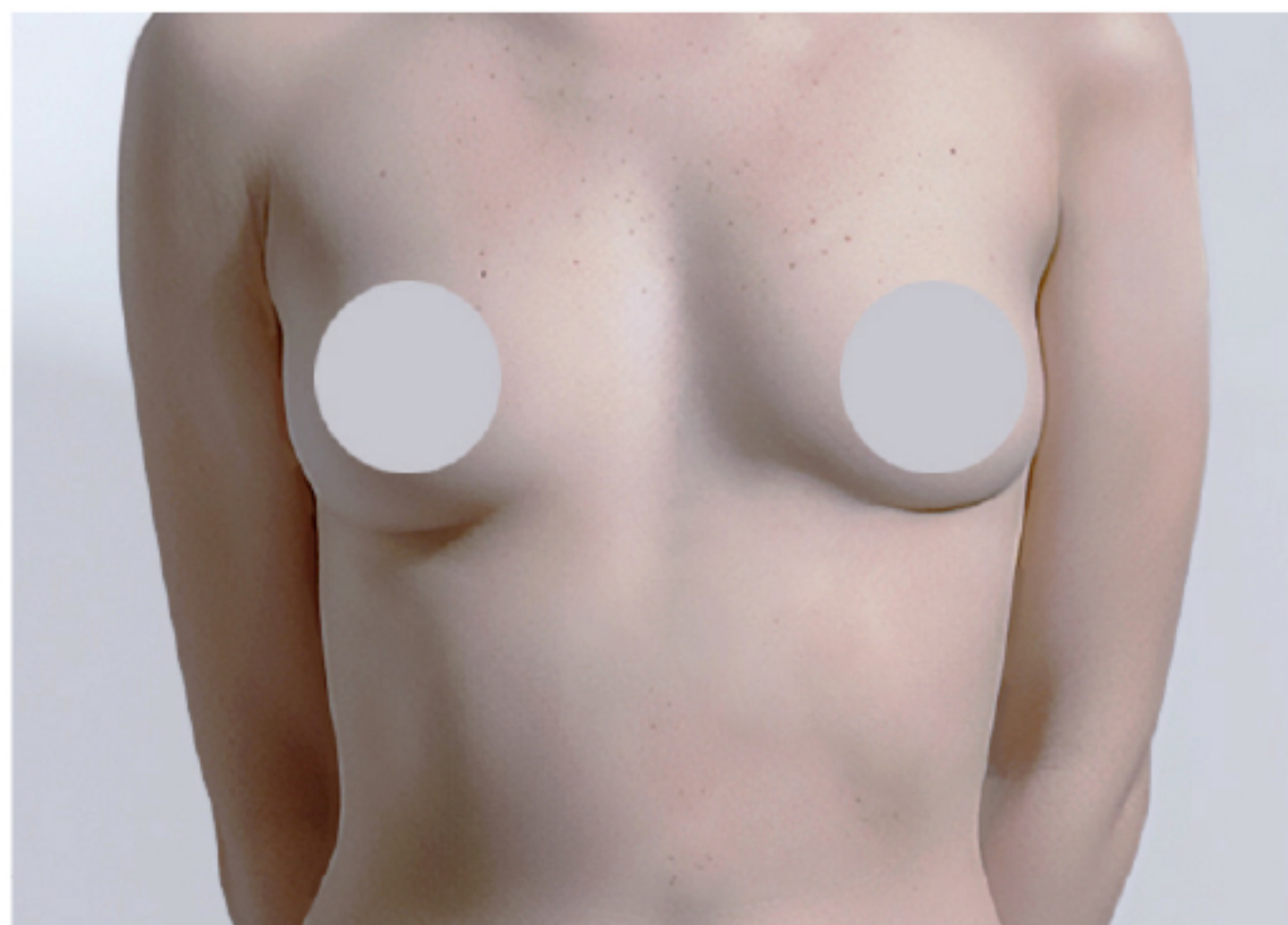


References) Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;11:3-13

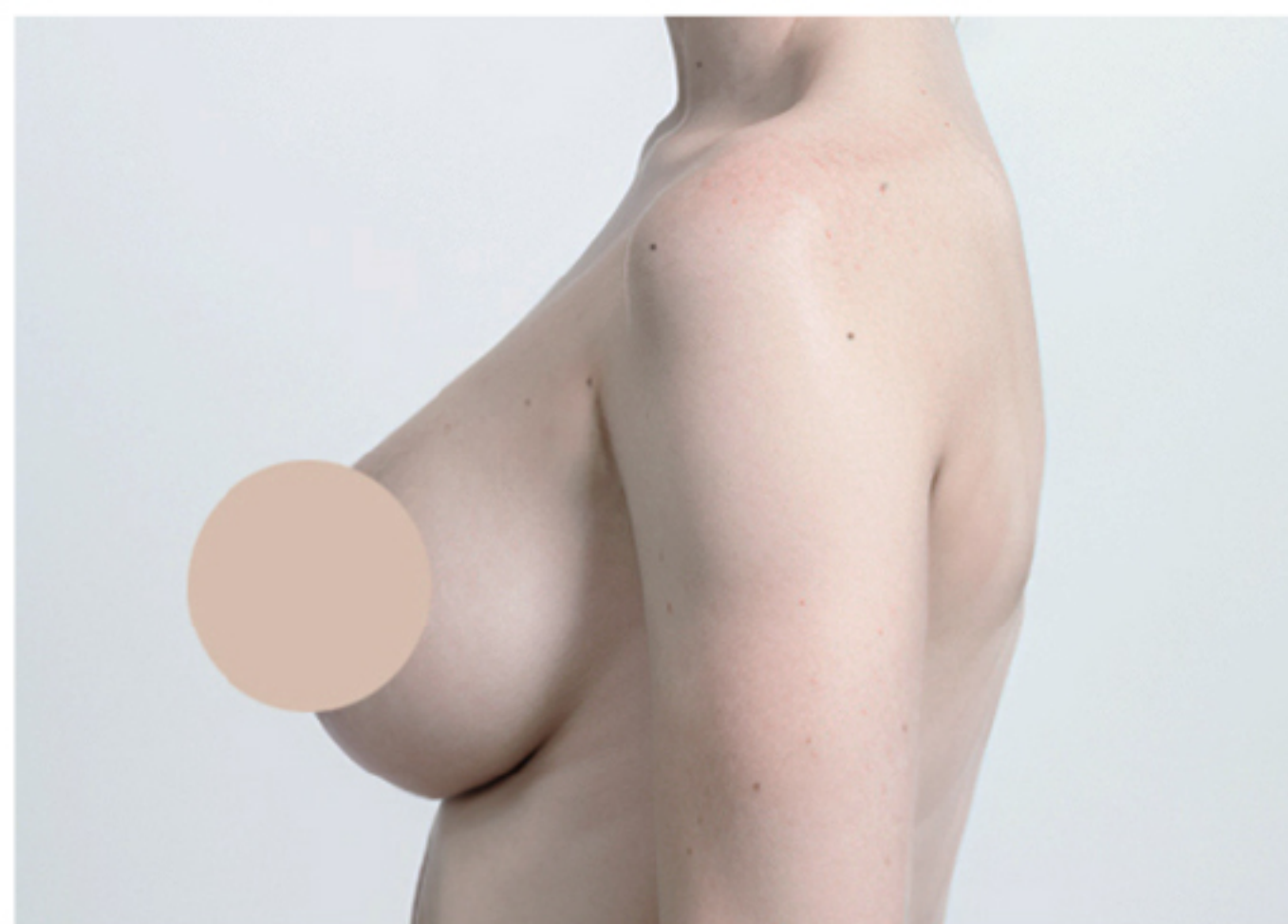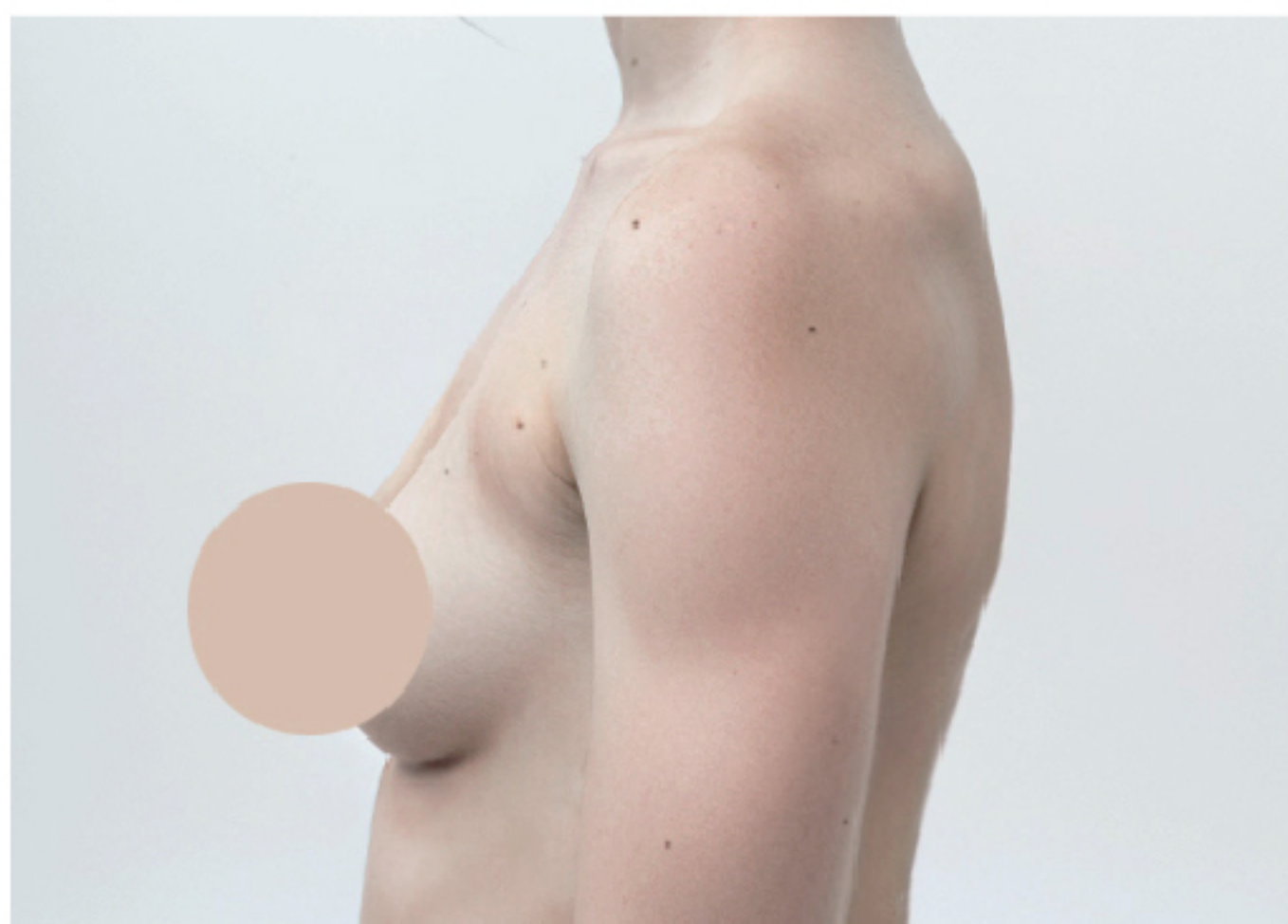

References) Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;17:10-15

Rimodellamento dei glutei

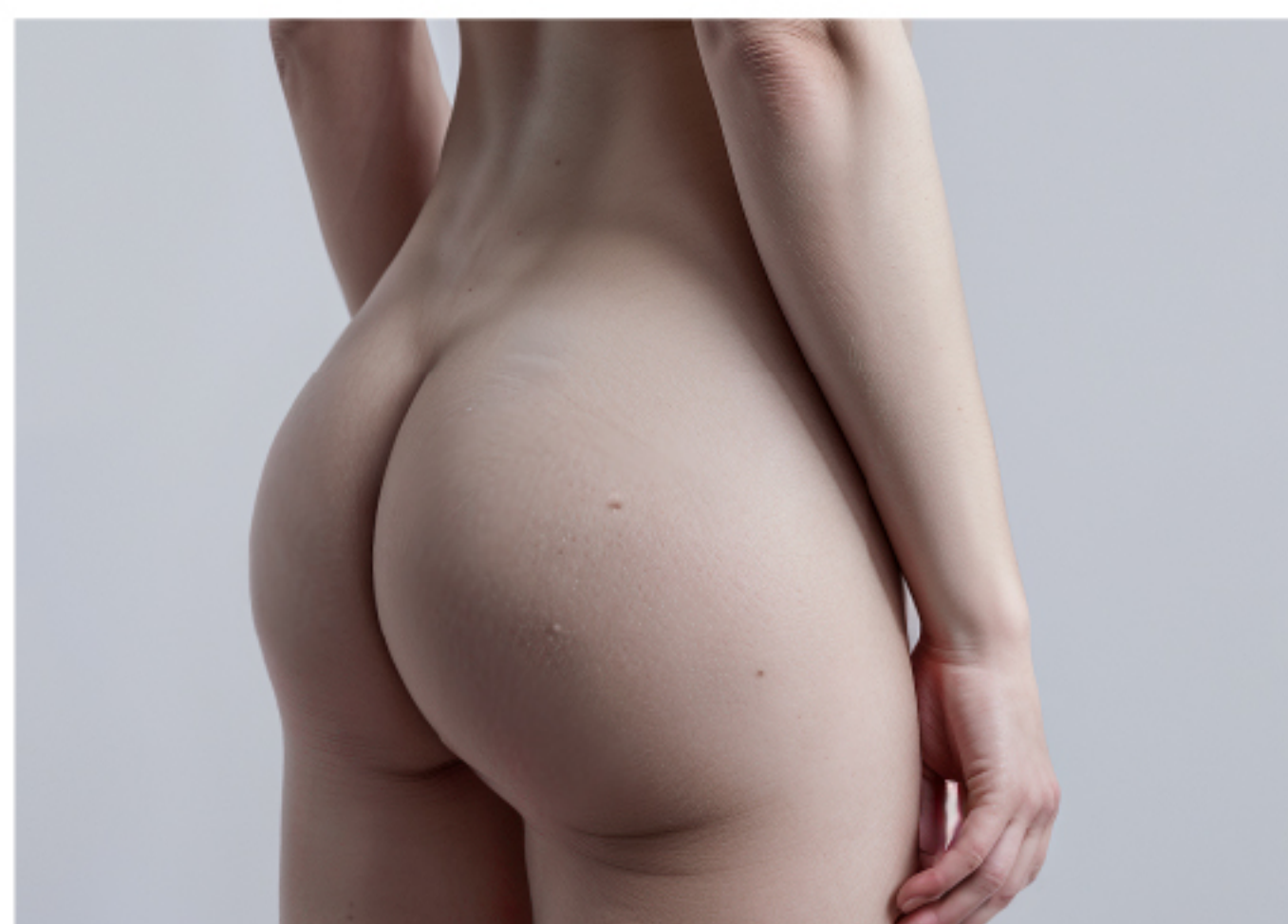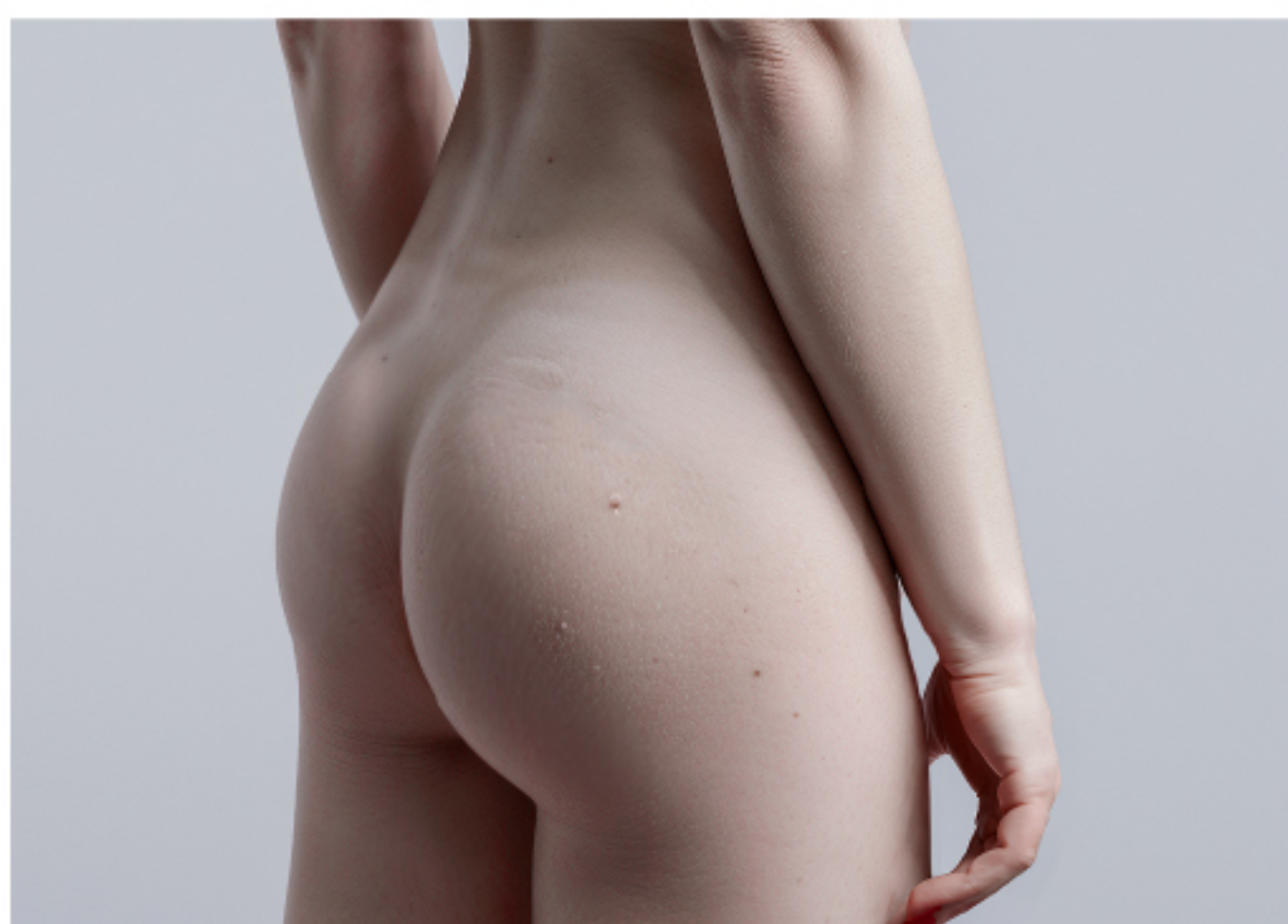

References) Augmentation of buttocks by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;21:35-19

Trattamento

Aree di trattamento

Vista frontale

Parte superiore del seno
Area sternale del seno

Parte laterale del seno
Parte inferiore del seno

Correzione delle asimmetrie
Fianchi laterali



Vista laterale

Aumento volumetrico del seno

Aumento dei glutei
Assimmetria dei fianchi



Vista posteriore

Parte superiore glutei


Parte interna glutei

Avvallamenti dei fianchi
Parte inferiore glutei



✱ In caso di grave lassità cutanea o ptosi severa dei glutei, si raccomanda di non iniettare il filler di acido ialuronico nella parte inferiore dei glutei.

Siti tipici di iniezione

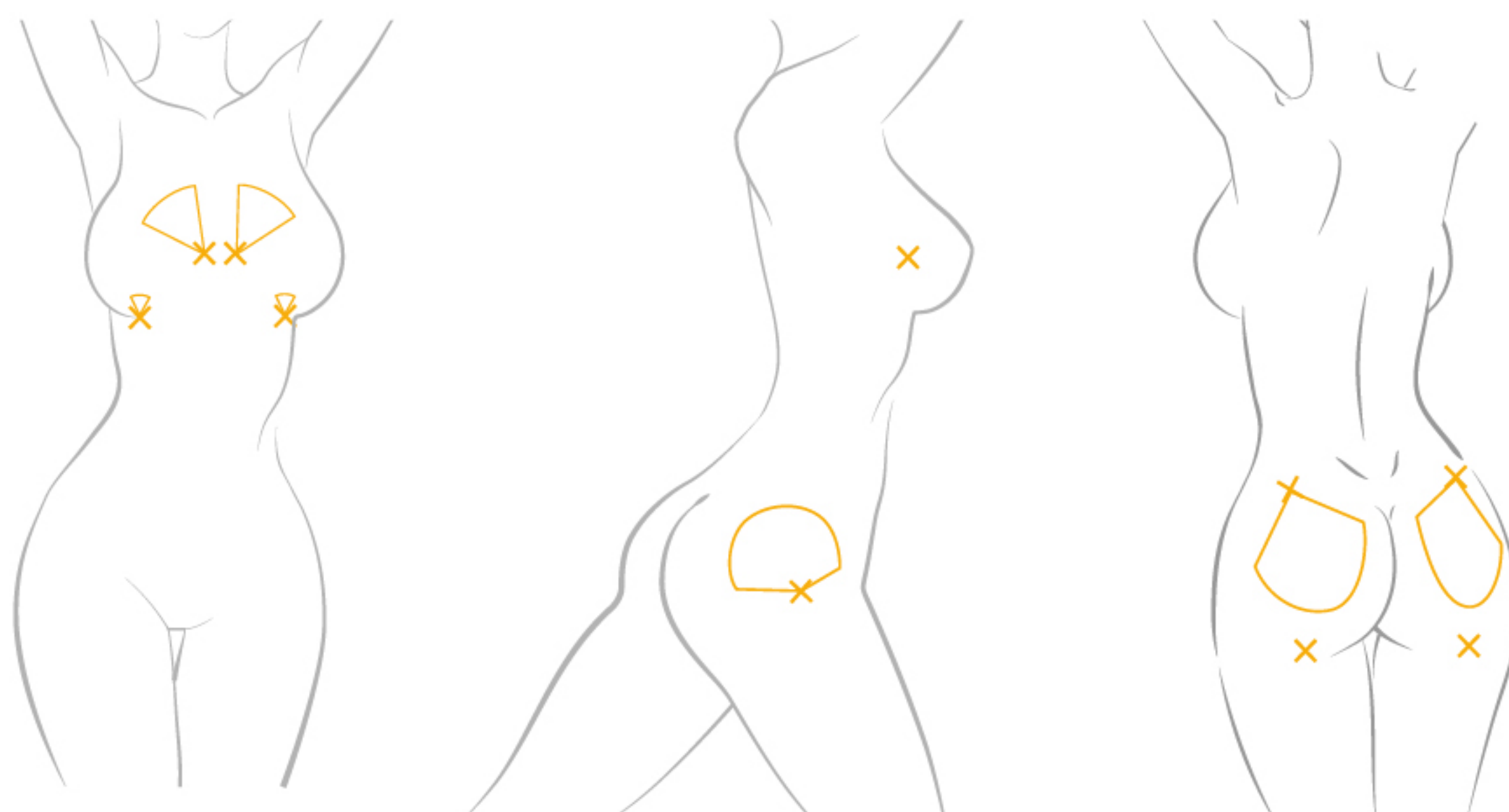

Cannula raccomandata

- Aumento del seno — si raccomanda microcannula 14G 90mm
- Aumento della parte superiore del seno — si raccomanda microcannula 20G 70mm
- Aumento dei glutei — si raccomanda microcannula 18G 70mm or 18G 90mm

Processo di trattamento

- Verificare che il paziente sia in condizioni idonee per la procedura
- Detergere l'area da trattare
- Disinfettare l'area del trattamento con alcool o altro antisettico.
- Iniettare i filler LEXYFILL HA per il corpo nel piano del tessuto sottocutaneo dell'area da trattare utilizzando un ago o una cannula a parete sottile
- Al termine dell'iniezione, il sito trattato deve essere massaggiato delicatamente affinché si conformi al contorno dei tessuti circostanti.

※ Istruzioni dettagliate per l'applicazione sono fornite nel manuale allegato al prodotto.

Precauzioni post-trattamento

- Applicare impacchi freddi sulla zona trattata per 15–20 minuti per volta, più volte al giorno, per aiutare a ridurre gonfiore e lividi.
- Evitare di esercitare pressione sulla zona trattata per almeno 24 ore dopo la procedura.
- Per almeno 48 ore dopo la procedura, evitare:
 - Attività fisica intensa o esercizio fisico.
 - Alcol e fumo.
 - Bagni caldi, saune e bagni turco.

※ Precauzioni dettagliate sono fornite nel manuale allegato al prodotto.

Trattamento complementare alla volumizzazione LEXYFILL VOLUME CREAM

Abbiamo creato ^{AETERDERM®} **LEXYFILL VOLUME CREAM**

come una collaborazione d'effetto con ^{AETERDERM®} **LEXYFILL**
sviluppando la formula ottimale per massimizzare l'efficacia del trattamento e
ridurre il rischio di effetti indesiderati.

■ Funzione 1

Volumizza il corpo attraverso la proliferazione delle cellule adipose grazie alla VOLUFILINE.

■ Funzione 2

Rende la pelle più soda ed elastica tramite la biosintesi di Collagene ed Elastina.

■ Funzione 3

Migliora l'aspetto delle smagliature

■ Funzione 4

Idratante e lenitiva per la pelle.



Applicare questa crema delicatamente sull'area del trattamento LEXYFILL due volte al giorno, massaggiando per 10 -20 minuti a sessione.

Ottimizza i risultati del trattamento con filler per il corpo, contribuendo a un aspetto più armonioso e naturale.

^{AETERDERM®}
LEXYFILL
VOLUME CREAM
Fill Your Luxury Beauty



Azione volumizzante con VOLUFILINE™

AETERDERM[®]
LEXYFILL VOLUME CREAM



VOLUFILINE™



Sarsasapogenin


Poliisobutene
Idrogenato

Supporto all'aumento del volume cutaneo

Favorisce l'accumulo lipidico a livello cutaneo

Apporto lipidico

T1 Incremento del contenuto lipidico con VOLUFILINE™

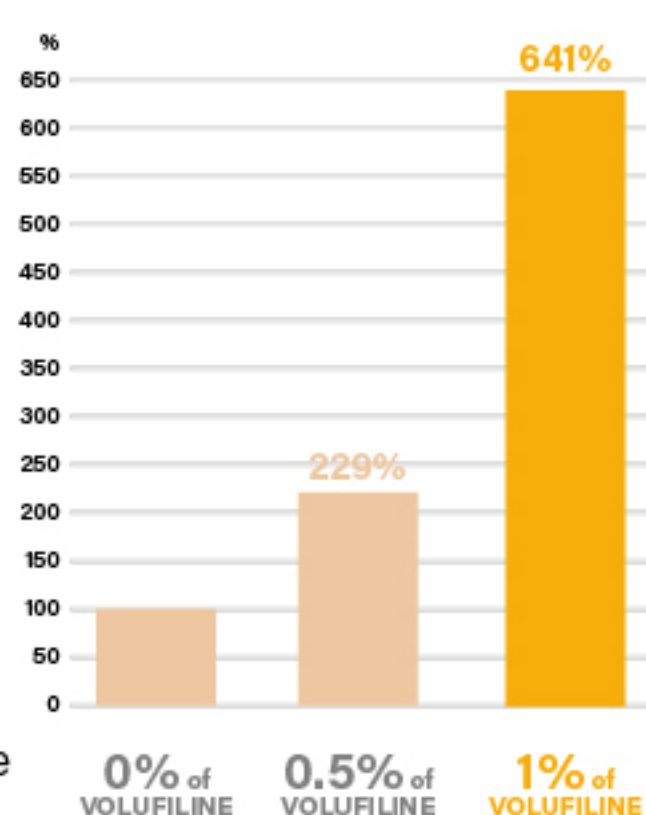


Concentrazione
VOLUFILINE™

0% of
VOLUFILINE

0.5% of
VOLUFILINE

**1% of
VOLUFILINE**

T2 asso di incremento del volume cellulare con
VOLUFILINE™

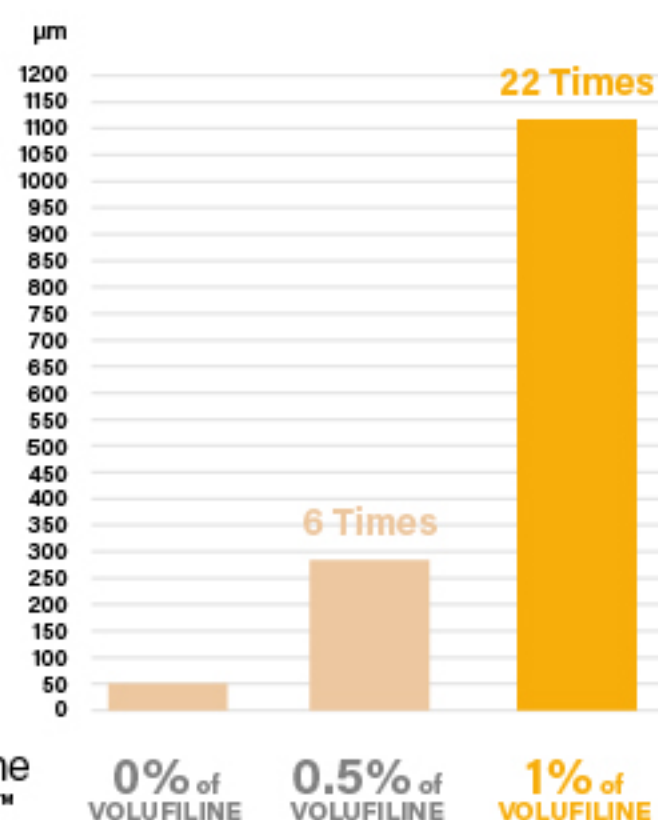Concentrazione
VOLUFILINE™


0% of
VOLUFILE

0.5% of
VOLUFILINE


**1% of
VOLUFILINE**

References) Sci Rep 2024:(22)


0% of
VOLUFILINE™

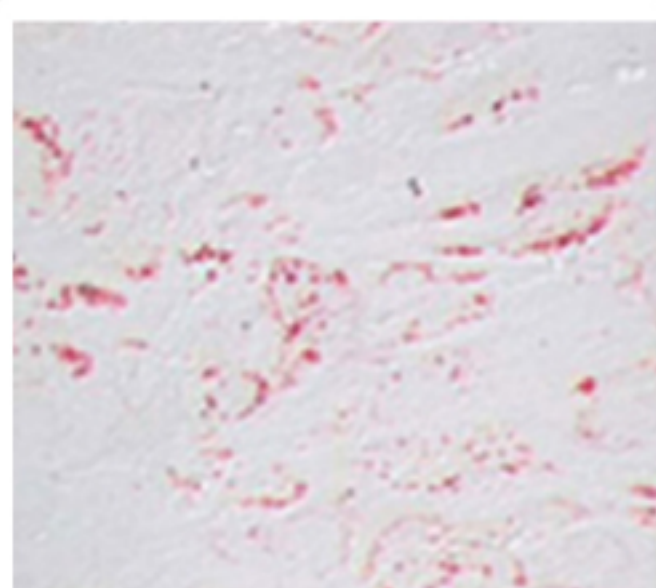

0.5% of
VOLUFILINE™

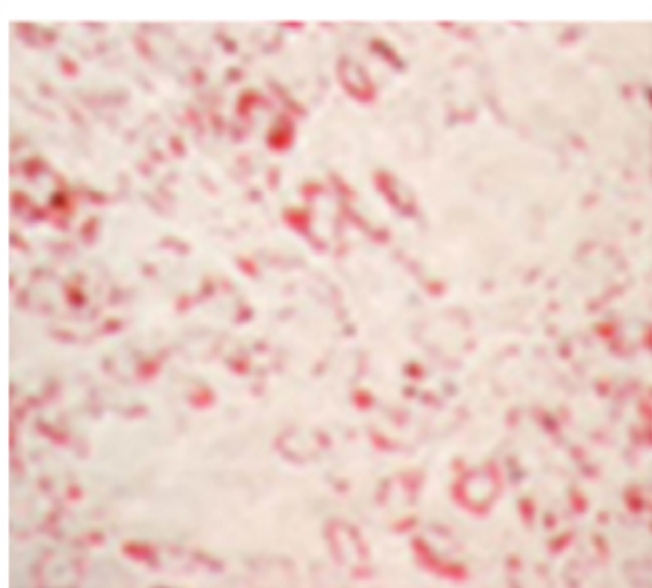


**1% of
VOLUFILINE™**

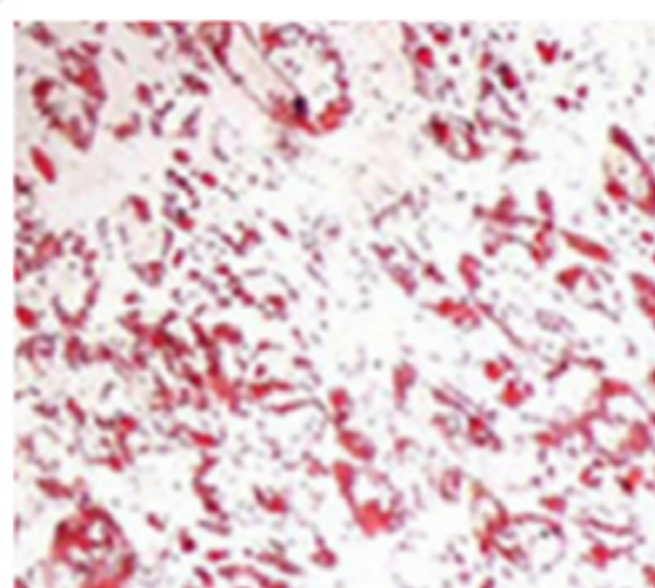




■ Red colored Fat cells

References) Sci Rep 2024:(27)

0% of
VOLUFILINE

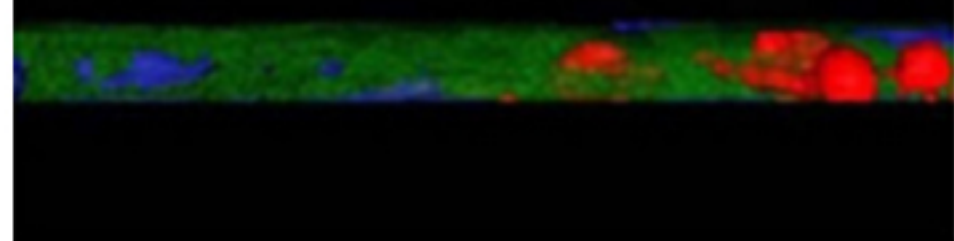

**1% of
VOLUFILINE**

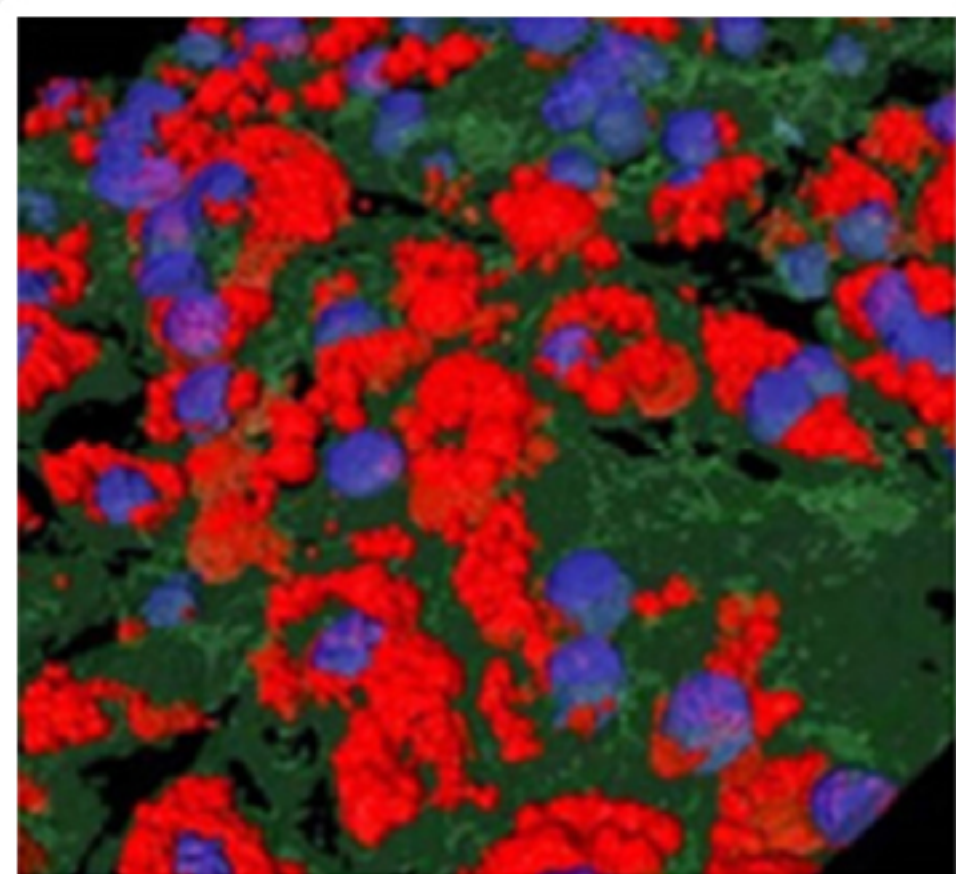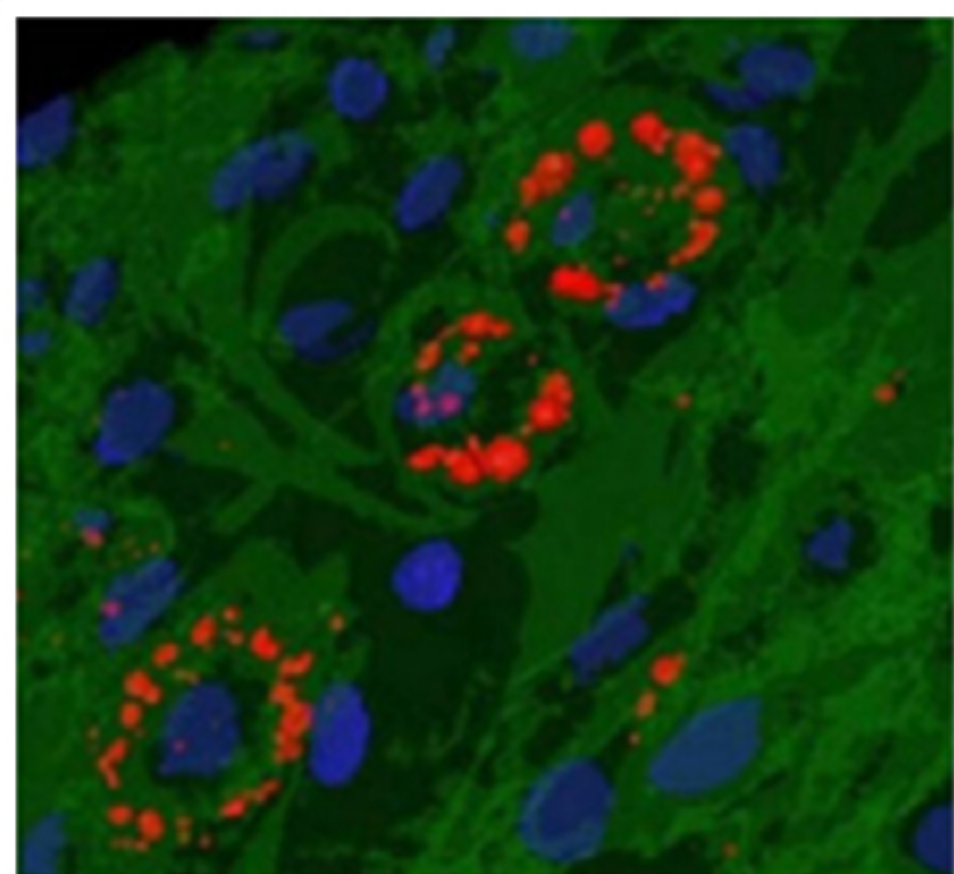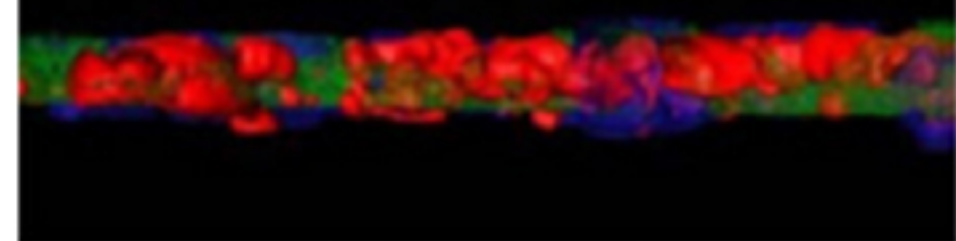


■ Fat cells

References) Sci Rep 2024:(31)

Funzione 2

Supporto a Collagene ed Elastina


Rispetto al solo utilizzo di filler a base di acido ialuronico, la mancanza di collagene ed elastina di supporto può indebolire l'elasticità e la durata del risultato. LEXYFILL VOLUME CREAM aiuta a migliorare questi aspetti

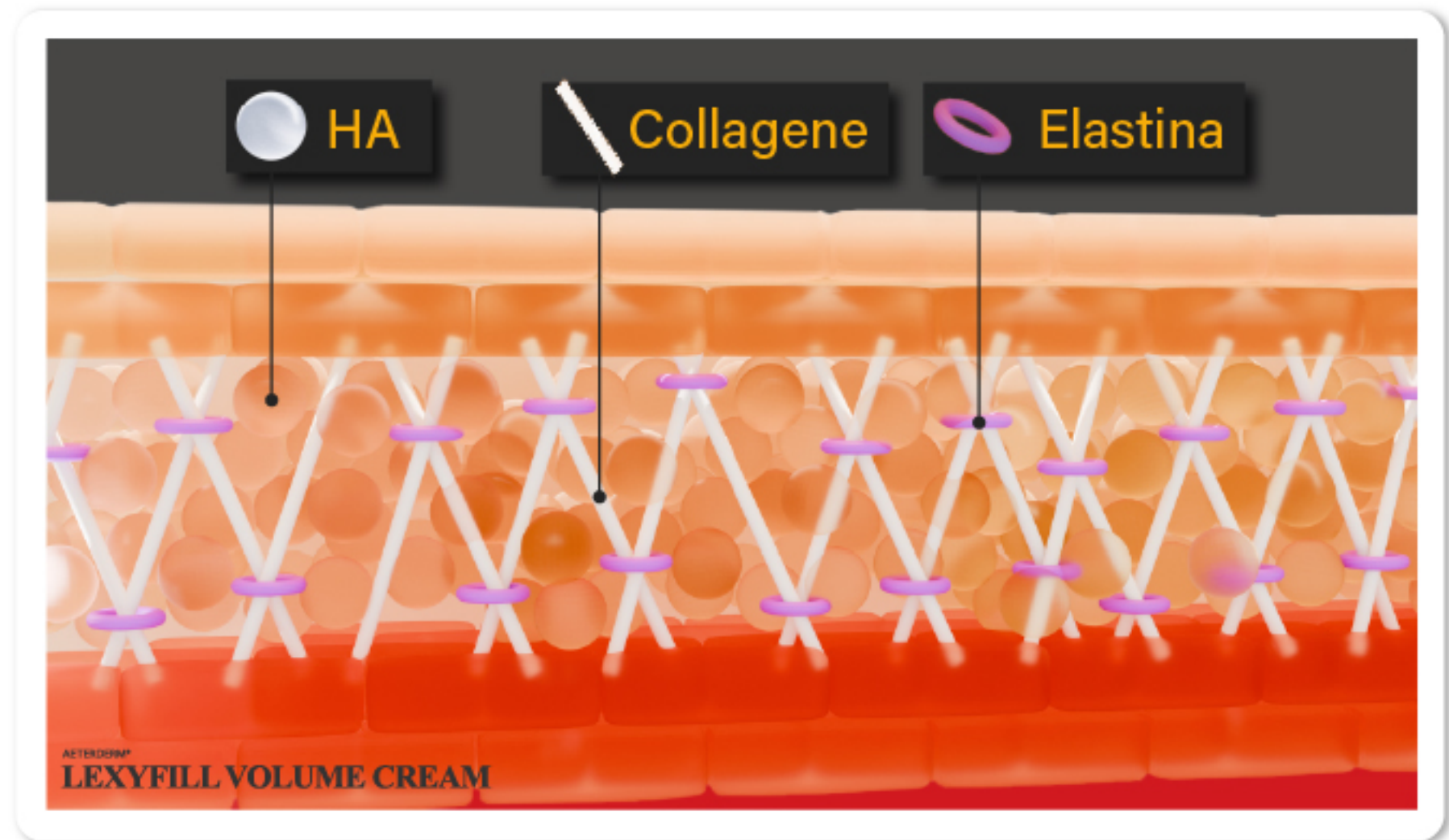


Struttura ordinaria del tessuto cutaneo

I tre componenti principali della pelle sono

- Acido ialuronico (HA)
- Collagene
- Elastina

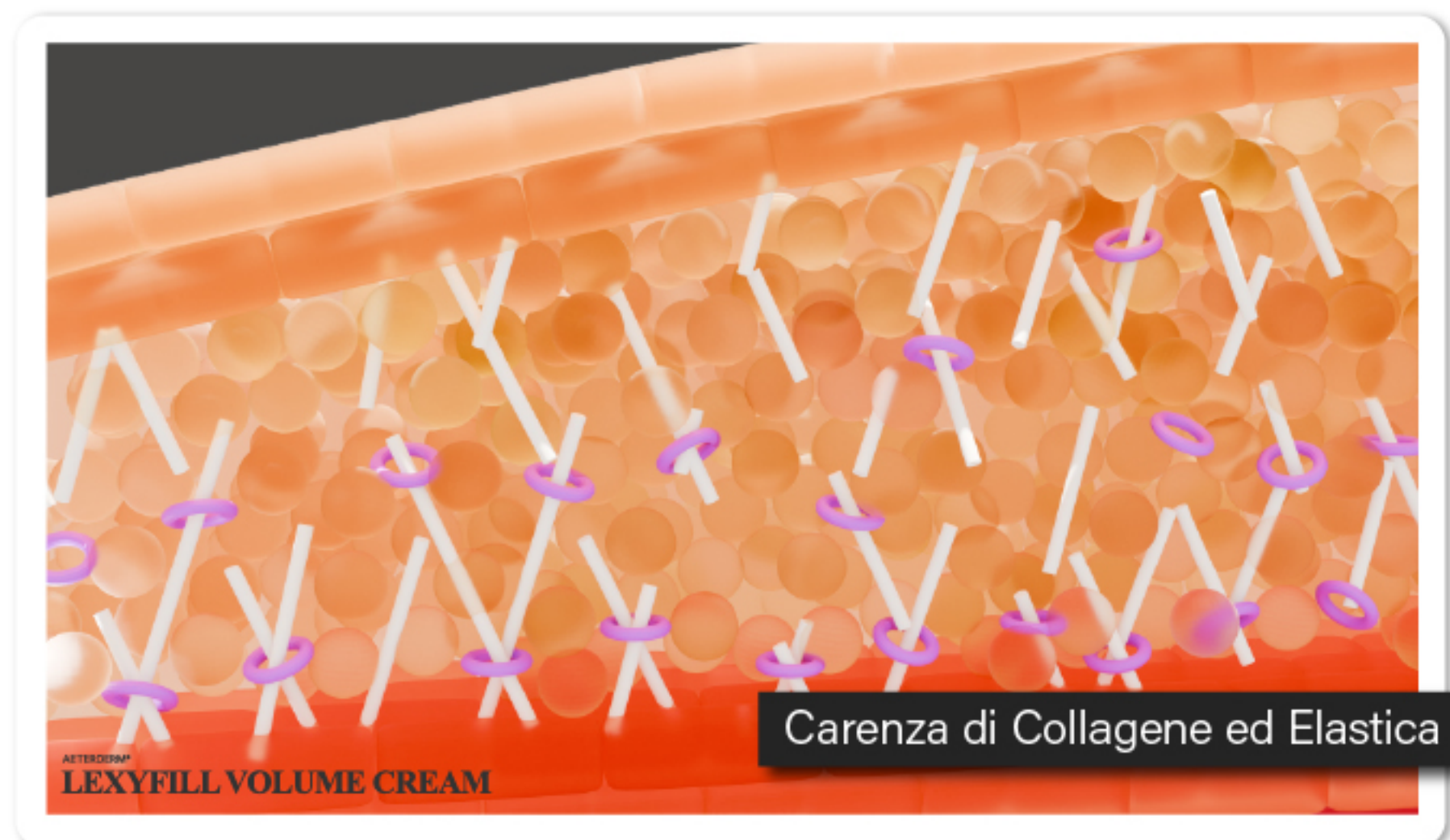

Integrazione di filler HA nella pelle

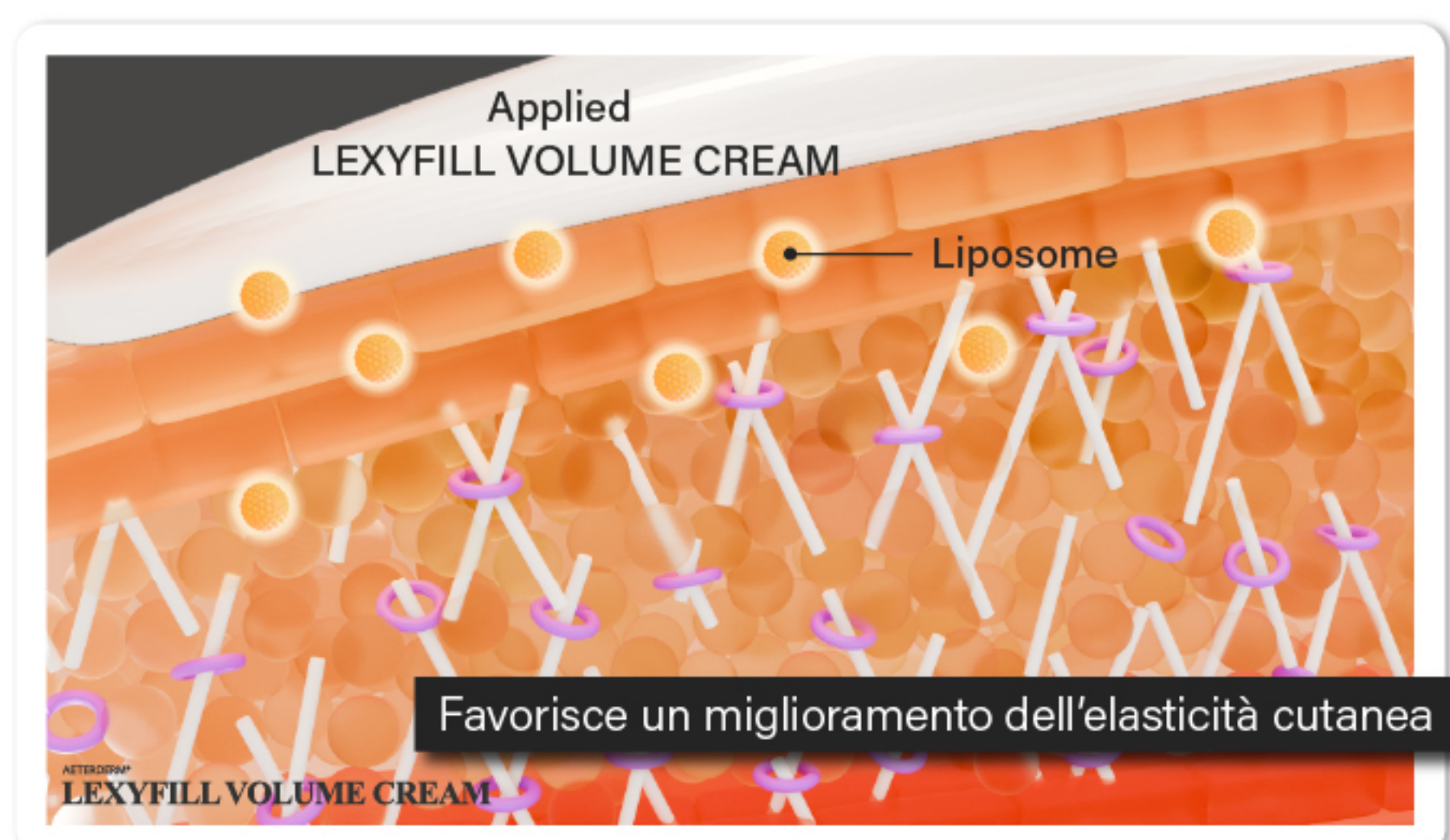

Supporto alla presenza di collagene ed elastina tramite


⦿ Struttura del Liposoma



Ingrediente attivo


Contiene l'ingrediente attivo all'interno di una struttura a doppio strato fosfolipidico che può attraversare facilmente le membrane biologiche autonomamente.

La struttura liposomiale permette agli ingredienti attivi di agire efficacemente sulla pelle

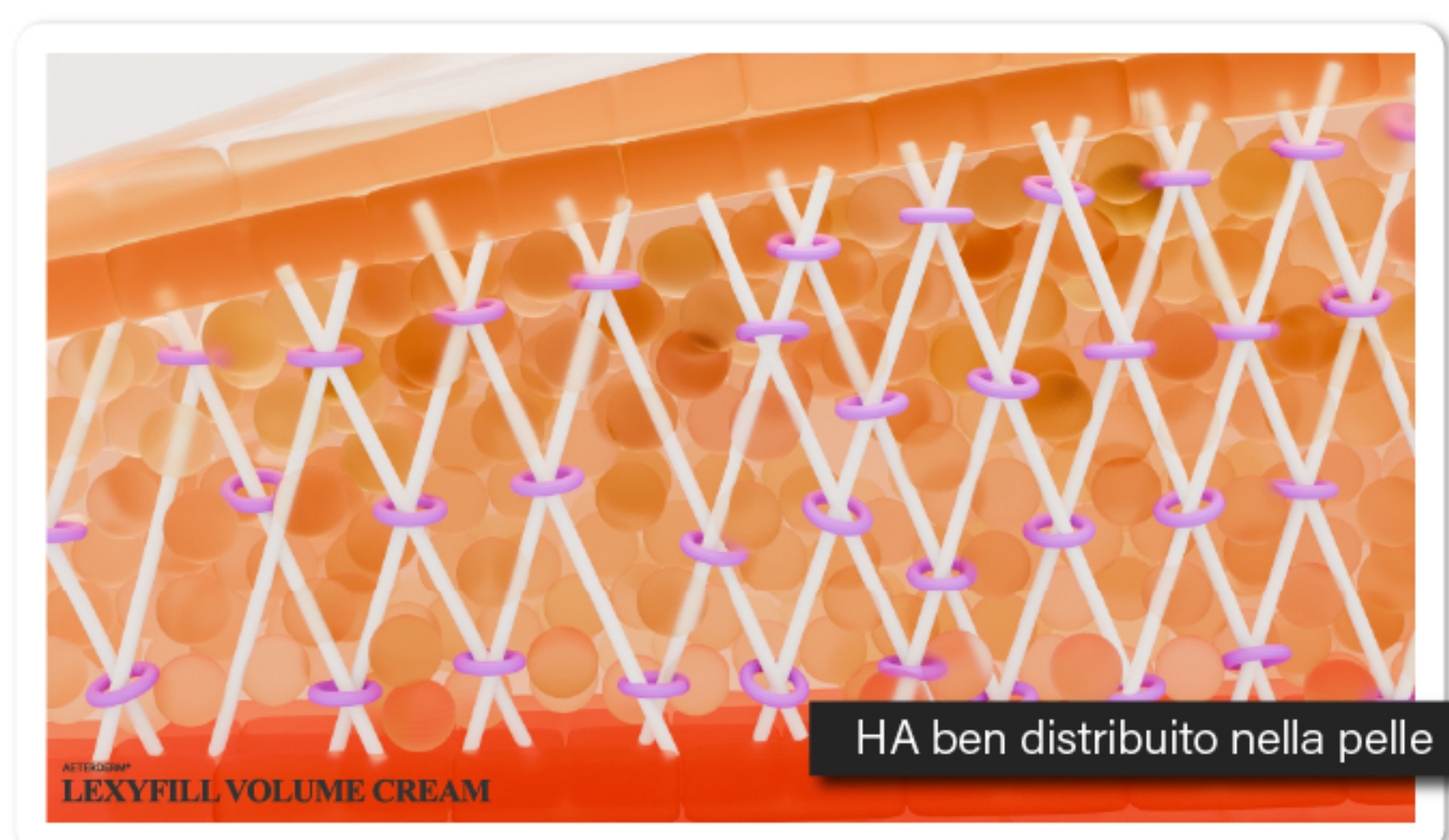

Pelle più soda ed elastica

Acido ialuronico ben distribuito nella pelle

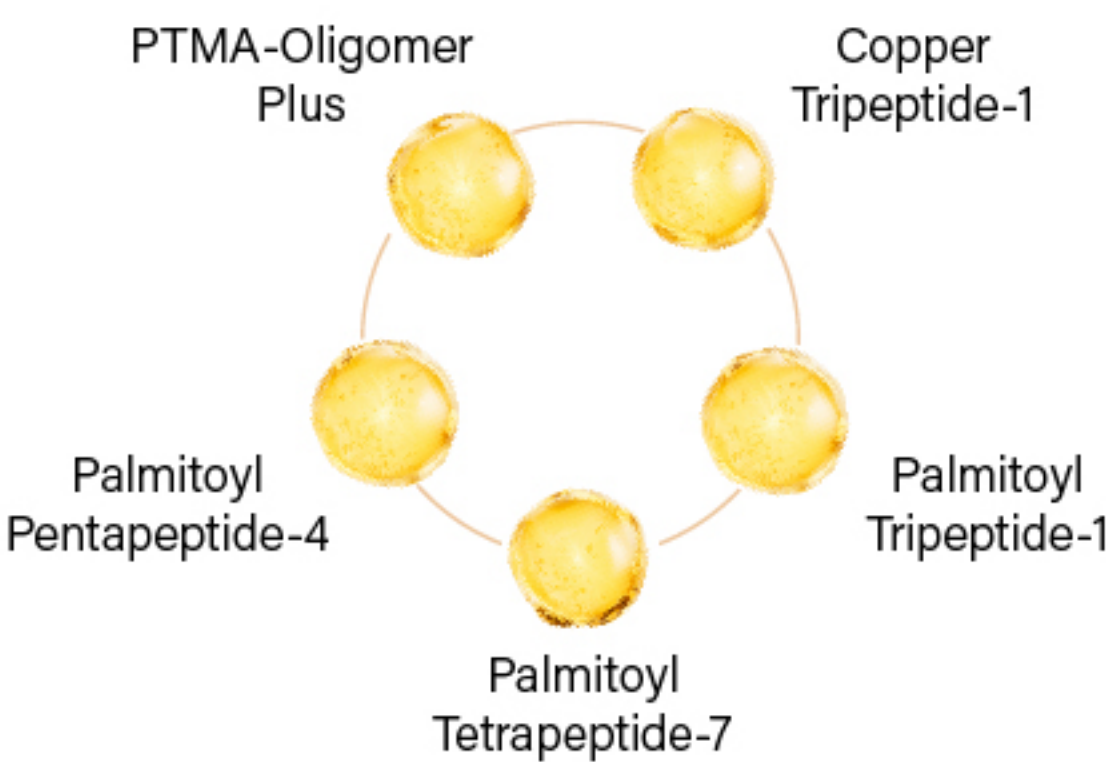

- ⦿ Supporto alla funzione di collagene ed elastina
- ⦿ Supporto ai processi di rinnovamento cutaneo

Funzione 3

Migliora l’aspetto delle smagliature



Dopo aver ricevuto il trattamento con filler per il corpo, possono comparire smagliature a causa dell'improvviso aumento di volume. **LEXYFILL VOLUME CREAM** è stata creata come formula per migliorare questi inestetismi

LEXYFILL VOLUME CREAM

Panthenol

Burro di Karité

Azione rigenerante

Migliora l’aspetto delle smagliature (striae rubrae)

LEXYFILL VOLUME CREAM

Estratto di corteccia di Magnolia

Copper Tripeptide-1

Acetylhexa peptide-8

Palmitoyl Tetrapeptide-7

Palmitoyl Pentapeptide-4

Supporto alla funzione della barriera cutanea

Aiuta a migliorare l’aspetto della pelle

Funzione 4

Idratante e Lenitiva per la pelle



Anche se la procedura viene eseguita utilizzando una cannula, la stimolazione dello strato dermico causa calore, evapora l'idratazione cutanea e la pelle secca perde facilmente elasticità, lasciando cicatrici da smagliature (Striae Distensae).

LEXYFILL VOLUME CREAM ha una formula efficace per prevenire questi Xerosi effetti collaterali.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Phyto-Oligo

Allantoin

7 tipi di molecole di acido ialuronico

Ceracare AC 45 complex

Idratazione profonda

Aiuta a mantenere l’idratazione della pelle

Fill Your Luxury Beauty



AETERDERM®

LEXYFILL

[COMPOSIZIONE]

Acido ialuronico reticolato	24 mg / mL
Soluzione salina tamponata con fosfato	q.s.

[CONFEZIONAMENTO]

60cc x 1 Flacone / scatola

[CONSERVAZIONE]

Da conservare a temperatura ambiente (1-30°C) lontano dalla luce solare diretta.

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM

[INGREDIENTI]

Acqua, Poliisobutene Idrogenato, Glicole Butilenico, Glicerina, Poli(C6-14 Olefina) Idrogenata, Alcol Cetearilico, Pentaeritryl Tetraisostearato, 1,2-Esenediolo, Niacinamide, Gliceril Stearato SE, Burro di Butyrospermum Parkii (Shea), Vinil Dimeticone, Panthenolo, Alcoli C14-22, Ceramide NP, Alchil Glucoside C12-20, Glicole Dipropilenico, Carbomer, Arginina, Gomma di Xanthan, Gliceril Poliacrilato, Estratto di Corteccia di Magnolia Officinalis, Etilsilglice-rina, Allantoina, Sodio Stearoil Glutammato, Lecitina Idrogenata, Adenosina, Gliceril Stearato, EDTA Disodico, Ialuronato di Sodio, Colesterolo, Ceramide NS, Ceramide AS, Ceramide AP, Estratto di Foglie di Aloe Barbadensis, Estratto di Radice di Althaea Rosea, Estratto di Radice di Anemarrhena Asphodeloides, Glucosio, Estratto di Caulerpa Lentillifera, Estratto di Codium Fragile, Idrossipropiltrimonio Ialuronato, Tocoferolo, Acido Ialuronico Idrolizzato, Sodio Acetilato Ialuronato, Acido Ialuronico, Polimero Incrociato di Ialuronato di Sodio, Rame Tripeptide-1, Acetil Esapeptide-8, Palmitoyl Pentapeptide-4, Ialuronato di Potassio, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Oligopeptide-1, Ceramide EOP.

[CONFEZIONEAMENTO]

150mL / SCATOLA