

AETERDERM®

LEXYFILL

Fill Your Luxury Beauty

&

LEXYFILL VOLUME CREAM






KS.

**Наполните свой стиль
Наполните свою роскошную красоту**

ОСОБЕННОСТЬ

Более низкая вязкость ? Но более высока эластичность !

Даже не смешивая солевой раствор, вы можете легко извлечь его из флакона.

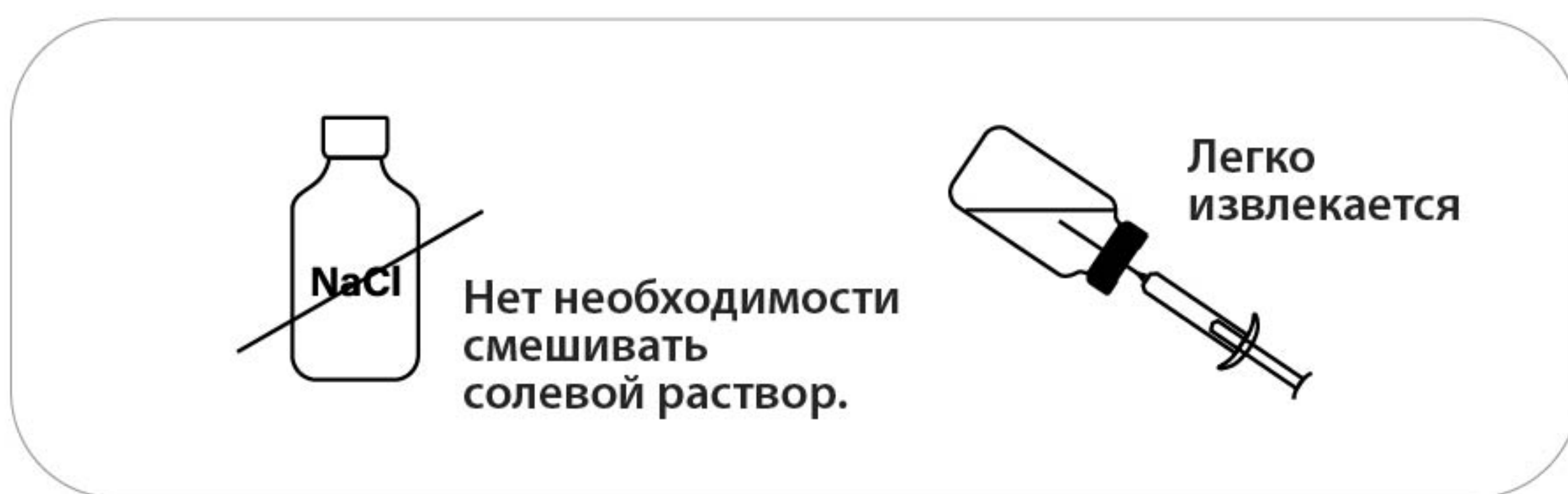

Таким образом, нет потери объема или деформации, вызванной солевым раствором.
И это придаст вам удивительную эластичность.



В результате вы можете проводить более сложные процедуры. ✂

Мы создали филлер для тела
обладающий этими удивительными
свойствами благодаря длительному
времени сшивания при низкой температуре

Для точного моделирования тела




Почему LEXYFILL самый безопасный? Почему LEXYFILL обладает высокой эластичностью?


Другие филлеры для тела



Используют только крупные молекулы ГК.

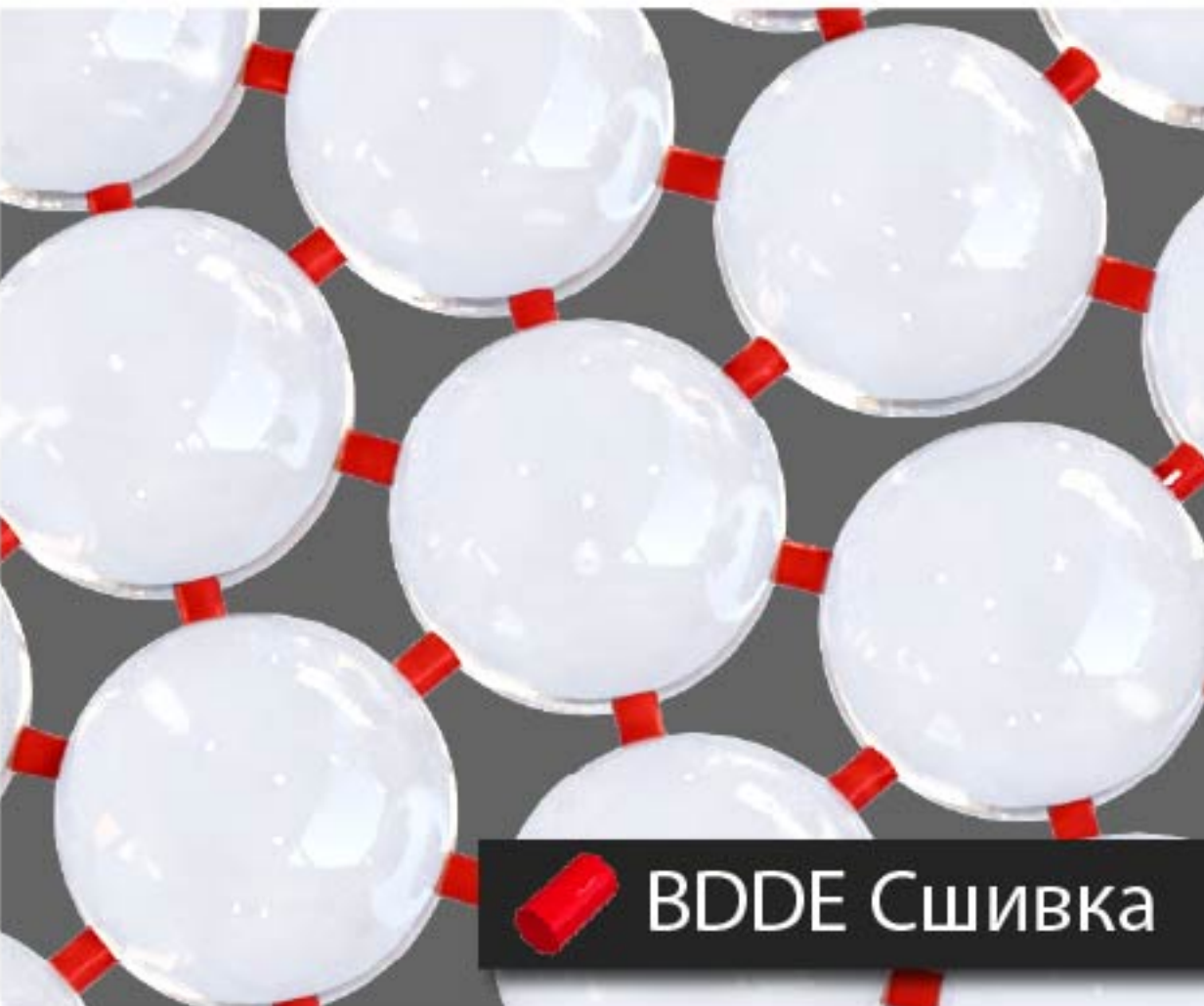

Было использовано большое количество **BDDE**, что может вызвать серьезные побочные эффекты от применения филлеров. Кроме того, эти филлеры слишком трудно извлекать из флакона. Поэтому их следует смешать с солевым раствором и встряхнуть для перемешивания..

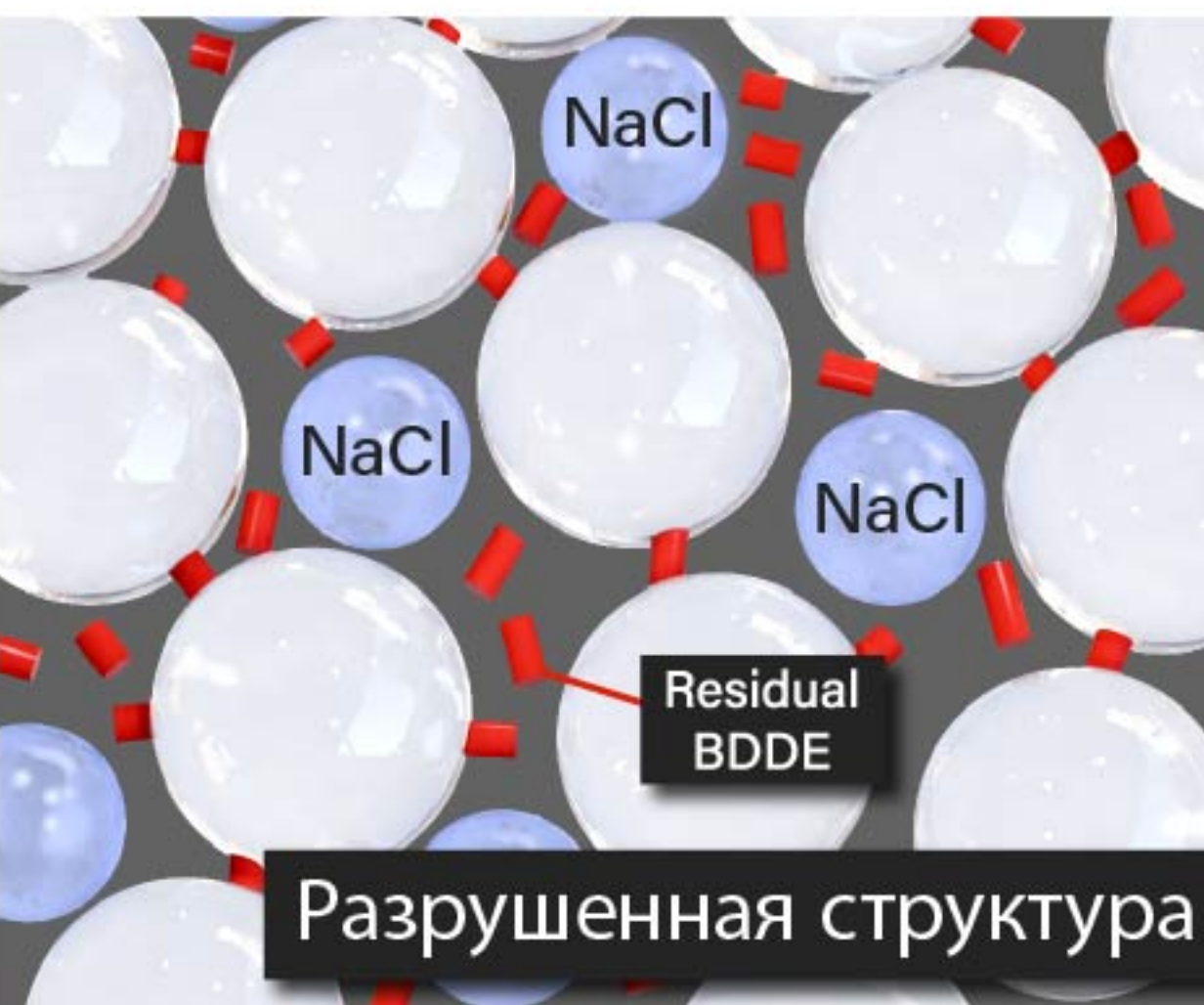

Если вы добавите солевой раствор и встряхнете его для перемешивания, структура сшивки ГК будет полностью нарушена. Это приведет к увеличению остаточного BDDE и серьезным побочным эффектам и шоку.


AETERDERM® **LEXYFILL** Филлер для тела



Между ними были размещены небольшие молекулы гиалуроновой кислоты. Таким образом, она обладает более высокой влажностью и эластичностью.



Благодаря такой структуре ГК, перекрестное сшивание может быть осуществлено с использованием очень малых количеств **BDDE**, что значительно снижает вероятность побочных эффектов.

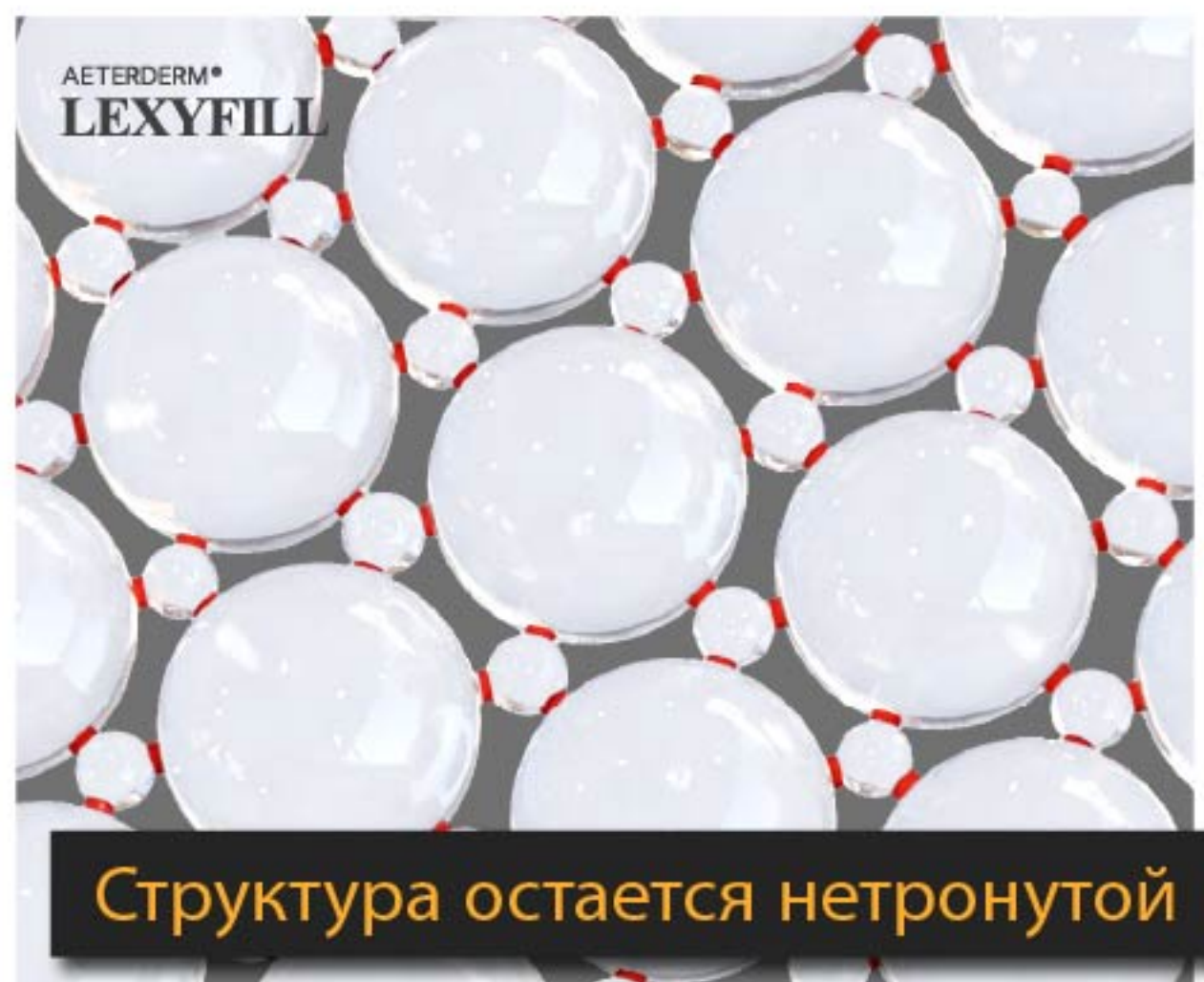

LEXYFILL можно легко извлечь с помощью шприца, не смешивая с солевым раствором, поэтому его можно вводить вместе с не поврежденной структурой ГК.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Гиалуроновая кислота

Двухфазная сшитая гиалуроновая кислота, подходящая для увеличения объема тела



Процедура повторялась 14 раз, чтобы удалить 3 типа токсинов. Полностью предотвращает побочные эффекты.

- ⊙ Остаточный BDDE
- ⊙ эндотоксин
- ⊙ белок

Увеличивает эластичность и удержание эффекта за счет смешивания крупных и мелких молекул ГК



Концентрация ГК	24 mg / mL
Модификация (Степень модификации, mol.%)	3.85 %
Тип геля	Двухфазный
Модуль хранения (G')	100 - 250 Pa
Сила впрыска (N) (30G UTW)	20 N

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тест на вязкость и эластичность



Начальная форма



После 1 часа



После 6 часа



После 12 часа



После 24 часа

References) Sci Rep 2024;(5)





AETERDERM®



LEXYFILL

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процедура увеличения груди

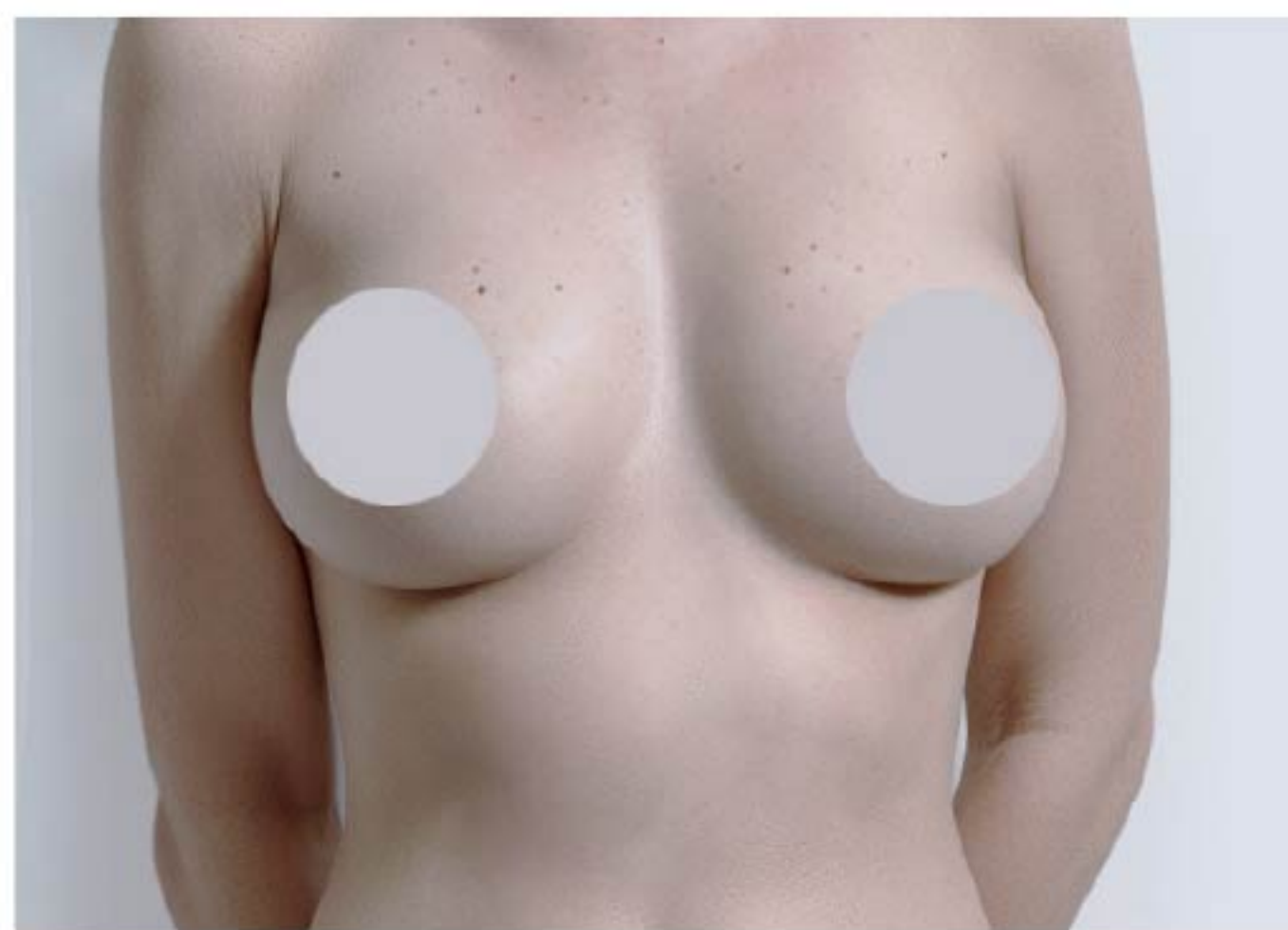
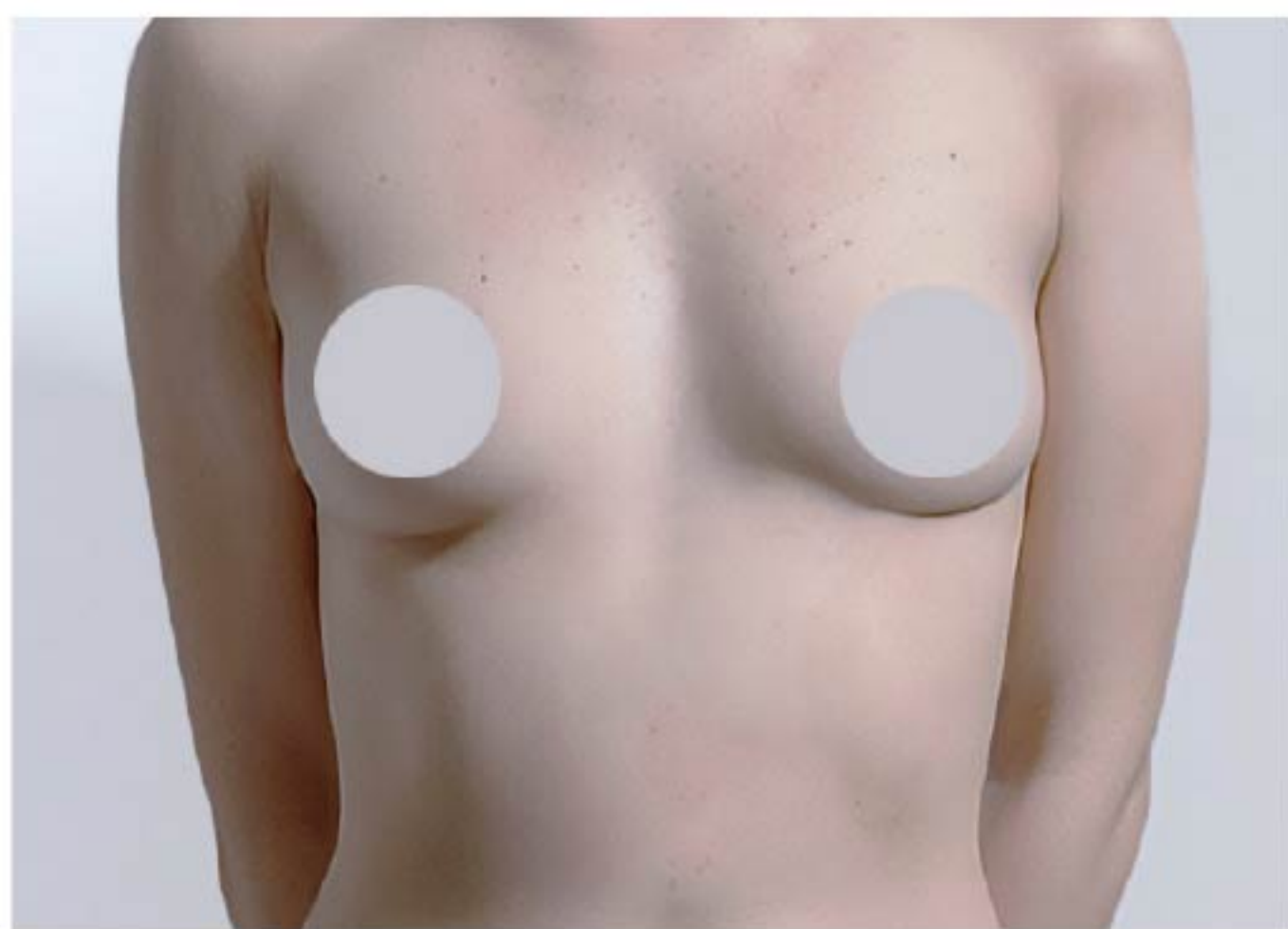


References) Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;11:3-13

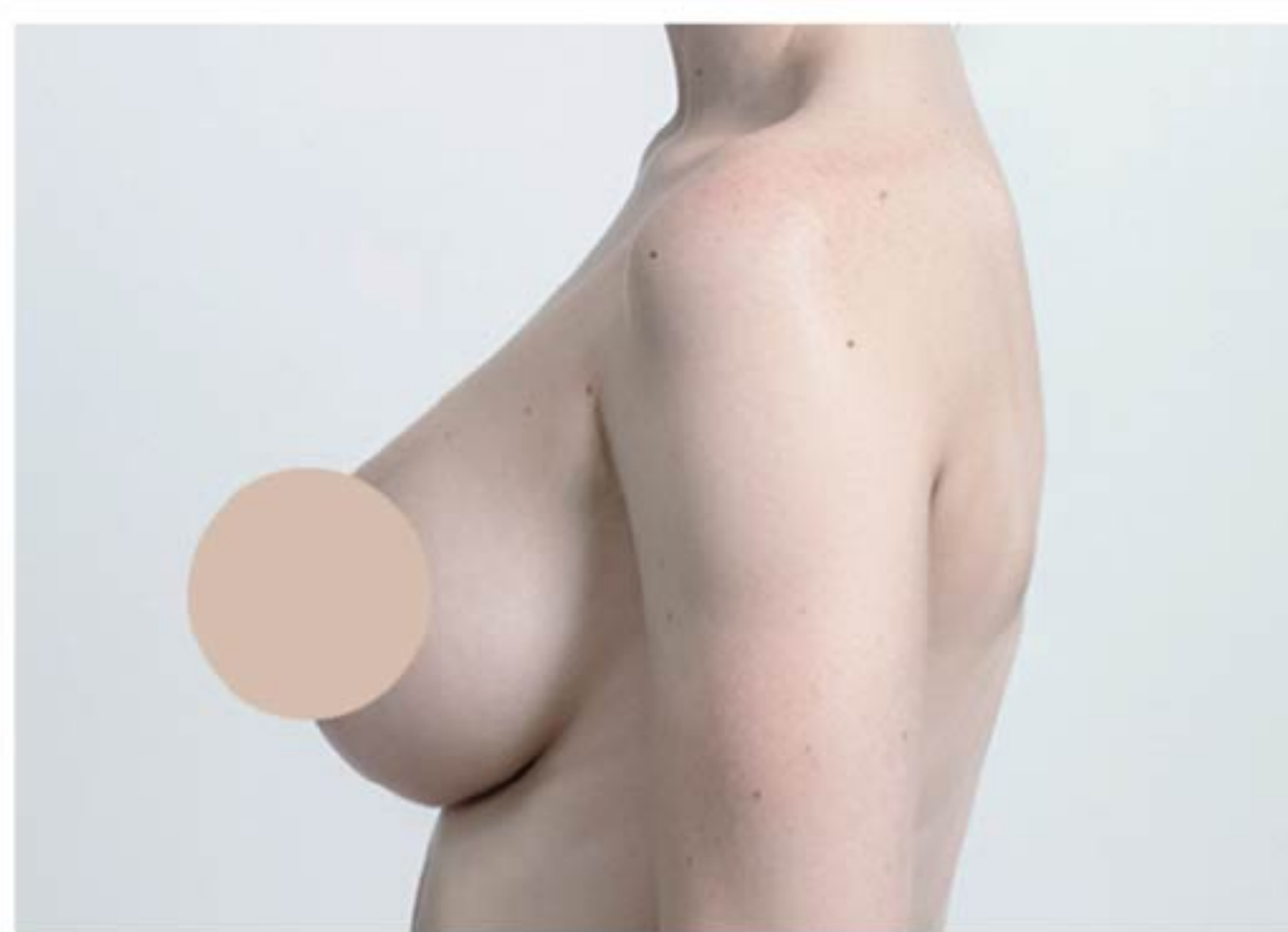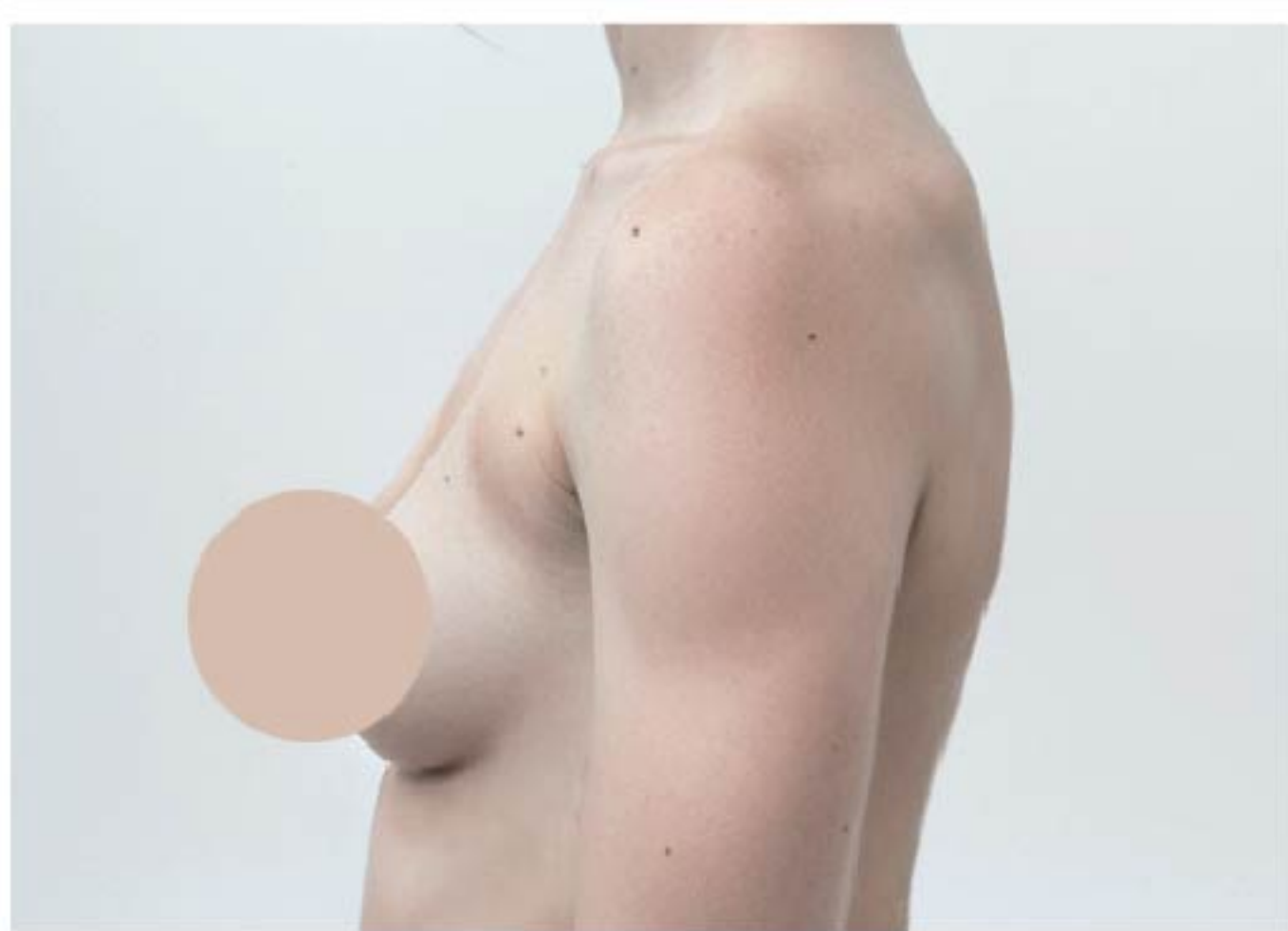

References) Augmentation of breasts by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;17:10-15

Процедура увеличения ягодиц

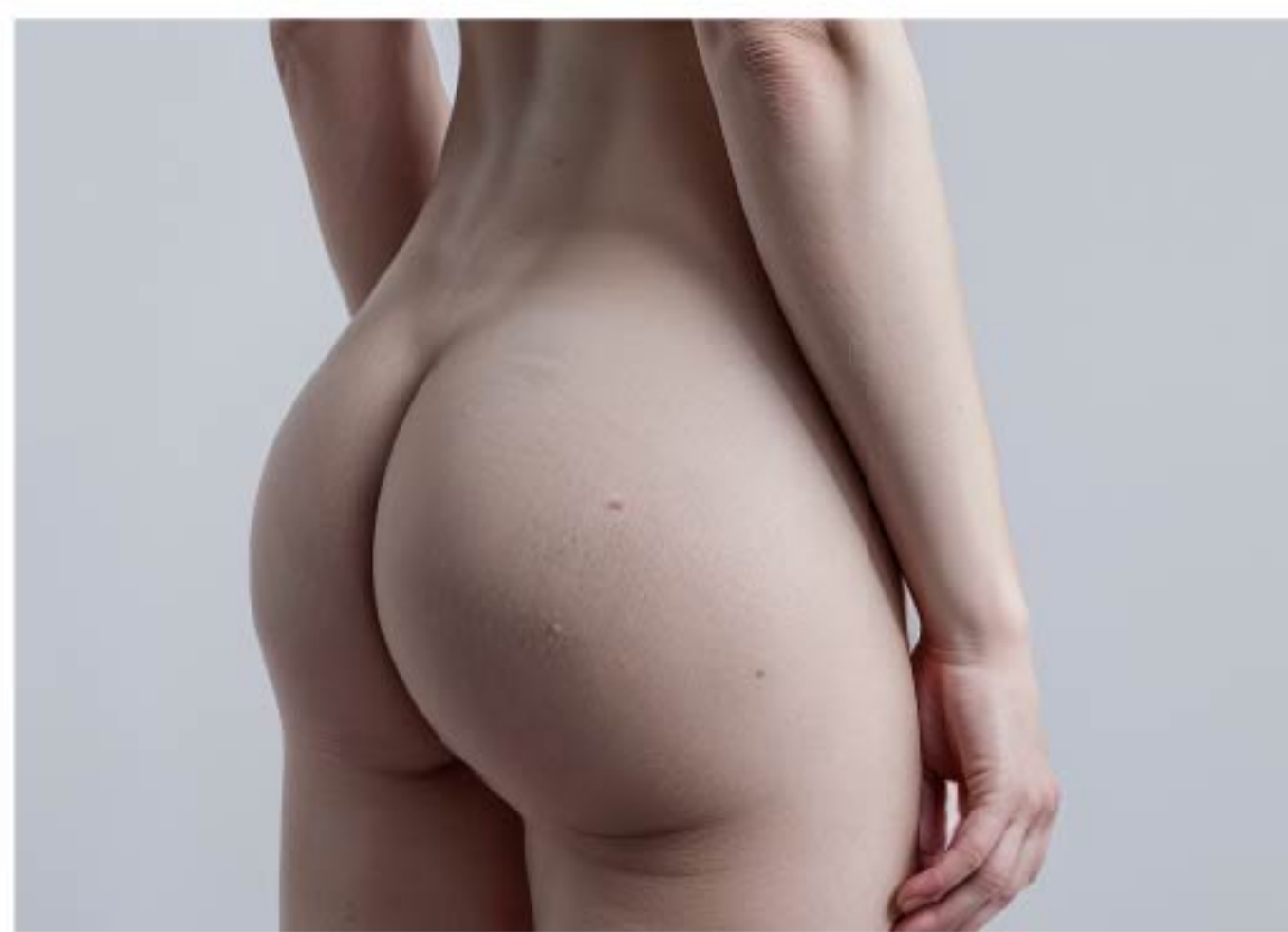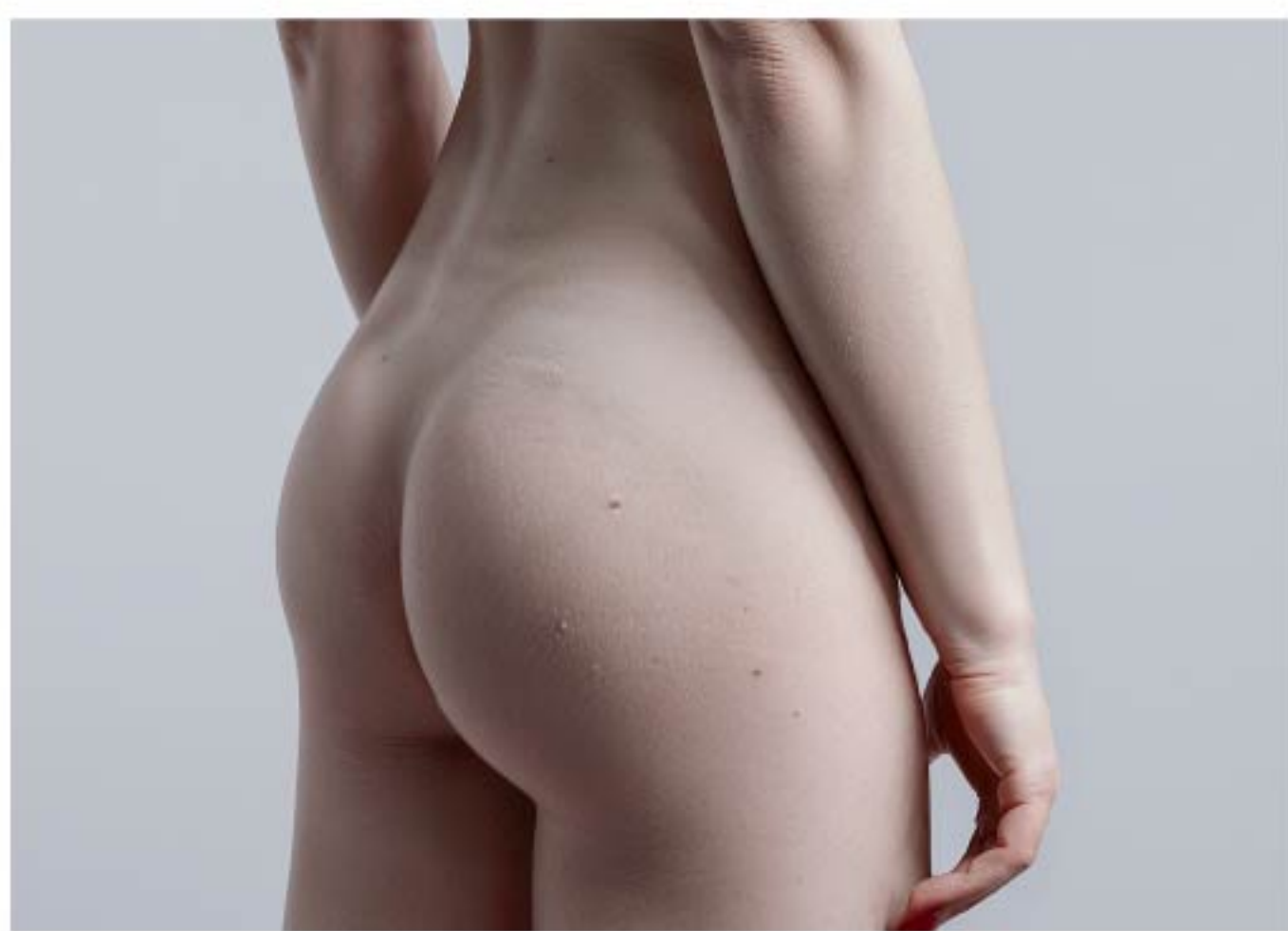


References) Augmentation of buttocks by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2022;21:35-19

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

Зоны лечения


Передняя часть тела

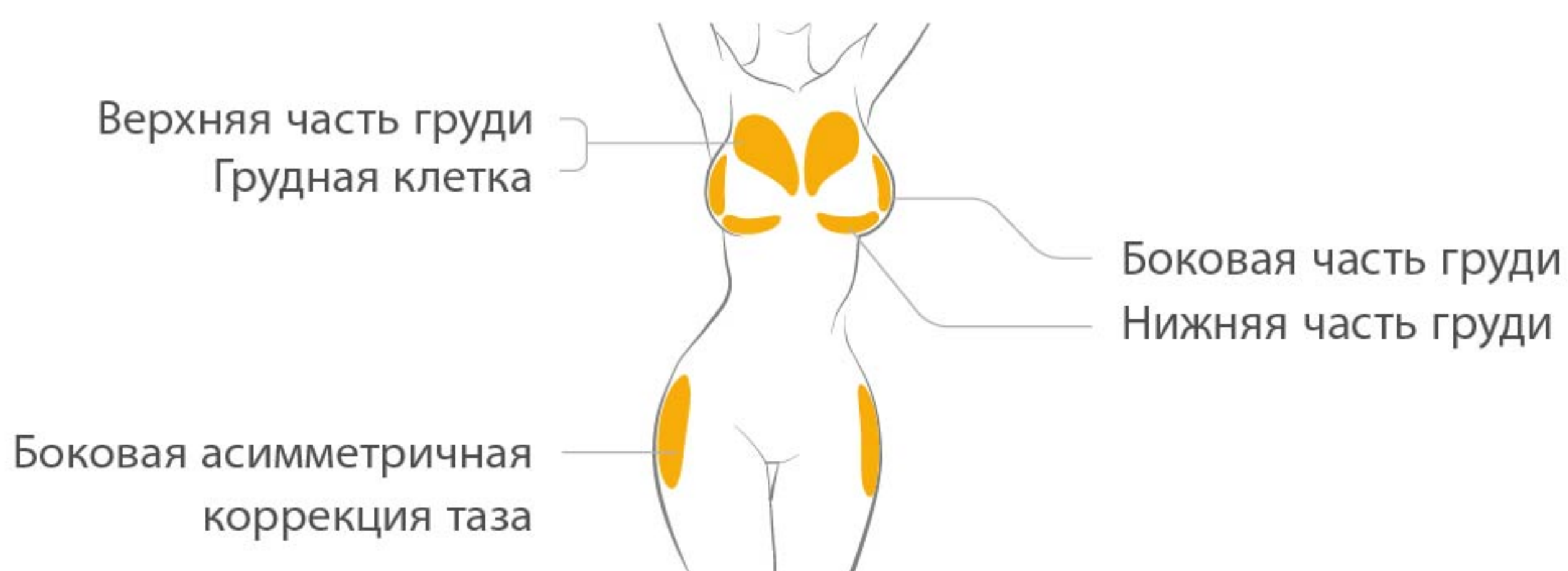

Вид сбоку




Вид сзади

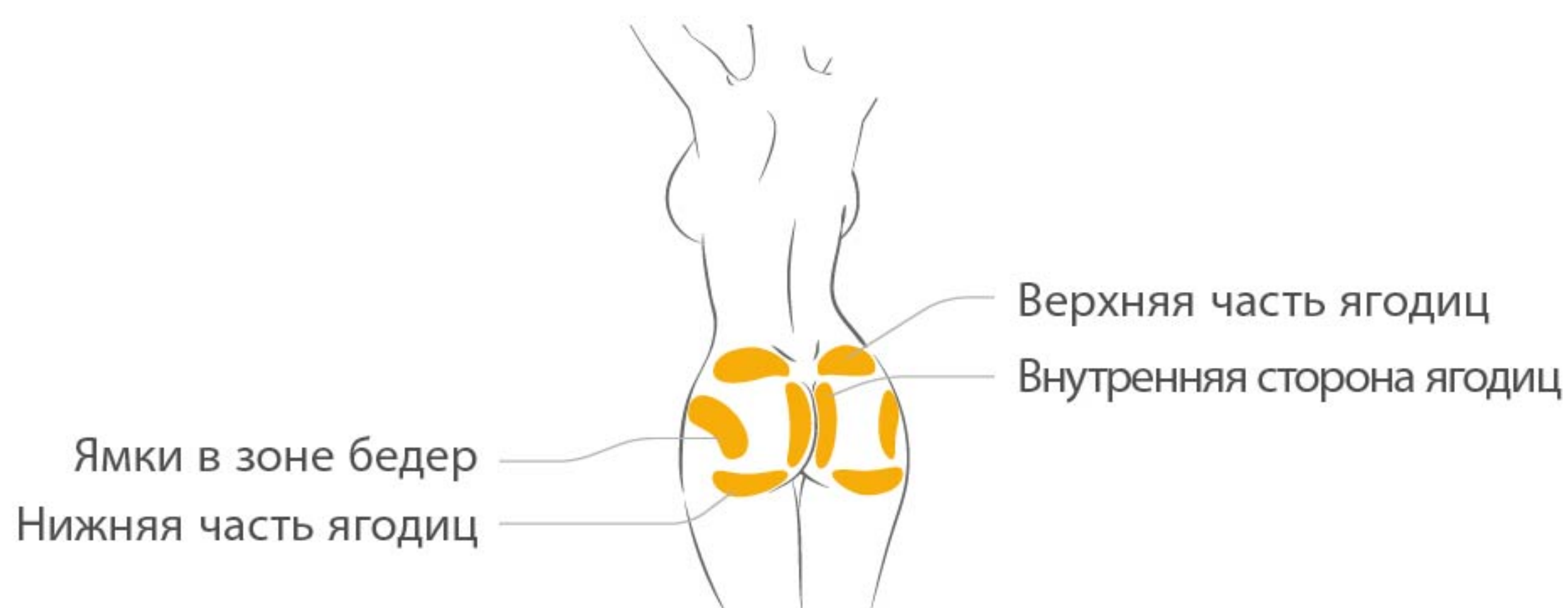

✳ Если у пациента выраженная дряблость кожи или выраженный птоз ягодиц, настоятельно рекомендуется не вводить филлер с гиалуроновой кислотой в нижнюю часть ягодиц.

Типичные места инъекций

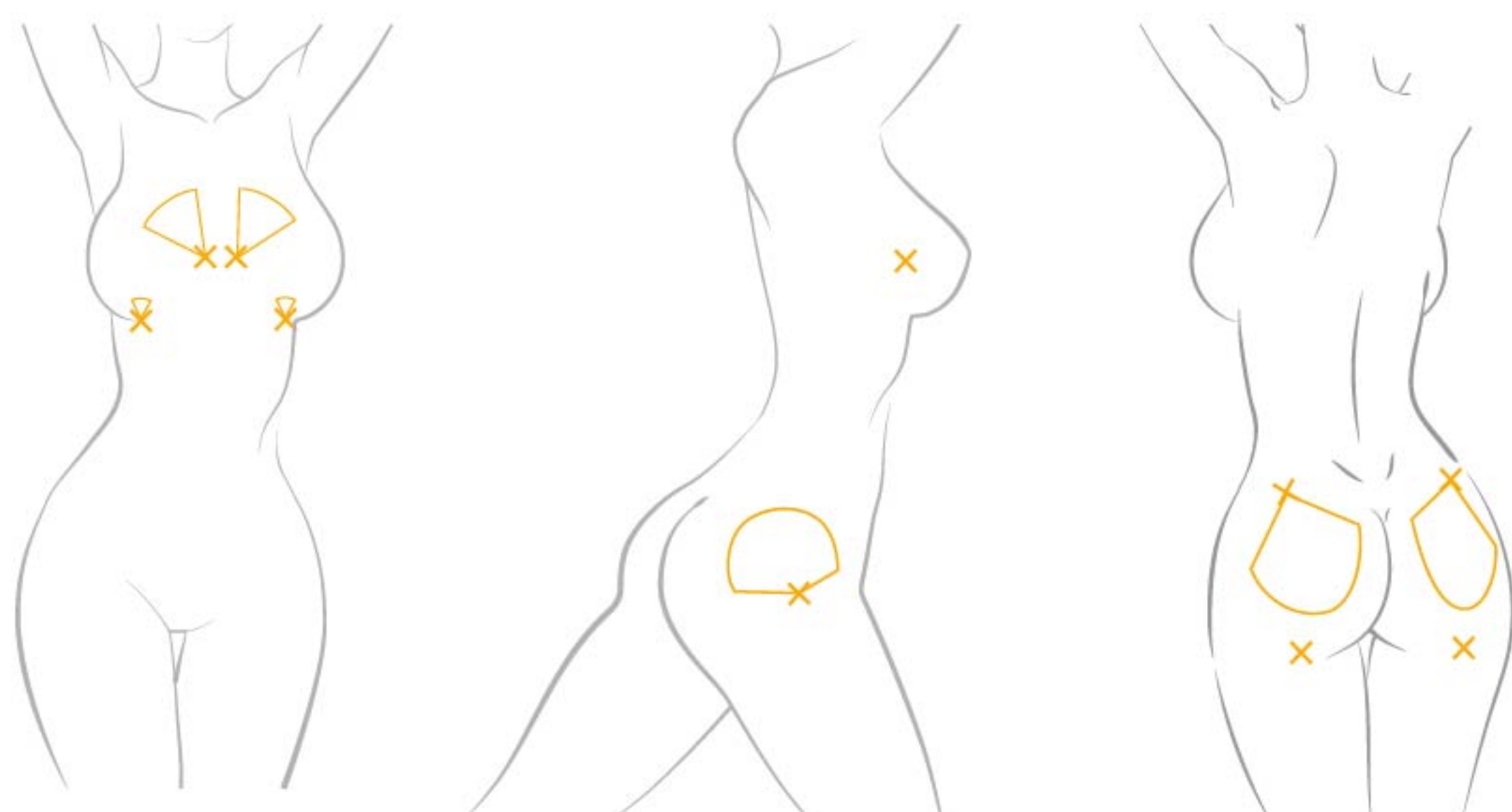

Рекомендуемая канюля

- Увеличение груди — рекомендуется микроканюля 14G 90 мм.
- Увеличение верхней части груди — рекомендуется микроканюля 20G 70 мм.
- Увеличение ягодиц — рекомендуется микроканюли 18G 70 мм. или 18G 90мм.

Процесс лечения

- Проверьте, находится ли пациент в подходящем состоянии для проведения процедуры.
- Промойте обрабатываемую область водой с мылом.
- Протрите обрабатываемую область спиртом или другим антисептиком.
- Введите филлер LEXYFILL HA body в подкожную клетчатку в области обработки с помощью тонкостенной иглы или канюли.
- После завершения инъекции обработанный участок следует аккуратно помассировать, чтобы он соответствовал контуру окружающих тканей.

※ Подробные инструкции по применению приведены в руководстве, прилагаемом к изделию.

Меры предосторожности после лечения

- Несколько раз в день прикладывайте пакеты со льдом к обработанному участку на 15-20 минут, чтобы уменьшить отеки и синяки.
- Избегайте надавливания на обработанную область в течение как минимум 24 часов после процедуры
- Избегайте в течение как минимум 48 часов после процедуры.
 - Интенсивная физическая активность или физические упражнения
 - Употребление алкоголя и курения
 - Горячие ванны, сауны и паровые бани

※ Подробные меры предосторожности приведены в руководстве, прилагаемом к изделию.

Добавьте объём к объёму LEXYFILL VOLUME CREAM

Мы создали ^{AETERDERM®} **LEXYFILL VOLUME CREAM**

который отлично подходит к ^{AETERDERM®} **LEXYFILL**

разработав оптимальную формулу для максимального эффекта от процедуры и предотвращения побочных эффектов филлера.

■ Функция 1

Увеличивает объем вашего тела за счет пролиферации жировых клеток с помощью VOLUFILINE

■ Функция 2

Делает кожу более упругой и эластичной благодаря биосинтезу коллагена и эластина

■ Функция 3

Профилактика и заживление растяжек

■ Функция 4

Увлажняет и успокаивает кожу



Аккуратно наносите этот крем на область применения LEXYFILL дважды в день на 10-20 минут.

Он усиливает эффект от применения филлера для тела, сохраняет объем в течение длительного времени и создает более естественную форму за счет естественной пролиферации жировых клеток.

AETERDERM®


LEXYFILL VOLUME CREAM

Fill Your Luxury Beauty




Пролиферация жировых клеток с помощью VOLUFILINE™

Он содержит 50,000 частей на миллион VOLUFILINE, запатентованного на международном уровне сырья, которое было клинически протестировано на пролиферацию жировых клеток.

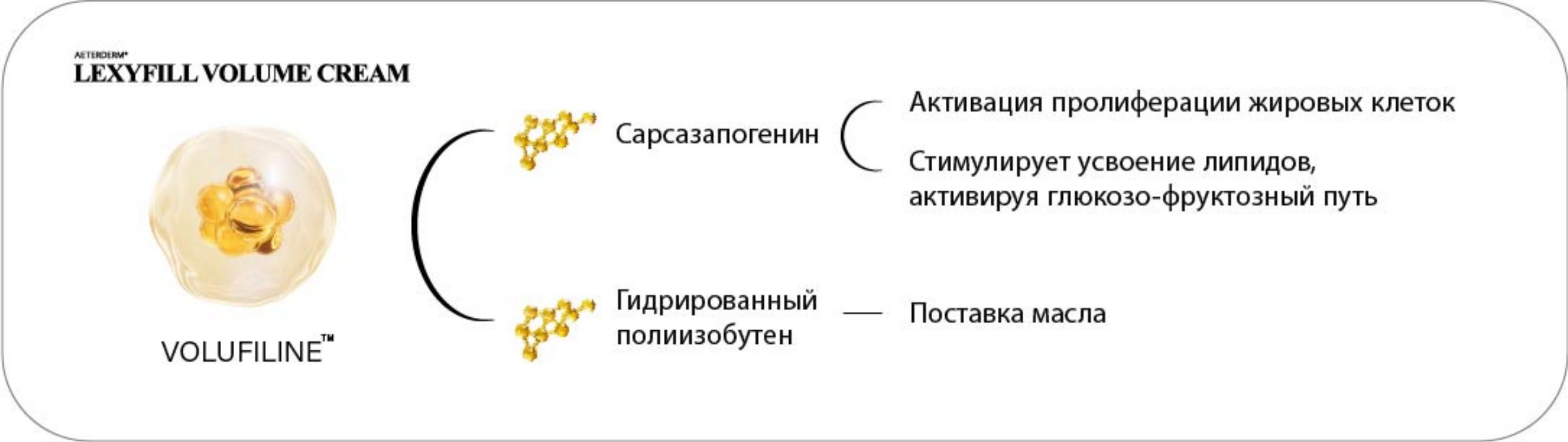


Клинические исследования VOLUFILINE™

T1 Скорость увеличения количества жировых клеток с помощью VOLUFILINE

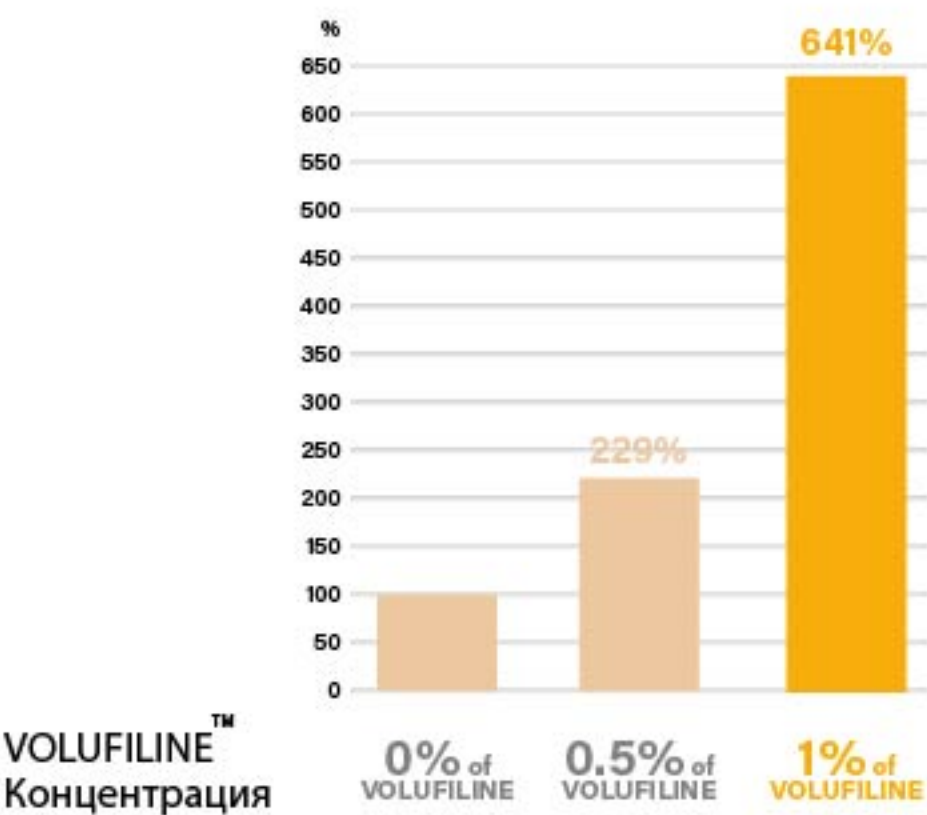


T2 Скорость увеличения объема клеток с помощью VOLUFILINE

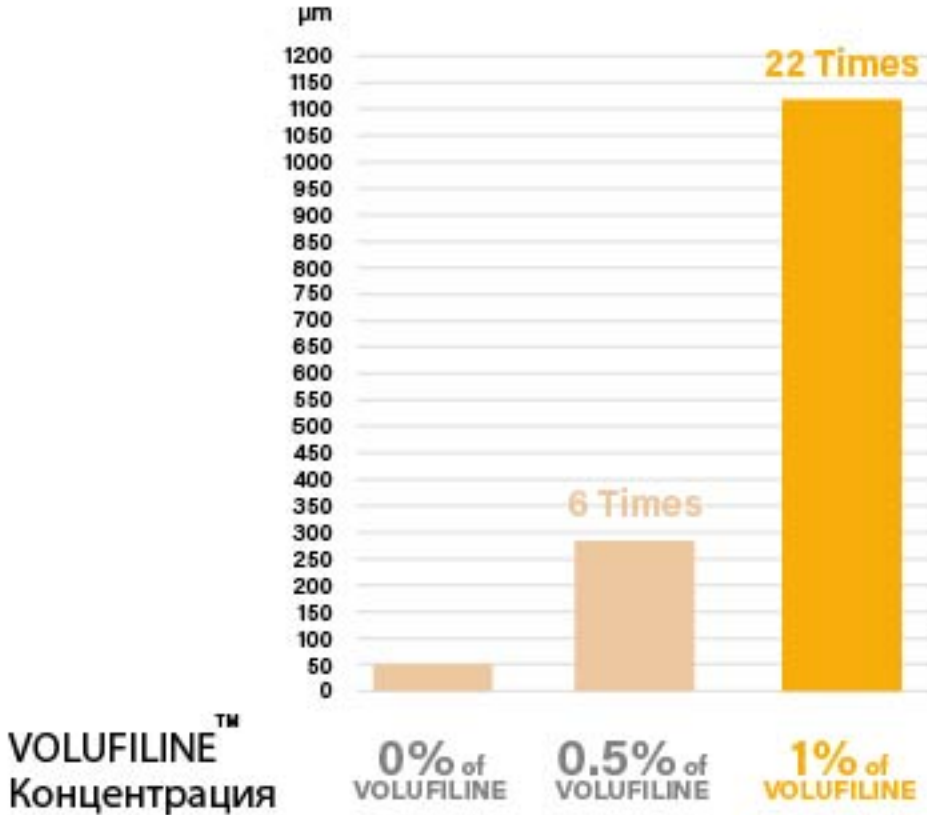

References) Sci Rep 2024;(22)


T1 Микроскопическая фотография жировых клеток с VOLUFILINE

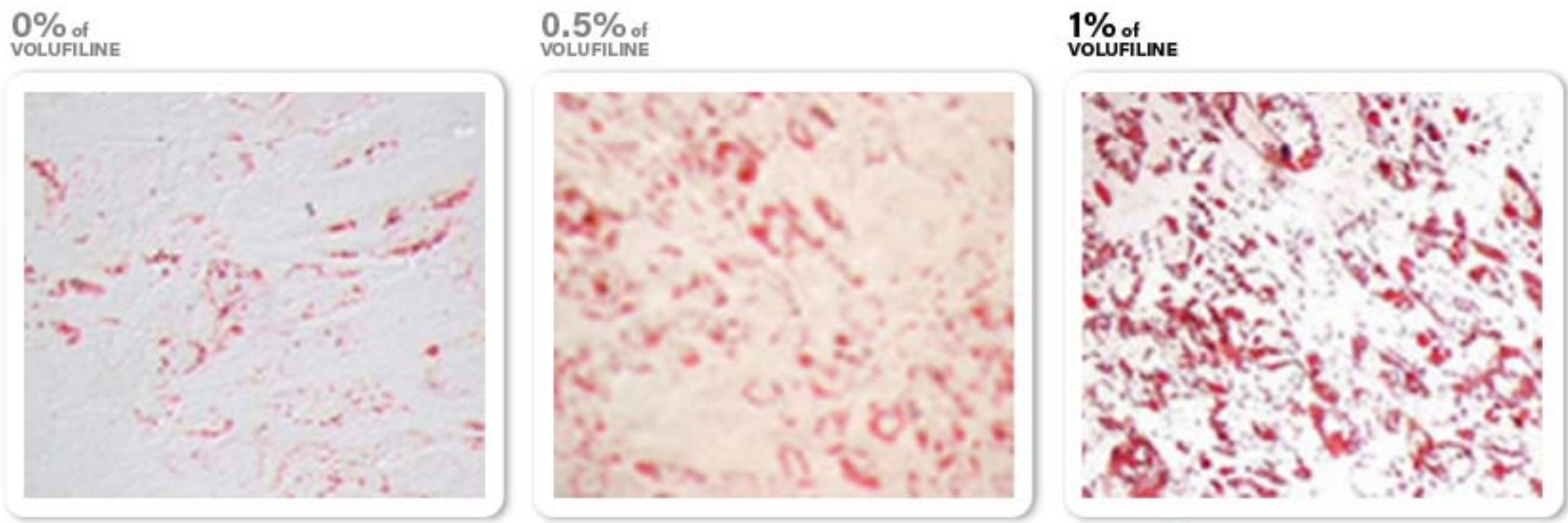



Жировые клетки отмечены красным

References) Sci Rep 2024;(27)

T2 MPT-снимок жировых клеток с VOLUFILINE

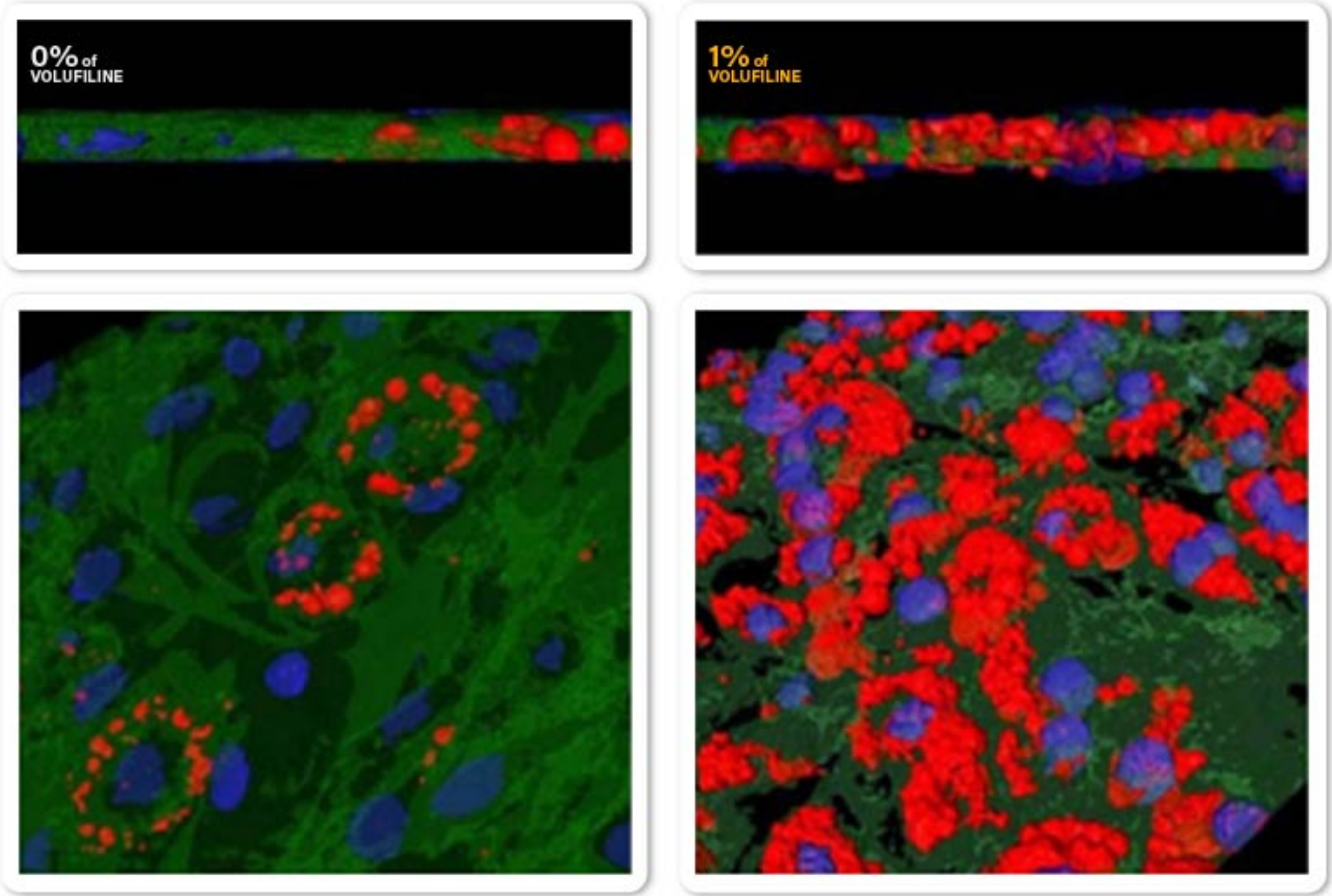

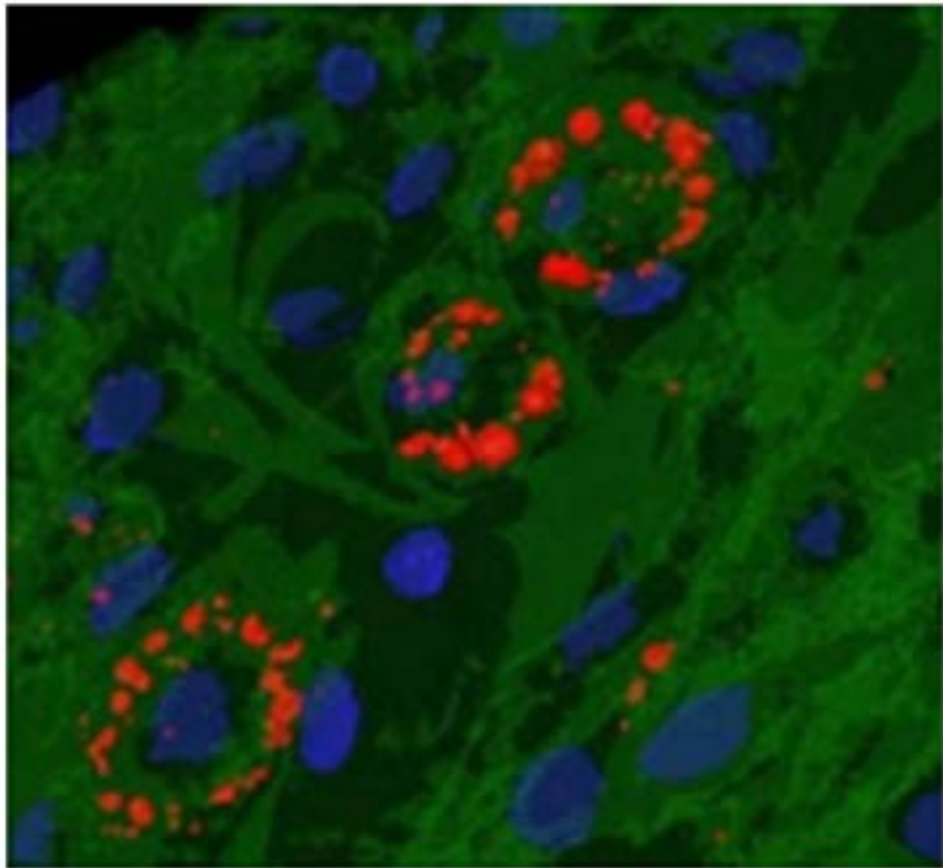

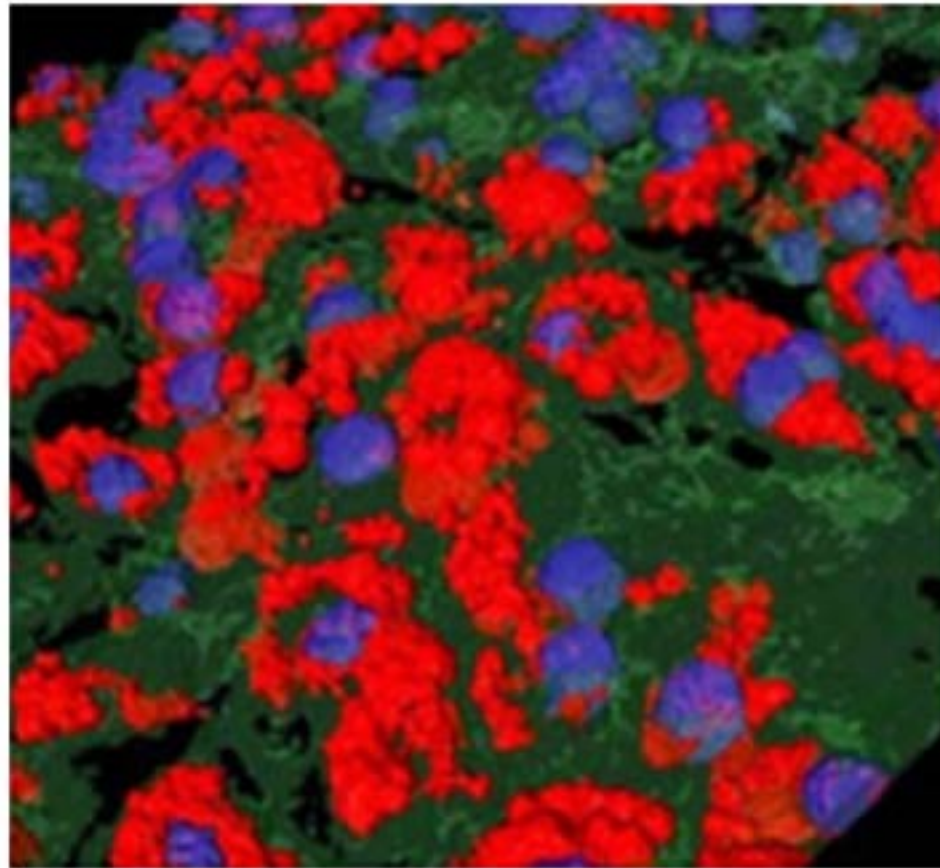


Жировые клетки

References) Sci Rep 2024;(31)


Биосинтез коллагена и эластина

По сравнению с гиалуроновой кислотой, заполняемой с помощью филлера, коллагена и эластина недостаточно для поддержания эластичности, поэтому они могут быть слабыми. LEXYFILL VOLUME CREAM в корне решает эти проблемы с эластичностью.

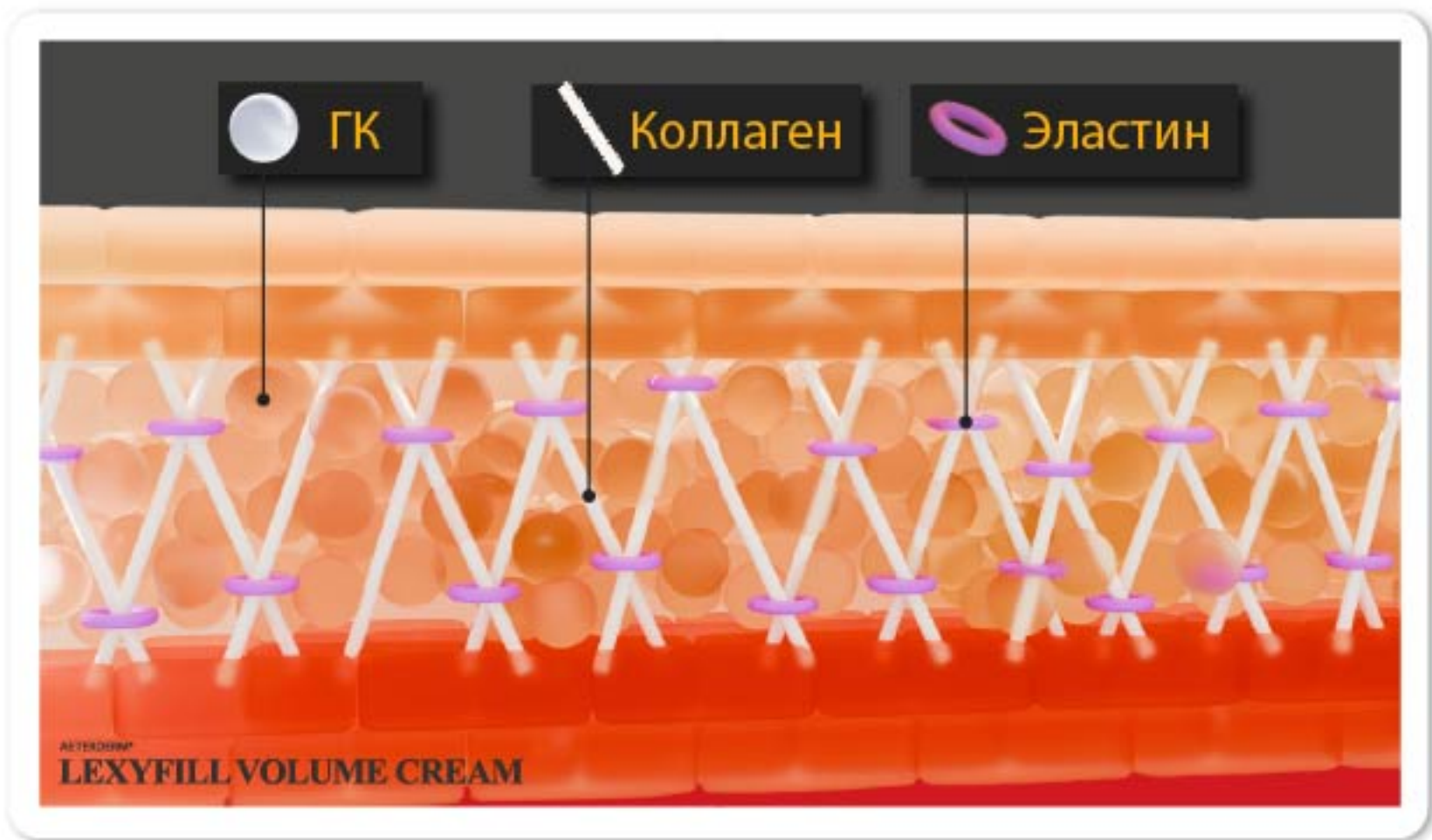

Обычная структура кожной ткани

Три основных компонента кожи
- Гиалуроновая кислота
- Коллаген
- Эластин

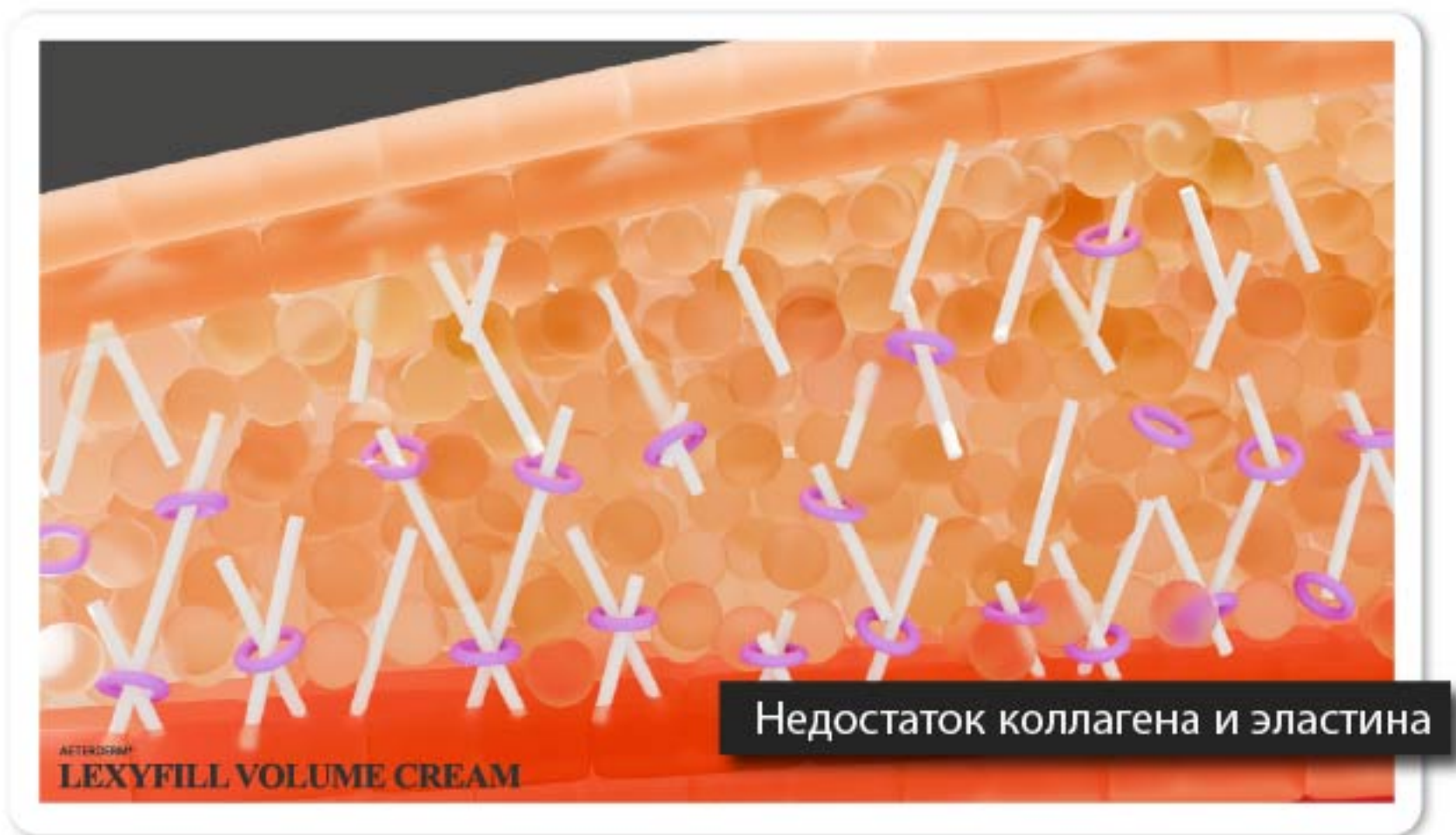

Введение в кожу филлера с гиалуроновой кислотой




Стимулирует выработку коллагена и эластина с помощью липосом

⊙ Структура липосом




Активный ингредиент
Фосфолипидная двухслойная структура, которая сама по себе может легко проходить через биологические мембраны.

Структура липосом позволяет активным ингредиентам проникать глубоко в кожу.

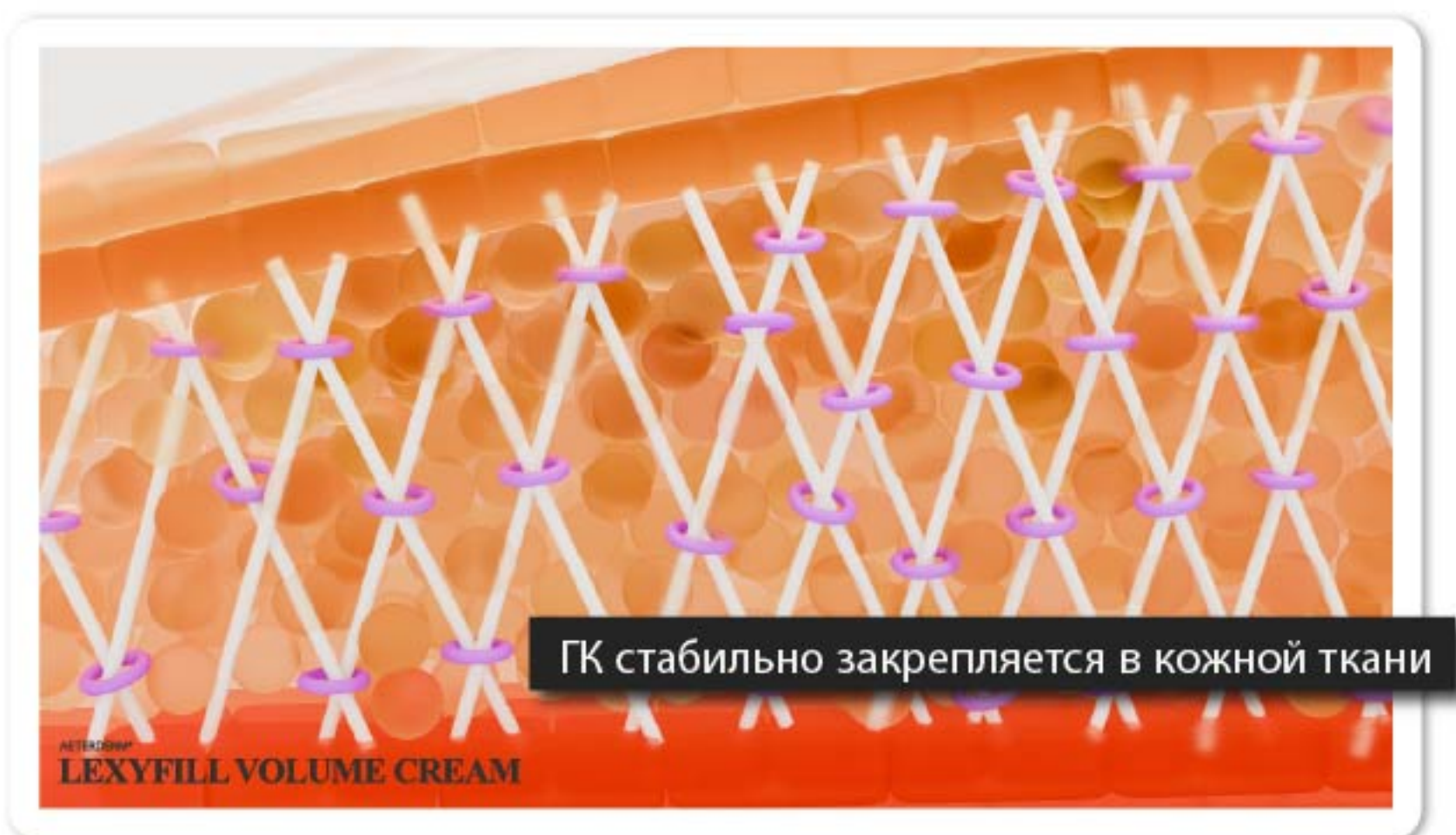

Делает кожу более упругой и эластичной.
Повышает эластичность кожи и удерживает филлер с ГК.

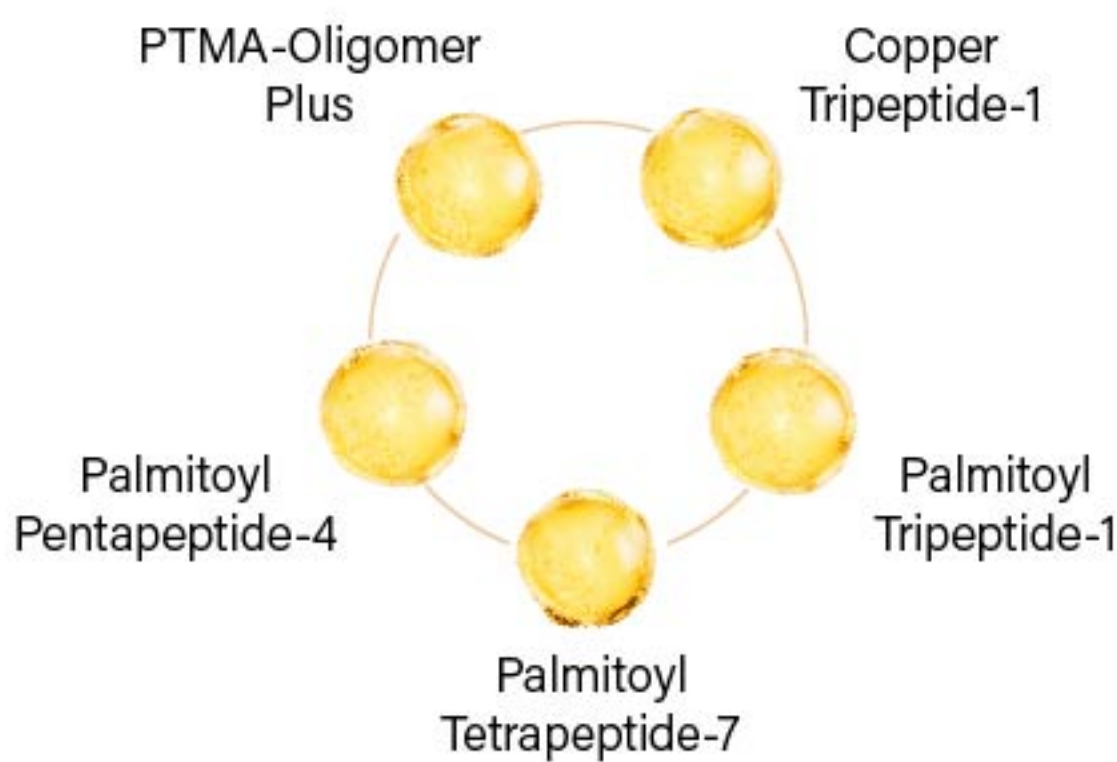

- ⊙ Улучшение биосинтеза коллагена и эластина
- ⊙ Активация EGF (эпидермального фактора роста)

Профилактика и заживление растяжек



После процедуры бодифиллером из-за внезапного увеличения объема могут возникнуть растяжки.

Создан LEXYFILL VOLUME CREAM, как формула решения этих проблем.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Panthenol

Shea Butter

- ☉ Регенерация кожи
- ☉ Устраняет стрии и предотвращает образование рубцов

LEXYFILL VOLUME CREAM

Magnolia Bark Extract

Acetylhexapeptide-8

Palmitoyl Tetrapeptide-7

Palmitoyl Pentapeptide-4

Copper Tripeptide-1

- ☉ Укрепляет кожный барьер (увеличивает SPT)
- ☉ Устраняет повреждения кожи

Увлажнение и успокоение кожи



Даже если процедура выполняется с использованием канюлей, стимуляция дермального слоя вызывает тепло, испаряет влагу из кожи, а пересушенная кожа легко теряет эластичность и оставляет шрамы от растяжек.

LEXYFILL VOLUME CREAM обладает эффективной формулой, предотвращающей эти побочные эффекты.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Phyto-Oligo


Allantoin

7 Types molecules of Hyaluronic Acid

Ceracare AC 45 complex

- ☉ Глубокое увлажнение
- ☉ Подавление испарения влаги

Fill Your Luxury beauty

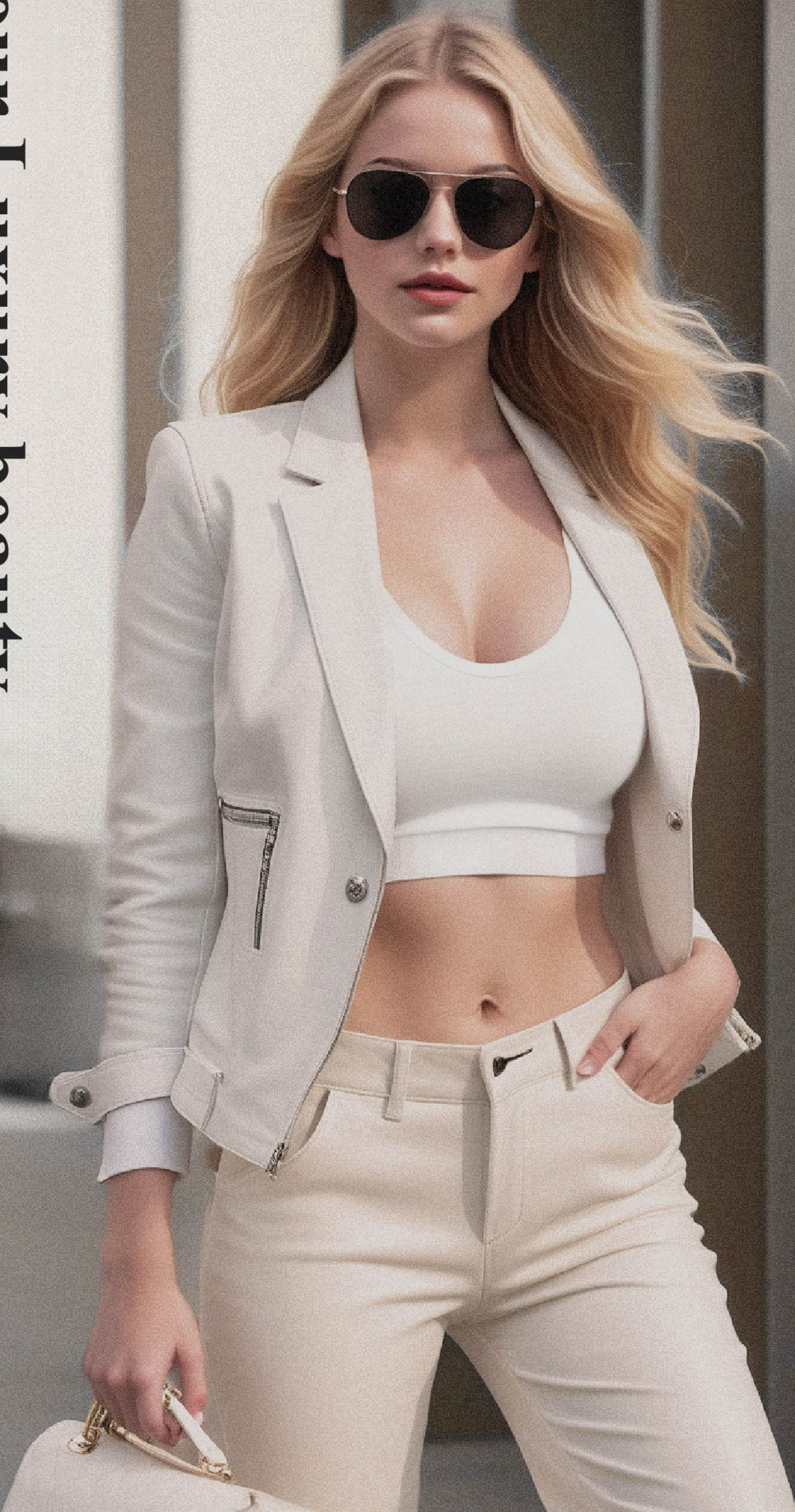

AETERDERM®

LEXYFILL

[СОСТАВ]

Сшитая гиалуроновая кислота	_____	24 mg / mL
Фосфатно-солевой буфер	_____	q.s.

[УПАКОВКА]

60cc x 1 флакон / коробка

[ХРАНЕНИЕ]

Хранить при комнатной температуре (1~30 °C) вдали от прямых солнечных лучей. .

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM

[СОСТАВ]

Water, Hydrogenated Polyisobutene, Butylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Glyceryl Stearate SE, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vinyl Dimethicone, Panthenol, C14-22 Alcohols, Ceramide NP, C12-20 Alkyl Glucoside, Dipropylene Glycol, Carbomer, Arginine, Xanthan Gum, Glyceryl Polyacrylate, Magnolia Officinalis Bark Extract, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Sodium Stearoyl Glutamate, Hydrogenated Lecithin, Adenosine, Glyceryl Stearate, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Cholesterol, Ceramide NS, Ceramide AS, Ceramide AP, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Althaea Rosea Root Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Glucose, Caulerpa Lentillifera Extract, Codium Fragile Extract, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Tocopherol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Pentapeptide-4, Potassium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Oligopeptide-1, Ceramide EOP

[УПАКОВКА]

150mL / коробка