

AETERDERM®

LEXYFILL

Fill Your Luxury Beauty

&

LEXYFILL VOLUME CREAM






Fill Your Luxury Beauty

CARACTERISTICAS

¿Menor viscosidad? ¡Pero mayor elasticidad!

El liquido puede extraerse del envase sin necesidad de añadir solución salina.

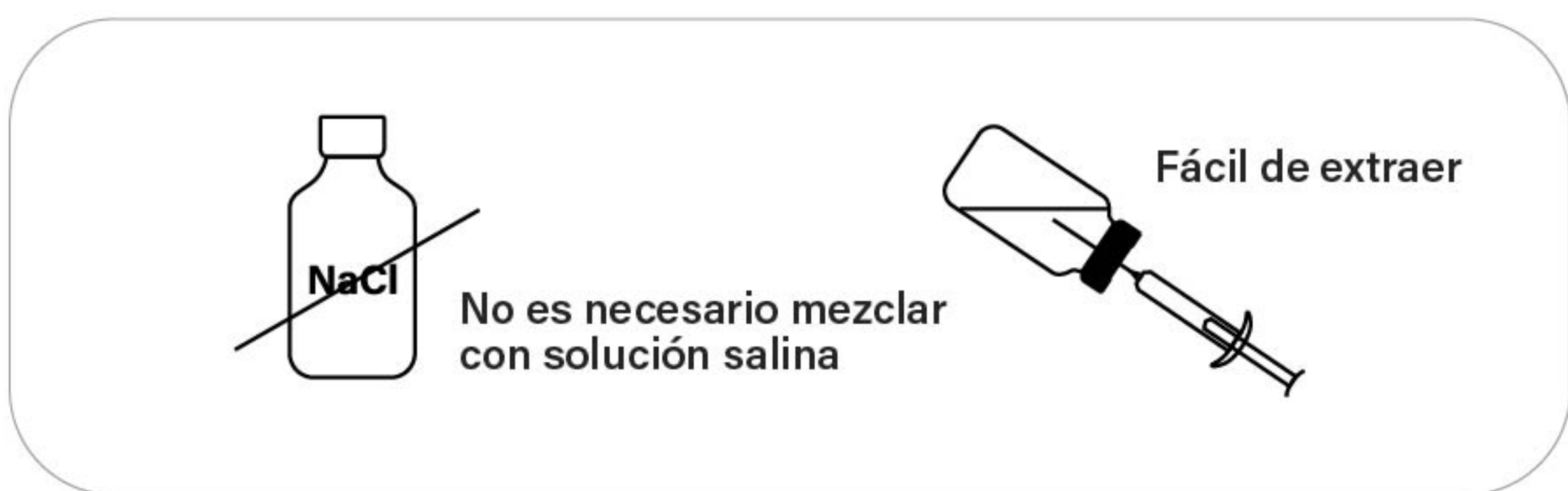

Por lo tanto, no hay pérdida de volumen ni deformación causada por la solución salina. Además, muestra una elasticidad asombrosa.



Como resultado, se puede realizar un tratamiento más sofisticado. ✂

Creamos un filler corporal con estas increíbles características gracias a un largo tiempo de reticulación a baja temperatura,

para un Modelado Corporal Preciso




¿Por qué LEXYFILL es más seguro?

¿Por qué LEXYFILL es altamente elástico?

Otros Fillers Corporales




Utilizan únicamente moléculas grandes de HA.

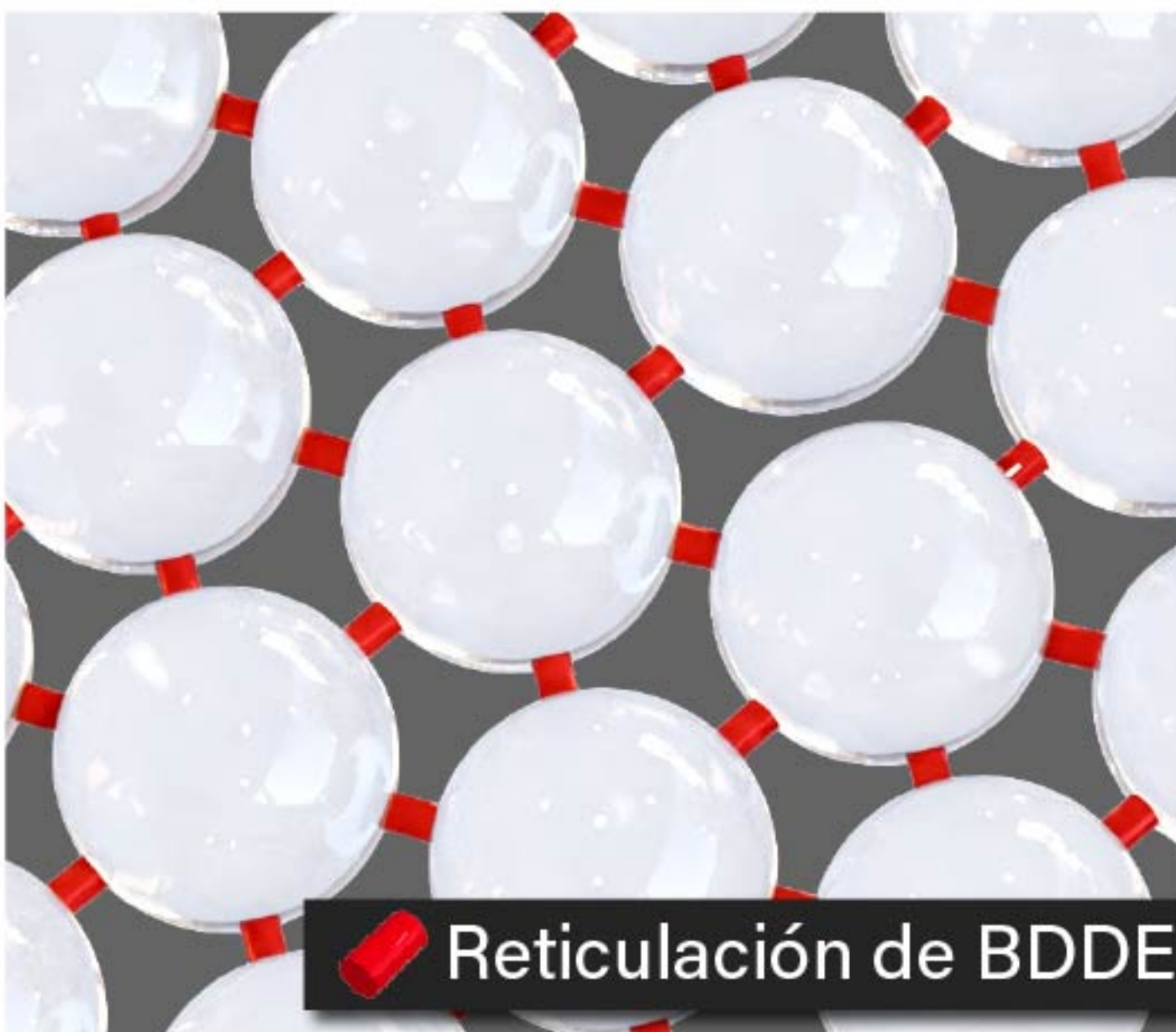


Se utilizó una gran cantidad de **BDDE** lo que puede provocar efectos secundarios graves.

Además, estos fillers son demasiado densos para extraerlos del vial fácilmente. Por eso, deben combinarse con solución salina y agitarse para mezclarlos.

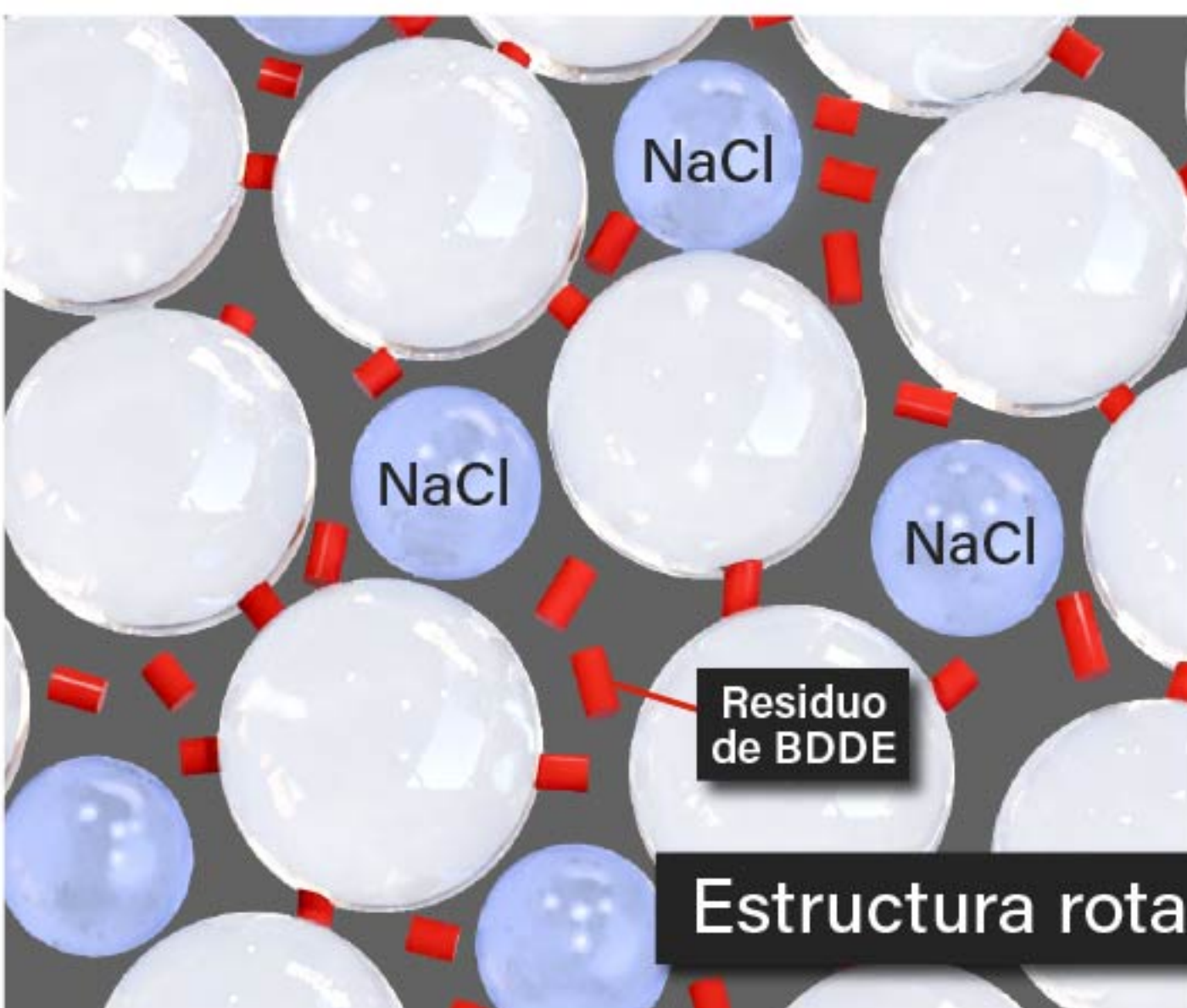


Cuando se agrega la solución salina y se agita para mezclar, la estructura de reticulación del ácido hialurónico se rompe por completo. Esto provoca un aumento del BDDE residual y puede causar efectos secundarios graves e incluso shock.

LEXYFILL Filler Corporal

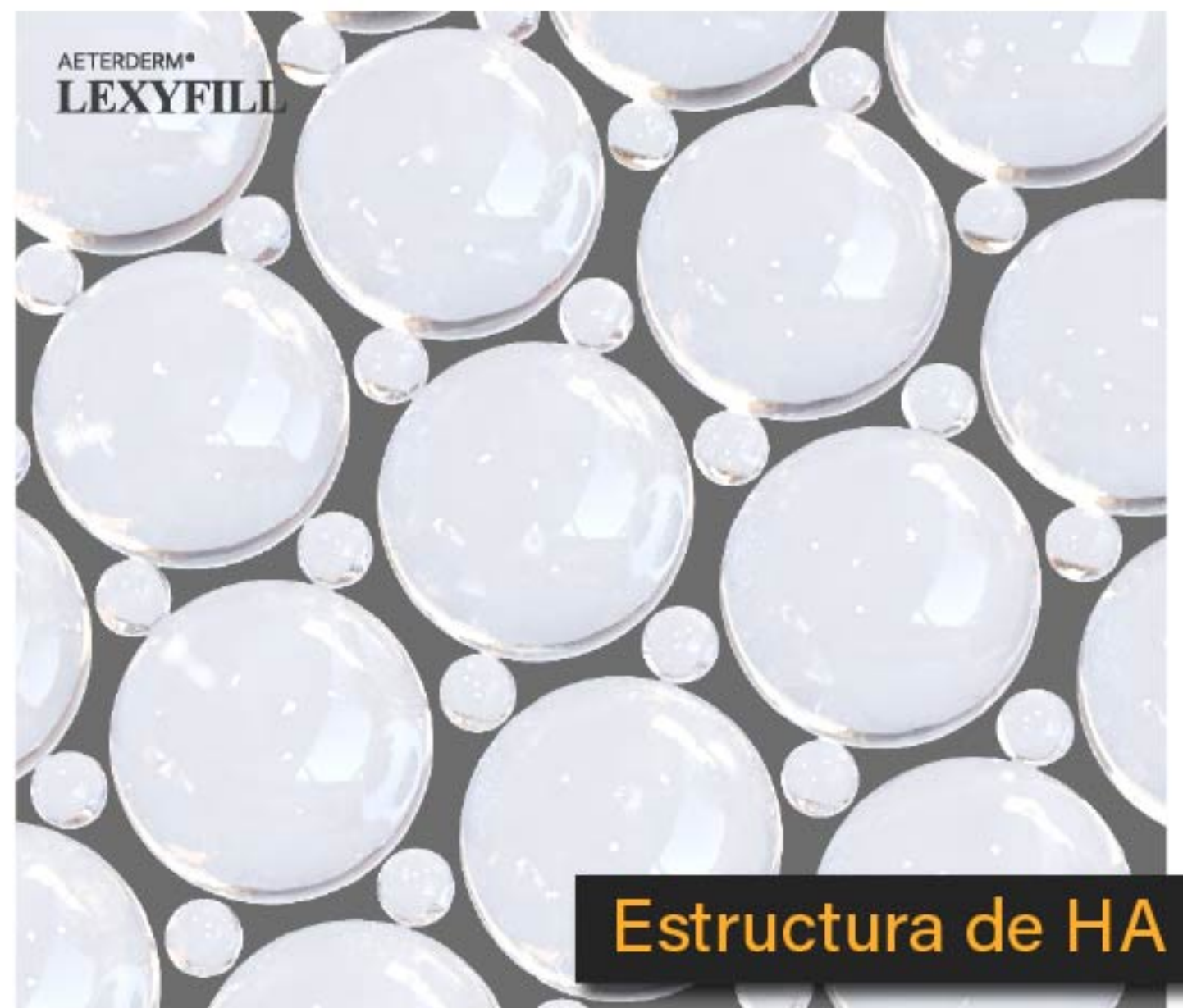


Se incorporaron moléculas pequeñas de HA entre las estructuras, aumentando así la hidratación y la elasticidad

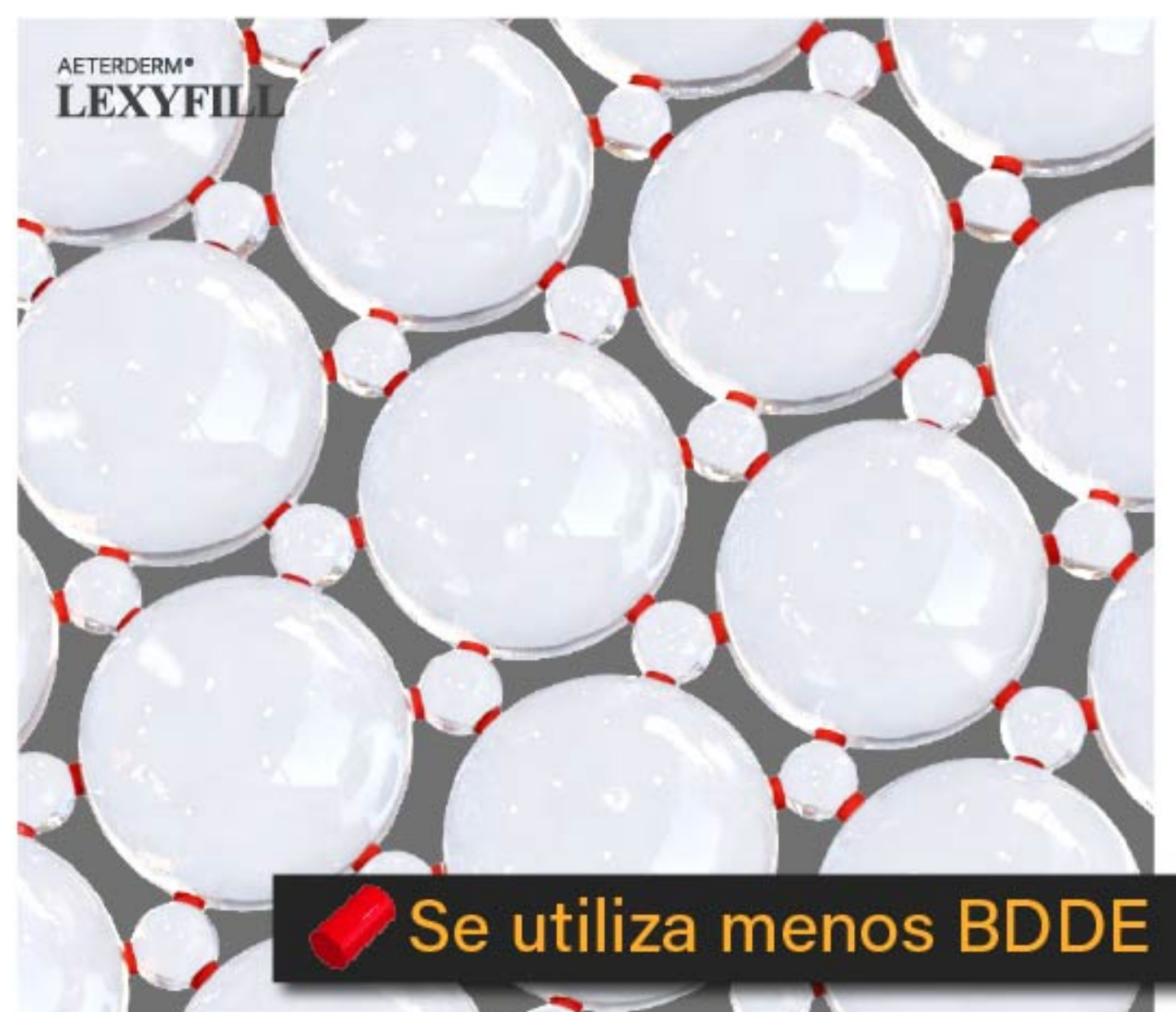

Debido a esta estructura de HA, la reticulación se puede realizar utilizando cantidades muy pequeñas de **BDDE**

Por lo tanto, la probabilidad de que aparezcan efectos secundarios se reduce significativamente.

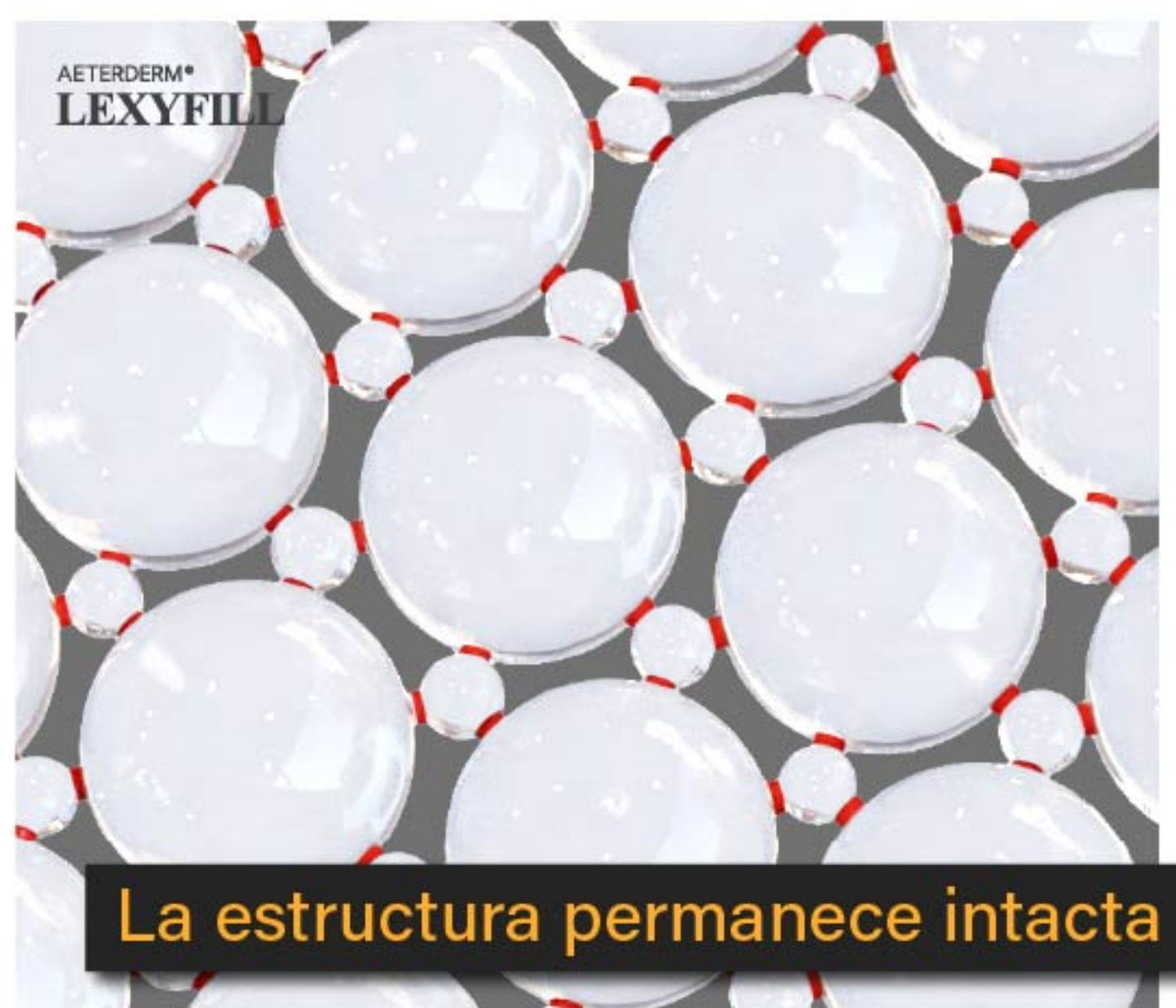

LEXYFILL puede extraerse fácilmente con una jeringa sin necesidad de mezclar con solución salina, lo que permite inyectarlo manteniendo intacta la estructura del ácido hialurónico.

INGREDIENTES PRINCIPALES

Ácido hialurónico

HA crosslinked bifasico reticulado,
ideal para dar volumen al cuerpo



El HA pasa por un proceso de filtrado 14 veces para eliminar 3 tipos de toxinas. Previniendo completamente los efectos secundarios

- ⊙ BDDE residual
- ⊙ Endotoxina
- ⊙ Proteínas

Maximiza la elasticidad y la retención y mezclando moléculas grandes y pequeñas de HA



Concentración de HA	24 mg / mL
MOD (Grado de modificación, mol%)	3.85 %
Tipo de Gel	Bifásico
Módulo de almacenamiento (G')	100 - 250 Pa
Fuerza de inyección ^(N) (30G UTW)	20 N

ESTUDIOS NO CLÍNICOS

Prueba de viscosidad & elasticidad



Forma inicial



Después de
1 hora



Después de
6 horas



Después de
12 horas



Después de
24 horas





AETERDERM®



LEXYFILL

ESTUDIOS CLÍNICOS

Procedimiento de Aumento de Senos

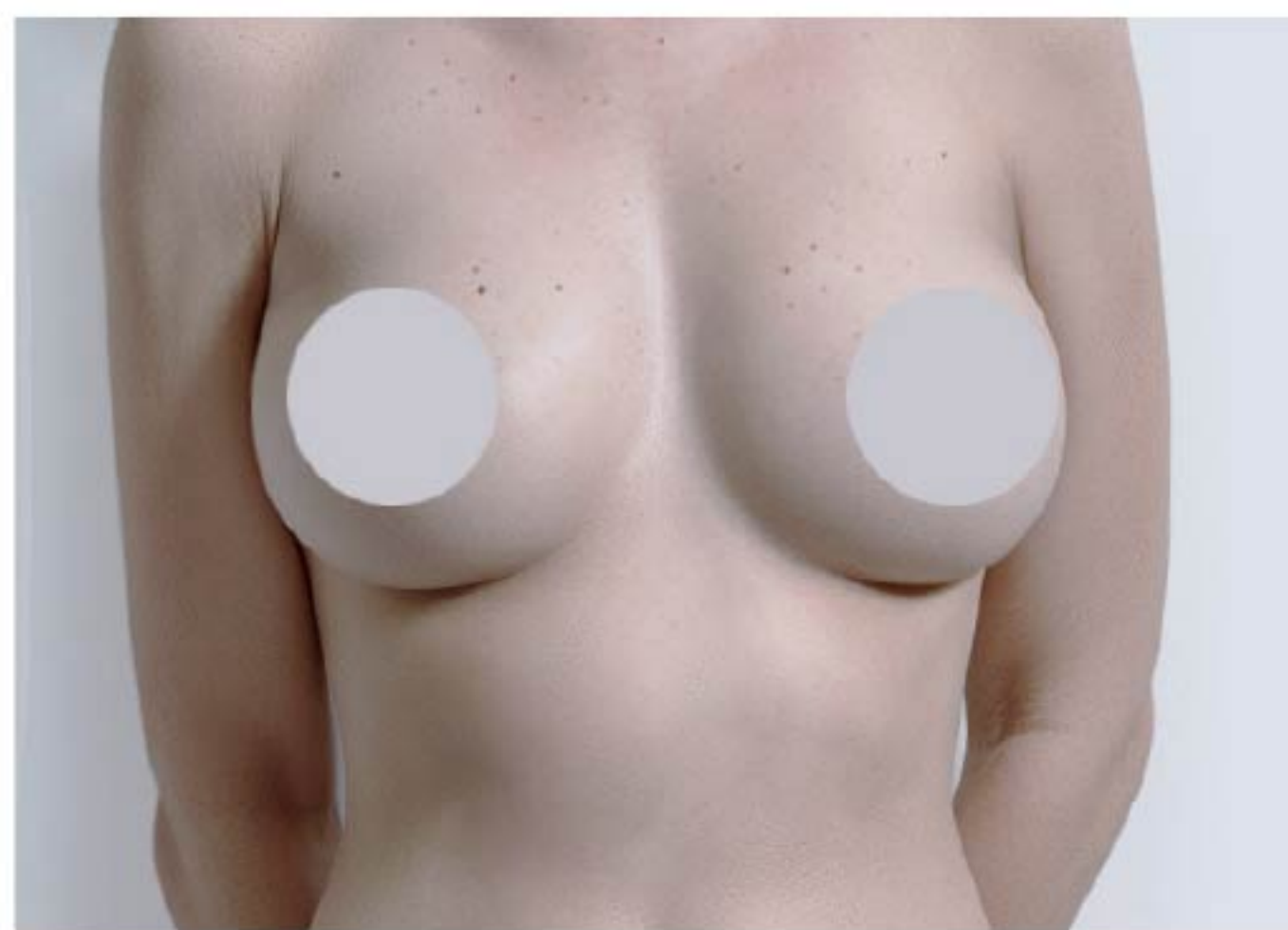
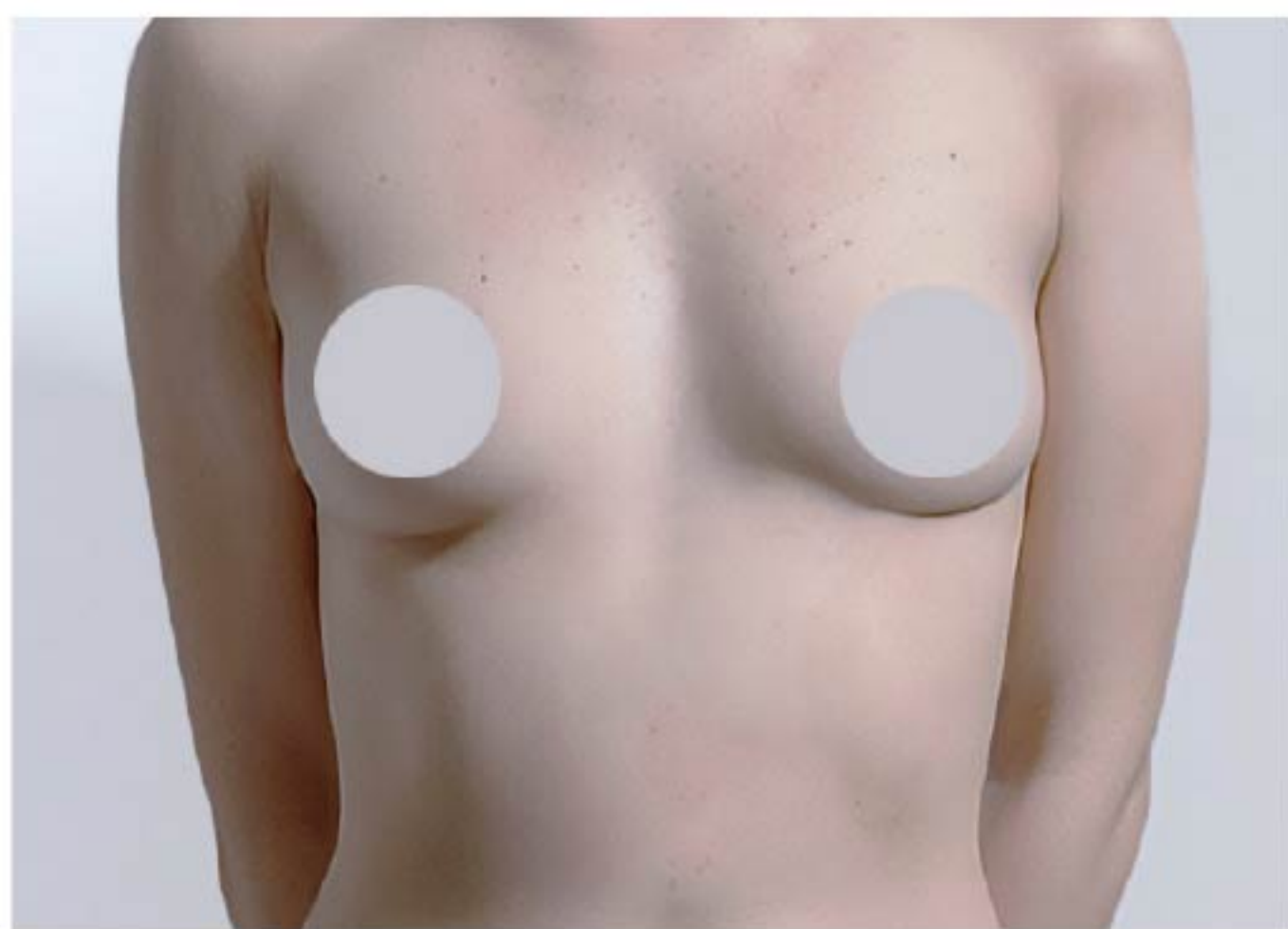


Referencias) Aumento de senos mediante VISIA-CR
Ensayos clínicos realizados por Dermatol Ther 2022;11:3-13

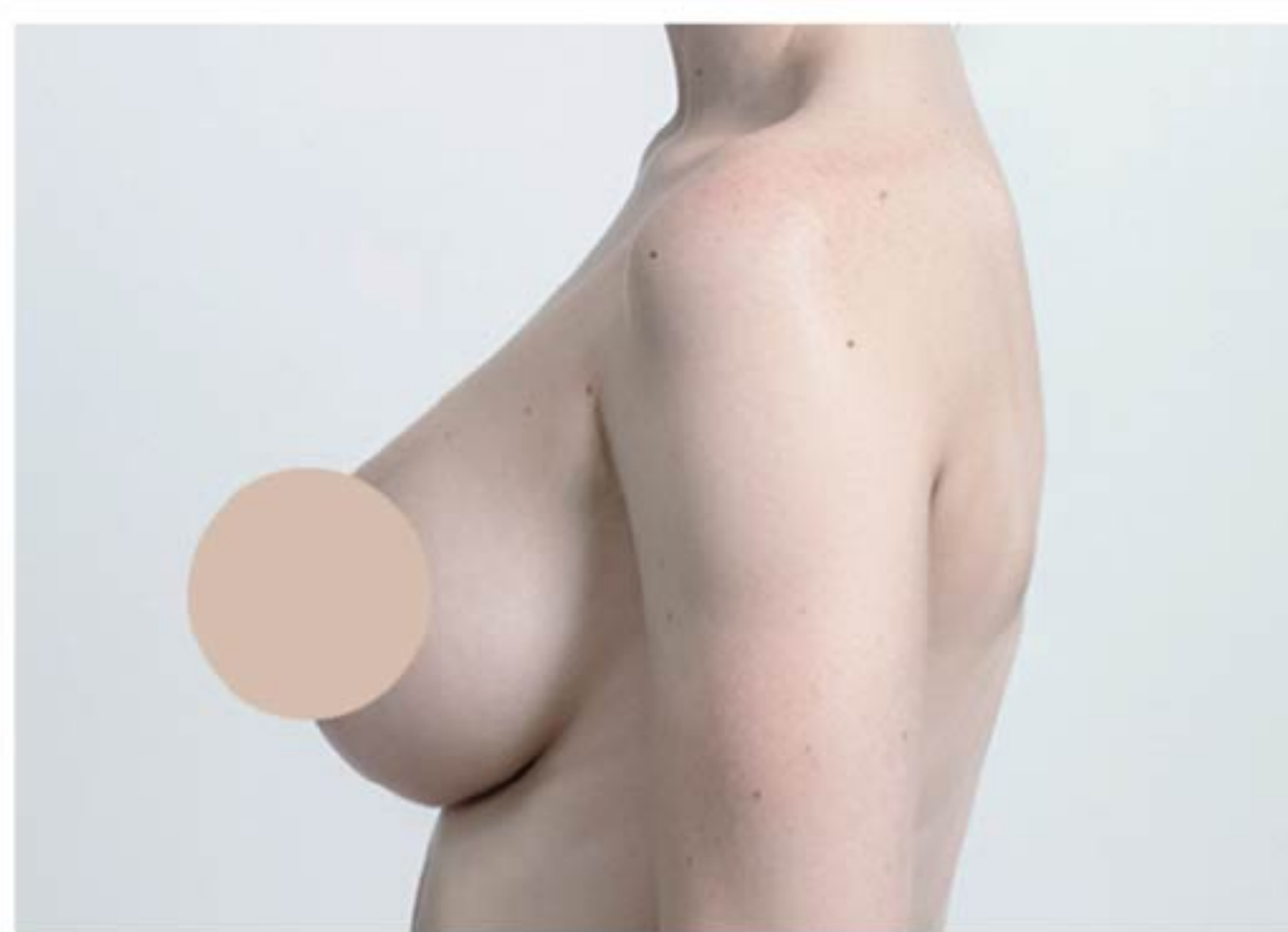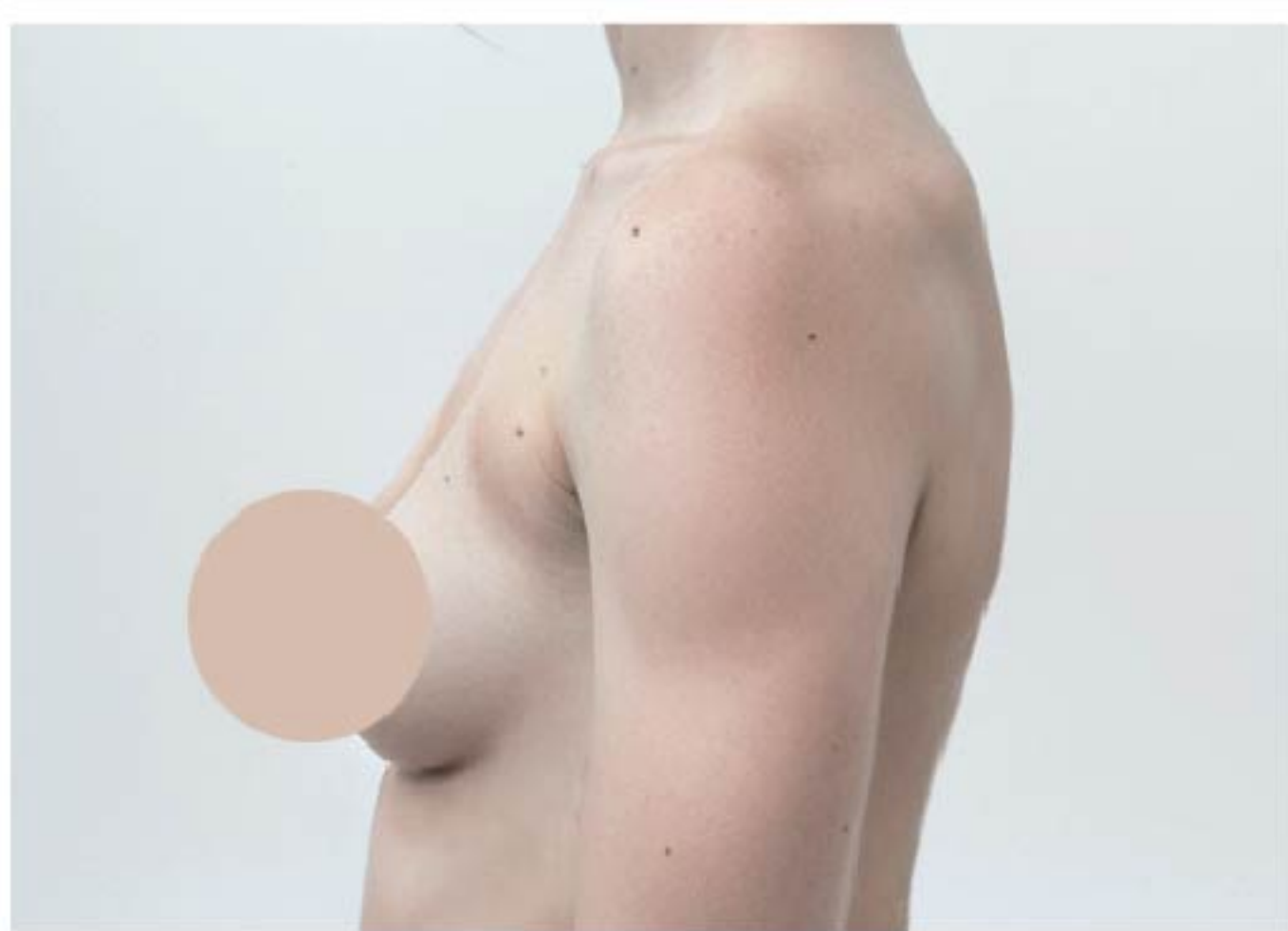

Referencias) Aumento de senos mediante VISIA-CR
Ensayos clínicos realizados por Dermatol Ther 2022;17:10-15

Procedimiento de Aumento de Glúteos

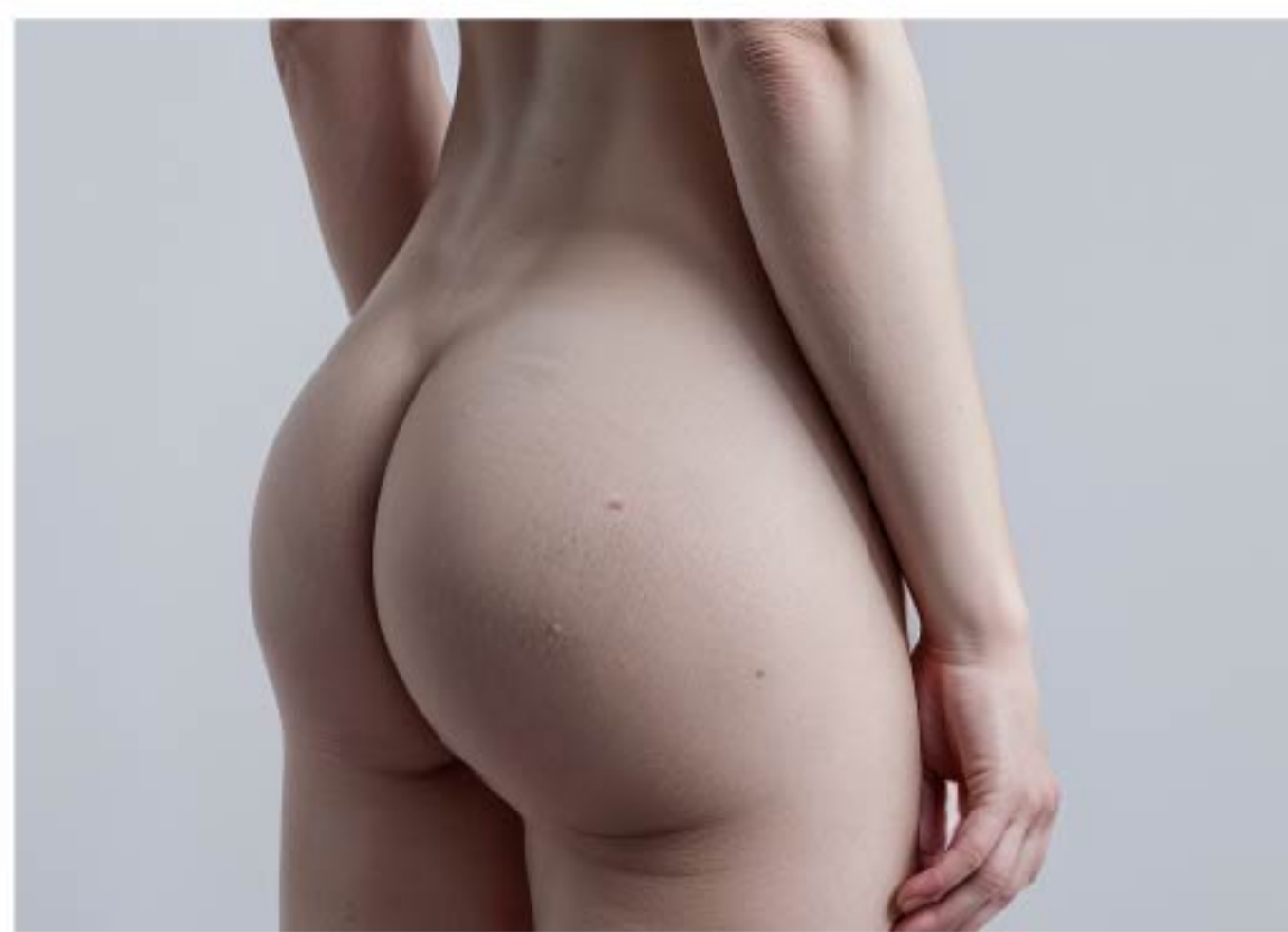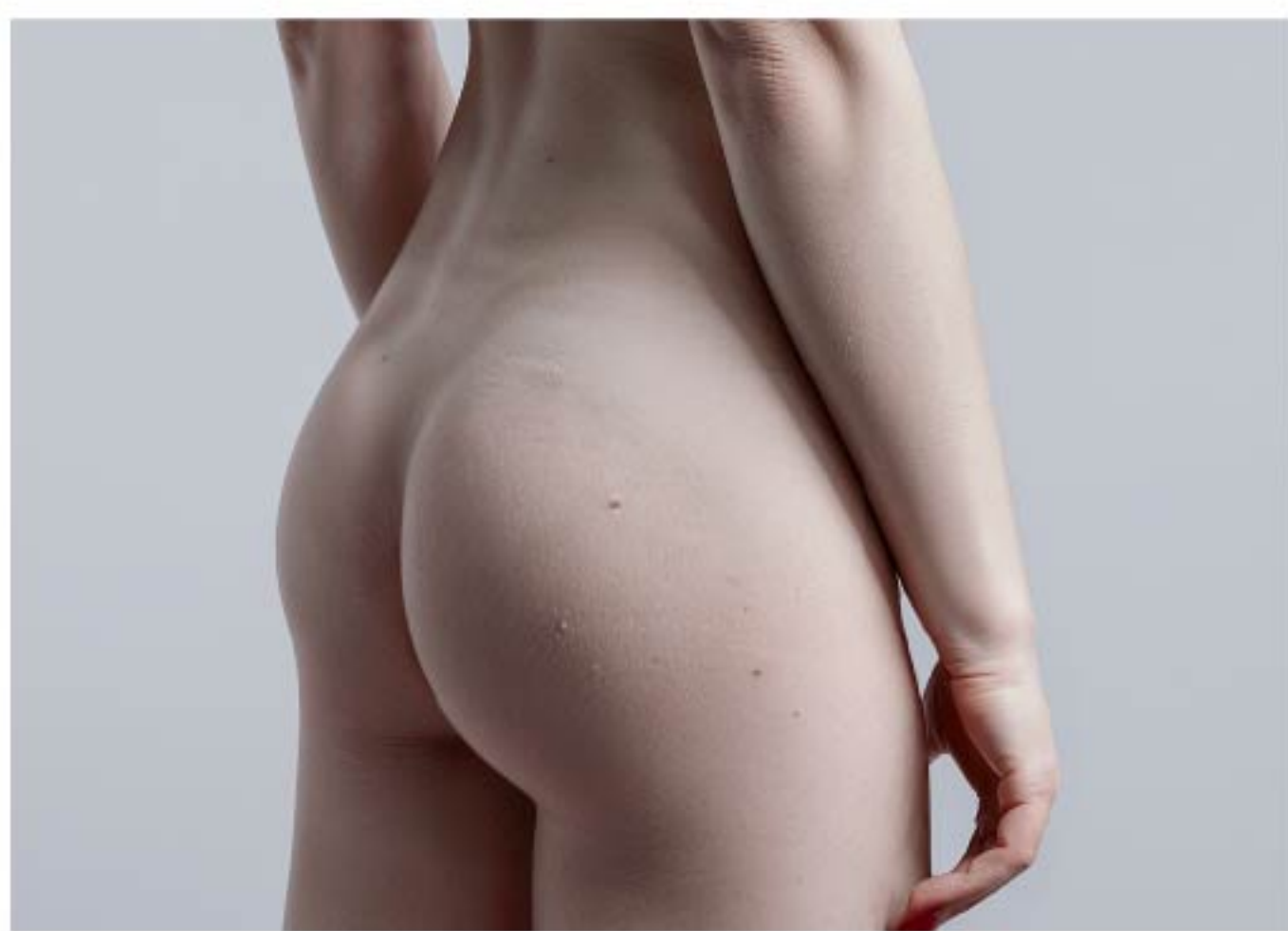


Referencias) Aumento de glúteos mediante VISIA-CR
Ensayos clínicos realizados por Dermatol Ther 2022;21:35-19

TRATAMIENTO

ÁREA DE TRATAMIENTO

Parte delantera del cuerpo

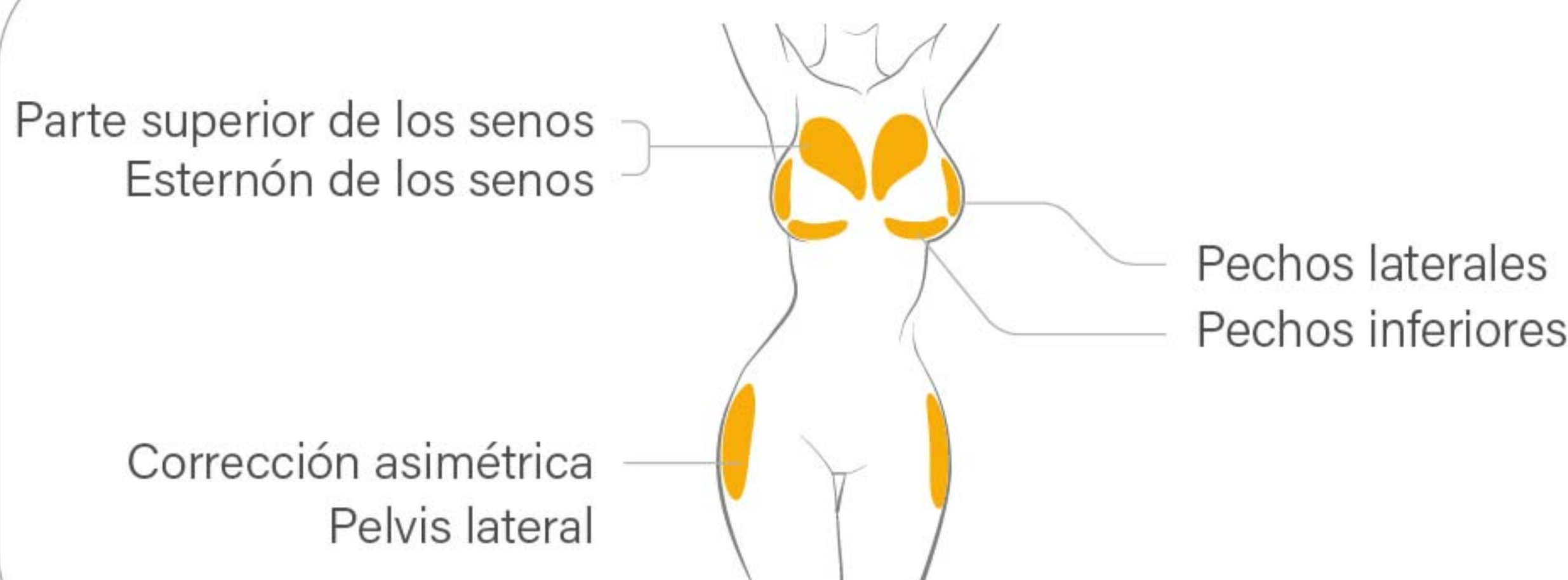

Vista lateral




Vista trasera



✱ Si el paciente tiene una flacidez cutánea grave o un caso grave de ptosis en los glúteos, se recomienda no inyectar fillers de ácido hialurónico en la parte inferior de los glúteos.

Puntos de Inyección comunes

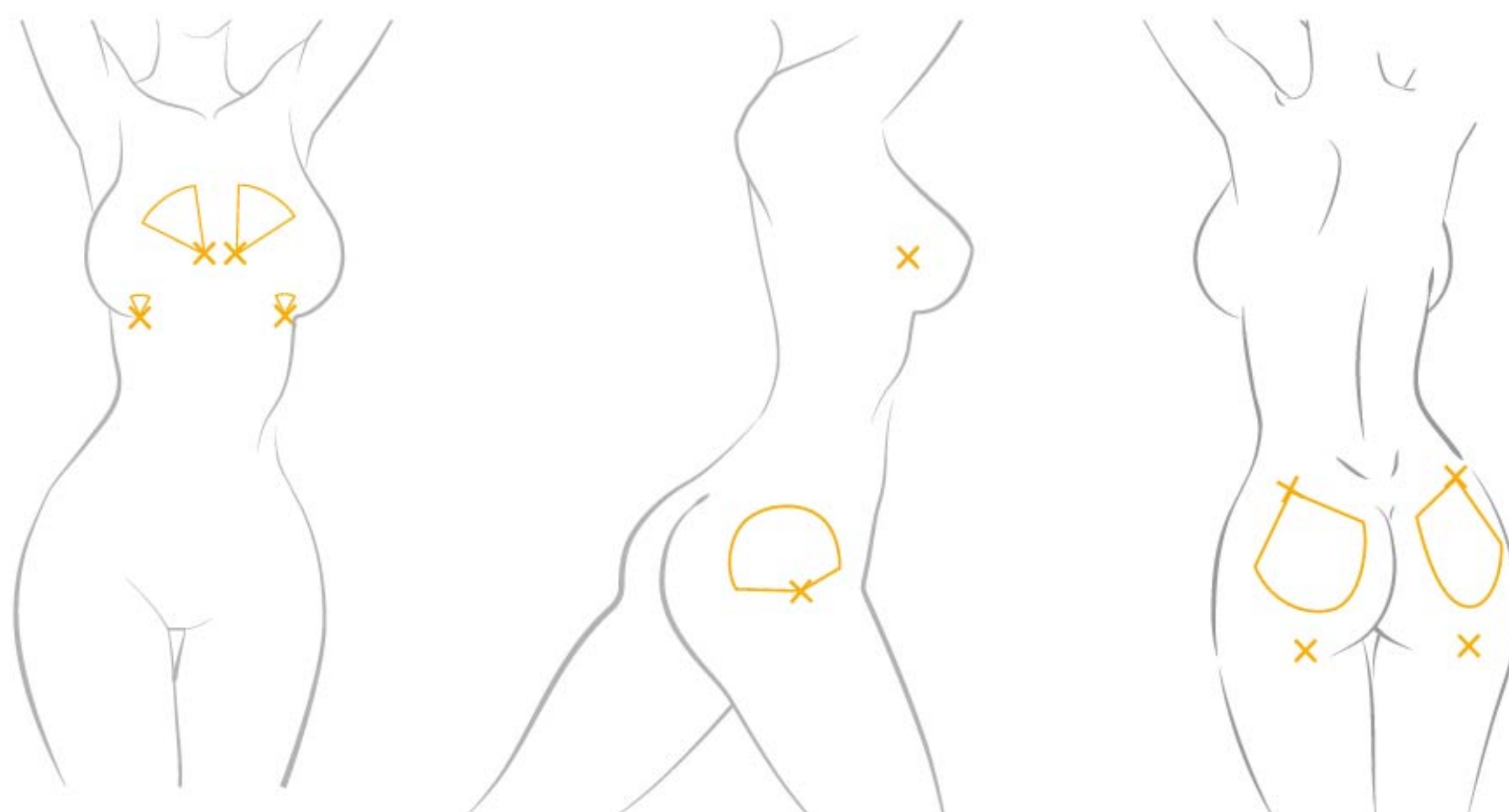

Cánula recomendada

- Aumento de senos — se recomienda microcánula 14G de 90 mm
- Aumento de senos superiores — Se recomienda una microcánula de 20G de 70 mm
- Aumento de glúteos — Se recomienda una microcánula de 18G de 70 mm o 90 mm

Proceso de tratamiento

- Verifique si el paciente se encuentra en condiciones adecuadas para el procedimiento.
- Lave el área a tratar con agua y jabón.
- Desinfecte el área de tratamiento con alcohol u otro antiséptico.
- Inyecte LEXYFILL HA filler corporal en el plano subcutáneo del área de tratamiento utilizando una aguja de pared delgada o una cánula.
- Una vez finalizada la inyección, masajee suavemente la zona tratada para que el producto se adapte al contorno de los tejidos circundantes.

※ Las instrucciones detalladas de aplicación se encuentran en el manual incluido con el producto.

Precauciones después del tratamiento

- Aplique compresas de hielo en la zona tratada durante 15 a 20 minutos, varias veces al día, para ayudar a reducir la hinchazón y los hematomas.
- Evite ejercer presión sobre la zona tratada durante al menos 24 horas después del procedimiento.
- Evite durante al menos 48 horas después del procedimiento.
 - Actividad física intensa o ejercicio
 - Alcohol y tabaco
 - Baños calientes, saunas y baños de vapor

※ Las precauciones detalladas se detallan en el manual incluido con el producto.

Volumen sobre Volumen

LEXYFILL VOLUME CREAM

Nosotros creamos ^{AETERDERM®} **LEXYFILL VOLUME CREAM**

Como resultado de la colaboración con ^{AETERDERM®} **LEXYFILL** se desarrolló la fórmula óptima para maximizar el efecto del tratamiento y prevenir los efectos secundarios del filler.

■ Función 1

Da volumen a tu cuerpo mediante la proliferación de células grasas con VOLUFILINE

■ Función 2

Hace que la piel sea más firme y elástica a través de la biosíntesis de colágeno y elastina.

■ Función 3

Prevención & curación de estrías

■ Función 4

Hidratante & calmante de la piel.



Aplique la crema suavemente sobre la zona a tratar con LEXYFILL dos veces al día durante 10 a 20 minutos cada vez.

Maximiza el efecto del filler corporal, mantiene el volumen a largo plazo y crea una forma más natural gracias a la proliferación natural de las células grasas.

^{AETERDERM®}
LEXYFILL
VOLUME CREAM
Fill Your Luxury Beauty



Proliferación de células grasas gracias a VOLUFILINE™

AETERDERM®
LEXYFILL VOLUME CREAM



VOLUFILINE™



Sarsasapogenina




Poliisobuteno
Hidrogenado

Activación de la proliferación de células grasas

Estimula la absorción de lípidos al activar la vía de glucosa/fructosa

Suministro de aceite


T1 Tasa de aumento de células grasas con VOLUFILINE

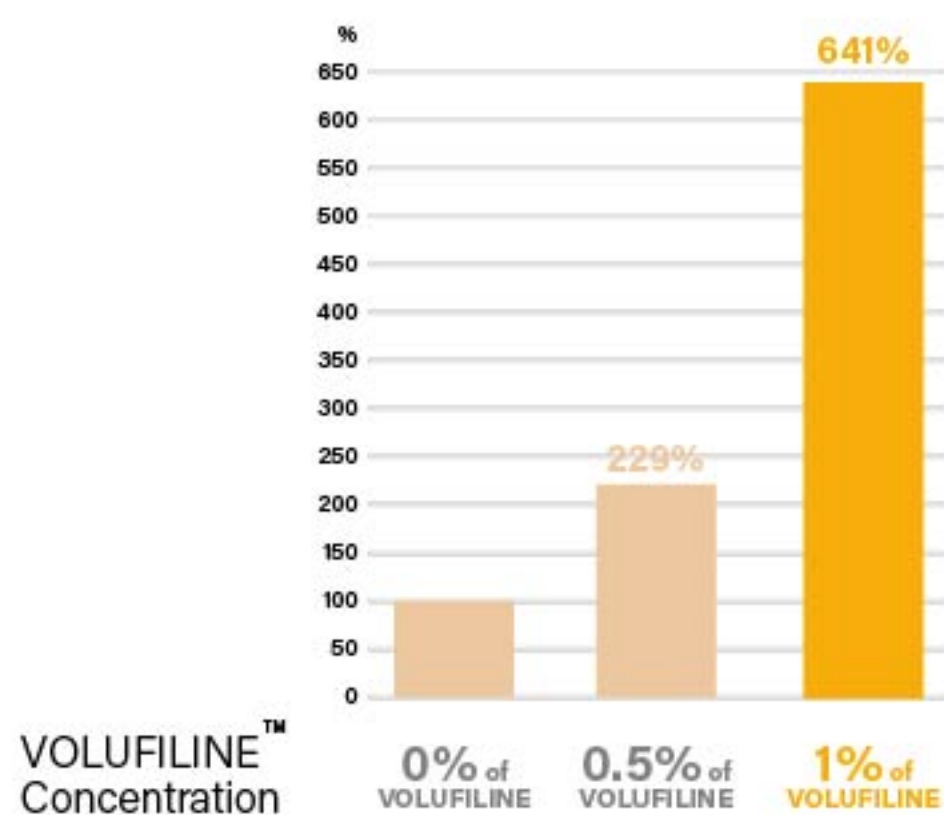


VOLUFILE™ Concentration	Concentration (µm)	Relative Increase
0% of VOLUFILE	~50	-
0.5% of VOLUFILE	~300	6 Times
1% of VOLUFILE	~1100	22 Times

Referencias) Sci Rep 2024;(22)


0% of
VOLUFILINE

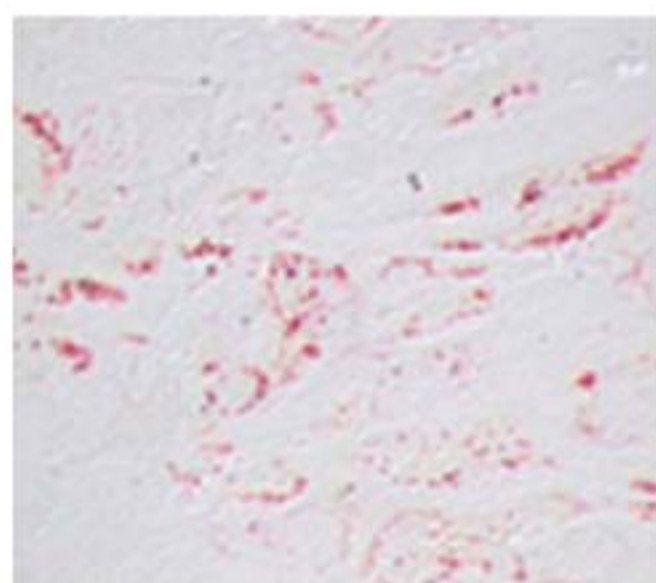

0.5% of
VOLUFILINE

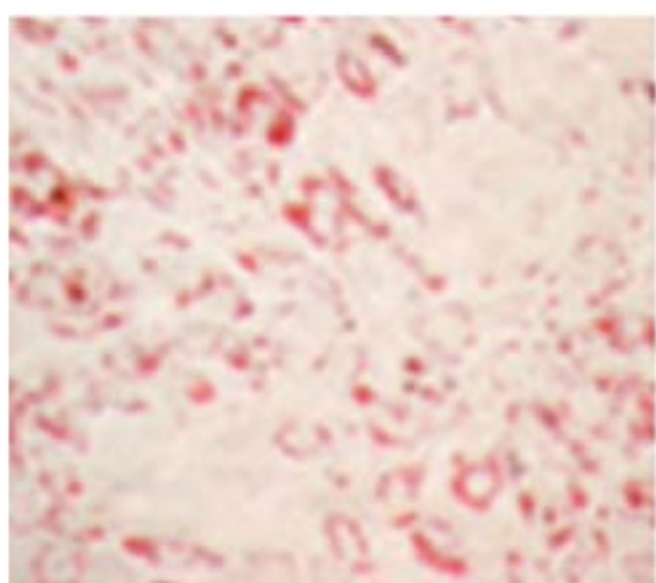


**1% of
VOLUFILINE**

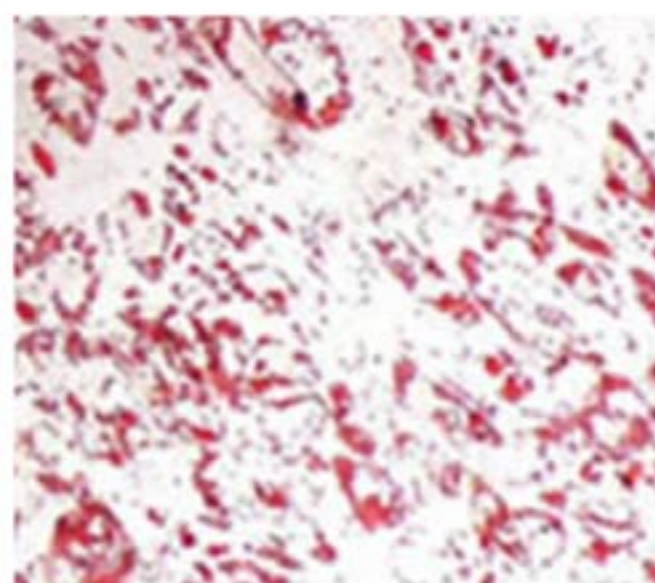



■ Células grasas de color rojo

Referencias) Sci Rep 2024:(27)

0% of
VOLUFILINE

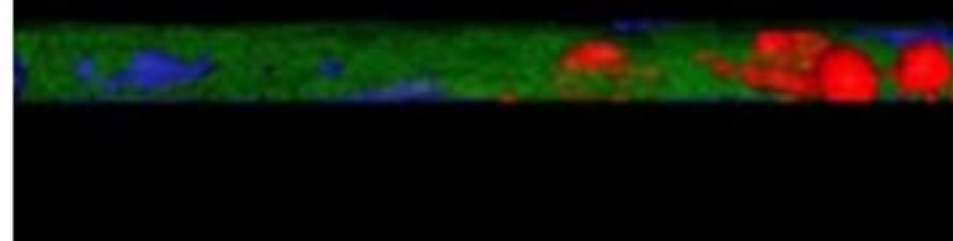

1% of
VOLUFILINE

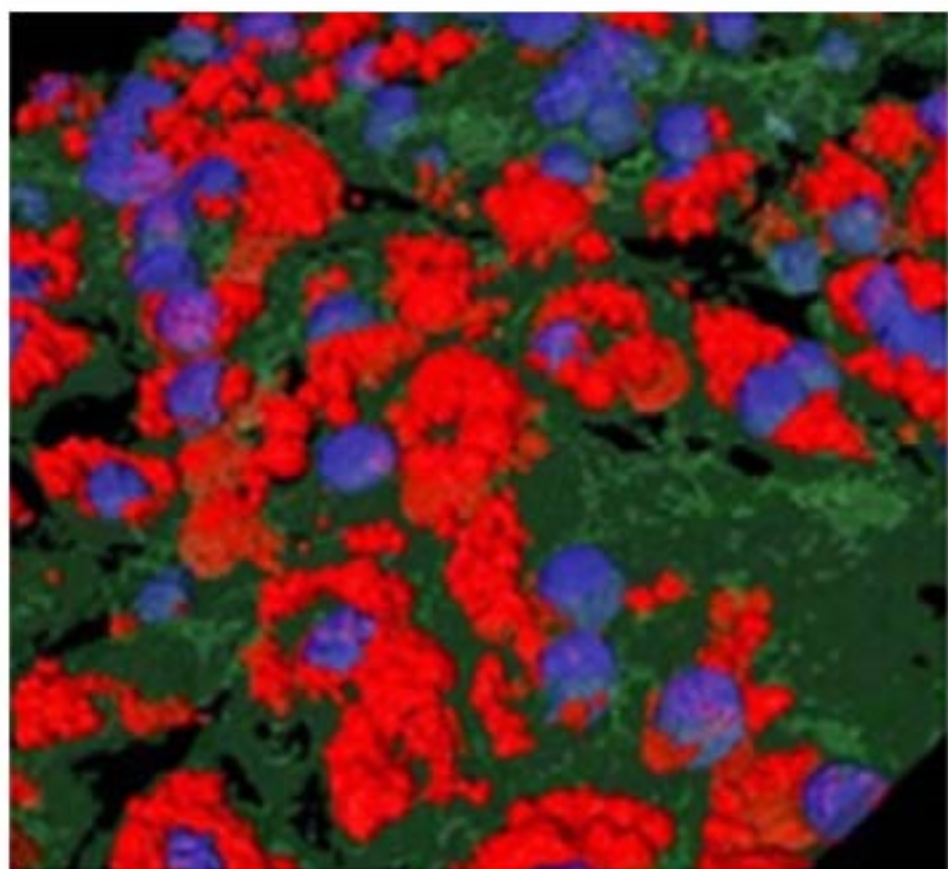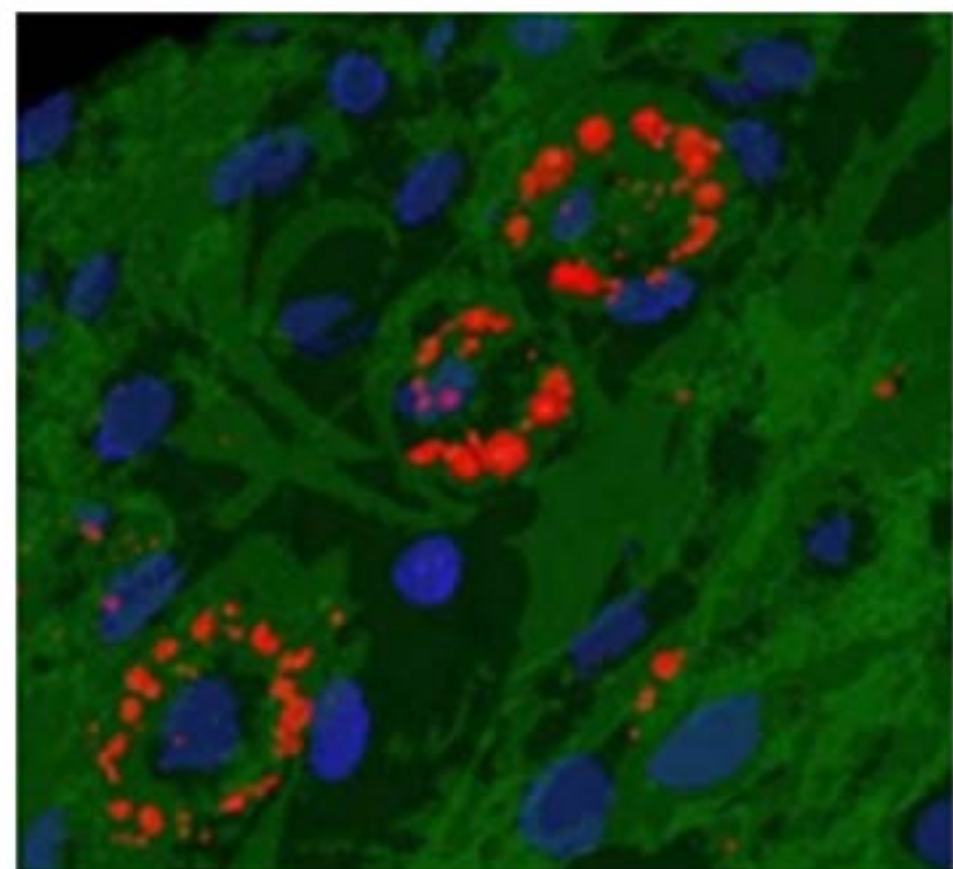


■ Células Grasas

Referencias) Sci Rep 2024;(31)

Función 2

Biosíntesis de colágeno y elastina


En comparación con el ácido hialurónico aplicado mediante filler, no hay suficiente colágeno ni elastina para sostenerlo, por lo que la elasticidad y la duración pueden ser limitadas. LEXYFILL VOLUME CREAM resuelve estos problemas de raíz, mejorando la elasticidad.

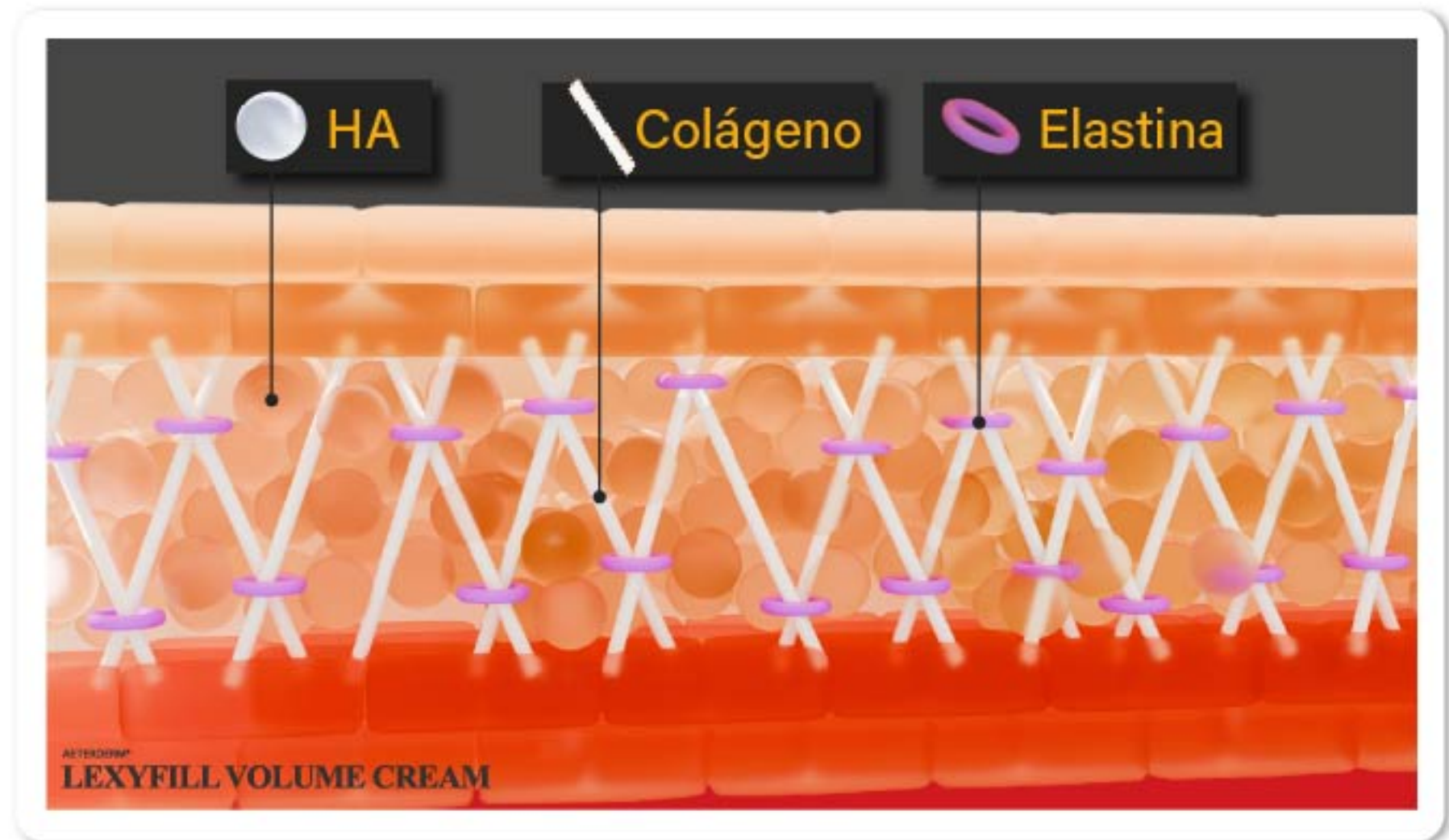


Estructura Tisular Cutánea Normal

Los tres componentes principales de la piel

- Ácido hialurónico
- Colágeno
- Elastina

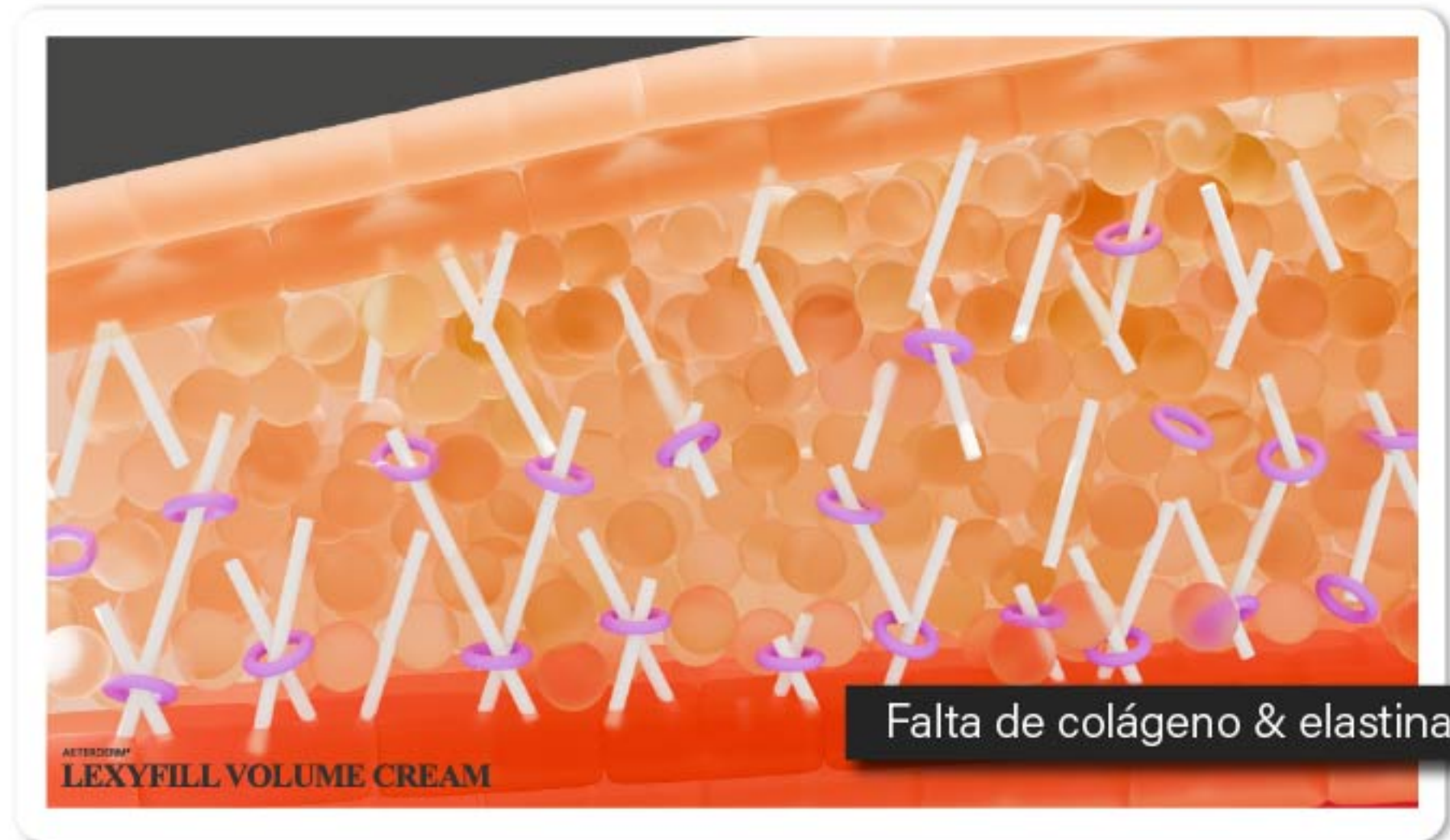

Suplementación de filler de HA en la piel

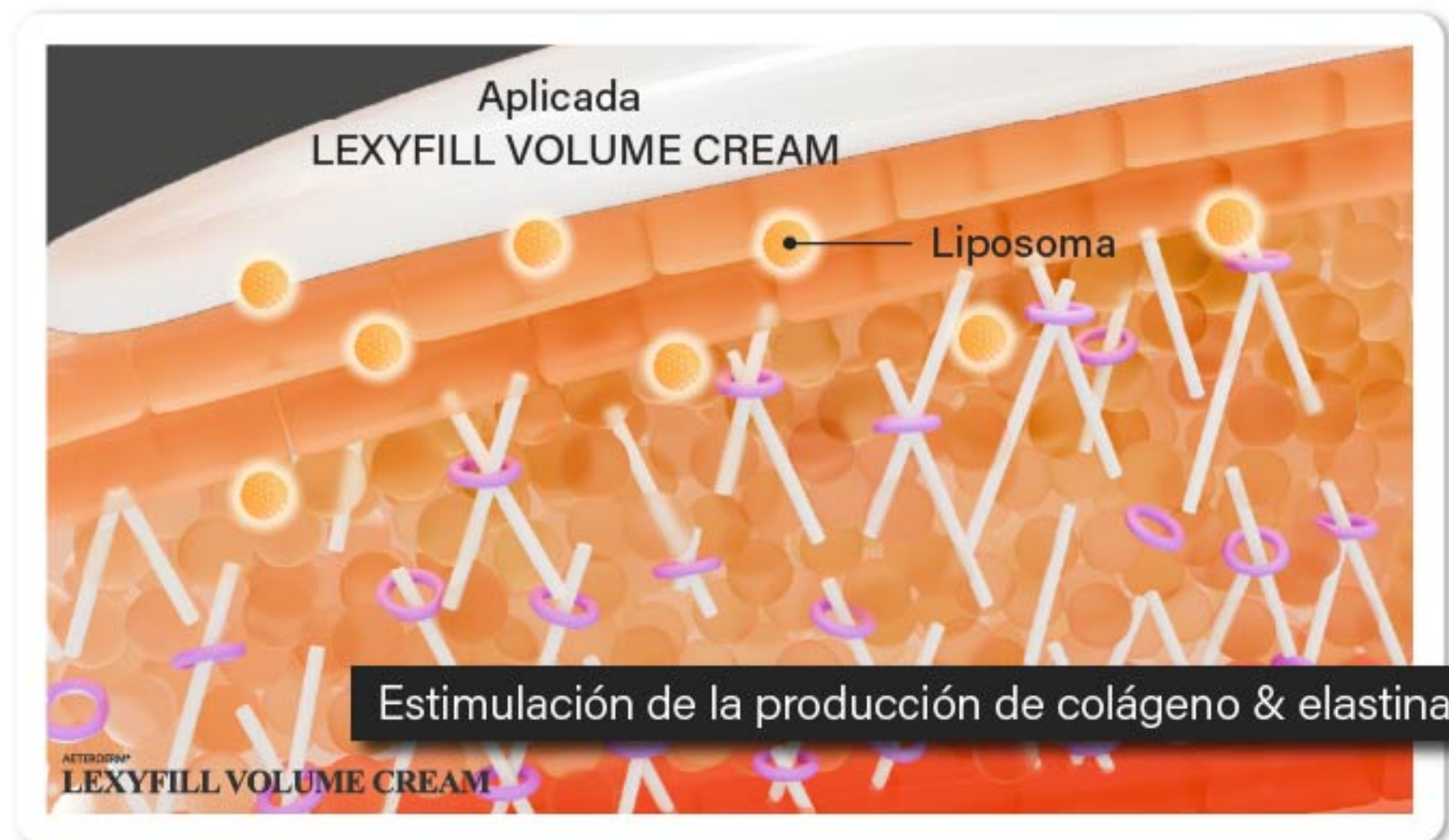

Estimula la producción de colágeno & elastina a través de liposomas.

⦿ Estructura de los Liposomas




La estructura del liposoma permite que los ingredientes activos penetren profundamente en la piel.



Aumenta la firmeza y elasticidad de la piel.

Fortalece la elasticidad de la piel y la retención del filler de HA.

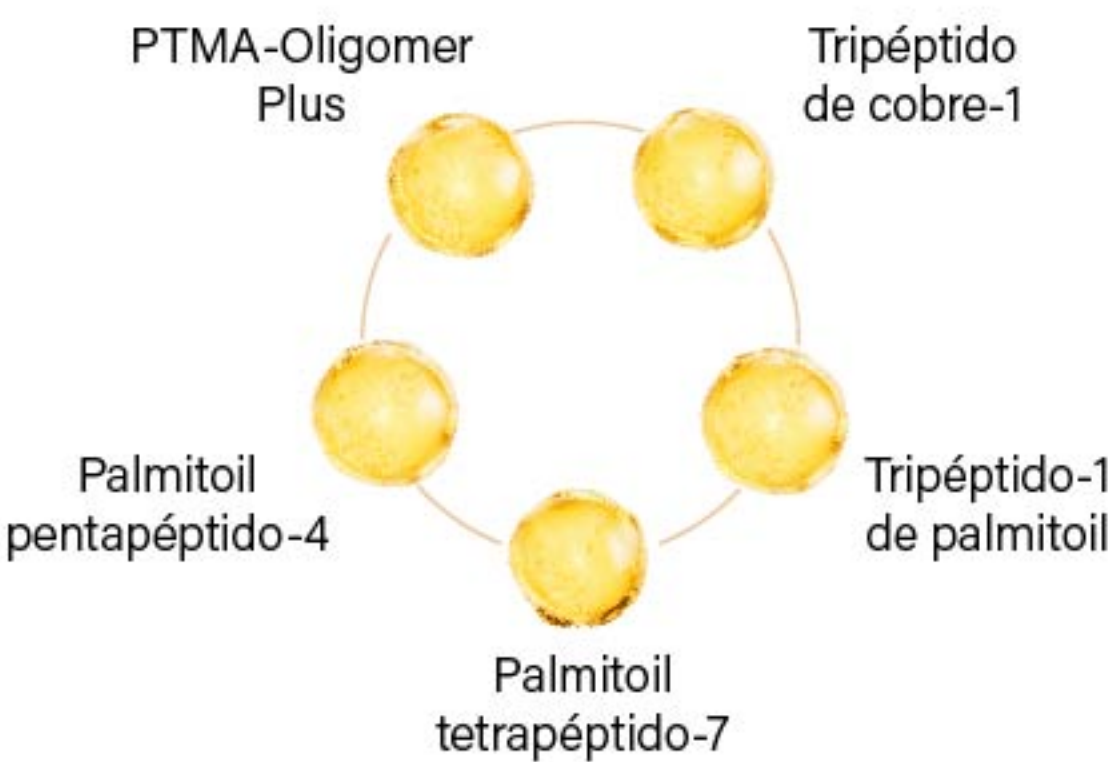

- ⦿ Mejora de la biosíntesis de colágeno y elastina
- ⦿ Activación del factor de crecimiento epidérmico(EGF)

Función 3

Prevención & curación de estrías



Tras recibir un tratamiento de filler corporal, pueden aparecer estrías debido al aumento repentino de volumen.

LEXYFILL VOLUME CREAM fue creada como una fórmula para solucionar estos problemas.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Pantenol

Manteca de karité

- Regeneración de la piel
- Elimina las estrías y previene la formación de cicatrices.

LEXYFILL VOLUME CREAM

Extracto de corteza de magnolia

Acetylhexa peptide-8

Palmitoil tetrapéptido-7

Palmitoil pentapéptido-4

Tripéptido de cobre-1

- Fortalece la barrera cutánea(aumenta de SPT)
- Repara el daño cutáneo

Función 4

Hidratante & Calmante de la piel



Incluso si el procedimiento se realiza con una cánula, la estimulación de la capa dérmica genera calor, evaporando la humedad de la piel. La piel reseca pierde fácilmente elasticidad, dejando cicatrices de estrías (Striae Distensae)

LEXYFILL VOLUME CREAM tiene una fórmula eficaz para prevenir estos efectos secundarios

LEXYFILL VOLUME CREAM

Alantoína

Phyto-Oligo

Complejo Ceracare AC 45

7 tipos de moléculas de ácido hialurónico

- Hidratación profunda
- Supresión de la evaporación de la humedad

Fill Your Luxury Beauty



AETERDERM®

LEXYFILL

[COMPOSICIÓN]

Ácido hialurónico reticulado	_____	24 mg / mL
Salina tamponada con fosfato	_____	q.s.

[UNIDAD DE EMPAQUE]

60cc x 1 Vial / Caja

[ALMACENAMIENTO]

Conservar a temperatura ambiente (1~30 °C) alejado de la luz solar directa.

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM

[INGREDIENTES]

Agua, Poliisobuteno hidrogenado, Butilenglicol, Glicerina, Poli(C6-14 olefina) hidrogenado, Alcohol cetearílico, Tetraisostearato de pentaeritrito, 1,2-Hexanodiol, Niacinamida, Estearato de glicerilo SE, Manteca de Butyrospermum Parkii (karité), Vinil dimeticona, Pantenol, Alcoholes C14-22, Ceramida NP, Glucósido de alquilo C12-20, Dipropilenglicol, Carbómero, Arginina, Goma xantana, Poliacrilato de glicerilo, Extracto de corteza de Magnolia Officinalis, Etilhexilglicerina, Alantoína, Glutamato estearoil sódico, Lecitina hidrogenada, Adenosina, Estearato de glicerilo, EDTA disódico, Hialuronato de sodio, Colesterol, Ceramida NS, Ceramida AS, Ceramida AP, Extracto de hoja de Aloe Barbadensis, Extracto de raíz de Althaea Rosea, Extracto de raíz de Anemarrhena Asphodeloides, Glucosa, Extracto de Caulerpa Lentillifera, Extracto de Codium Fragile, Hidroxipropiltrimonio hialuronato, Tocoferol, Ácido hialurónico hidrolizado, Hialuronato de sodio acetilado, Ácido hialurónico, Hialuronato de sodio reticulado, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Pentapeptide-4, Hialuronato de potasio, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Oligopeptide-1, Ceramida EOP

[UNIDAD DE EMPAQUE]

150mL / Caja