




AETERDERM® PURI EYES

AETERDERM® PURI EYES PRO

AETERDERM® PURI EYES PDRN PATCH

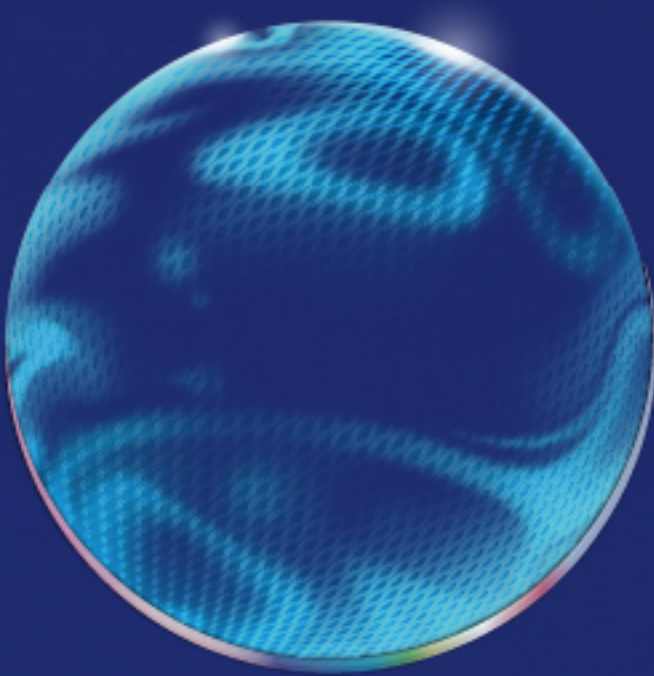

AETERDERM®

PURRI EYES PDRN PATCH

AETERDERM®

PURRI EYES PRO

AETERDERM®

PURRI EYES




**ELASTICITY
MAKES EYES**




AETERDERM®
PURI EYES
Polinucleótidos **2mg**

- Bajo dolor, mínimo tiempo de recuperación
- Tratamiento suave

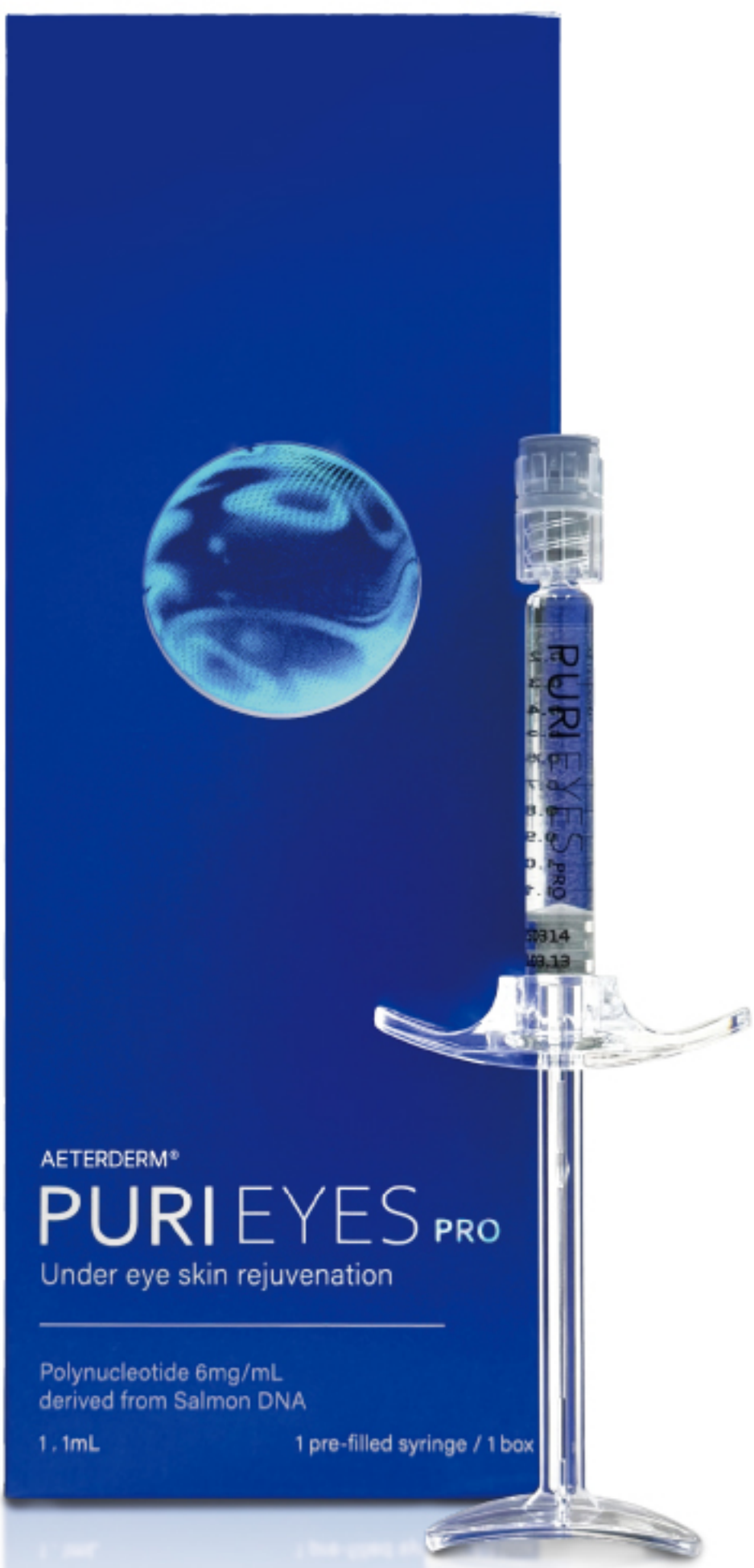

AETERDERM®
PURI EYES PRO
Polinucleótidos **6mg**

- Rejuvenecimiento intensivo con Firmeza mejorada
- Mejoras más pronunciadas

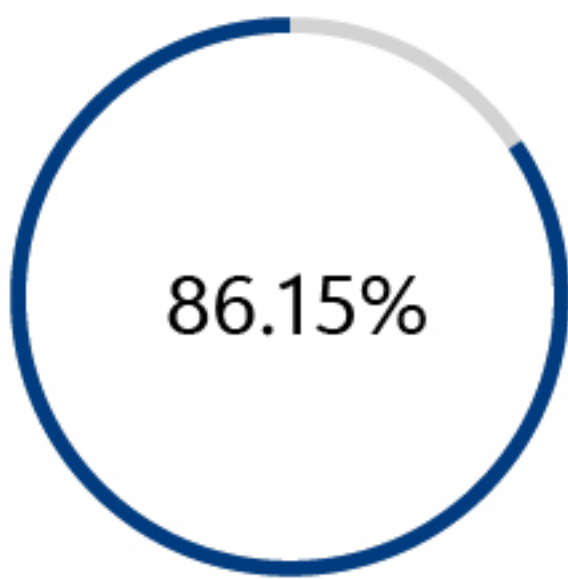


RECUPERACIÓN

Las heridas de las células dérmicas cerraron mas de un 86%

Reducción de arrugas

Rejuvenecimiento de la piel

Tono de la piel & Densidad

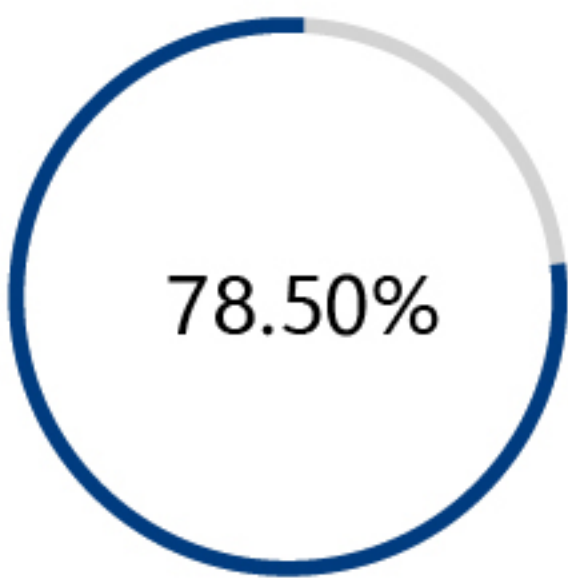

LIFTING

Efecto lifting gracias al mejoramiento de la densidad causada por la proliferación de células dérmicas


Hidratación de la piel

Reafirmación de los poros

Mejora en la elasticidad de la piel

Aborda el cuidado de la piel como salud no como belleza

Polímero de ADN

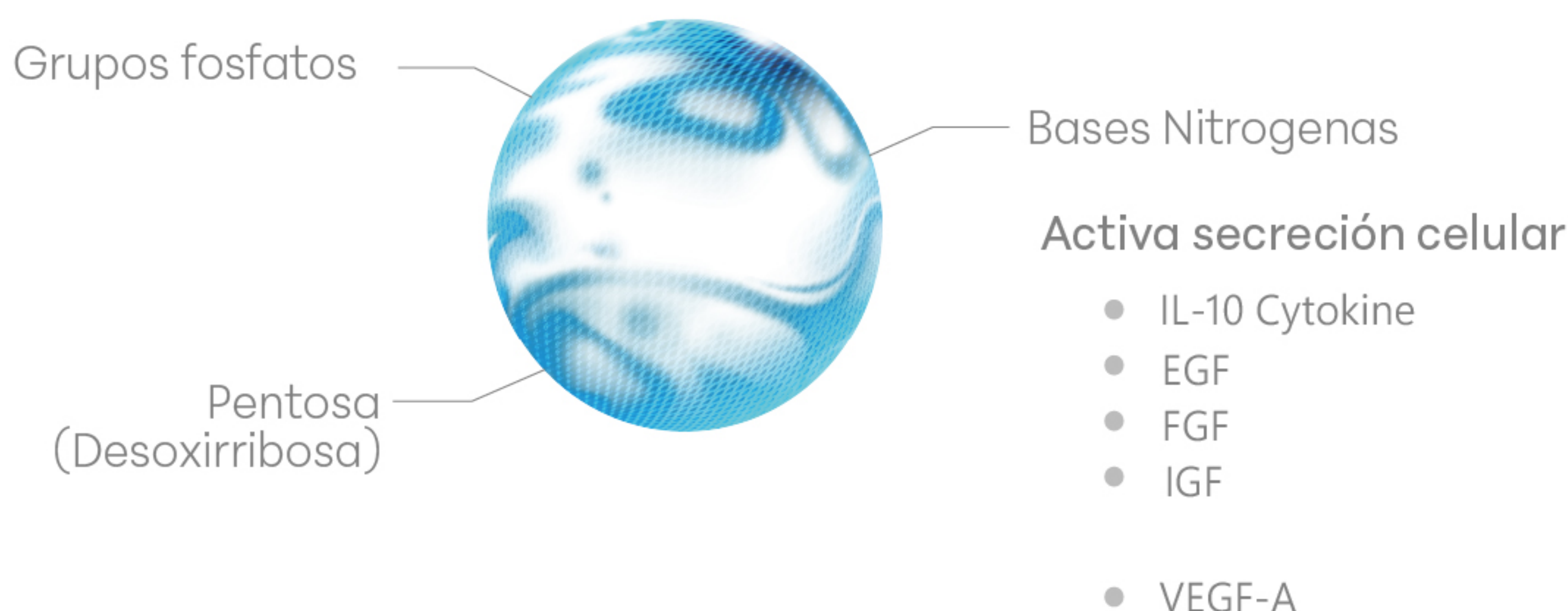


Los Polinucleótidos(PN) de grado medico estimulan la recuperación de heridas por medio del aumento de la tasa de crecimiento de los fibroblastos.

También promueve la síntesis de colágeno elastina para aumentar la densidad y el grosor del dermis de la piel

Seguridad & Elasticidad

AETERDERM®PURI EYES
usa únicamente PN de grado
medico certificado que ha obtenido
altos resultados en el analisis de CoA.

AETERDERM®PURI EYES
tambien es producido en
instalaciones esterilizadas que
están certificadas con ISO y GMP.

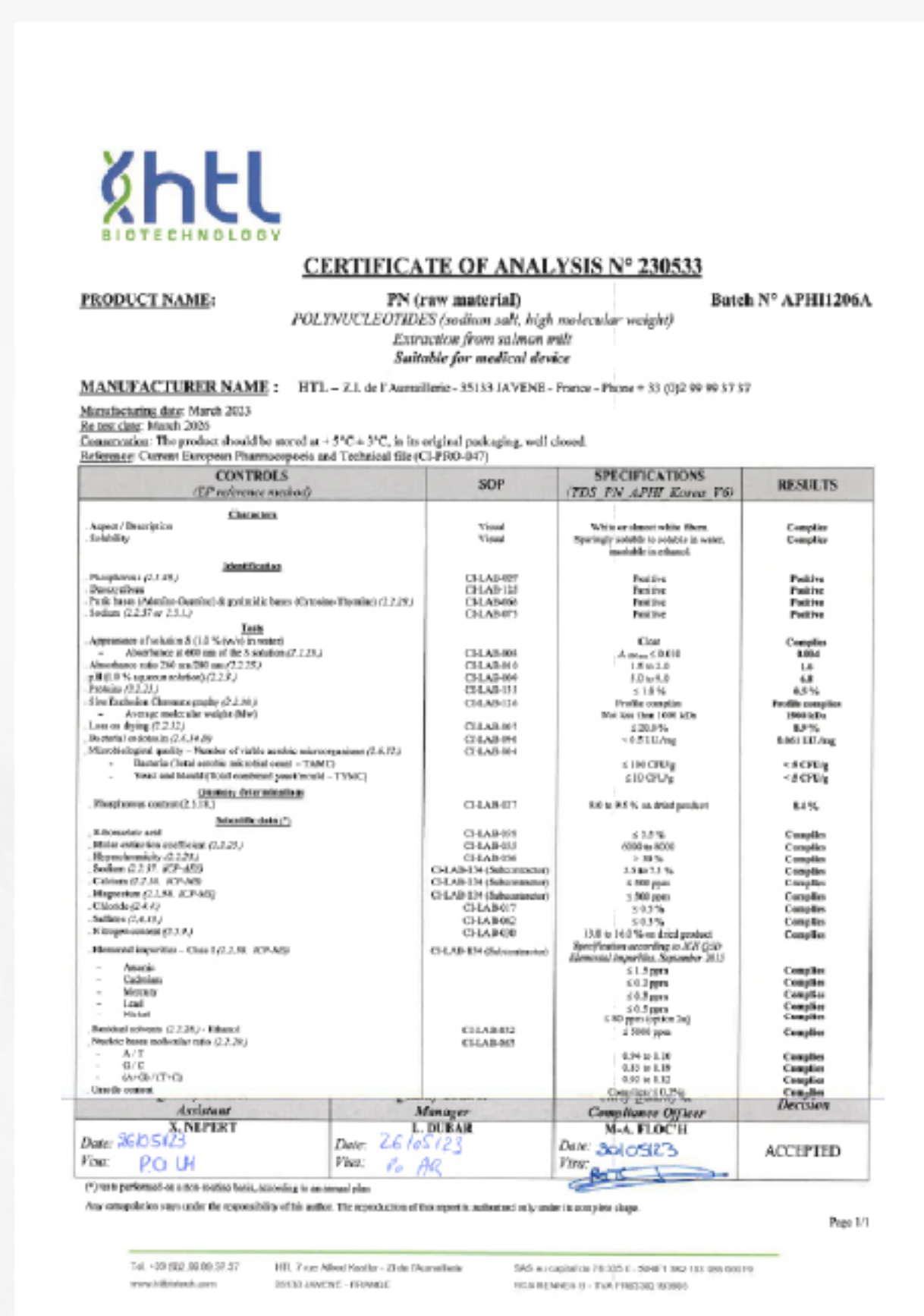

Certificate of analysis (CoA)
(HTL Biotechnology, Medical grade)

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

for use with AETERDERM®PURI EYES



Tus ojos son los que más se expresan
Pero son los que tienen la piel más delgada en tu cara
por lo que son los primeros en obtener arrugas


Dale fuerza a tu piel cansada
La piel recuerda tu cuidado

PURI EYES PDRN PATCH


La colaboración de efectos
Calma la piel irritada
Después del tratamiento
con PURI EYES



Polimeros a base de plantas naturales

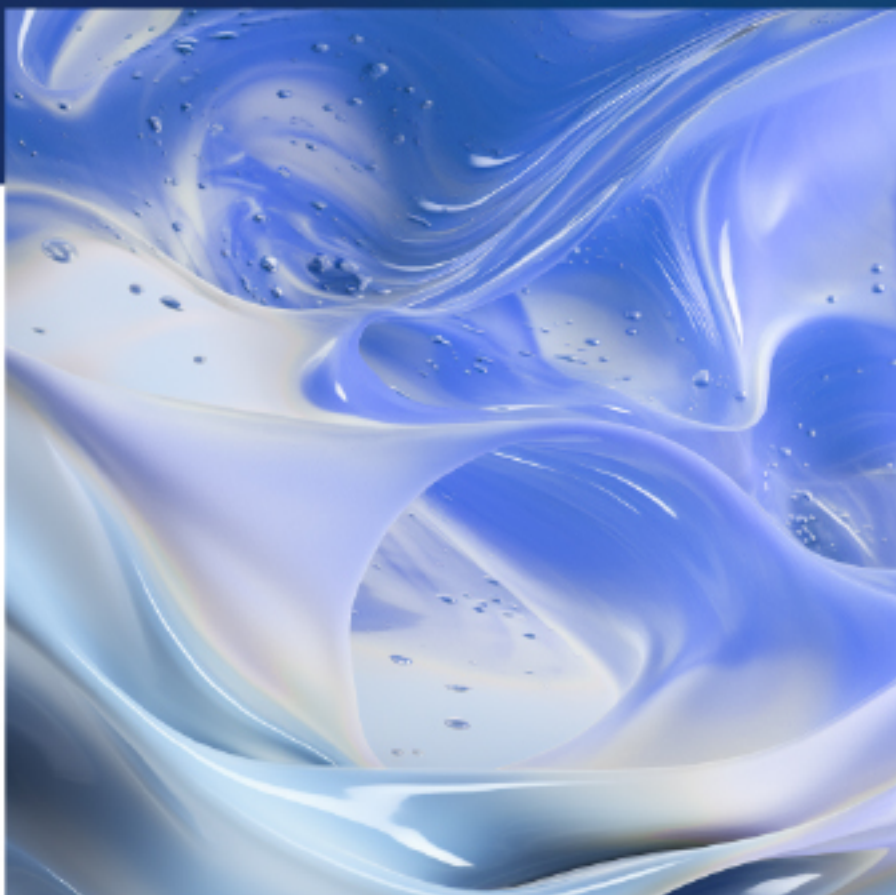

Certificado de parches de doble función de MFD

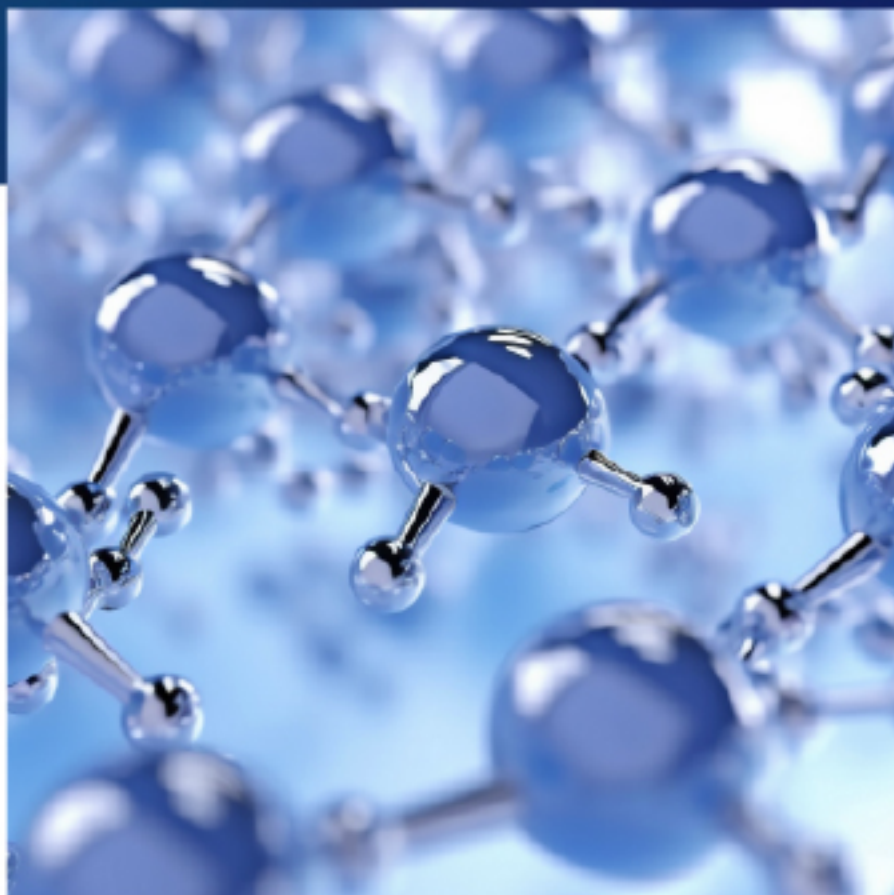

Particulas de gel sensibles a la temperatura

Ingredientes de prescripción específicos

Para el cuidado posterior al tratamiento de PURI EYES



PDRN
Ingredientes para la regeneración con las mismas propiedades que PURI EYES PN



HA
Hidratación intradérmica



Colágeno
Mejora la elasticidad

Biomateriales para la reparación de tejidos



Alantoína
Hidratación & Calmante



Coral
Balancea la grasa e hidrata, Alivia los problemas de la piel

Hidratación & Calmante



Niacinamida
Blanqueamiento de la piel



Adenosina
Antiarrugas




Acetato de tocoferilo
Antioxidante

Ingredientes funcionales


Antes & Después

Test de raspado para migración celular

AETERDERM®PURI EYES

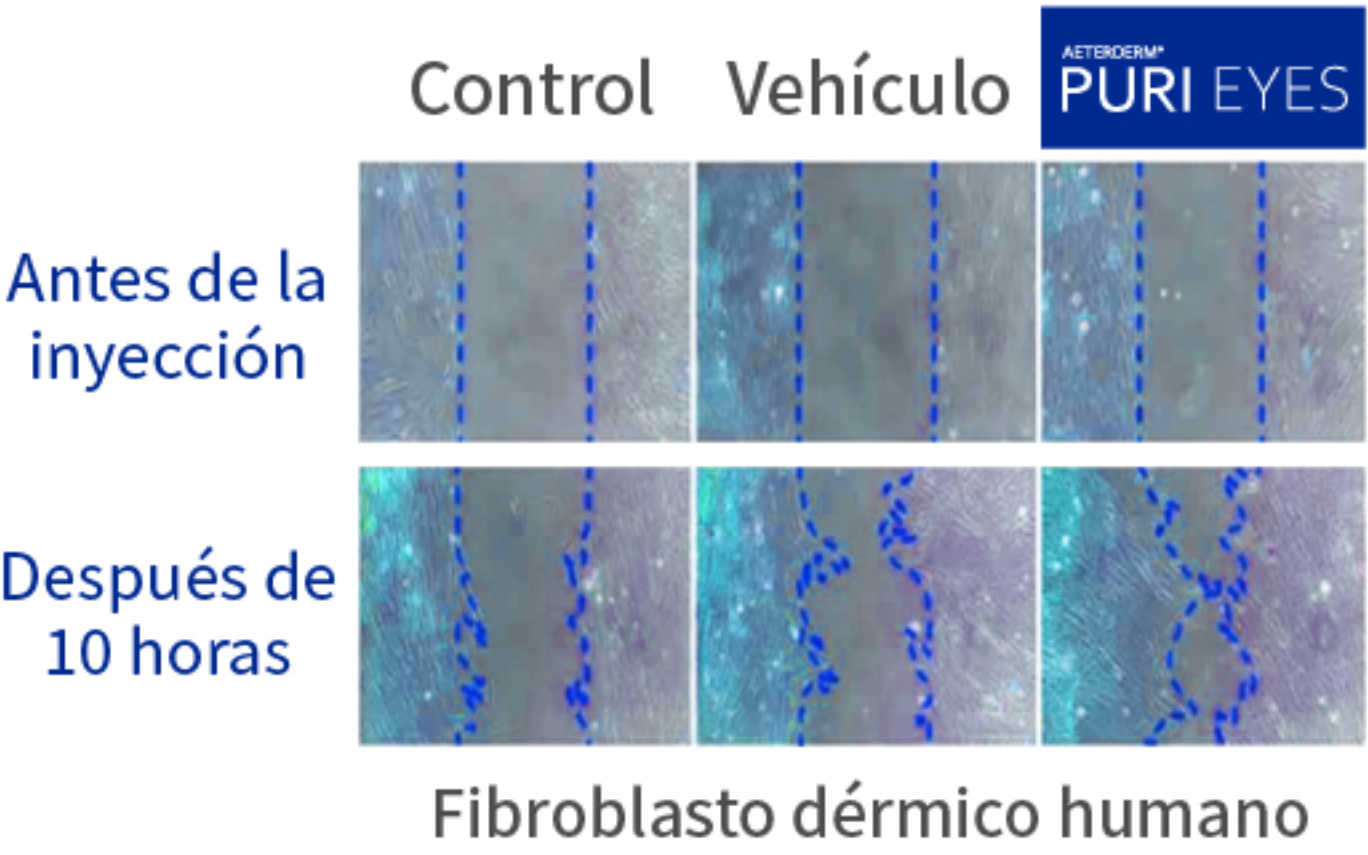


Sci Rep 2020;(10)

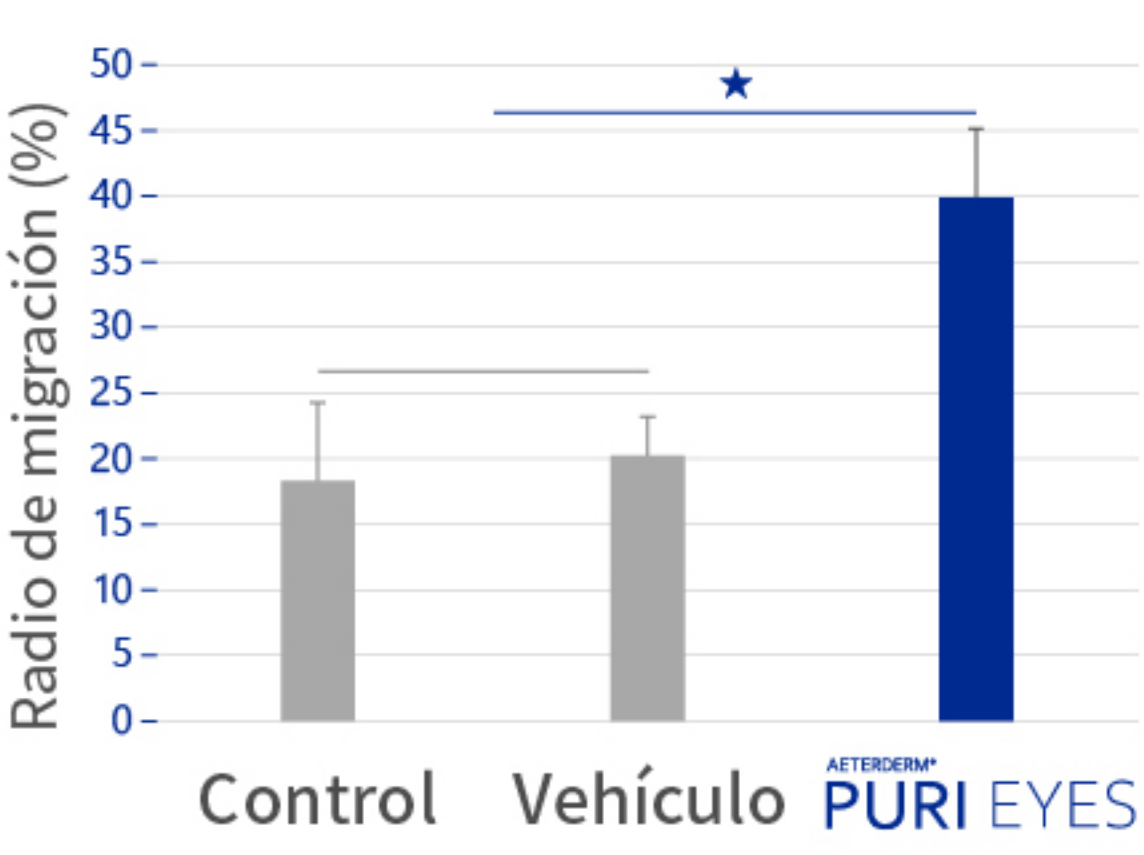


Referencias) Sci Rep 2020;(10)

Mejora las células de piel muerta e hidrata

Mejora de las células de piel muerta(% , media)

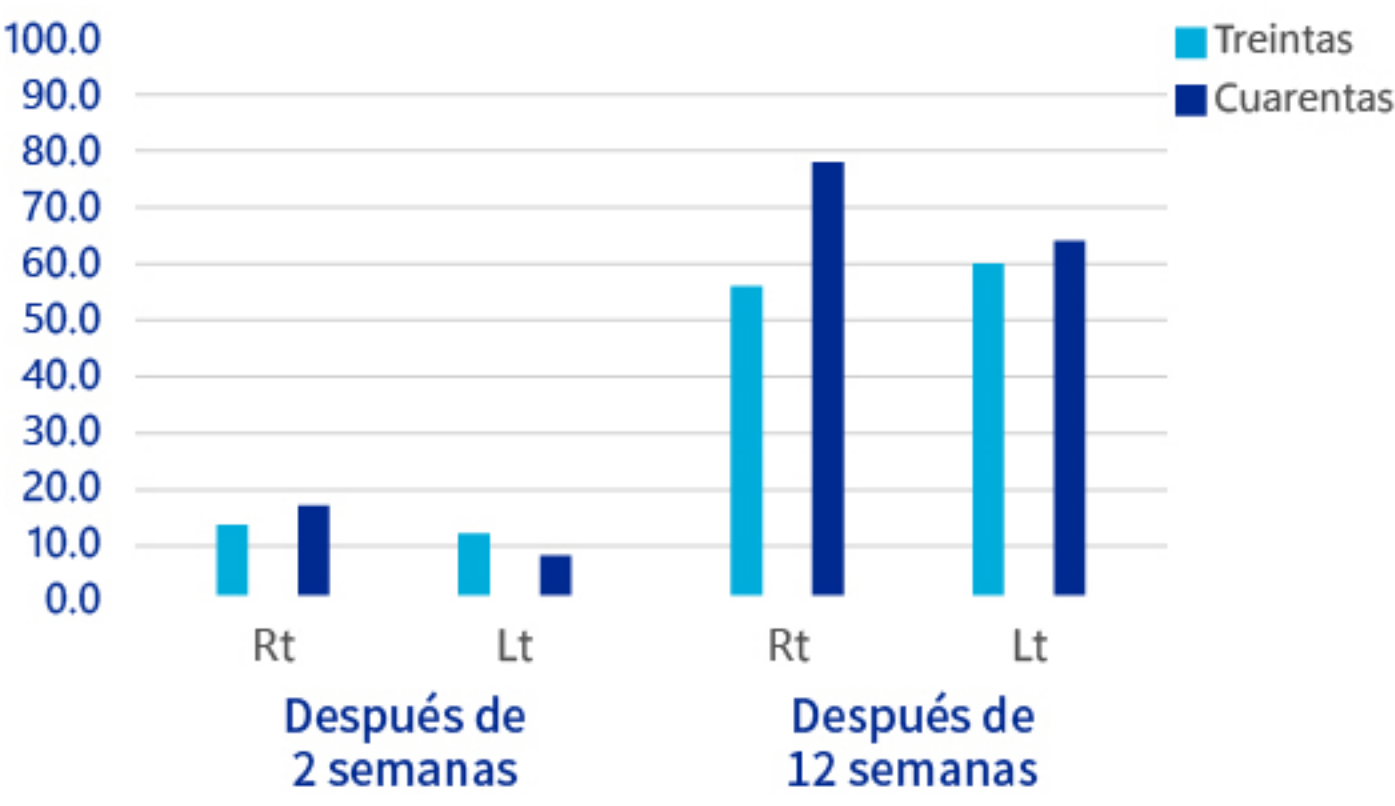

Mejora de la hidratación de la piel(% , media)

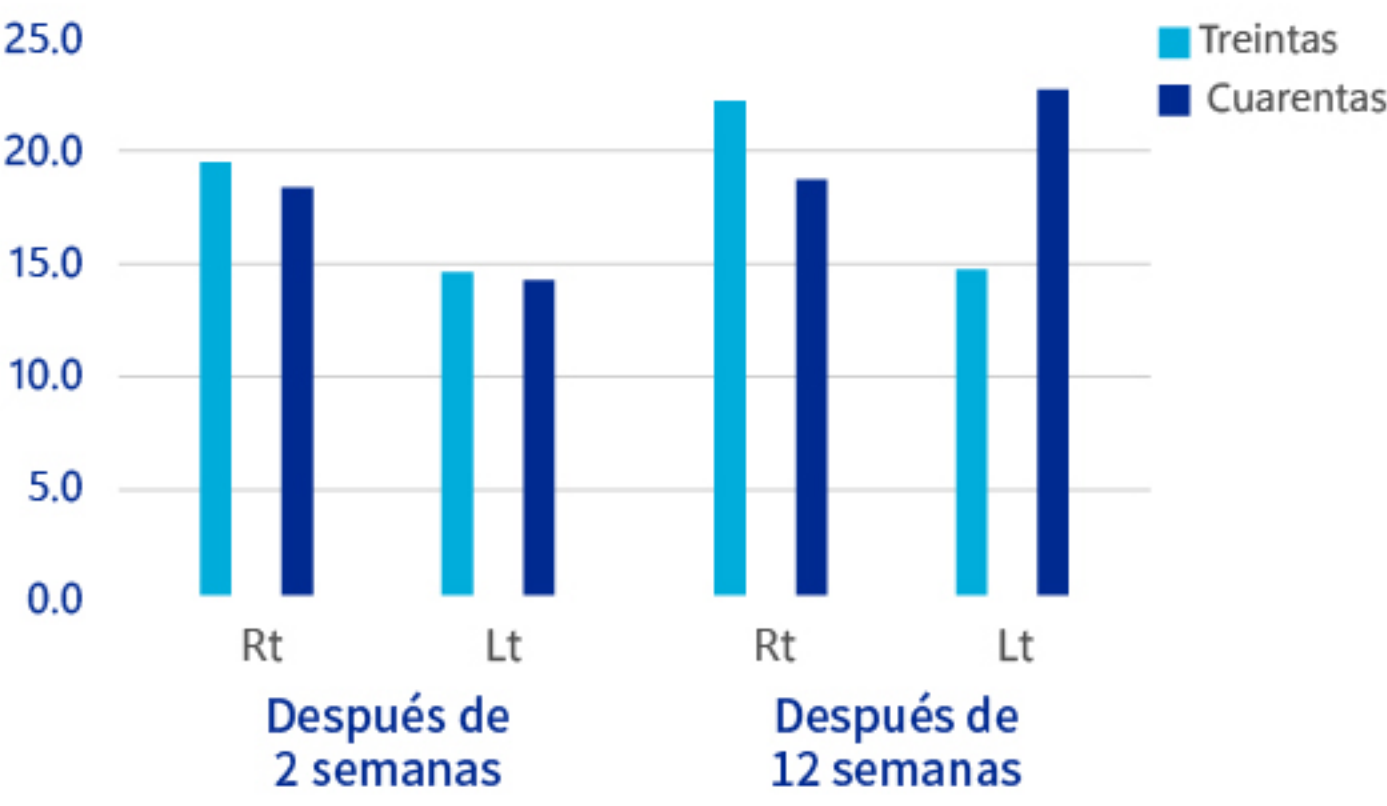

Referencias) Dermatol Ther 2016;29:37-40

Mejora del brillo & la textura

Antes del tratamiento tratamiento

12 semanas después del tratamiento



lado derecho

Lado izquierdo

lado derecho

Lado izquierdo


Referencias) Mejora del tono de piel después de 12 semanas de la inyección fotografiado por VISIA-CR
Ensayos clínicos por Dermatol Ther 2016;29:37-40

Rugosidad & volumen de los poros

Rugosidad



Estado inicial

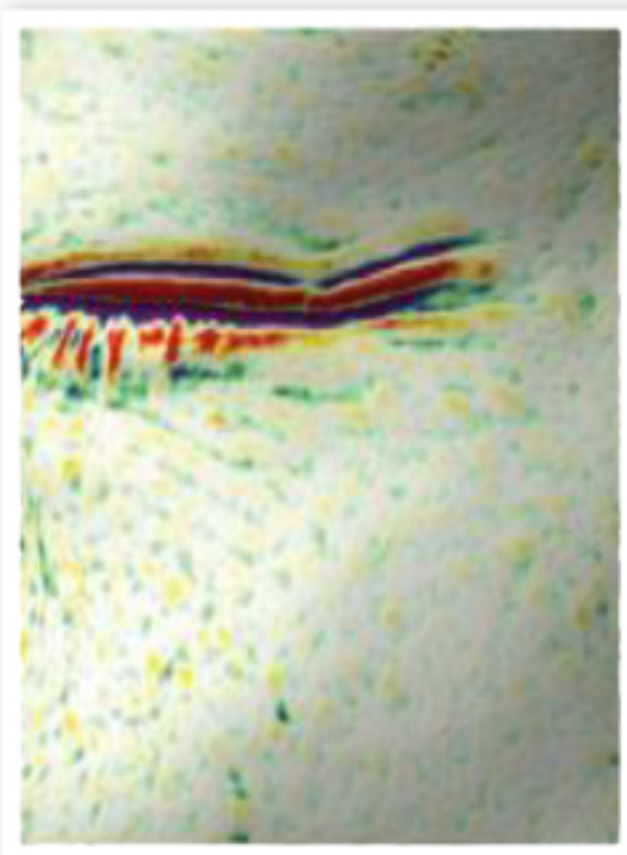


16 semanas después

Volumen de los poros



Estado inicial

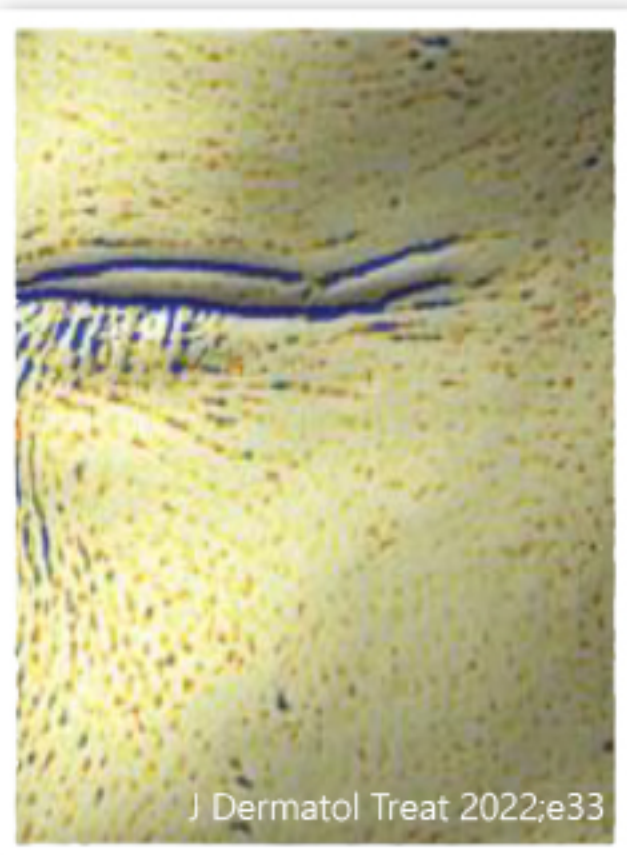


16 semanas después




Referencias) J Dermatol Treat 2022;e33

Regeneración de los tejidos

Antes del tratamiento

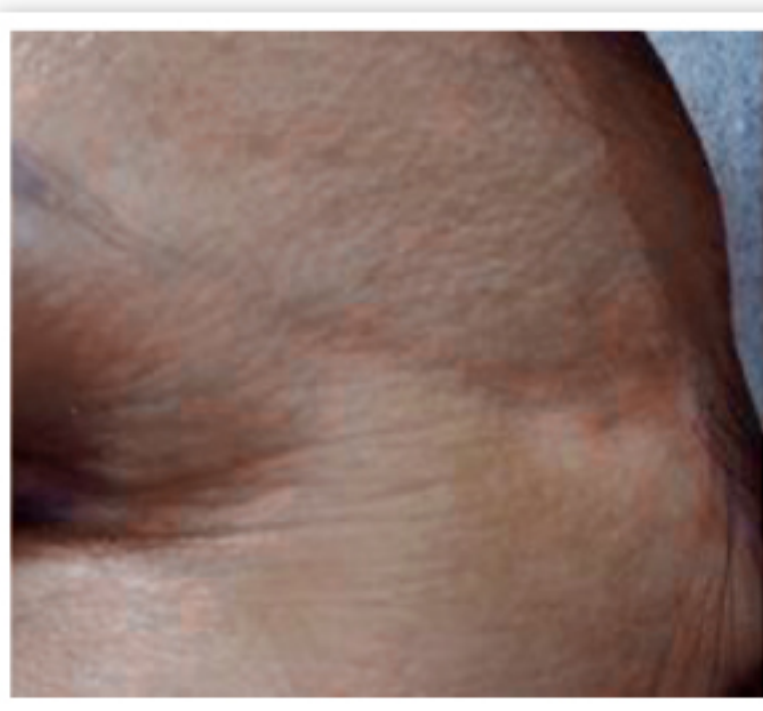

2 meses después de seis tratamientos

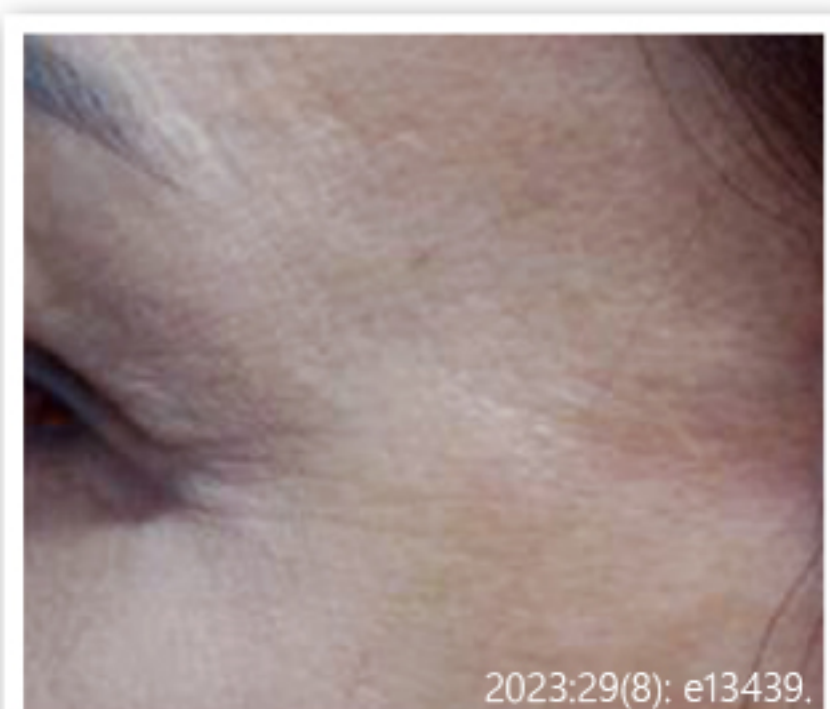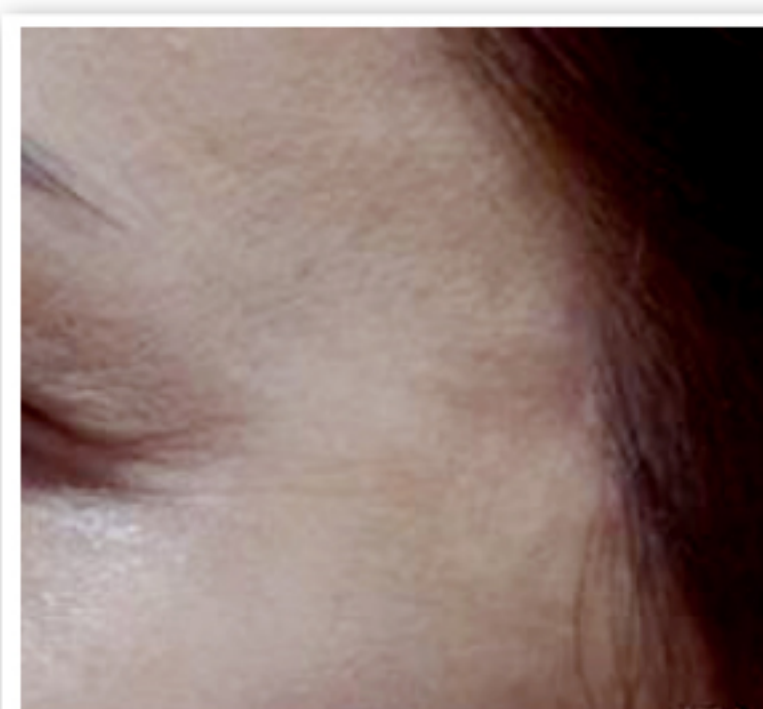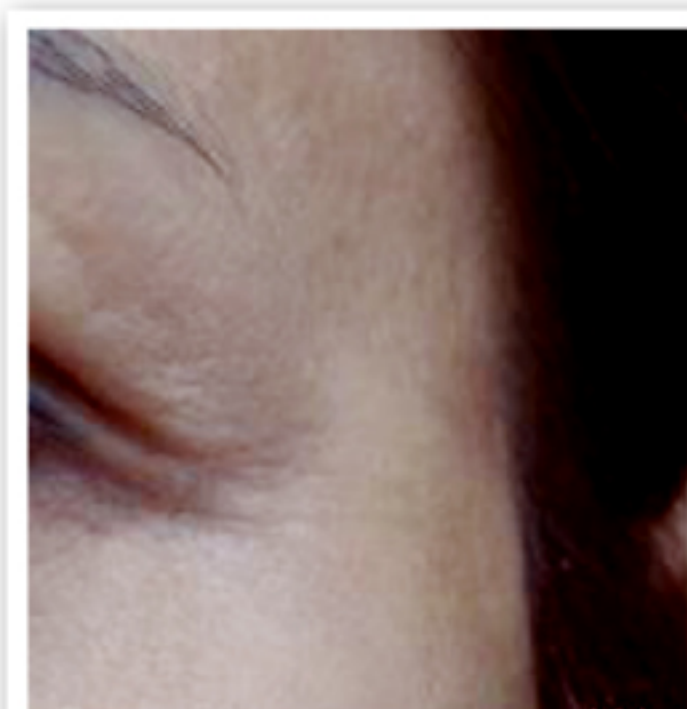


2023;29(8): e13439.

Regeneración de cicatrices profundas

Antes del tratamiento



2 meses después de cuatro tratamientos

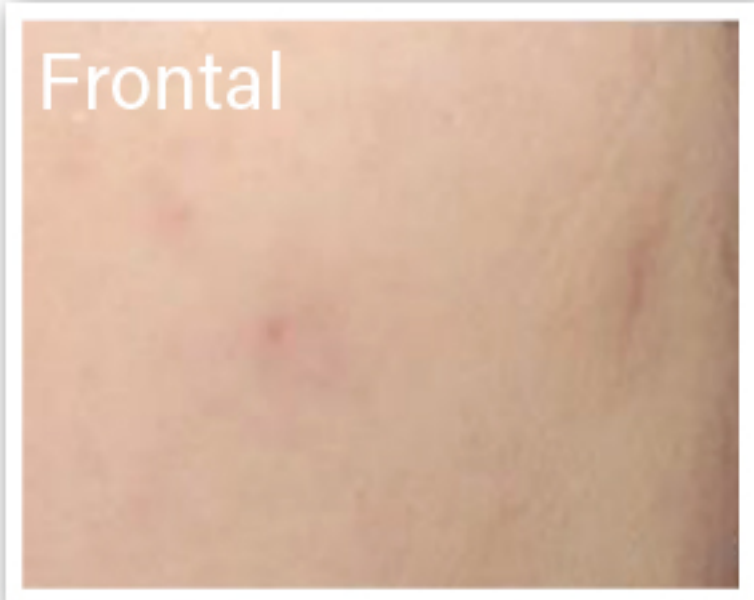

Referencias) Skin Res Technol 2023;29(8): e13439.

AETERDERM®


PURI EYES



GUIA DE USO

PASO 1. AETERDERM®PURI EYES

Proceso para el tratamiento

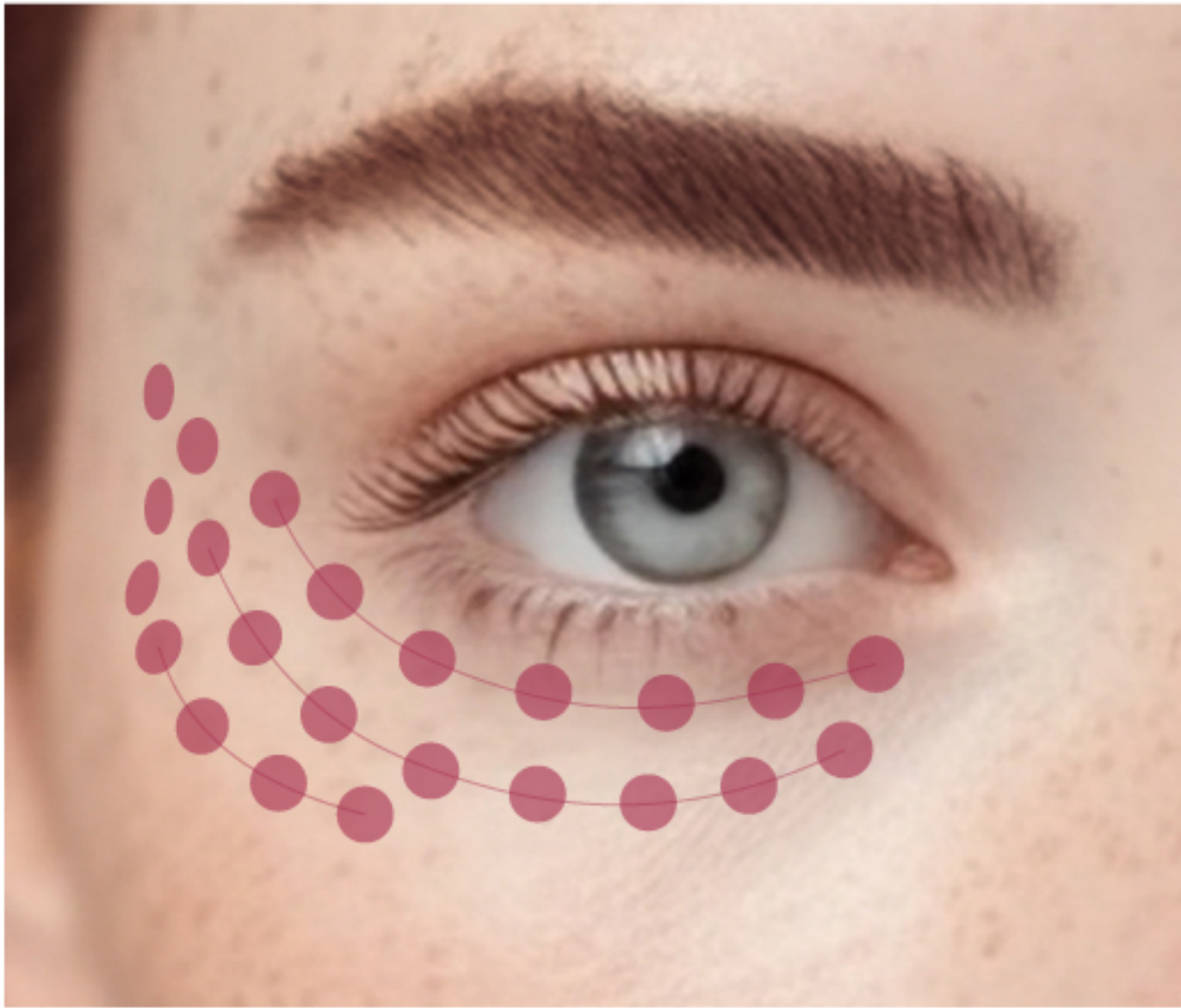

Aguja recomendada 32G~34G agujas Meso	Detalles de la inyección 0.02~ 0.035cc por cada punto haciendo pequeños relieves 6~8mm intervalos 15~30 puntos por area del ojo
Angulo de inserción de la aguja ∠10°~15° Intradérmica	

1. Lavar la cara de la paciente a fondo.
2. Aplique primero la crema de lidocaína en la zona a tratar. Después de la anestesia, limpie.
3. Desinfecte el área a tratar con hisopos con alcohol.
4. Deje que el paciente abra los ojos, relajarse y tratar de no entrecerrarlos.
5. Deposite el material alrededor del área a tratar lo más delicada y suavemente posible para reducir las posibilidades de que aparezcan hematomas e hinchazón.
6. Posteriormente, masajee suavemente la zona y pídale al paciente que también masajee suavemente la zona de tratamiento durante un par de días para distribuir el producto.
7. Se pueden utilizar todas las técnicas de inyección estética en la capa subcutánea superficial.



AETERDERM®
PURI EYES PRO
AETERDERM®
PURI EYES PDRN PATCH

Opciones de Tratamiento Complementario

I Técnicas manuales Para técnicas avanzadas de inyección

PURI EYES permite la administración precisa de los principios activos para favorecer una mejora inmediata de la piel con un tiempo mínimo de recuperación.

- Micro pápulas (Nappage)

II Administración asistida por dispositivos Para una profundidad precisa y un volumen uniforme

La aplicación precisa en la zona objetivo mejora la consistencia del procedimiento y favorece resultados reproducibles.

- Meso Gun / Injector Gun
- MTS (Microneedling)

III Cuidados y apoyo postratamiento Opciones de combinación para PURI EYES

Cuando se utiliza junto con PURI EYES, ayuda a promover la regeneración de colágeno y la recuperación postratamiento, mejorando los resultados generales.

- RF Microneedling y Láser Fraccionado (Secret RF, Potenza, CO₂ , etc.)
- Dispositivos de recuperación no invasivos (Cryocell, LDM, LED, etc.)

Cuidados Posteriores

PARTE 2. AETERDERM®PURI EYESPATCH

Apoyo a la recuperación



1. Desinfecte el área tratada frotándola suavemente con hisopos con alcohol.
2. Aplique cuidadosamente el parche previamente enfriado sobre la zona tratada.
3. Después de 20 minutos, retire el parche y masajee suavemente la esencia restante hasta su completa absorción.
4. Recomiende al paciente utilizar AETERDERM®PURI EYESPATCH durante 2–3 días después del tratamiento.

AETERDERM®PURI EYESPATCH responde a la temperatura de la piel para favorecer la penetración profunda de los principios activos y una recuperación más eficiente.



Resultados después del tratamiento

PURI EYES

Piel más suave
Cutis más claro
Más balance de la grasa

La primera sesión

Normalmente dura
4 semanas

PURI EYES PATCH

PDRN cura las heridas más rápido
Complemento de HA & Colágeno
Alivia la piel irritada
Alivia la resequedad causada por
el tratamiento

Aumento de la elasticidad de la piel
Mejora en las arrugas
Reducción de poros

La segunda sesión

Después de 2 a 4 semanas
Normalmente dura 3 meses

Reforzamiento de la barrera
cutánea dañada
Calma la sensación de calor
constante en la piel
PDRN restaura los tejidos de la piel
más rápido

Mejora la condición general de la piel
La piel luce mucho más sana
La piel luce mas brillante y firme

Tercera sesión

Después de 1 mes
Normalmente dura 6 meses


Evita la pigmentación de melanina
Blanqueamiento de la piel e hidratación



AETERDERM®



EFFECTOS SECUNDARIOS COMUNES DE LA INYECCIÓN

Procedimientos que inyectan efectivamente ingredientes en la piel causan mucha irritación y efectos secundarios.

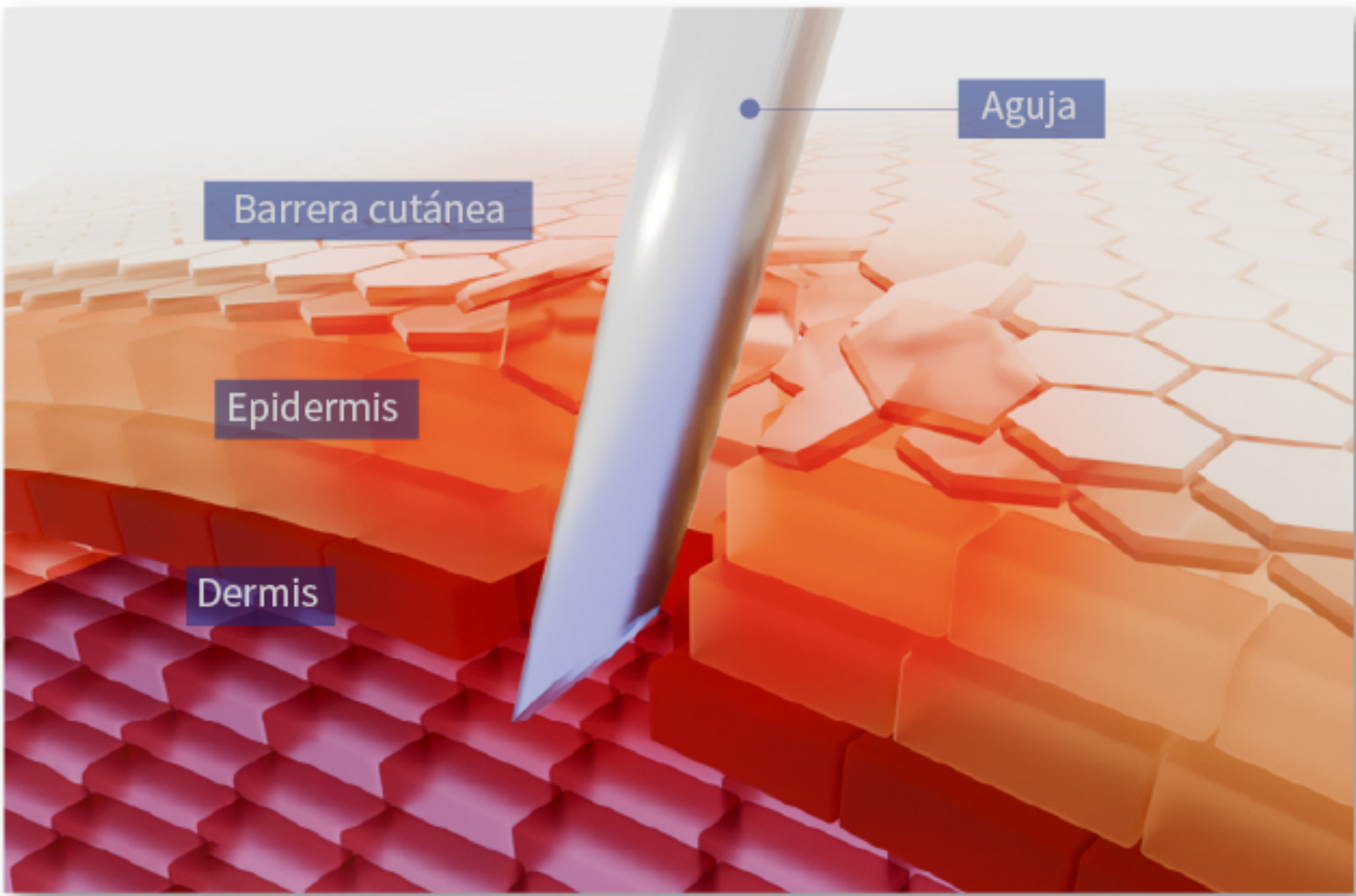

Cuando la aguja penetra en la piel, provoca una fuerte irritación en la epidermis y la dermis.

Calor causado por la irritación
Evaporación y sequedad de la piel
Barrera cutánea dañada

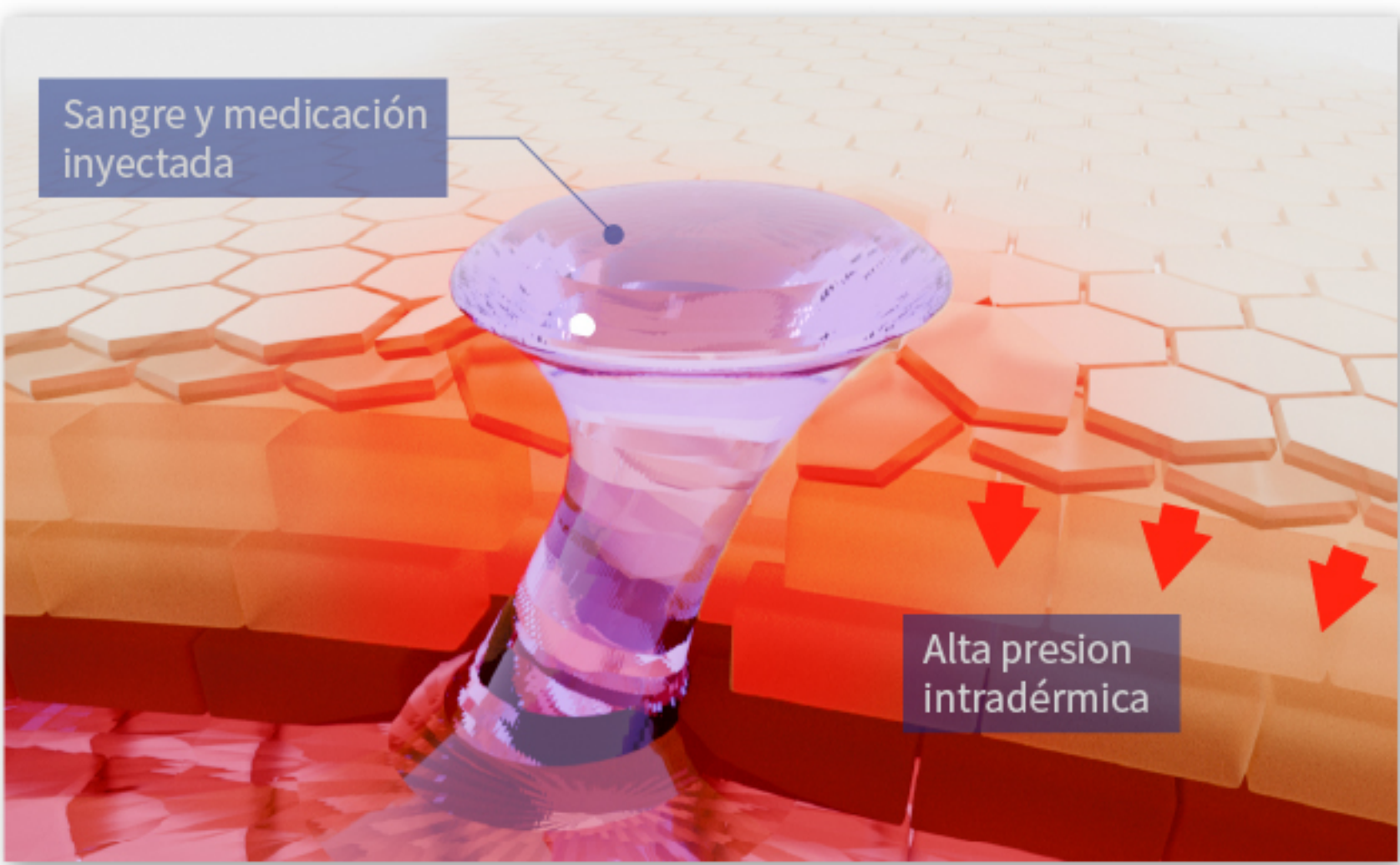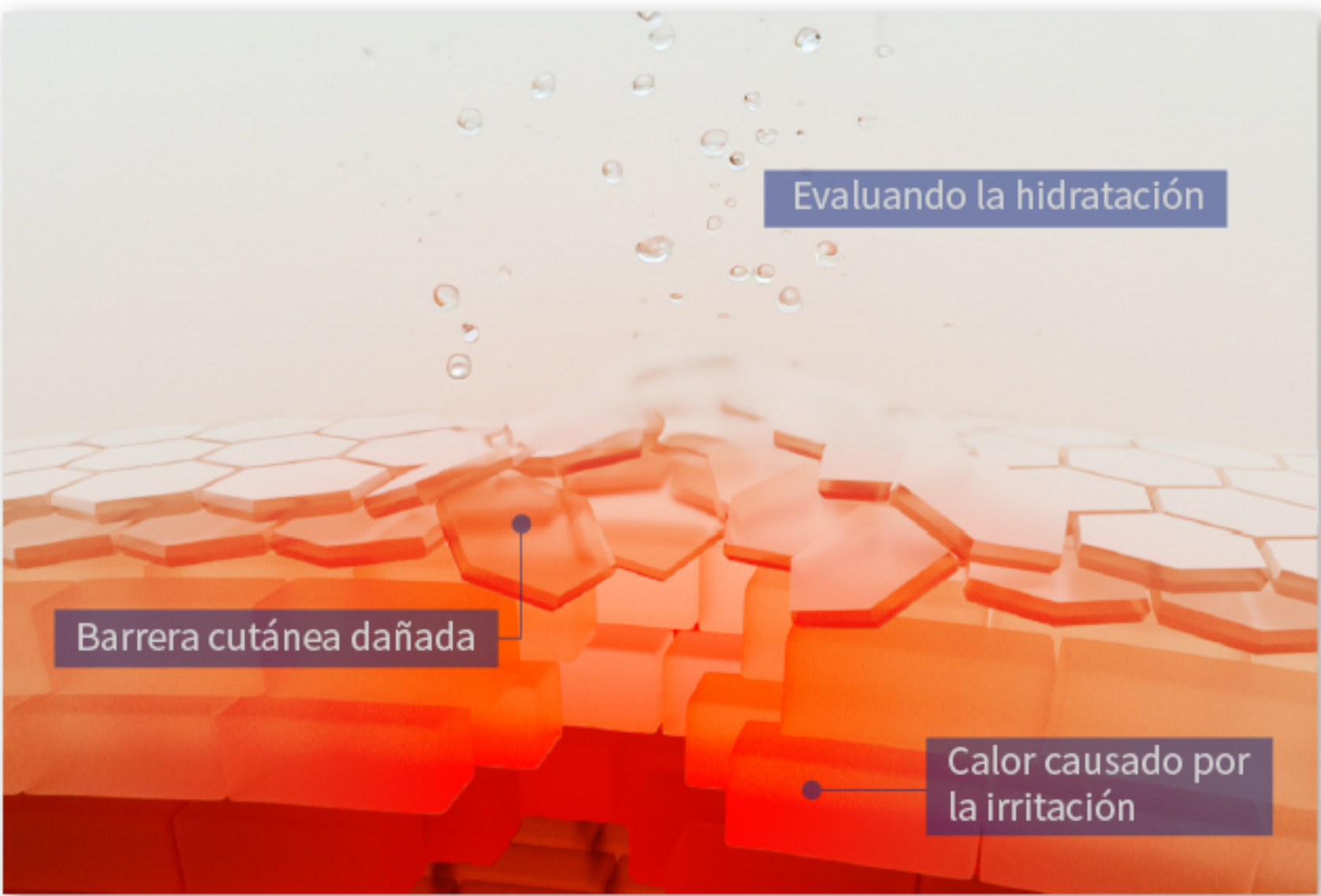


Fuga de medicamento y sangre debido a la alta presión intradérmica y un pequeño orificio de inyección sin cicatrizar.

AETER PURI EYES PDRN PATCH


Es un parche de cuidado posterior creado para mejorar los problemas crónicos de los procedimientos de inyección dérmica y aliviar rápidamente la piel irritada.

ACCIÓN COMBINADA


De PURI EYES & PURI EYES PDRN PATCH

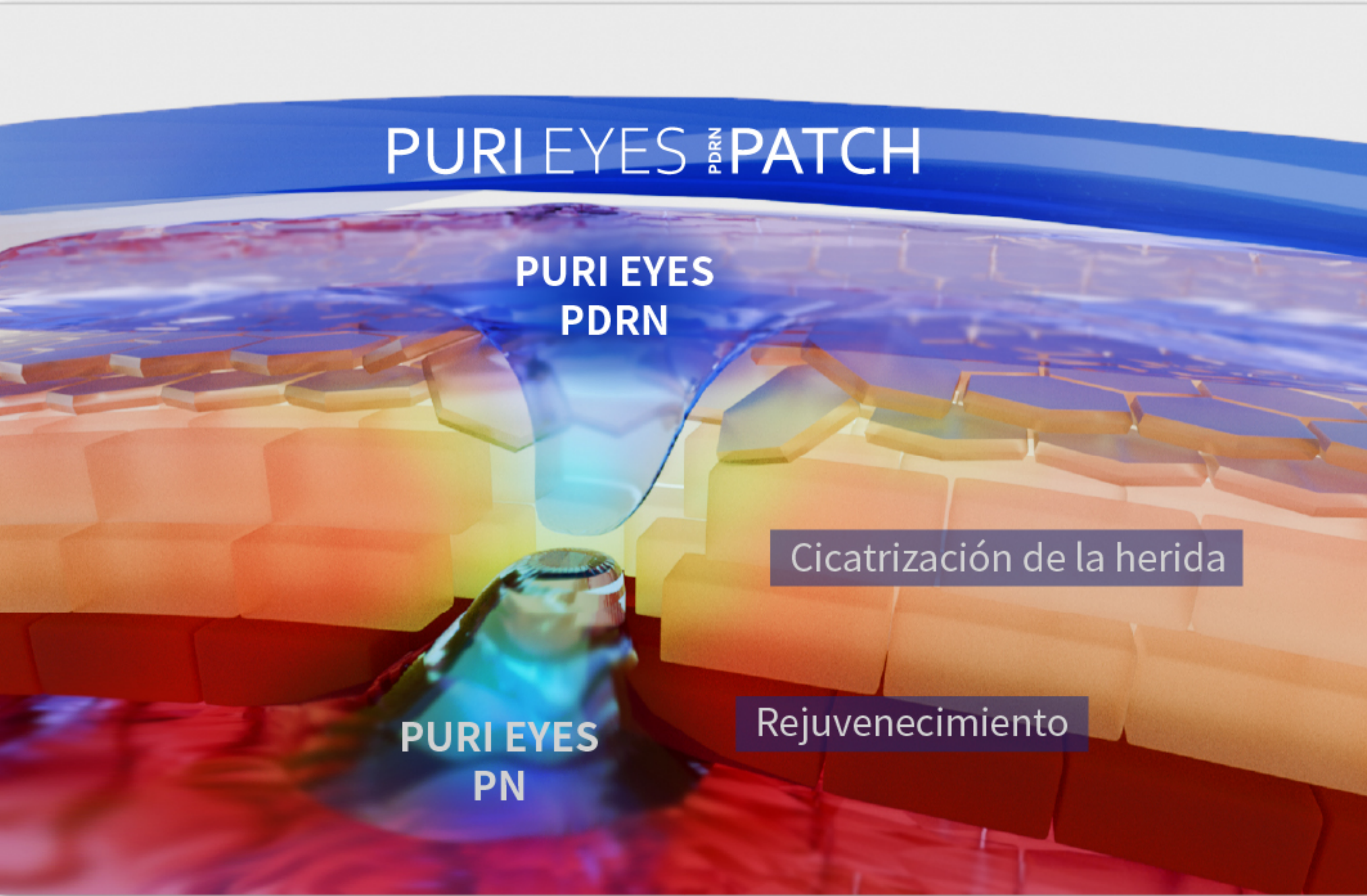


- Al aplicar PDRN de alta concentración, que tiene las mismas propiedades físicas que PURI EYES PN, sobre la piel, se evita la salida de fármacos intradérmicos debido a la ósmosis.
- PDRN y PN trabajan tanto en la epidermis como en la dermis para reparar heridas y regenerar tejido interna y externamente.

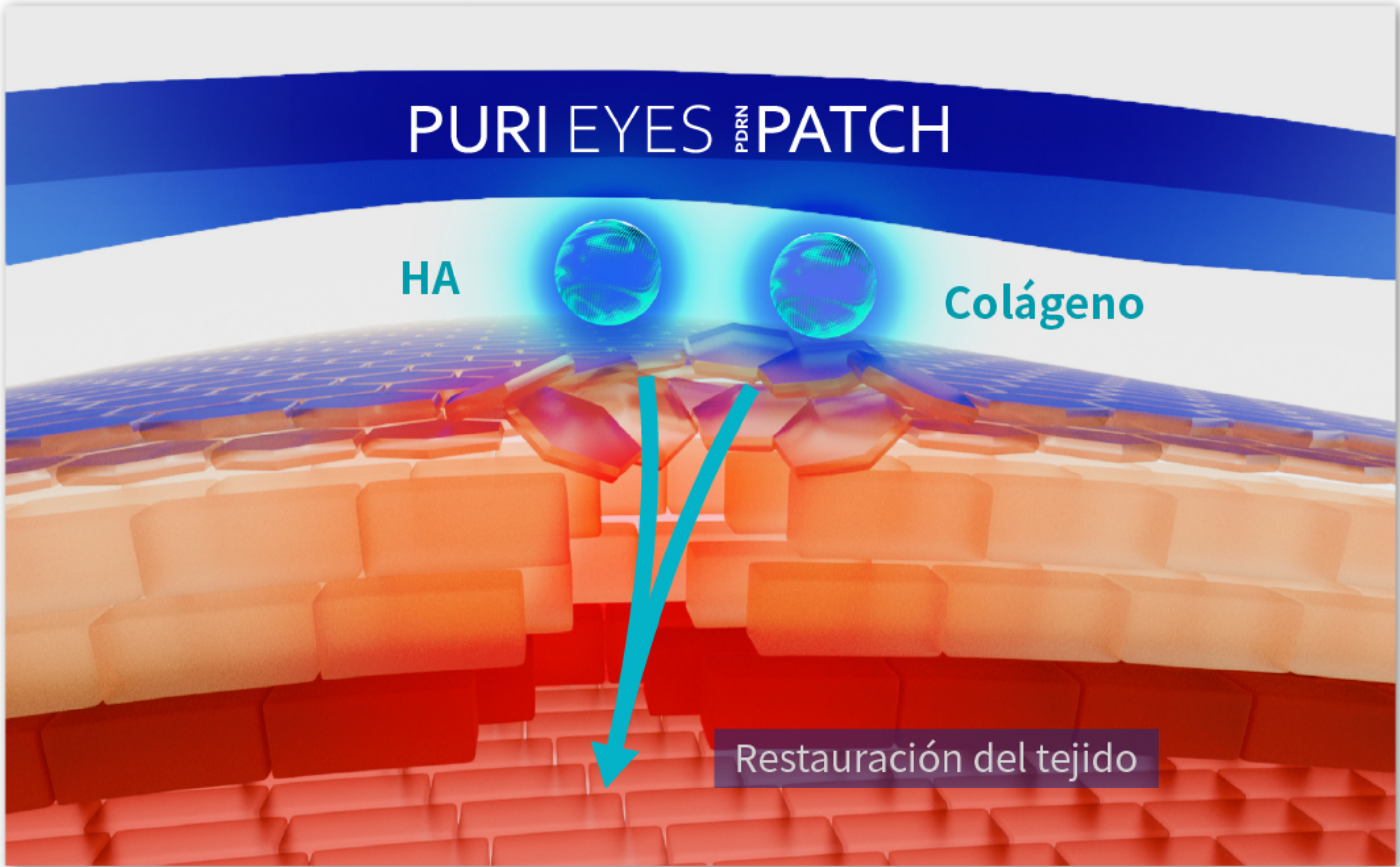


- El HA y el colágeno hidrolizado, biomateriales para la reparación de tejidos, pueden ingresar a la dermis a través del orificio creado durante el procedimiento de inyección.

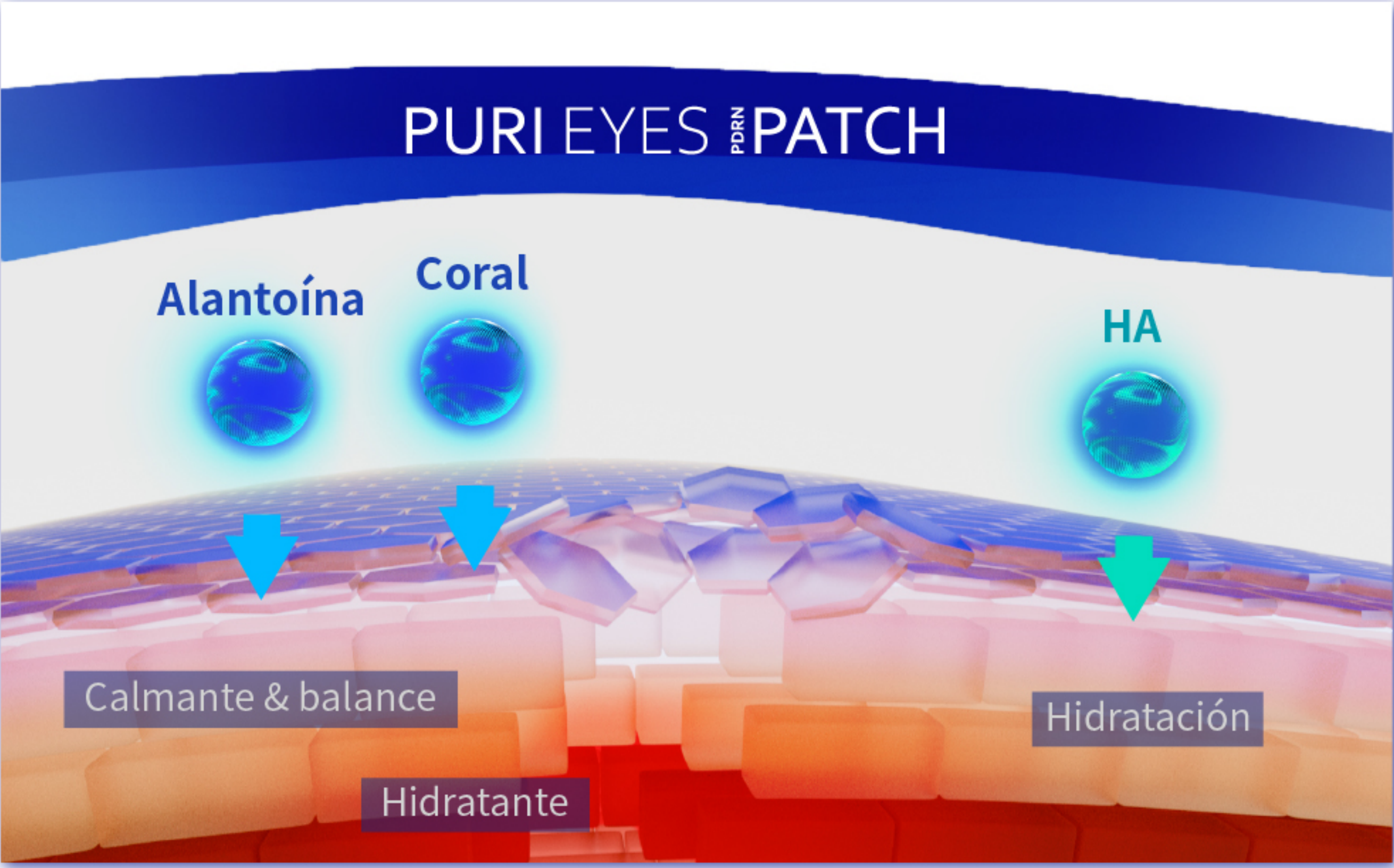

- La alantoína alivia la piel irritada y los ingredientes hidrolizados de coral y HA proporcionan suficiente hidratación a la piel seca debido al calor.
- Para maximizar el efecto calmante sobre la piel, prepare y aplique el PURI EYES PDRN PATCH mientras esté frío.

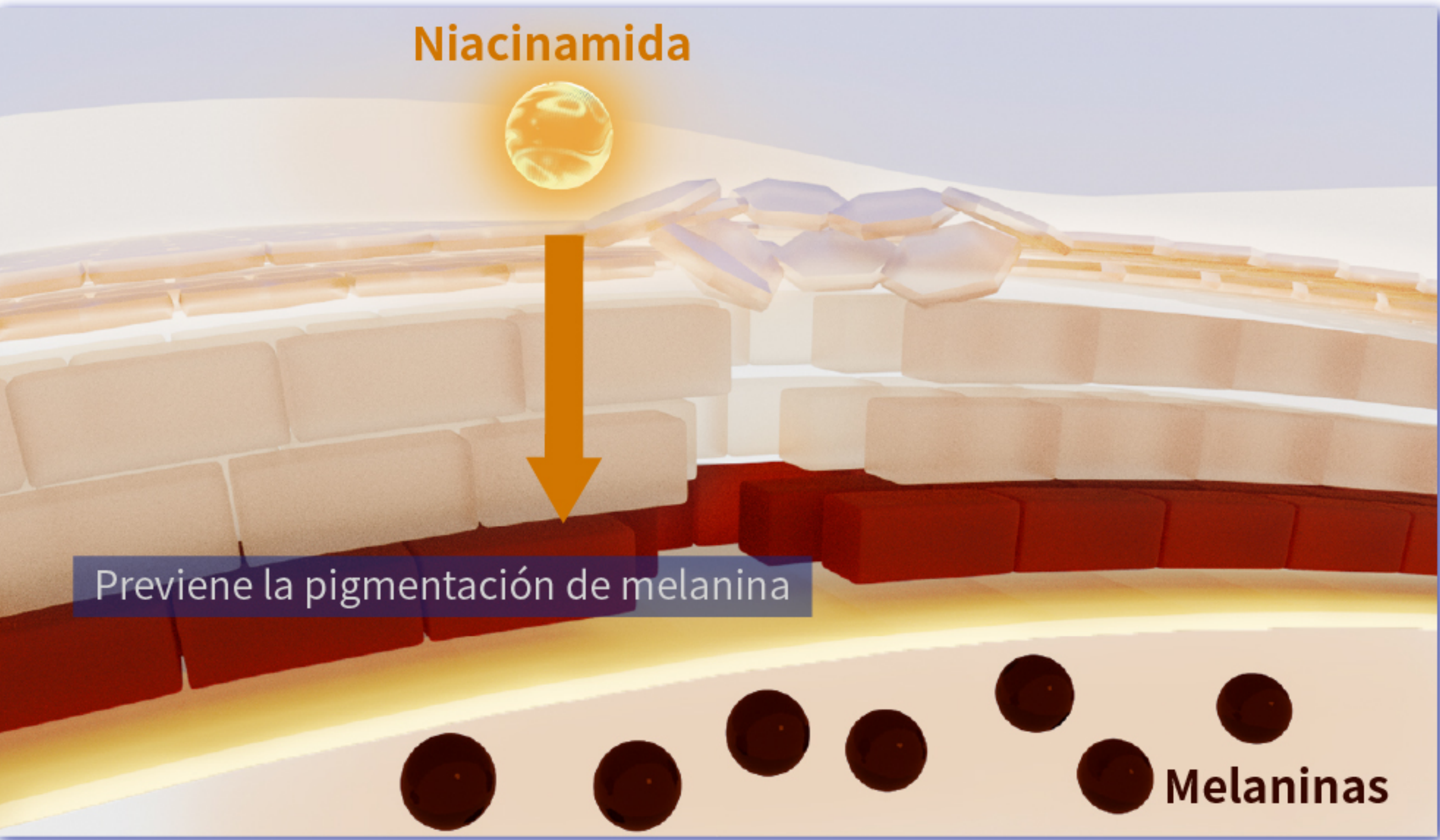

- Cuando la piel irritada y debilitada recibe una estimulación excesiva de los rayos UV, produce un exceso de melanina. La niacinamida impide que esta se asiente en la piel, previniendo así las cicatrices pigmentadas.

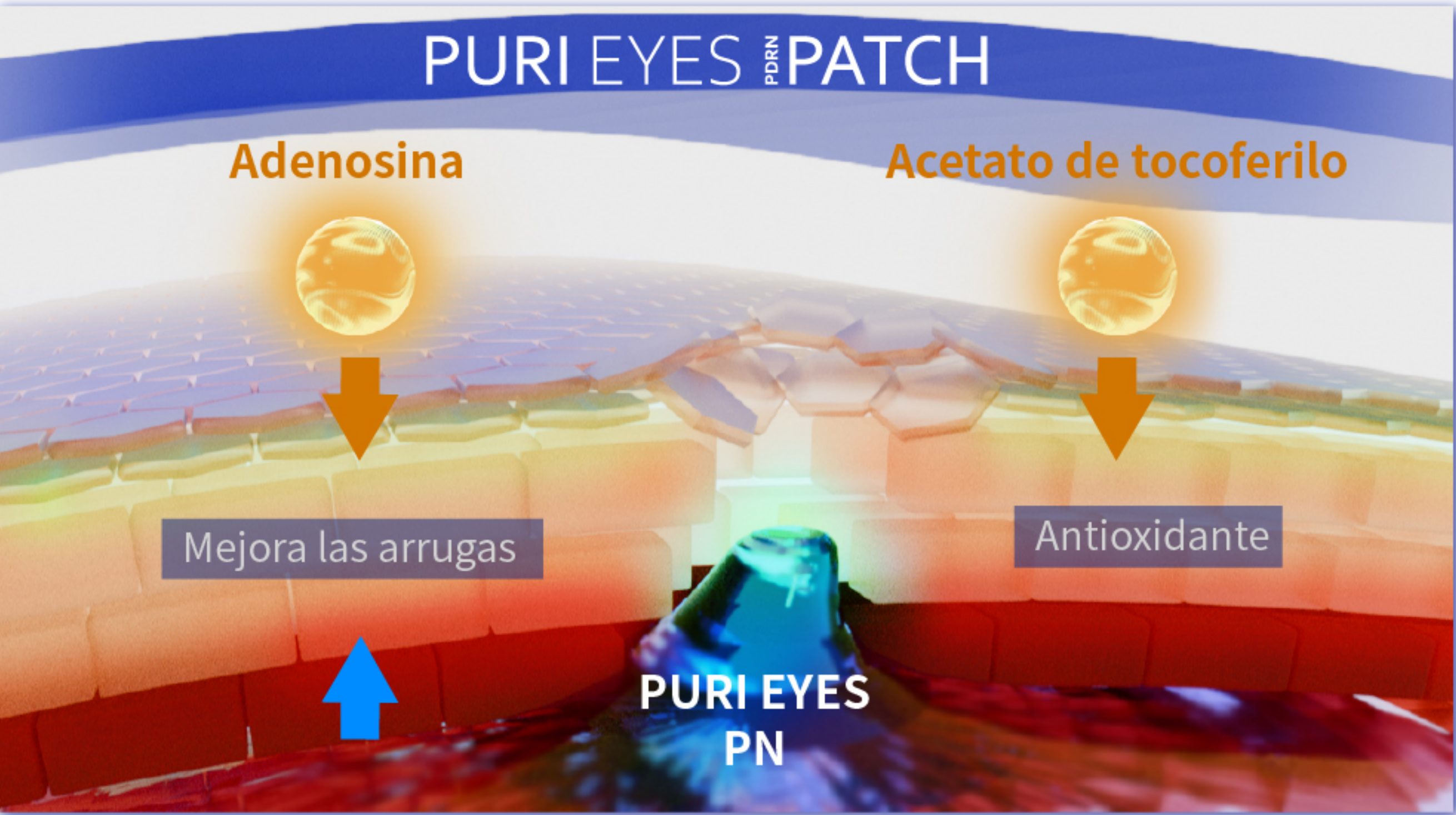

- La adenosina tiene un excelente efecto en la reducción de arrugas y, junto con PURI EYES, mejora la eficacia del tratamiento, mejorando las arrugas de la piel desde el interior y el exterior.
- El acetato de tocoferilo es un antioxidante especializado que previene la oxidación y el envejecimiento cutáneo acelerado por el calor.

Fortalece la regeneración
Reafirma la estructura de la piel



MECANISMOS

Doble acción Farmacológica de los Polinucleótidos

Agonista receptor A2A

El polinucleótido de **AETERDERM®PURI EYES** se conecta selectivamente al receptor A2A e induce la transición anti base.



También activa 3 factores de crecimiento para regenerar el tejido dañado.




Induce la angiogénesis mediante la secreción del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y mejora los capilares cutáneos que disminuyen con la edad. El aumento de los capilares cutáneos puede prevenir el envejecimiento y mejorar la salud cutánea al proporcionar los nutrientes necesarios de forma fluida.




La vía de rescate

La vía de rescate sintetiza ácidos nucleicos rápidamente con menor consumo de energía e induce la regeneración celular.

Vía de síntesis de Novo sin PN

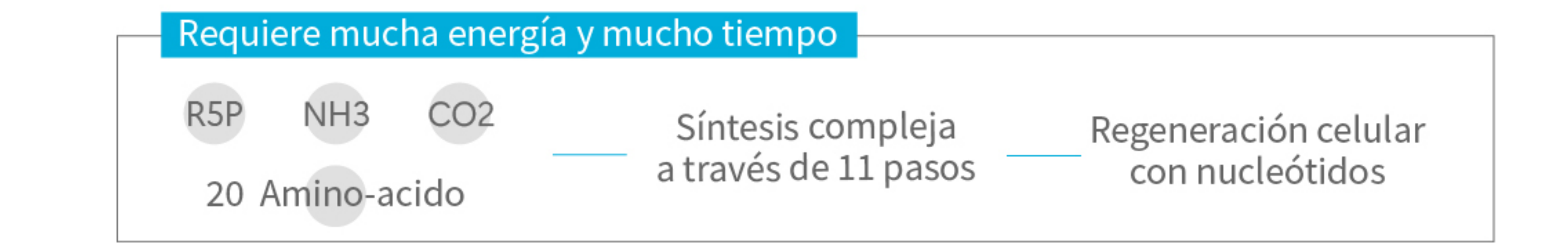

Vía de rescate con PN

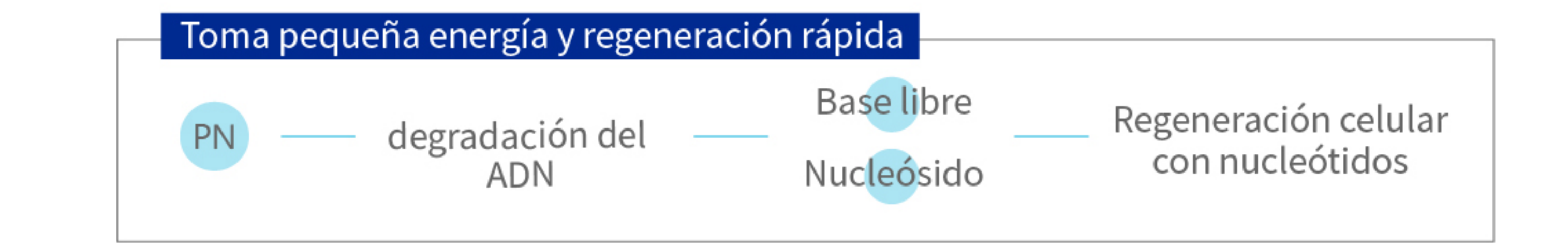

AETERDERM®

PURI EYES

Under eye skin rejuvenation

INGREDIENTES

Polinucleótido de sodio _____ 2mg/mL
Solución salina tamponada con fosfato _____ q . s

CONTENIDO

1.1 mL X 1 Syringe / Box

AETERDERM®

PURI EYES PRO

Under eye skin rejuvenation

INGREDIENTES

Polinucleótido de sodio _____ 6mg/mL
Solución salina tamponada con fosfato _____ q . s

CONTENIDO

1.1 mL X 1 Syringe / Box

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

Reduce el envejecimiento de la piel.
Parche ocular para mejorar las arrugas debajo de los ojos.

INGREDIENTES

Agua (Aqua), glicerina, dipropilenglicol, niacinamida, polvo de Chondrus crispus, bencilglicol, goma de Ceratonia siliqua (algarrobo), aceite de ricino hidrogenado PEG-60, goma xantana, pantenol, alantoína, etilhexilglicerina, acetato de tocoferilo, glicirrizato dipotásico, aceite de semilla de Ricinus communis (ricino), adenosina, cetona de frambuesa, ultramarinos (CI 77007), EDTA disódico, fluorflogopita sintética, butilenglicol, lactato de calcio, 1,2-hexanodiol, fragancia (perfume), dióxido de titanio (CI 77891), colágeno hidrolizado, hialuronato de sodio, ADN sódico, coral hidrolizado

CONTENIDO

90 g / 3.17 oz (60ea)