

AETERDERM®

HAIRIZ

3D Exo Hair Scalp Care Filler & Shampoo



AETERDERM®

HAIRIZ


3D Exo Hair Scalp Care Filler

Complejo 3D Exo

Bio Exosoma

extraído de Multiflora

Inhibición de los factores clave de la caída del cabello (DHT)

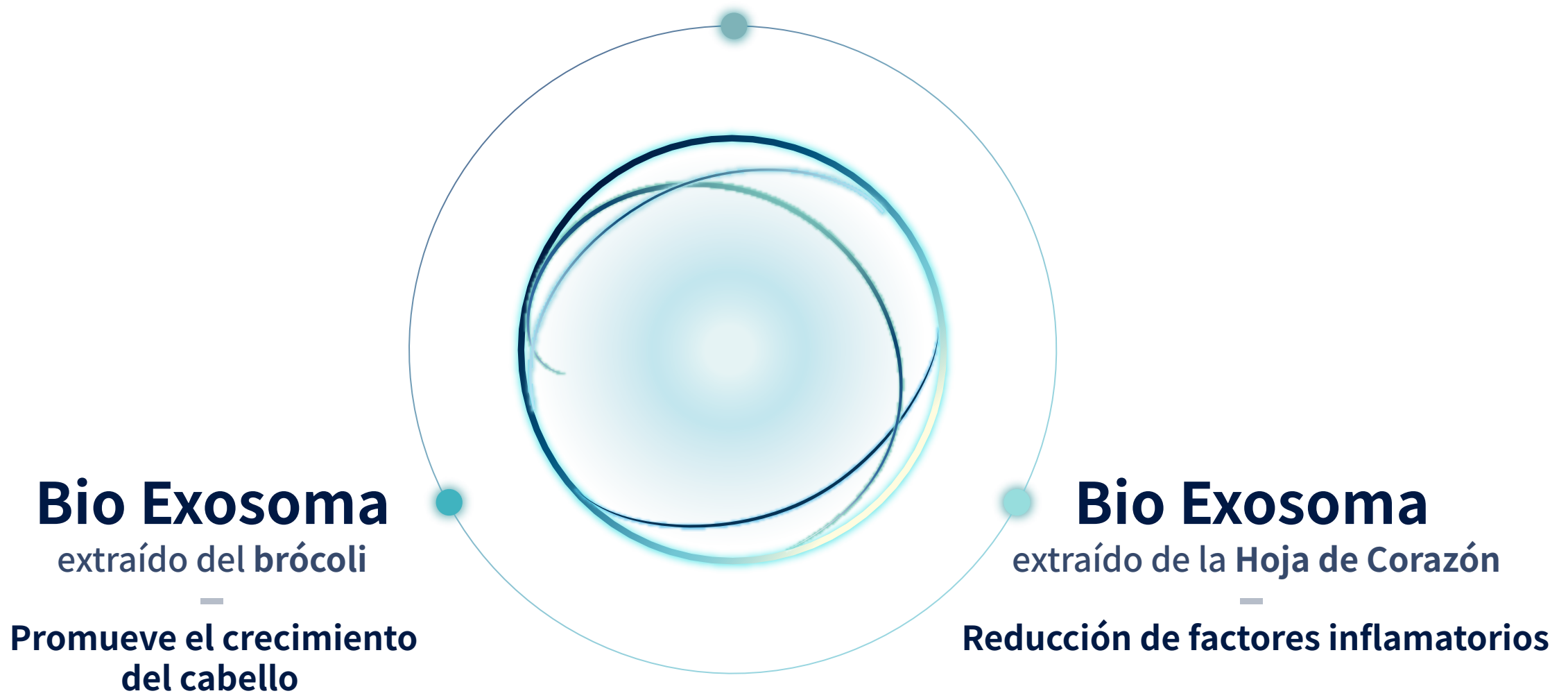


Vesículas de señalización basadas en ARN para interacciones célula a célula, optimizadas para mejorar la caída del cabello

+

Multipéptidos

para la activación de la vía Wnt

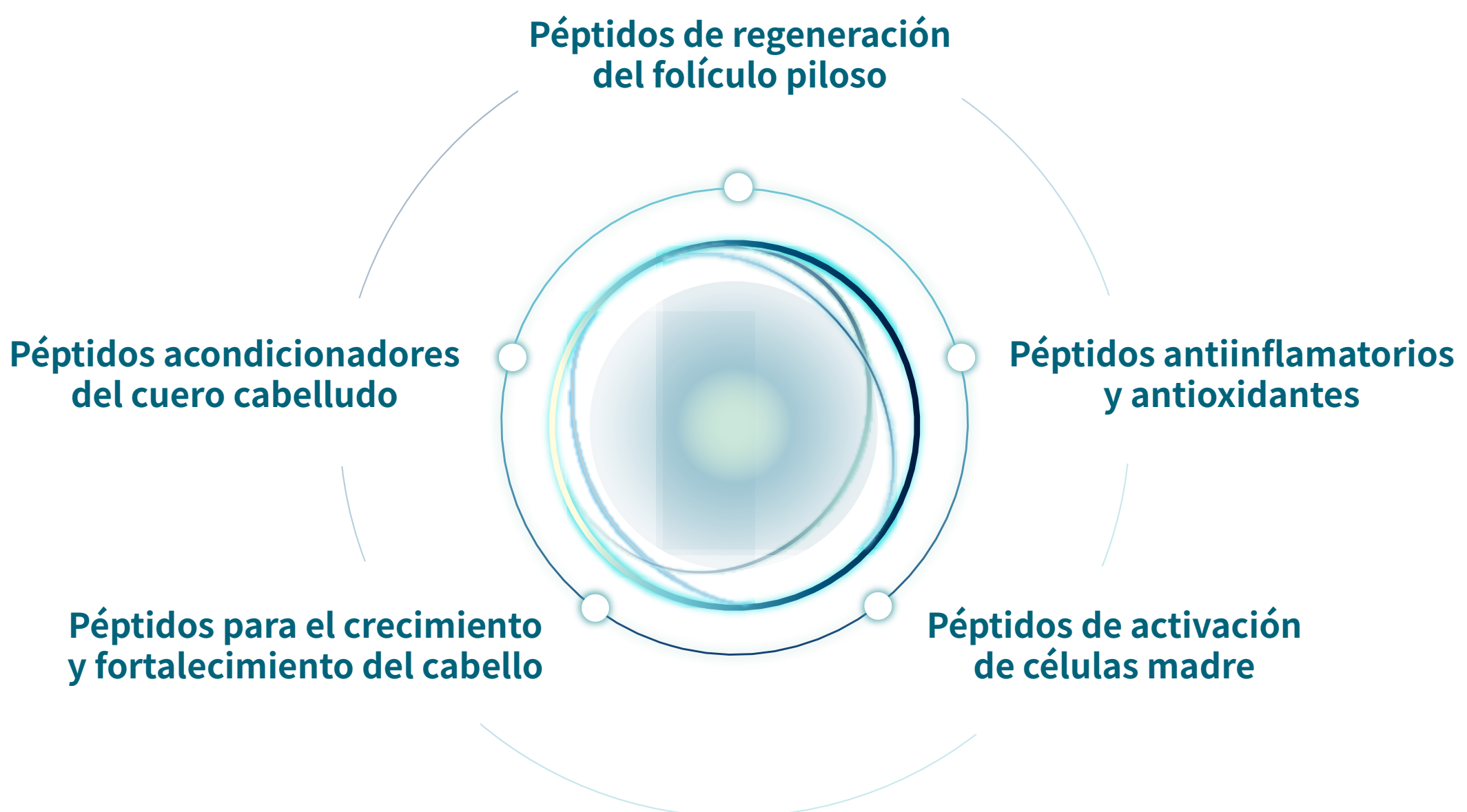

Filler anticaída del cabello

Anticaída capilar contra la AGA

Complejo anti-DHT

Antiseborrea para dermatitis seborreica del cuero cabelludo

AETERDERM®

HAIRIZ



El tratamiento de HAIRIZ interviene
En todos los procesos Celulares

HAIRIZ interviene en todo el proceso de actividad celular de la caída del cabello, suprimiendo todos los factores patógenos y proporcionando una mejora general.



Mejora de los mecanismos celulares generales

La Fórmula Anticaída HAIRIZ


Fue desarrollado a través de una **investigación profunda** y una **comprensión completa** de los mecanismos celulares detrás de la pérdida del cabello,

para cambiar la dirección general de la actividad celular

Favorece

Reacciones en cadena del crecimiento del cabello

- Tripéptido de cobre-1
- Sh-polipéptido-1

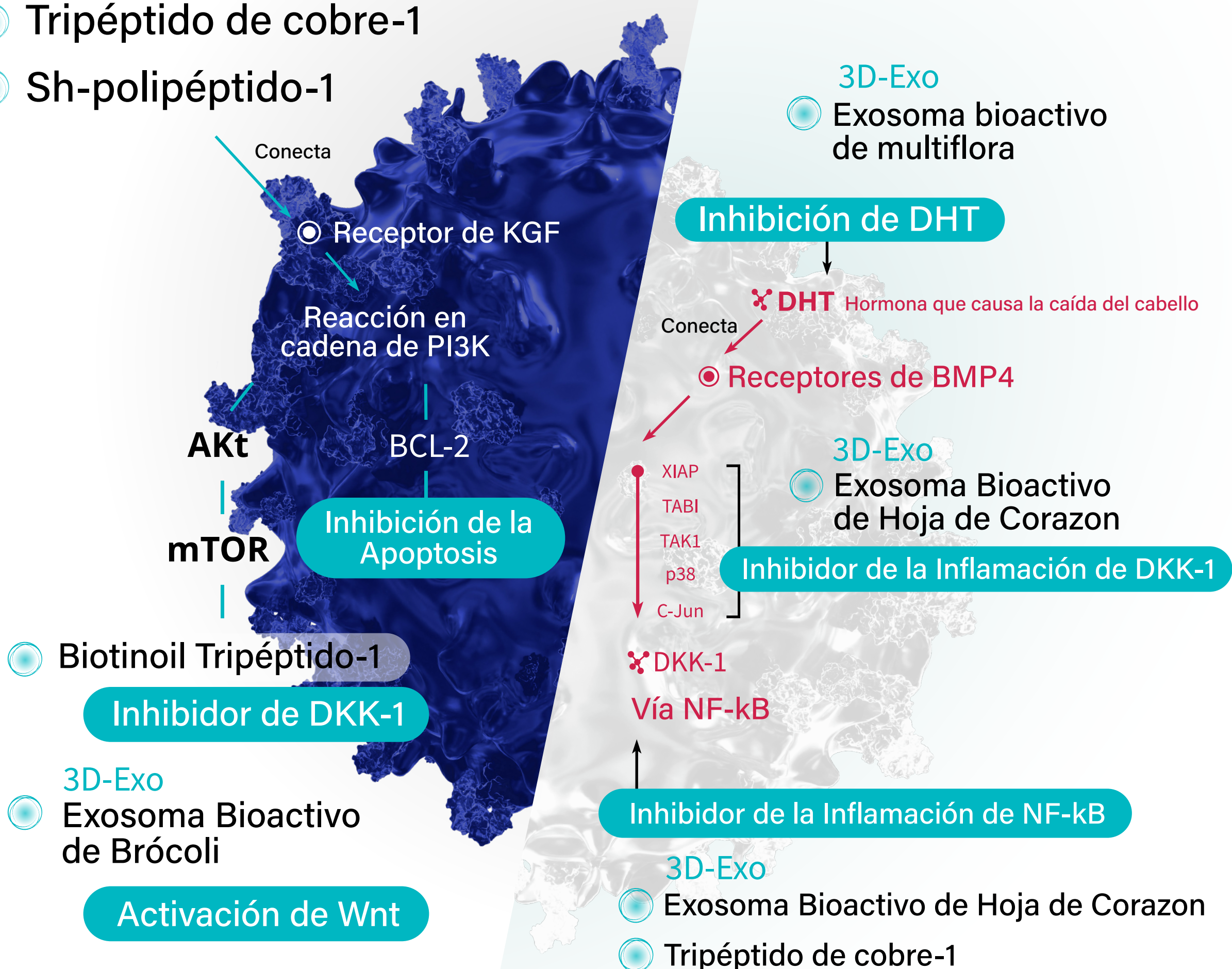

Inhibe

Proceso celular inflamatorio

Está diseñado para apoyar la actividad celular positiva (vía Wnt), suprimir la actividad celular inflamatoria, prevenir la apoptosis y revitalizar las células.



Ensayo clínico del complejo 3D-Exosoma

Resultados de ensayos clínicos que suprimen la DHT, la principal causa de la caída del cabello, y promueven el crecimiento de las células del folículo piloso.

Exosoma bioactivo de Hoja de Corazon

Prolifera las células del folículo piloso al inhibir la DHT



Célula : Célula de la papila dérmica del folículo humano (HFDPC)
Muestras : Extracto de Multiflora
Exosoma de Multiflora
Minoxidil

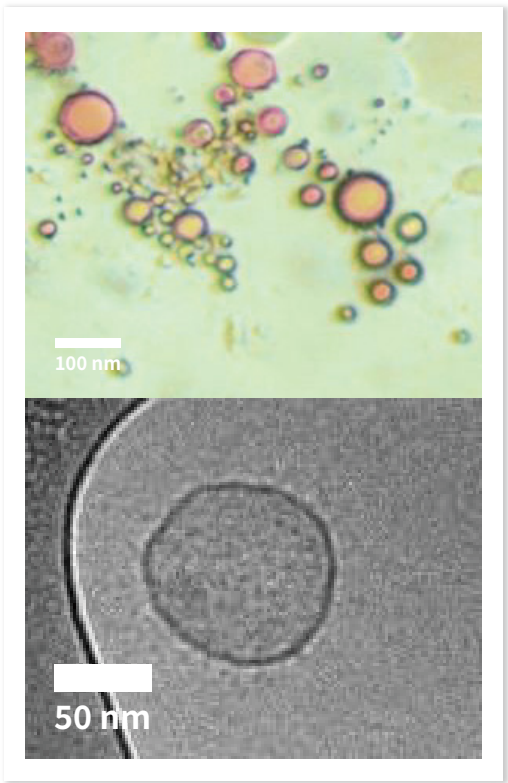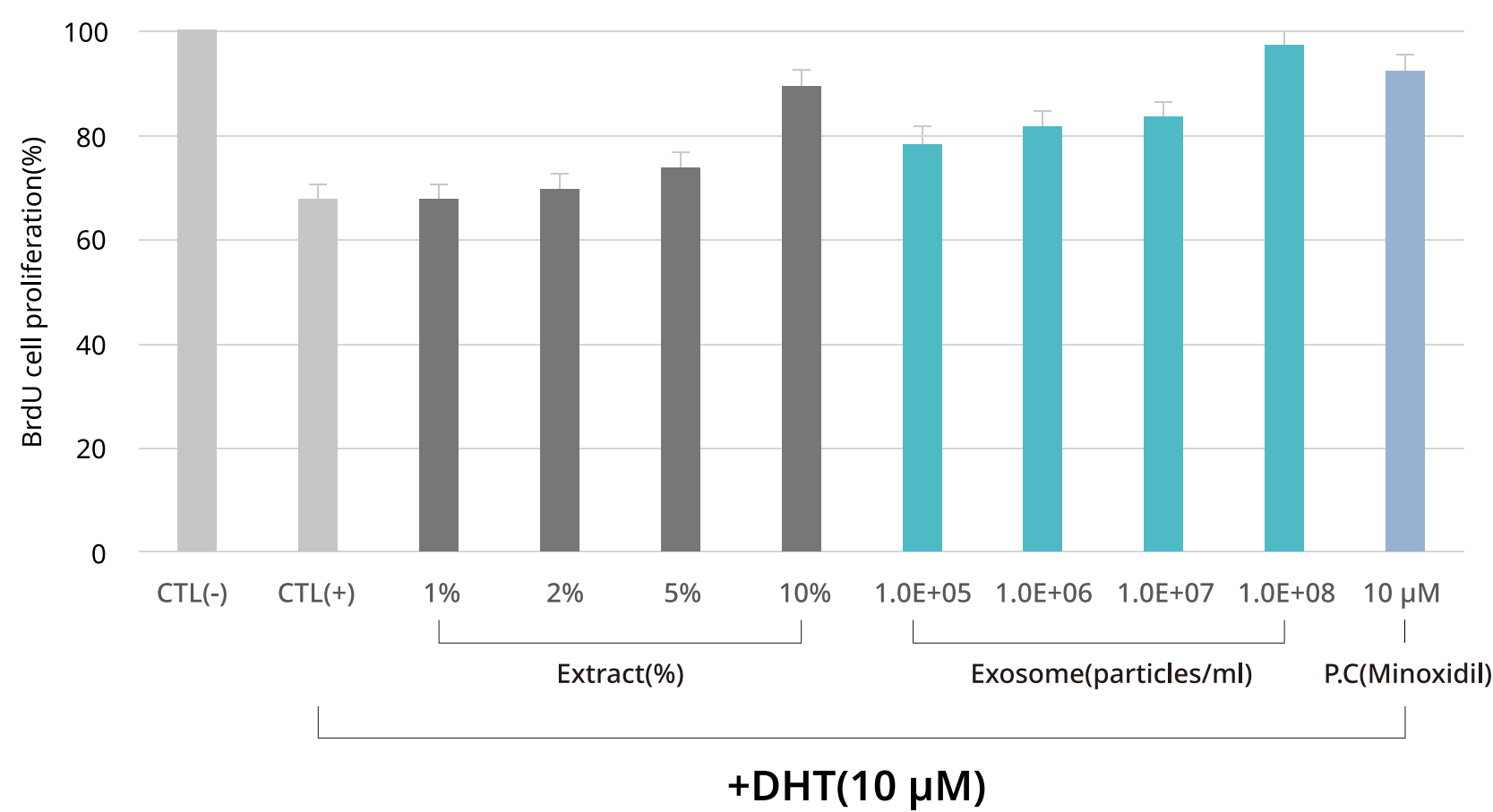

Exosoma Bioactivo de Brócoli

Datos del experimento de proliferación de células del folículo piloso



Célula : Célula de la papila dérmica del folículo humano (HFDPC)
Muestras : Extracto de brócoli
Exosoma de brócoli

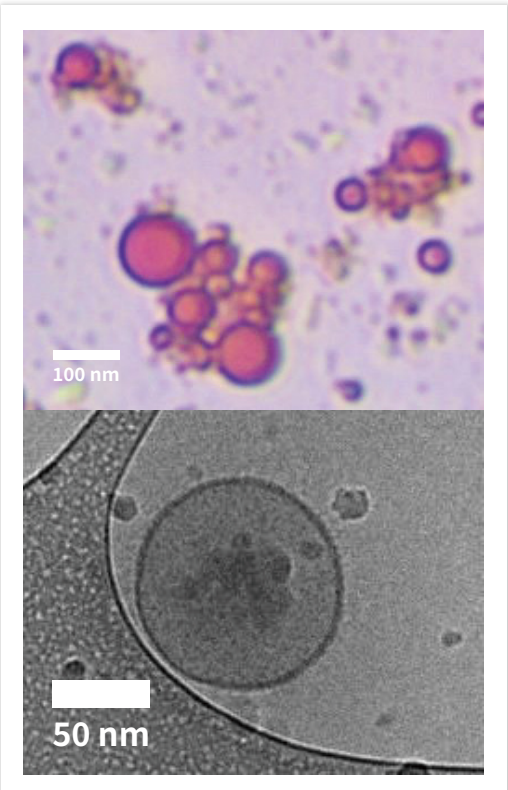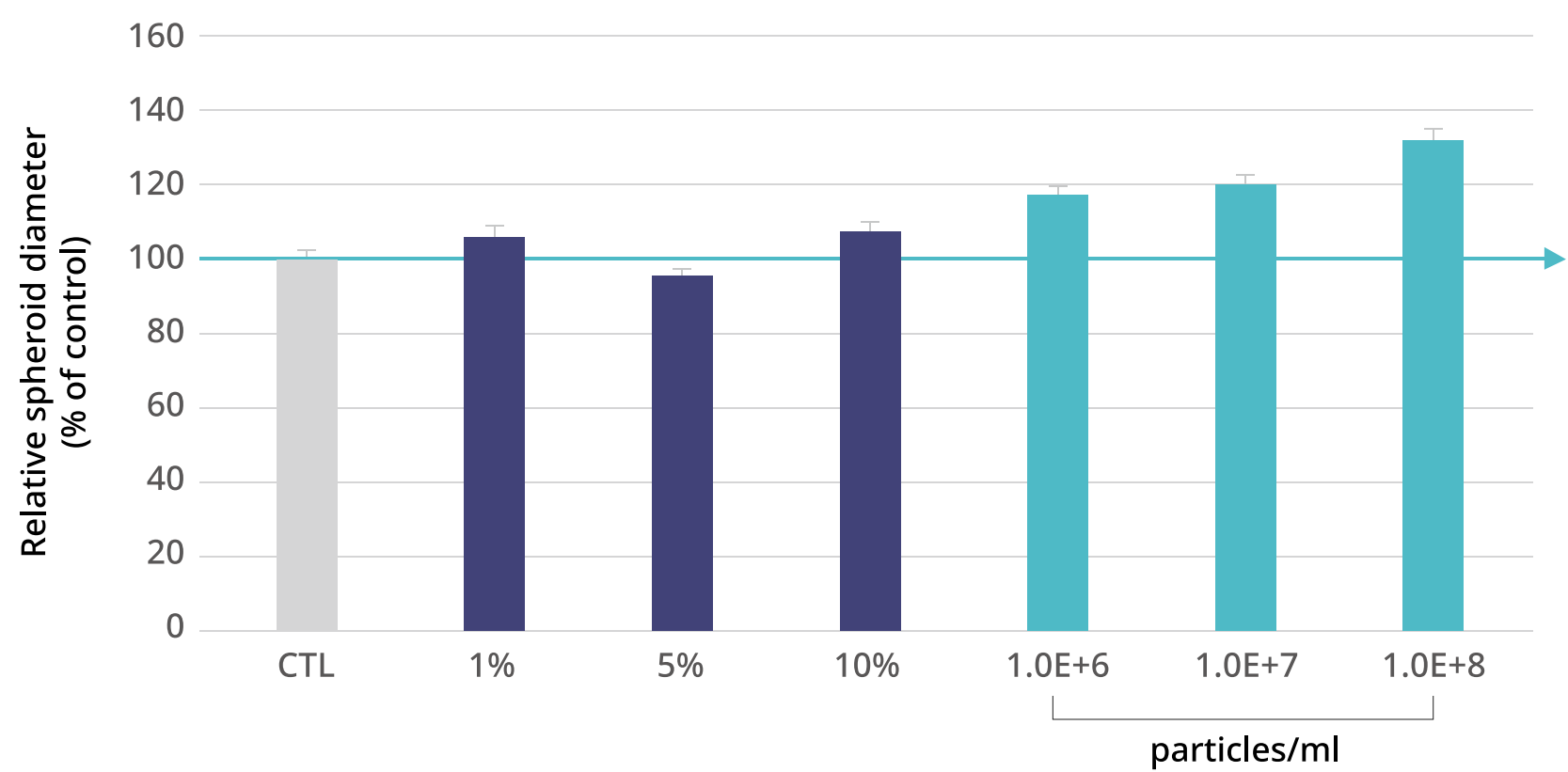

Exosoma bioactivo de Hoja de Corazon



Prolifera las células del folículo piloso al inhibir la DHT

Célula : : Célula de la papila dérmica del folículo humano (HFDPC)
Muestras : Extracto de hoja de corazón
Exosoma de hoja de corazón
Minoxidil

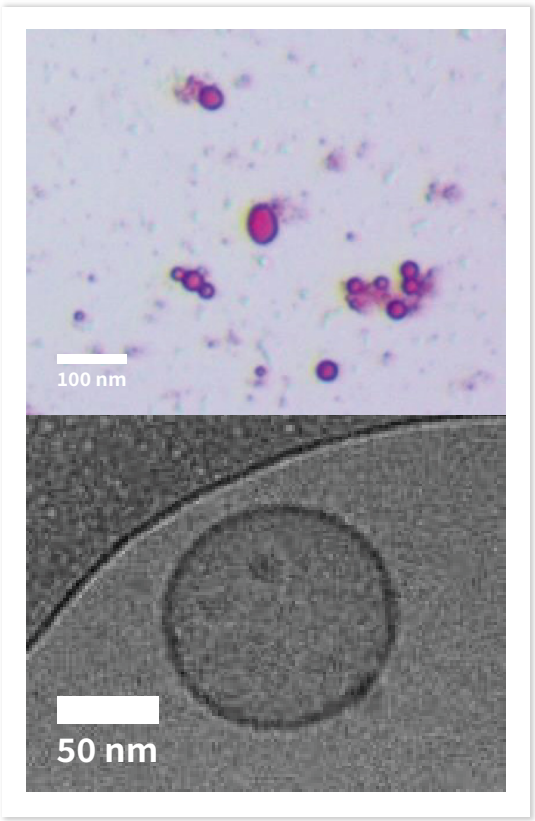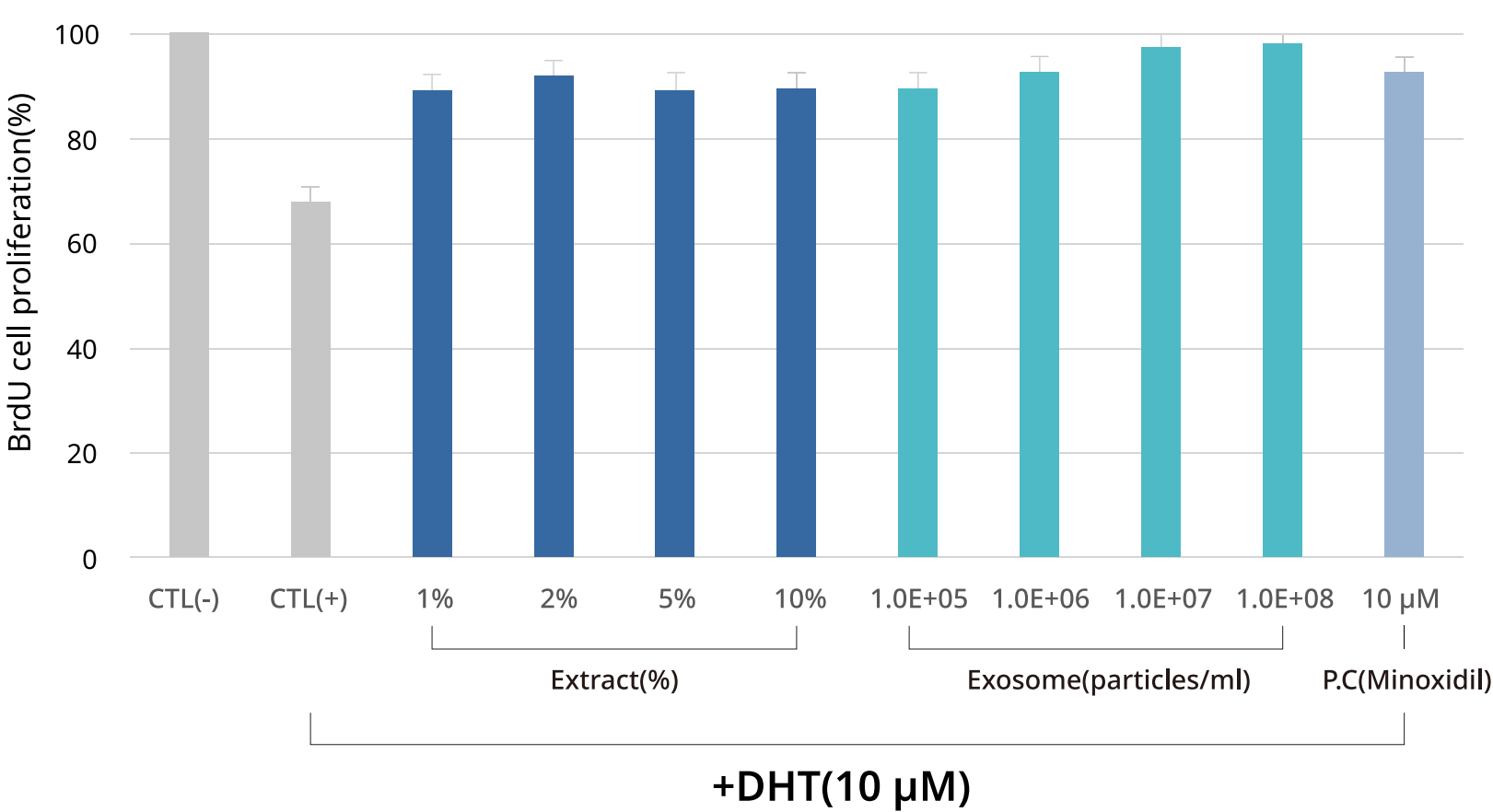

Resultados del test de reducción de la respuesta inflamatoria


Célula : Célula de la papila dérmica del folículo humano (HFDPC)
Muestras : Extracto de hoja de corazón
Exosoma de hoja de corazón
Alantoína

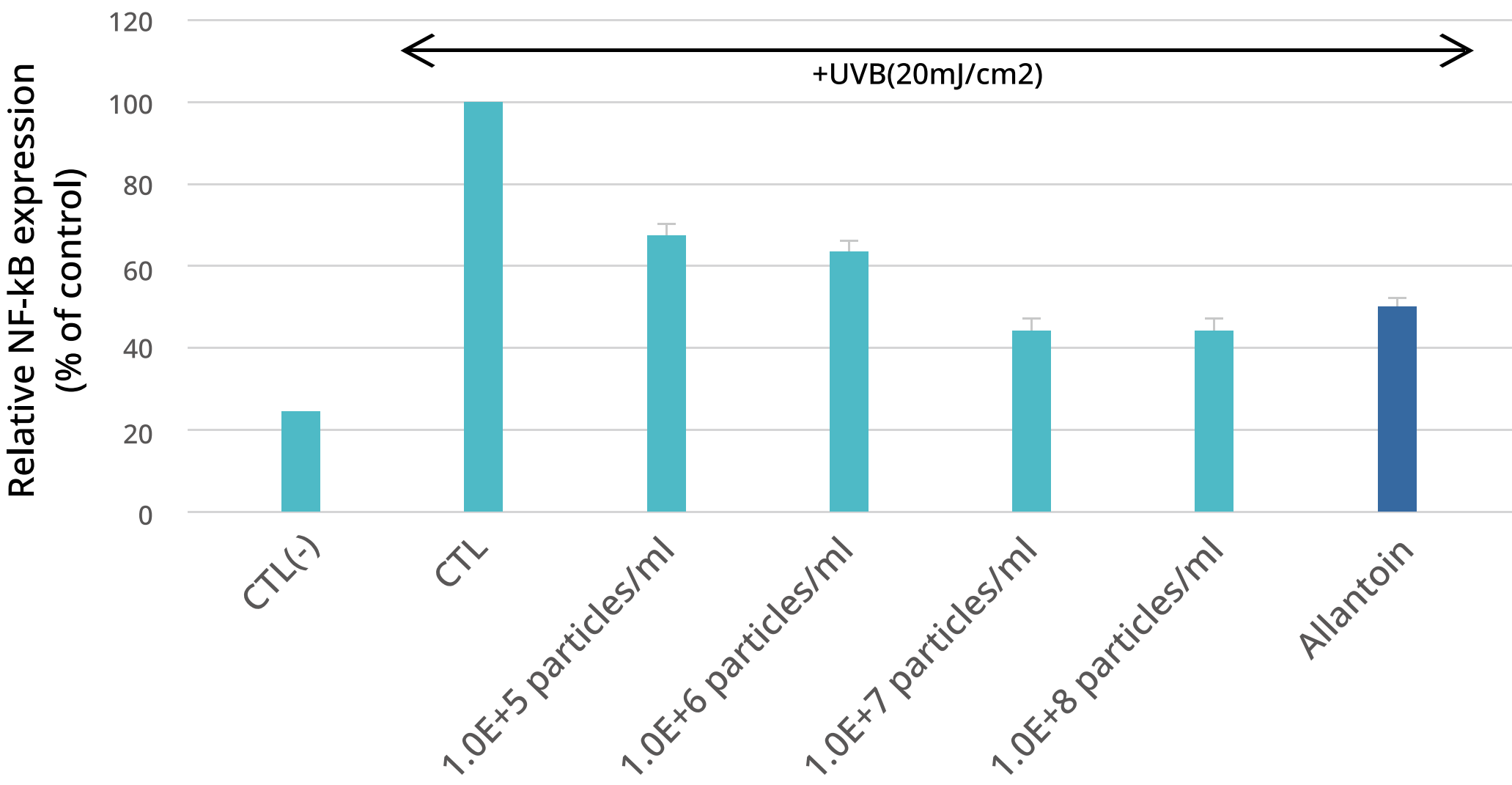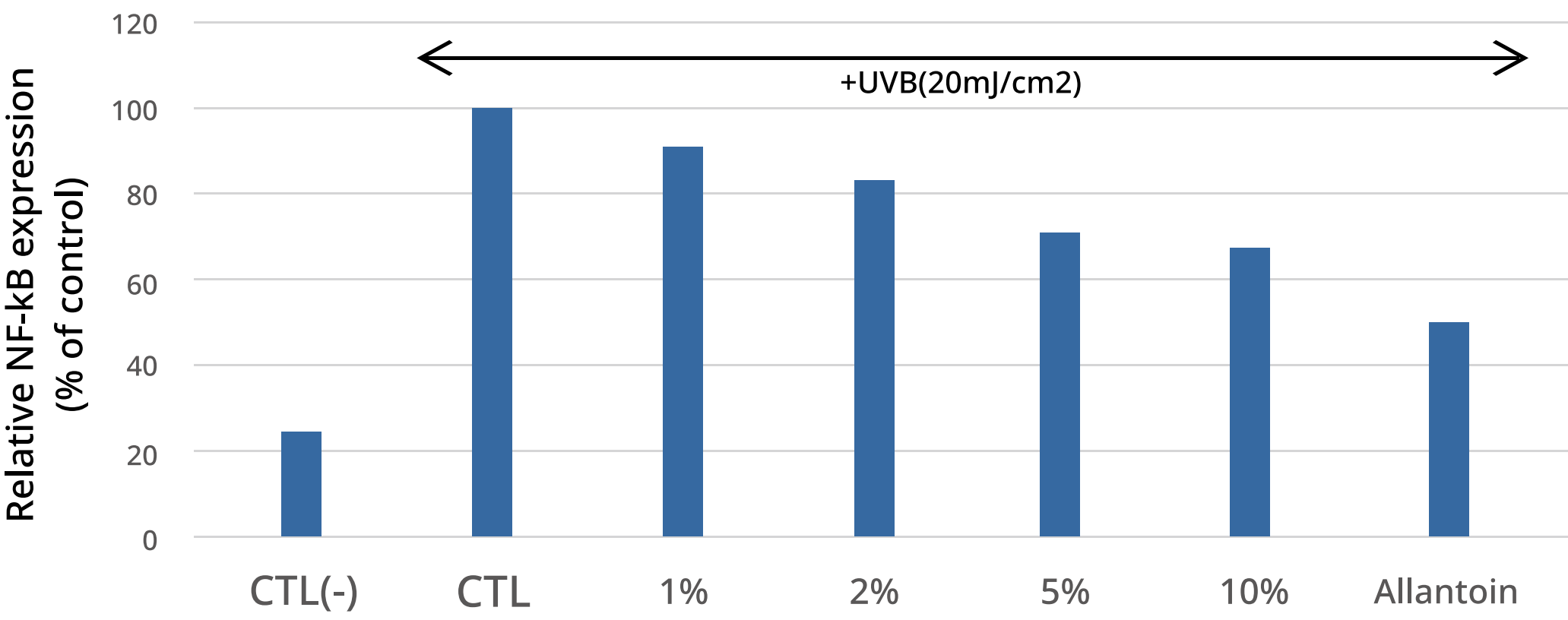

Resultados después del tratamiento




Mejora de la alopecia (varón de 51 años) 8 meses después de la inyección fotografiado por VISIA-CR
Ensayos clínicos realizados por J Dermatol Treat 2023:90:21-4

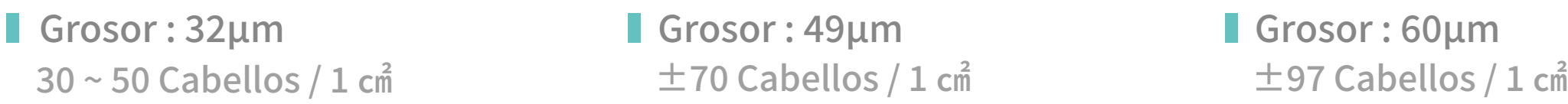

Un hombre de 51 años con pérdida capilar avanzada se sometió a 12 tratamientos HAIRIZ durante 14 meses. Los resultados mostraron que el grosor y la densidad del cabello, así como el estado del cuero cabelludo, volvieron a la normalidad.



Mejora de la alopecia en mujer (37) 9 meses después de la inyección fotografiada por VISIA-CR
Ensayos clínicos realizados por J Dermatol Treat 2023:87:11-37

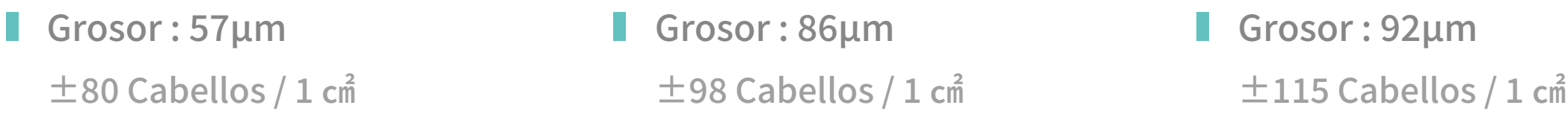

Una mujer de 37 años con pérdida de cabello avanzada se sometió a 12 tratamientos HAIRIZ durante 13 meses. Los resultados mostraron una mejor circulación sanguínea en el cuero cabelludo, una reducción de la caída del cabello y una pigmentación más oscura.

Instrucciones del tratamiento

Preparación

- Utilice un **limpiador médico** o lave su cuero cabelludo con el **HAIRIZ Scalp Care Shampoo** y enjuague bien para asegurarse de que no queden residuos de champú.
- Utilice un secador de aire caliente o frío para secar completamente el cuero cabelludo y prepararlo para el procedimiento.
- Aplique anestesia tópica en la zona del cuero cabelludo si es necesario.
- Retire la anestesia aplicada de la zona después de 15 a 30 minutos.
- Para prevenir infecciones, esterilícela con una toallita con alcohol u otra solución aséptica.

Sesiones

El curso completo se puede repetir después de 5 - 6 meses

Tratamiento principal	4 sesiones, intervalos de 2 semanas
Tratamiento de mantenimiento adicional	4 sesiones, intervalos de 2 semanas
Dosis recomendada	2.5mL / 1 Jeringa
Técnica de inyección	Inyección micropapular/inyección intradérmica
Profundidad de la inyección	1 ~ 1.5 mm (Capa media de la dermis)
Punto de inyección	10 ~ 15 mm per line (Dependiendo del área a tratar)
Dosis por punto	0.02~0.05 mL por punto
Tamaño de la aguja	30-34 Calibre

Cuidados postratamiento

Calmar la zona de inyección con una compresa fría o una crema calmante.



Cuidados posteriores & precauciones para el paciente

Lavado con champú

Durante las 24 horas después del tratamiento

- Evite lavar con champú


24 a 48 horas después del tratamiento

- Evite utilizar champús fuertes o sin pH equilibrado.
- Masajea suavemente el cuero cabelludo con el champú HAIRIZ mientras te lavas el cabello. Evita usar las uñas.
- Dado que su cuero cabelludo puede estar sensible y caliente, evite el agua caliente y utilice agua tibia en su lugar.

- Tu cuero cabelludo es sensible, así que lava el cabello con champú solo de 30 segundos a 1 minuto.
- Asegúrate de enjuagar bien todo el champú y los residuos.
- En el último paso del enjuague, termina con agua moderadamente fría.
- Dado que tu cuero cabelludo es sensible, no lo frotes con una toalla. En su lugar, presiona suavemente para eliminar la humedad.
- Utilice un secador de pelo con aire frío o ligeramente tibio, manteniendo una distancia segura del cuero cabelludo.

Después de 2 días del tratamiento

- Aumente gradualmente la intensidad del masaje del cuero cabelludo mientras lava el cabello, dependiendo del estado de recuperación del cuero cabelludo.
- Ajuste el tiempo de lavado progresivamente a 2 o 3 minutos, según la sensibilidad de su cuero cabelludo. En cuero cabelludo seco, evite lavarlo por más de 3 minutos.

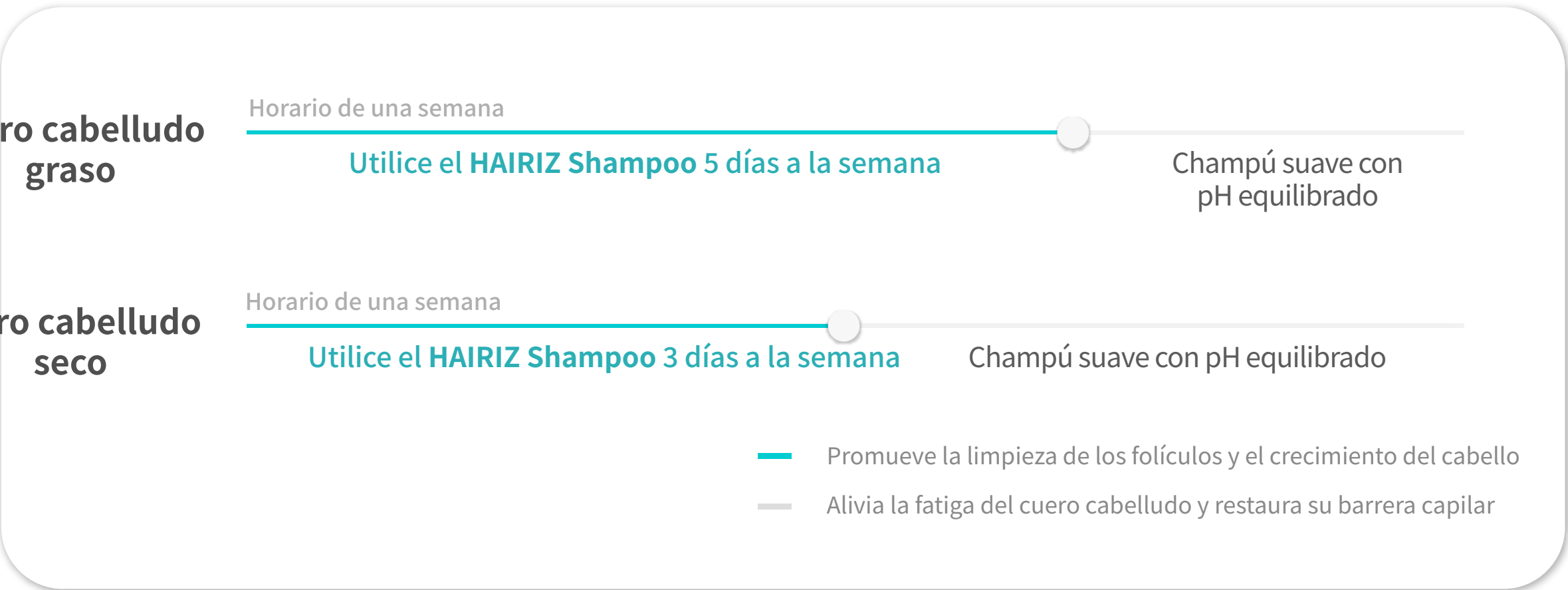

Precauciones

- El día del procedimiento, evite el agua caliente, las saunas, los baños de vapor y el secado con calor. Si debe exponerse a la luz solar directa durante un período prolongado, se recomienda usar un sombrero
- Dentro de las 48 horas posteriores al procedimiento, absténgase de consumir alcohol y fumar.
- Dentro de los 5 días posteriores al procedimiento, evite las actividades físicas excesivas que provoquen sudoración intensa.
- Dentro de las 2 semanas posteriores al procedimiento, minimice al máximo los tratamientos químicos como tintes, permanentes o queratina.

AETERDERM®

HAIRIZ



Resultado final del tratamiento con filler capilar

AETERDERM®

HAIRIZ

3D Exo Hair Scalp Care Shampoo

Fórmula anticaída con EXOSOMAS

Segmentado para actuar
dentro de la dermis

HAIRIZ 3D Exo Hair Scalp Care
Filler

Segmentada para actuar
fuera de la dermis

HAIRIZ 3D Exo Hair Scalp Care
Shampoo




Un champú especializado contra la caída del cabello que se receta junto con Filler para el Cabello HAIRIZ, con una fórmula de exosomas que potencia y mantiene los efectos del tratamiento de filler capilar.

Fórmula intensiva para el cuero cabelludo

Complejo Nano 3D Exo Absorbible


Vesículas de señalización basadas en ARN para interacciones célula a célula, optimizadas para mejorar la caída del cabello

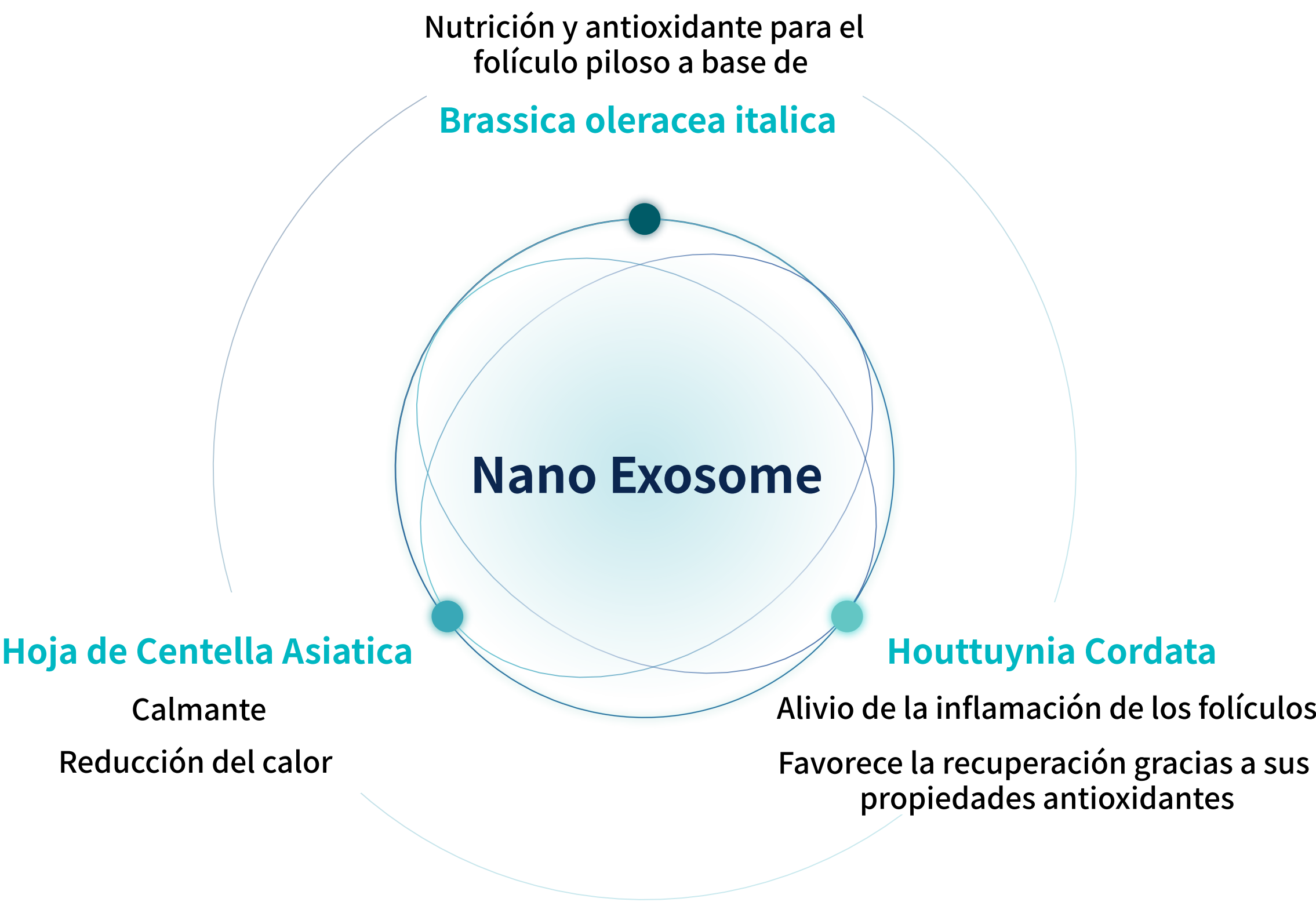

Nanoexosomas de penetración dérmica profunda

Complejo Nano 3D-Exo

Experimento de absorción de Nano 3D Exo
Medición con Oil Red O

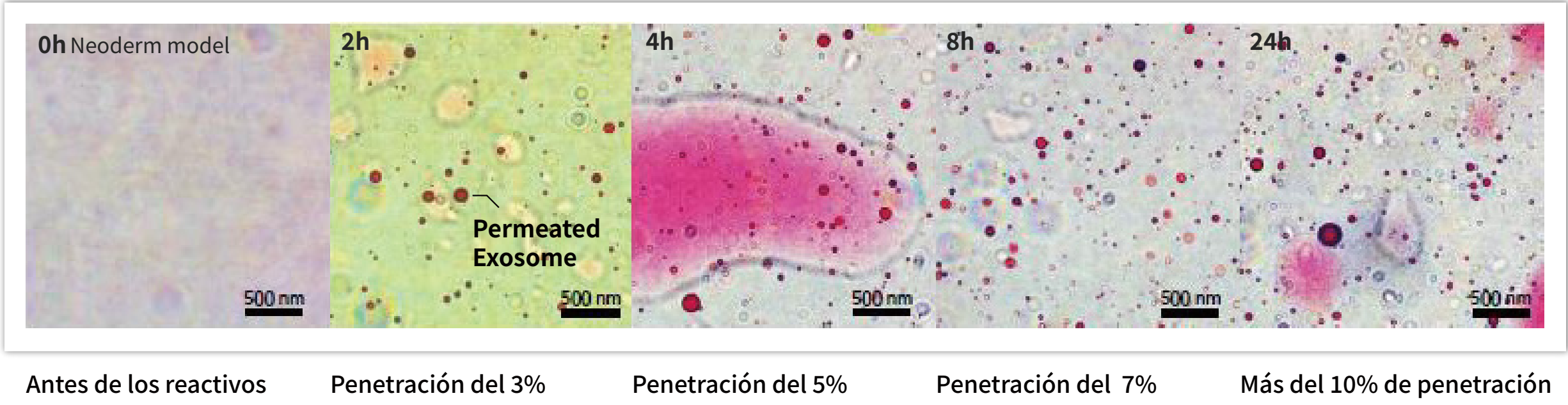

Complejo de múltiples péptidos & polímeros

18 ingredientes formulados para mejorar la caída del cabello

Cuidado integral del cuero cabelludo +

Cuidados posteriores a tratamientos de filler capilar

Efectos antiinflamatorios y calmantes del 3D Exo

Suministro de humectación y fortalecimiento de la barrera del cuero cabelludo

Mejora del entorno del cuero cabelludo

Limpieza de poros

Eliminación de queratina

Reducción de la secreción de sebo

Apoyo para el crecimiento del cabello

Suministro nutricional a los folículos pilosos

Protección y cuidado antioxidante

Promoción directa del crecimiento del cabello

Promoción del crecimiento del cabello con 3D Exo

Una combinación de 7 tipos de ácido hialurónico

para el equilibrio aceite-agua del cuero cabelludo

Formación de una barrera de humectación

Hialuronato de sodio

Hialuronato de hidroxipropiltrimonio

Hialuronato de potasio

Polímero cruzado de hialuronato de sodio

Hidratación profunda

Ácido hialurónico hidrolizado

Ácido hialurónico

Adhesión y absorción mejoradas

Hialuronato de sodio acetilado

AETERDERM®

HAIRIZ

3D Exo Hair Scalp Care Filler

[INGREDIENTES]

Complejo 3D Exo, tripéptido-1 de biotinoil, ácido hialurónico, ácido salicílico, polipéptido-1 Sh, tripéptido-1 de cobre

[UNIDAD DE EMPAQUE]

1 Jeringa Precargada / 1 Caja 2.5 mL

AETERDERM®

HAIRIZ

3D Exo Hair Scalp Care Shampoo

[INGREDIENTES]

Agua (Aqua), Sulfonato de olefina de sodio C14-16, Cocamidopropil betaína, Cocamida MIPA, Decil glucósido, Glicinato de cocoil potásico, Sulfosuccinato de disodio laureth, Aminoácidos de cocoil sódico, Extracto de Houttuynia cordata, Extracto de hoja de Centella asiatica, Extracto de brócoli (Brassica oleracea italica), Extracto de caqui (Diospyros kaki), Extracto de hoja de Camellia japonica, Extracto de fruto de algarrobo (Ceratonia siliqua), Extracto de corteza de Magnolia officinalis, Agua de hoja de romero (Rosmarinus officinalis), Agua de hoja de árbol de té (Melaleuca alternifolia), Agua de ciprés japonés (Chamaecyparis obtusa), Biotina, Mentol, Policuaternio-10, PPG-3 Caprilil éter, Butilenglicol, Glicerina, Cloruro de sodio, Tetradecano, Hexadecano, Ácido cítrico, Pantenol, Ácido salicílico, Policuaternio-7, Niacinamida, Fosfato de PEG-7 pantenil dimeticona potásica, Sarcosinato de sodio, Propilenglicol, Ácido láurico, Pentilenglicol, Hialuronato de sodio, Hialuronato de hidroxipropiltrimonio, Ácido hialurónico hidrolizado, Hialuronato de sodio acetilado, Ácido hialurónico, Copolímero cruzado de hialuronato de sodio, Tripeptido de cobre-1, Acetil hexapéptido-8, Palmitoil pentapéptido-4, Hialuronato potásico, Palmitoil tripéptido-1, Palmitoil tetrapéptido-7, Fosfato de sodio, EDTA disódico, EDTA tetrasódico, 1,2-Hexanodiol, Caprilil glicol, Hidroxiacetofenona, Benzoato de sodio, Etilhexilglicerina, Fragancia (Parfum)

[UNIDAD DE EMPAQUE]

500g / 17.63 oz