

AETERDERM®

PURILAX *with Lidocaine*

Cross-Linked Hyaluronic Acid



PURILAX Sub-Q	
PURILAX Deep	
PURILAX Fine	

AETERDERM®

PURILAX

with Lidocaine

Cross-Linked Hyaluronic Acid

Мягкий, однородный по консистенции гель, легко поддающийся моделированию для достижения естественных результатов.

24 мг самого высокоочищенного содержания гиалуроновой кислоты

Оптимизированная вязкоупругость для стильного формирования

Технология унифицированной реализации частиц

Уровень эндотоксинов менее 0,025 EU

Удобное давление при инъекции

 **PURILAX Sub-Q**



 **PURILAX Fine**



 **PURILAX Deep**



AETERDERM®

PURILAX

with Lidocaine



Ультимативная мягкость и долговечность

Монофазный гиалуроновый гель


(PURILAX Филлер)



- Стабильная и равномерная сшивка
- Оптимизированная вязкоупругость
- Высокая степень когезии
- Гибкая пластичность

- Гиалуроновый гель PURILAX изготавливается с использованием специальной шлифовальной машины для обеспечения однородности при инъекциях.

PURILAX Тест на поддержание формы

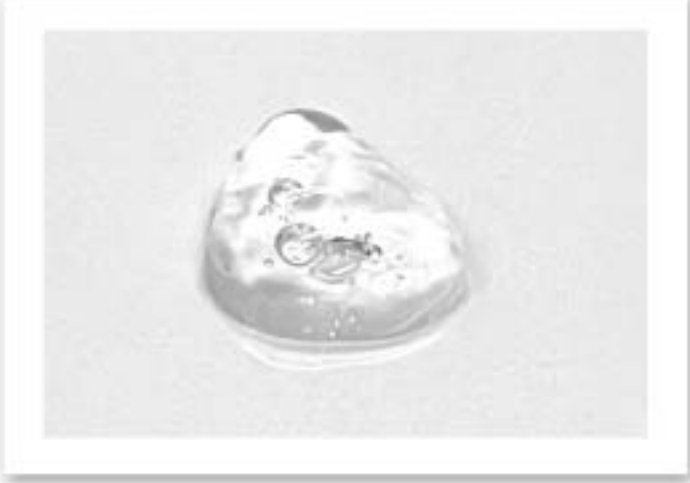AETERDERM® PURILAX	(А Продукт)	(В Продукт)
 До	 До	 До
 После 12 часов	 После 12 часов	 После 12 часов
 После 48 часов	 После 48 часов	 После 48 часов

- Дермальные филлеры **PURILAX** производятся с использованием нашей новейшей технологии сшивания, что позволяет создать монофазную, когезионную и полиденсифицированную матрицу.
- Это обеспечивает значительные результаты, особенно при лечении пациентов с очень глубокими складками.
- Уникальная структура молекул гиалуроновой кислоты, сшиваемых **PURILAX**, также повышает эффективность и переносимость **PURILAX**, что приводит к гладкому и естественному внешнему виду после инъекции.

Ассортимент продукции

	PURILAX Sub-Q	1.1 mL x 1 Шприц / Коробка
	Концентрация гиалуроновой кислоты (мг/мл) Содержание лидокаина (мг/мл) MOD Степень модификации (мол. %) Тип геля Модуль упругости (G') Комплексная вязкость Сила инъекции (Н) (30G UTW) Глубина инъекции Продолжительность В комплект входит игла	24мг 3мг (0.3%) 4.35% Монофазный 250 - 350 G' 300 - 500 ра 35.3 N Подкожный 18 месяцев 2шт X 25G* 1,2"
	PURILAX Deep	1.1 mL x 1 Шприц / Коробка
	Концентрация гиалуроновой кислоты (мг/мл) Содержание лидокаина (мг/мл) MOD Степень модификации (мол. %) Тип геля Модуль упругости (G') Комплексная вязкость Сила инъекции (Н) (30G UTW) Глубина инъекции Продолжительность В комплект входит игла	24мг 3мг (0.3%) 2.85% Монофазный 150 - 200 G' 200 - 300 ра 27.2 N Средний слой дермы 12 месяцев 2шт X 27G* 1,2"
	PURILAX Fine	1.1 mL x 1 Шприц / Коробка
	Концентрация гиалуроновой кислоты (мг/мл) Содержание лидокаина (мг/мл) MOD Степень модификации (мол. %) Тип геля Модуль упругости (G') Комплексная вязкость Сила инъекции (Н) (30G UTW) Глубина инъекции Продолжительность В комплект входит игла	24мг 3мг (0.3%) 1.75% Монофазный 30 - 100 G' 100 - 200 ра 14.9 N Поверхностный - Средний слой дермы 12 месяцев 2шт X 30G* 1,2"

Реологический профиль

(Параметр)	(Стандарт)	(Результат)
Внешний вид	Прозрачная и бесцветная вязкая жидкость без посторонних примесей	Удовлетворенный
Водородный показатель pH	6.8 ~ 7.5	6.83
Остаток BDDE	Максимально 2.0ppm	0 ppm
Тяжелые металлы	Максимально 10.0ppm	Ниже 10.0ppm
Осмотическое давление	200 ~ 400 mmol/kg	318mmol/kg
Объем	Минимум 1.0mL	1.07~1.09mL
Асептичность / Токсичность	Асептичность / Токсичность	Удовлетворённый
Эндотоксин	Ниже 12.5 EU/mL	Ниже 0.02 EU/mL

Эффективность


(Вязкоупругость)



Роль гиалуроновой кислоты заключается в повышении влажности, удержании коллагена, а также обеспечении эластичности и гибкости.

- ⦿ Высокая вязкоупругость позволяет сохранять хороший объем в течение длительного времени.

(Исключительная способность к объемному увеличению)

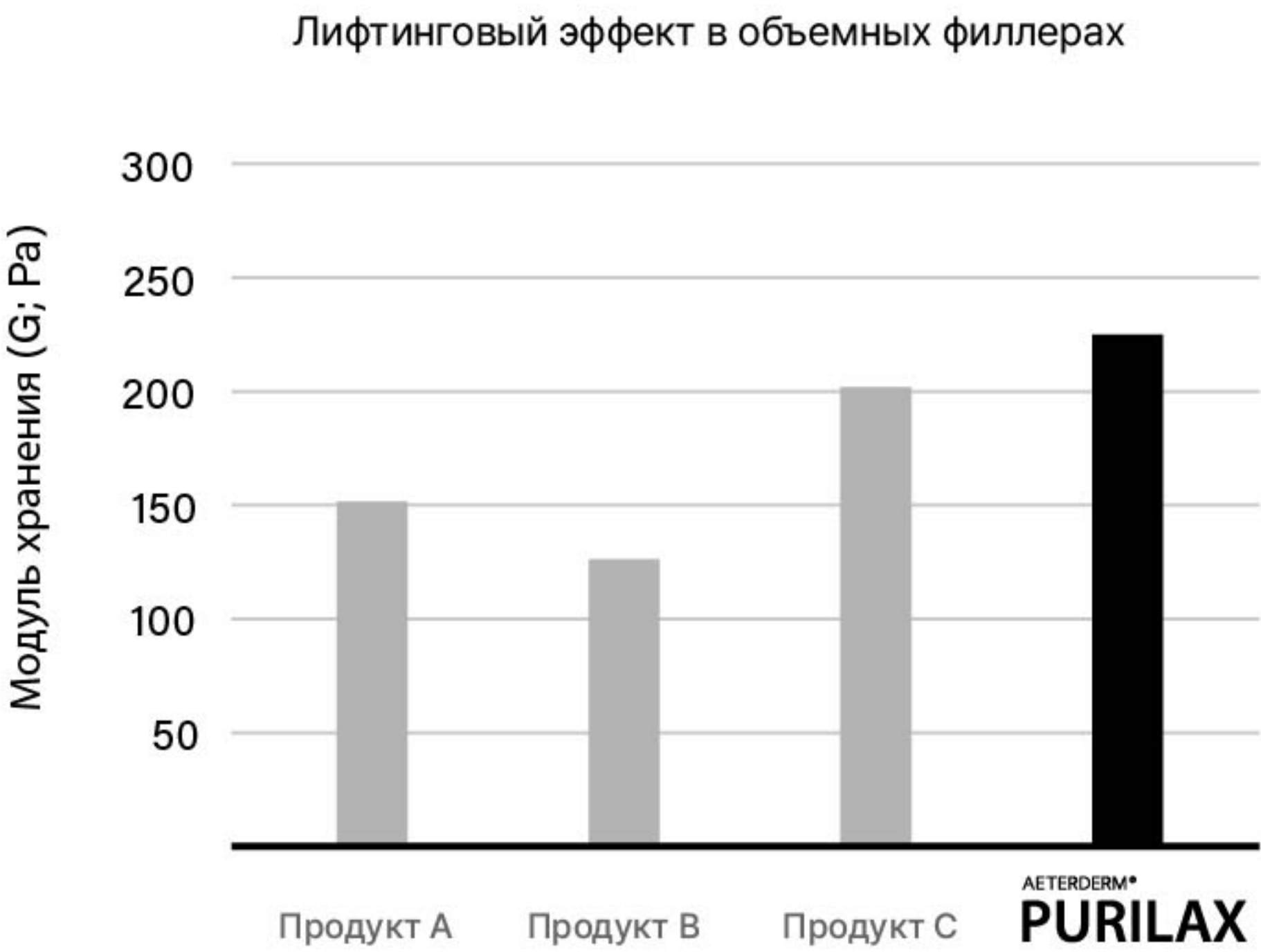

(Доказанная биосовместимость)

- ◎ **PURILAX** использует только высококачественные сырьевые материалы для сохранения естественной целостности кожи и равномерного распределения продуктов в соединительных тканях с минимальной вероятностью возникновения воспалительных клеток.
- ◎ **PURILAX** обладает отличной био-интеграцией и высоким профилем переносимости, а также был проверен на отсутствие эндотоксинов и **BDDE**.
- ◎ Безопасность продуктов также подтверждена тестами на биосовместимость, проведёнными в соответствии с ISO классификацией.

(Условия анализа)

Оборудование для анализа	Anton Paar Model : MCR 302e / Serial No : 84364401
Заданная температура	25°C
Начальная частота	0.01 Hz
Конечная частота	10 Hz
Сдвиговая деформация	1.0%
Количество образцов на декаду	11

PURILAX Sub-Q	
PURILAX Deep	
PURILAX Fine	



(Сравнение)

Гели гиалуроновой кислоты часто вводятся в кожу для улучшения внешнего вида лица. Различные процессы, используемые при их производстве и формулировке, создают продукты с уникальными реологическими свойствами, которые играют важную роль в их клинической эффективности.

Эти три реологических свойства являются наиболее важными для определения эффективности гиалуроновой кислоты:




Когезивность	Для превосходной интеграции в ткани
Вязкоупругость	Для оптимальной поддержки тканей
Пластичность	Обеспечивает превосходную сцепляемость

(Когезивность)

- Уникальные вискоэластичные свойства и переменная плотность **PURILAX** позволяют добиться однородного увеличения мягких тканей и омоложения.
- Филлеры серии **PURILAX** естественно интегрируется в кожу, обеспечивая предсказуемые и естественные результаты.
- Эти оптимизированные реологические свойства обеспечивают безшовную интеграцию в дерму.

Удобство силы выдавливания

Постоянная сила экструзии обеспечивает гладкое и удобное введение.

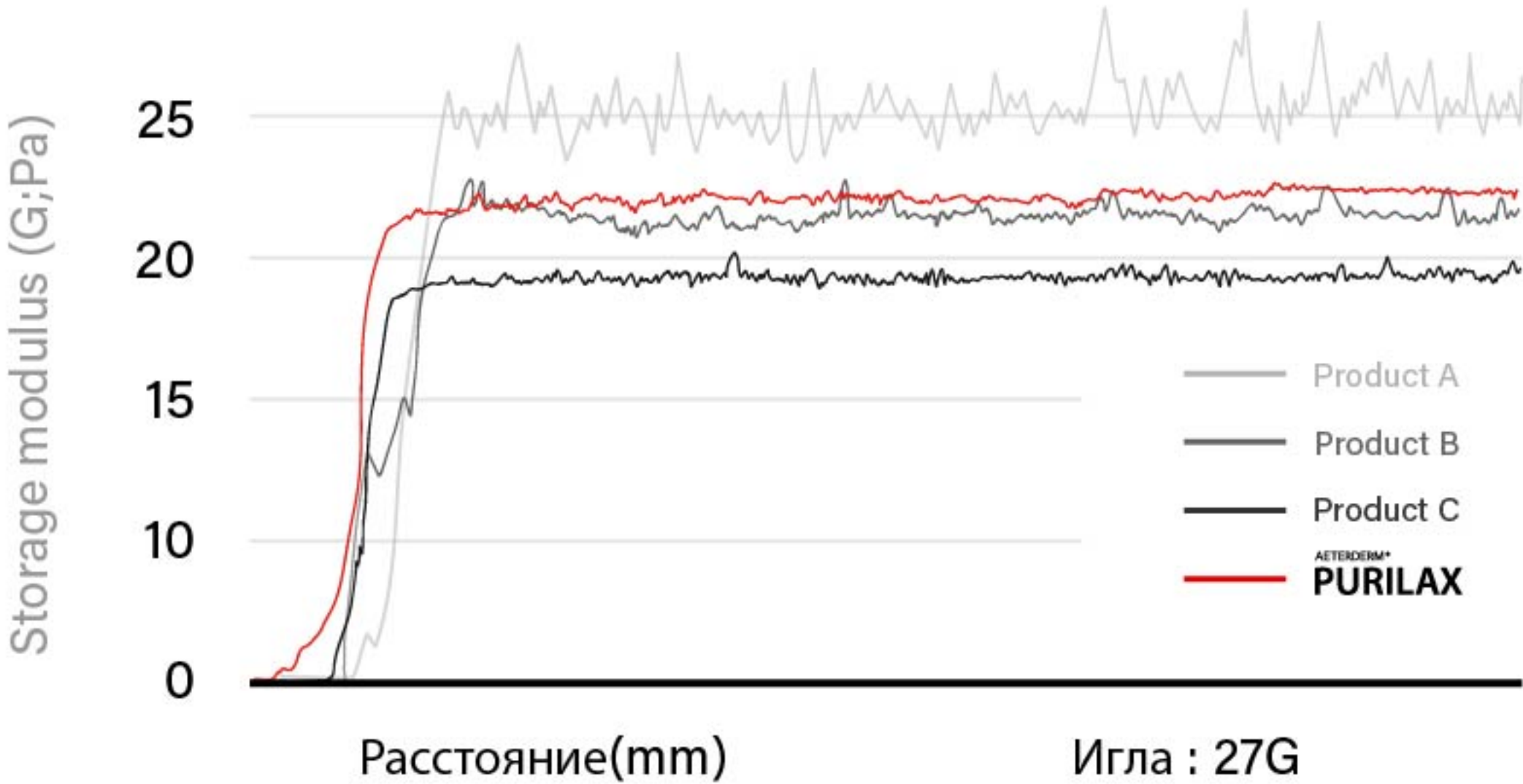

До & После

(Гусиные лапки и область вокруг глаз)



- Используемый продукт
PURILAX Fine
- Используемый размер иглы
30G
- Объем инъекции
2.2 cc
- Возраст пациента
38 лет

References) Clinical trials by Dermatol Ther 2022;19:28-29

ПРИМЕЧАНИЕ: После процедуры поверхностные и длинные морщины под глазами заметно улучшились, а глубокие морщины в области гусиных лапок показали наибольшее улучшение. При введении маломолекулярной гиалуроновой кислоты (PURILAX Fine филлер) было подтверждено, что увлажнение также улучшило сияние кожи и устранило покраснения.

(Объем губ)



- Используемый продукт
PURILAX Deep
- Используемый размер иглы
27G
- Объем инъекции
1.1 cc
- Возраст пациента
29 лет

References) Clinical trials by Dermatol Ther 2022;27:37-38

ПРИМЕЧАНИЕ) После одной недели инъекций гиалуроновой кислоты среднего размера (филлер PURILAX Deep) в область губ молекулы филлера стабильно и естественно расположились в тканях дермы губ, и никаких существенных токсических реакций не наблюдалось.

(Морщины на лбу и придание объема)




- Используемый продукт
PURILAX Sub-Q
- Используемый размер иглы
25G
- Объем инъекции
4.4 cc
- Возраст пациента
32 года

References) Clinical trials by Dermatol Ther 2022;31:43-48


ПРИМЕЧАНИЕ) Крупномолекулярная ГК (наполнитель PURILAX Sub-Q) была введена пациентке 32 лет для устранения сильных и умеренных морщин на лбу. Через десять дней гель ГК, который осел подкожно, был стабильным и естественным, и после процедуры не наблюдалось заметной деформации.

Показания к применению


PURILAX Sub-Q

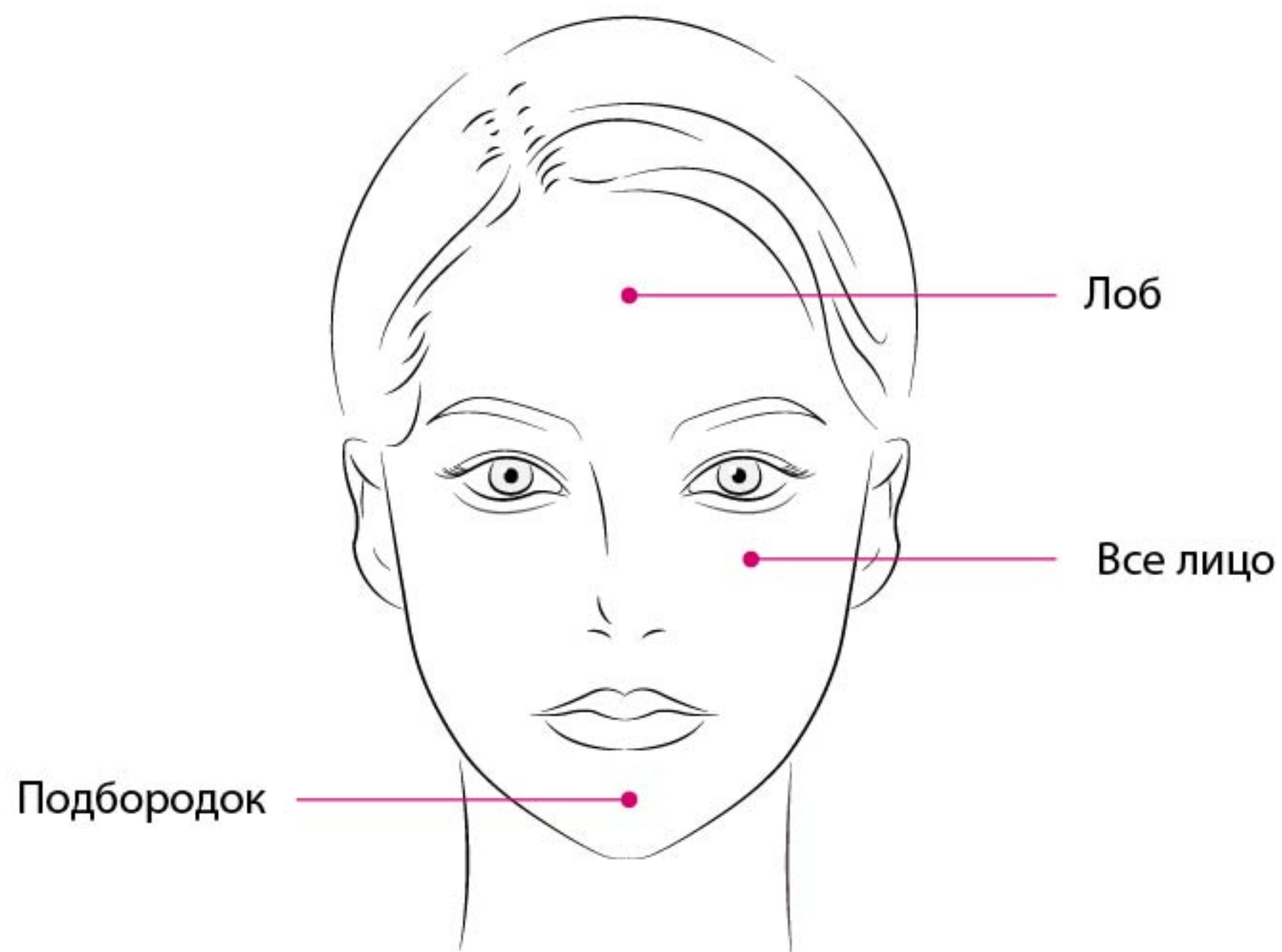

PURILAX Deep

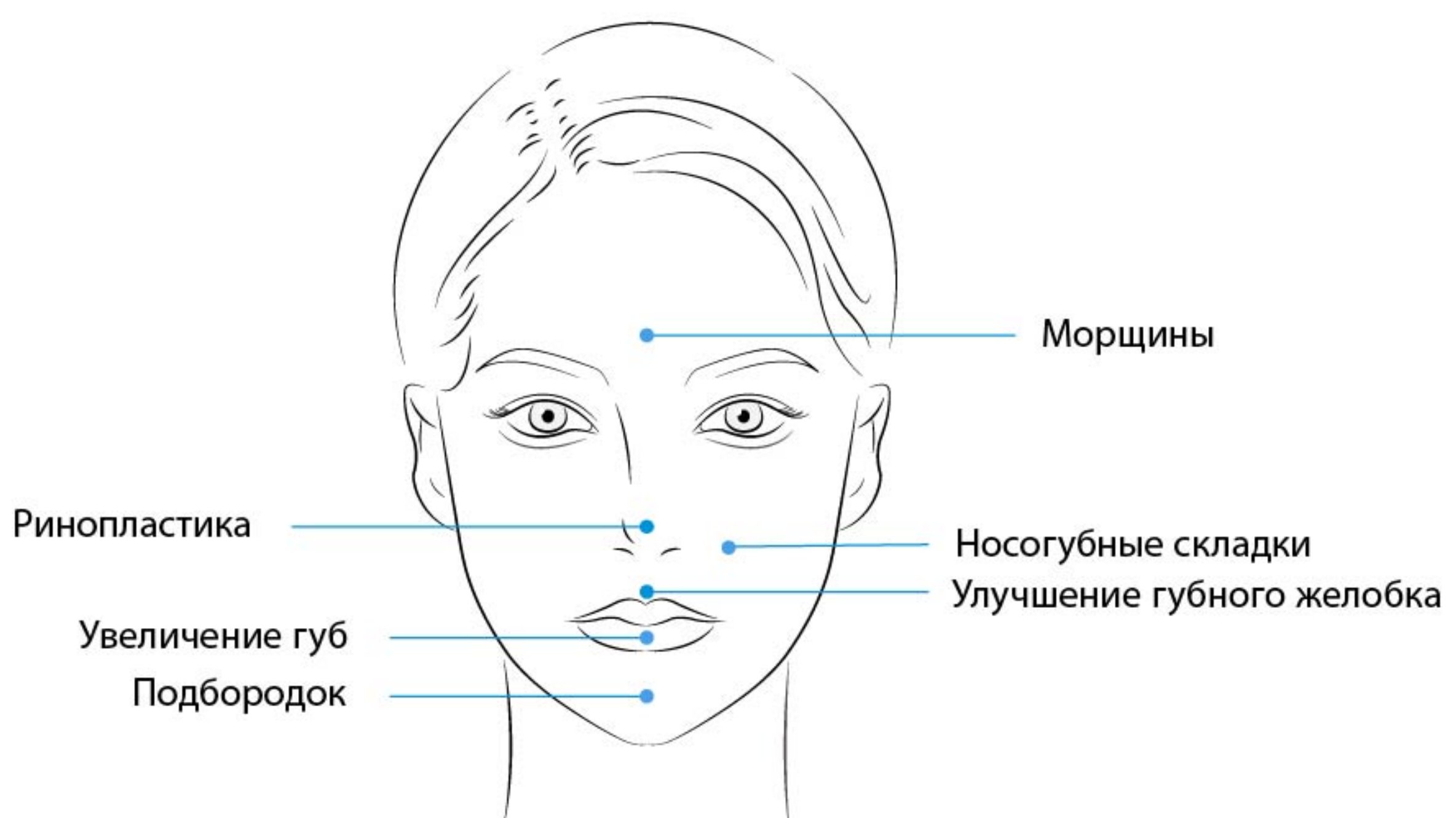

PURILAX Fine

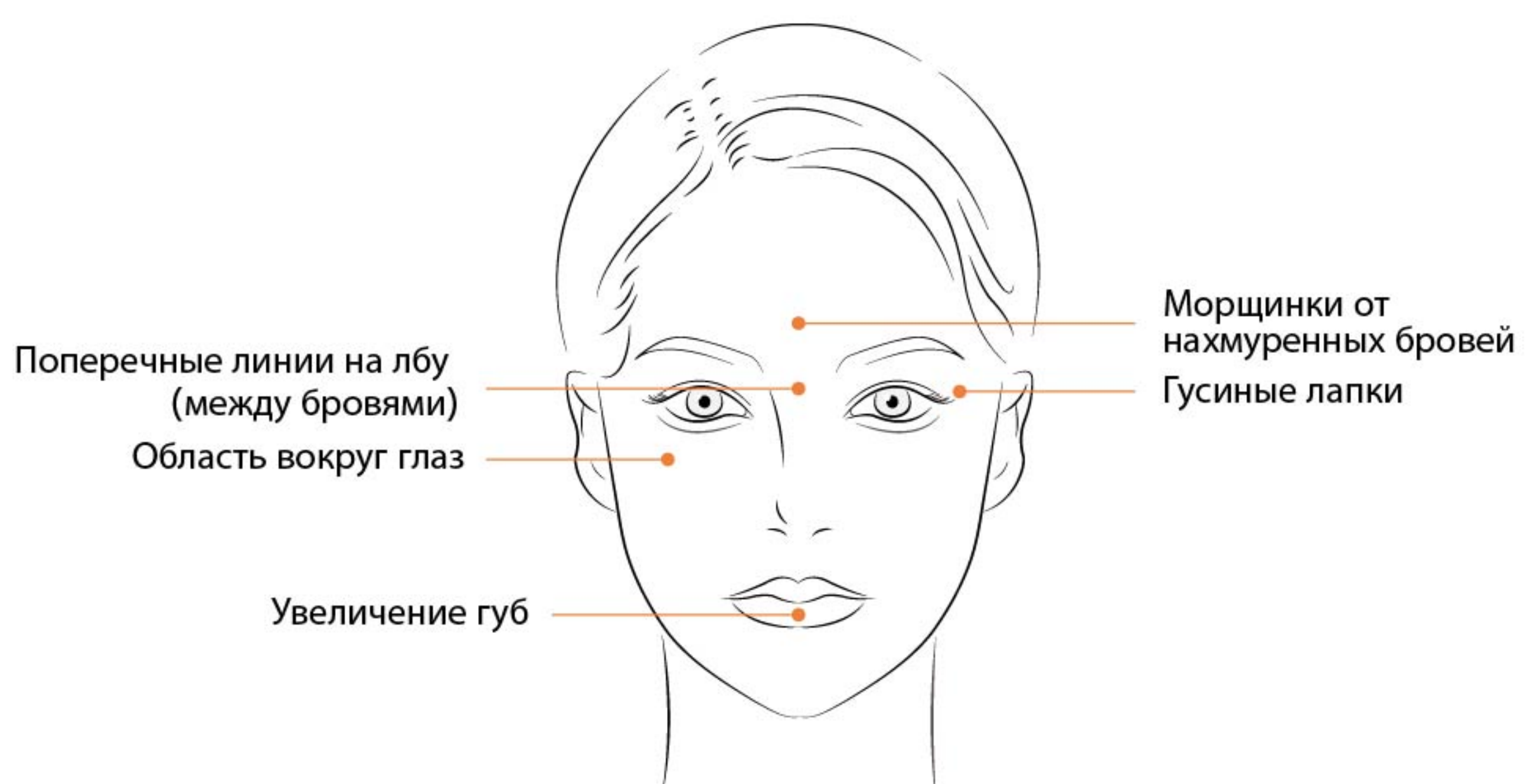

AETERDERM®

PURILAX

with Lidocaine

Cross-Linked Hyaluronic Acid

(Состав)

Сшитая гиалуроновая кислота	_____	24мг/мл
Лидокаин HCL	_____	0.3мг/мл
Фосфатно-буферный раствор	_____	q.s.

(Упаковка)

1 предварительно заполненный шприц и 2 иглы /коробка

(Хранение)

Хранить при комнатной температуре (от 1°С до 30°С),
избегать воздействия света и замораживания.

