

AETERDERM®

LEXYFILL

Fill Your Luxury Beauty

&

LEXYFILL VOLUME CREAM






เสี.

เติมเต็มในแบบของคุณ
เติมเต็มความงามอันหรูหราของคุณ

คุณสมบัติ

ความหนืดต่ำ? แต่ความยืดหยุ่นสูงขึ้น!

แม้ไม่ได้ผสมน้ำเกลือ, ก็สามารถนำออกมาจากขวดได้อย่างง่ายดาย.

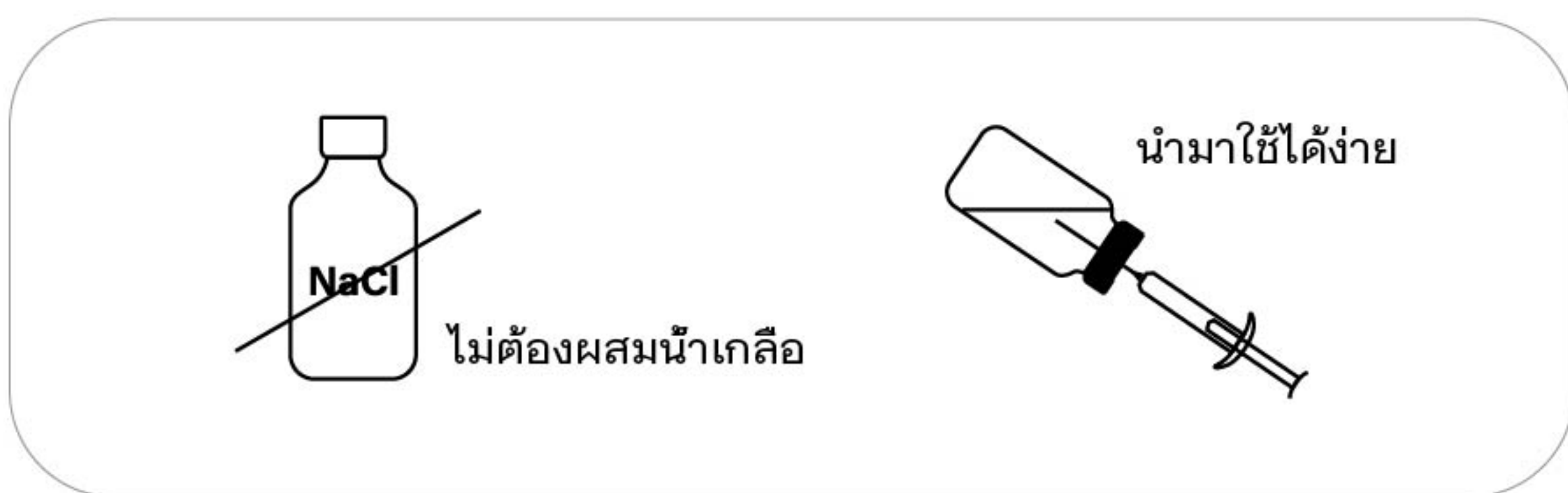

ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อด้านปริมาตรหรือ
เกิดการเสียรูปทรงจากน้ำเกลือ.

และจะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอันน่าอัศจรรย์.



ดังผลลัพธ์ จึงสามารถทำหัตถการที่ซับซ้อนขึ้นได้. ✂


เราผลิตบอดีฟิลเลอร์
ด้วยคุณสมบัติที่น่าอัศจรรย์
ผ่านการเชื่อมประสาน (Cross-linking)
ที่มีระยะยาวนานในอุณหภูมิต่ำ

เพื่อการจัดแต่งรูปทรงบอ
ได้อย่างแม่นยำ




ทำไม LEXYFILL ถึงปลอดภัยที่สุด? ทำไม LEXYFILL ถึงมีความยืดหยุ่นสูงที่สุด?


บอดีฟิลเลอร์แบรนด์อื่น

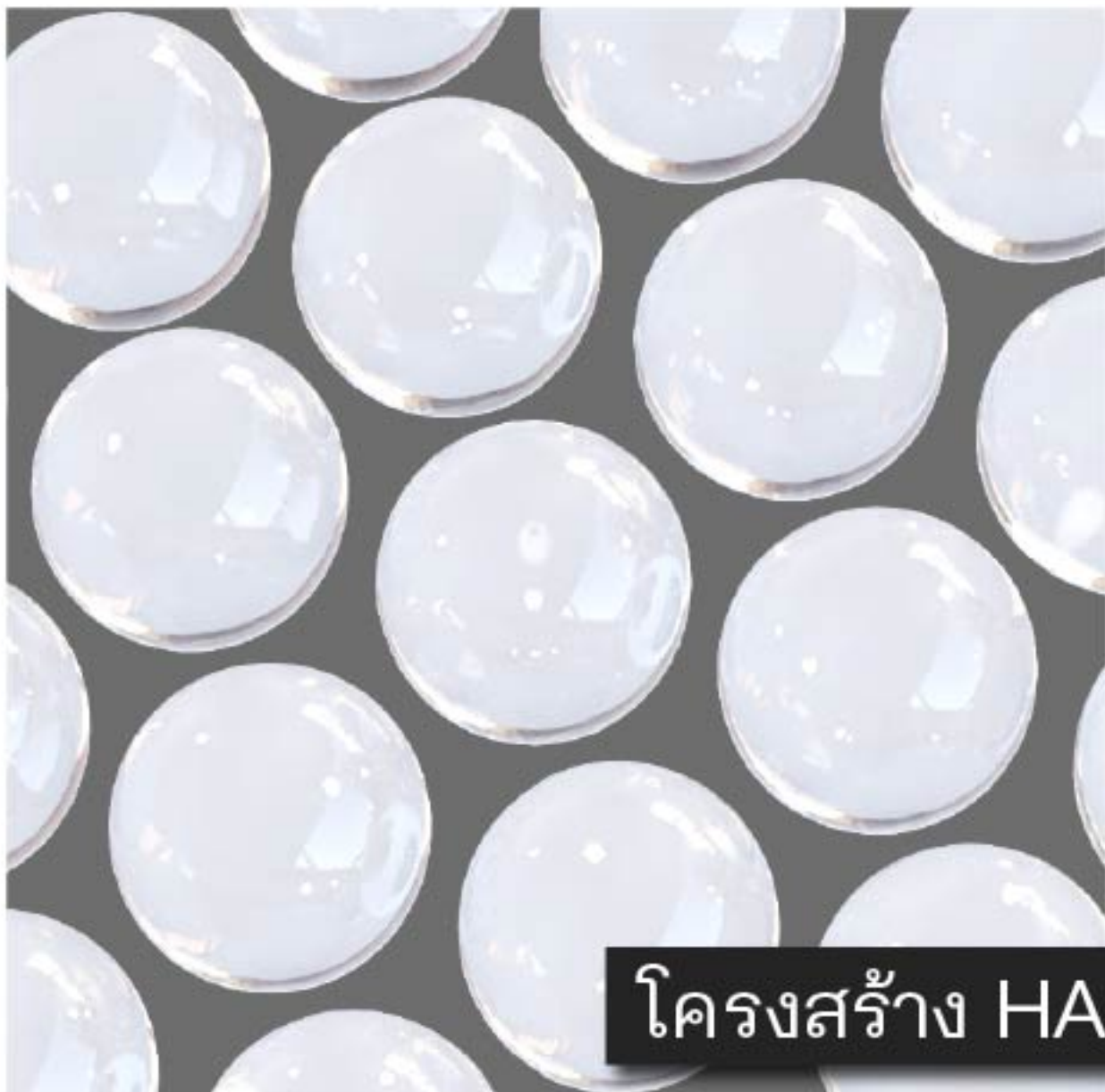

ใช้แค่โมเลกุลขนาดใหญ่ของ HA.

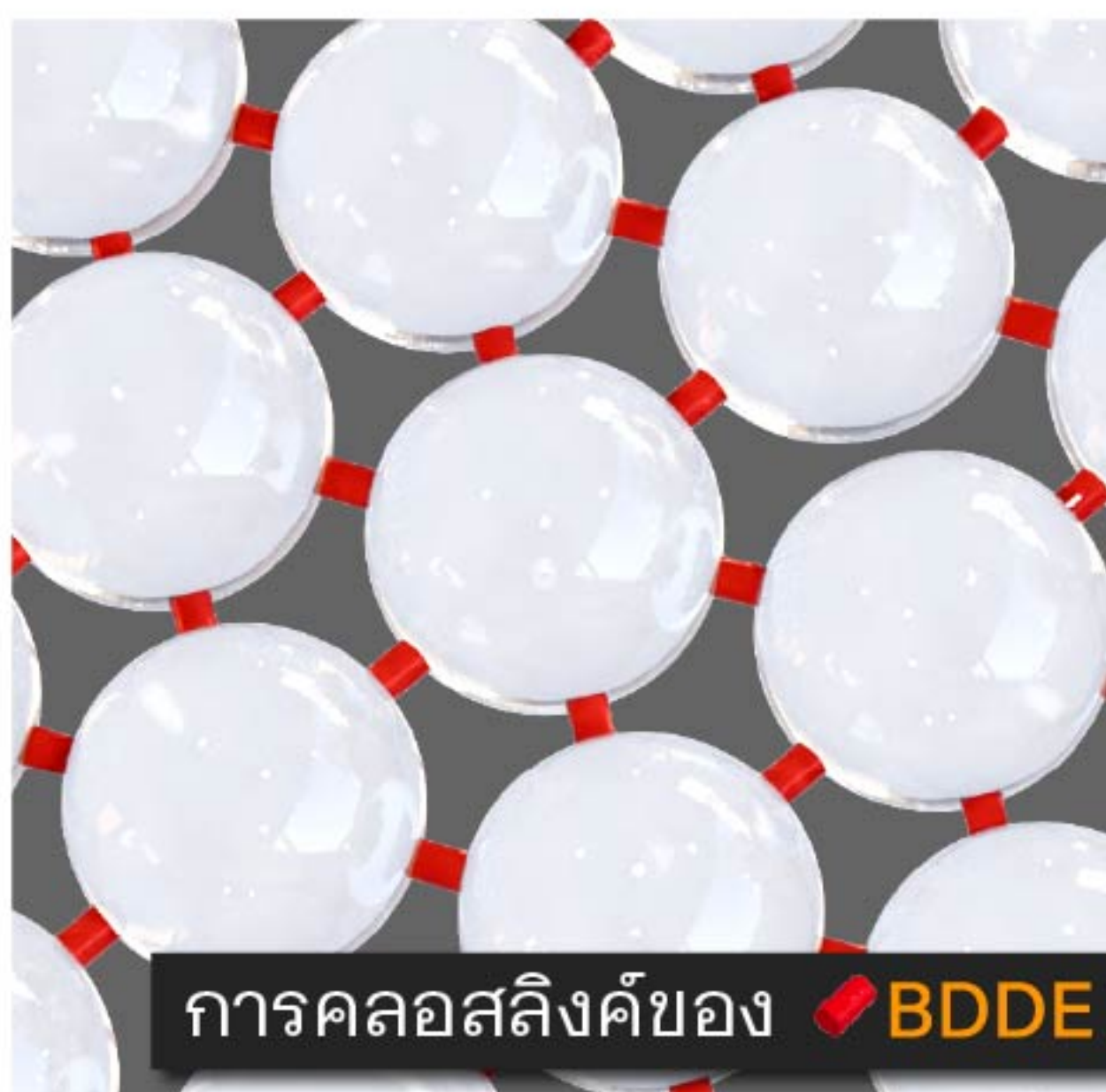


มีการใช้ **BDDE** จำนวนมากซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากฟิลเลอร์อย่างรุนแรง.
 นอกจากนี้ฟิลเลอร์ประเภทนี้ยังนำออกจาก
 ขวดได้ยาก. จึงต้องใช้น้ำเกลือผสมและ
 เขย่าเพื่อให้สารละลายเข้ากัน.

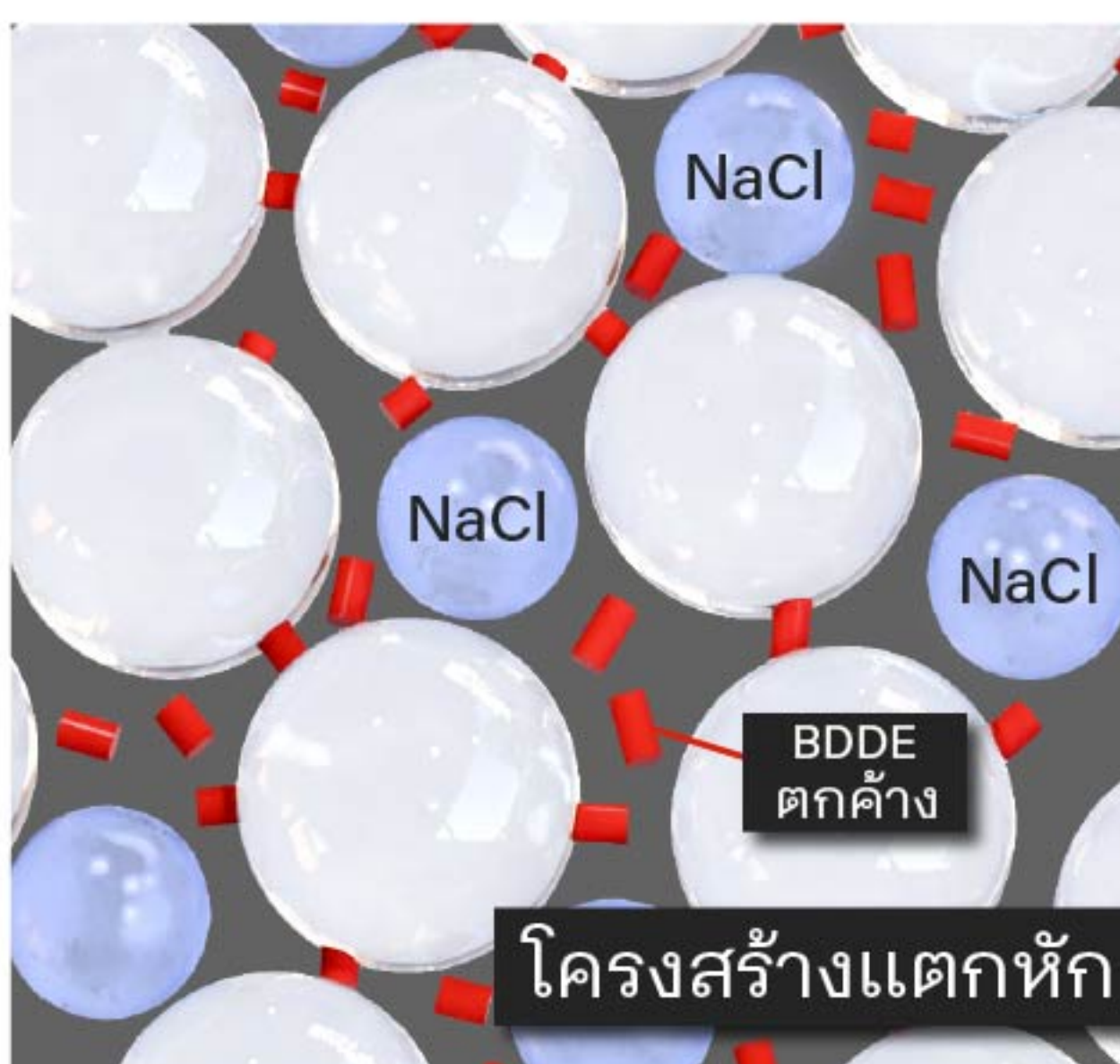


เมื่อคุณเติมน้ำเกลือและเขย่าเพื่อให้สาร
 ละลายผสมกัน โครงสร้างการคลอสลิงค์ของ
 HA จะเสียหายโดยสิ้นเชิง. ทำให้เกิดภาวะ
 ตกค้าง (Residual) ของ BDDE เพิ่มขึ้น
 ซึ่งเกิดจากโครงสร้าง HA ที่เสียหาย.
 BDDE ที่ตกค้างนี้สามารถทำให้เกิดผลข้าง
 เคียงและ เกิดการบวมอย่างรุนแรงได้.

AETERDERM® **LEXYFILL** บอดีฟิลเลอร์

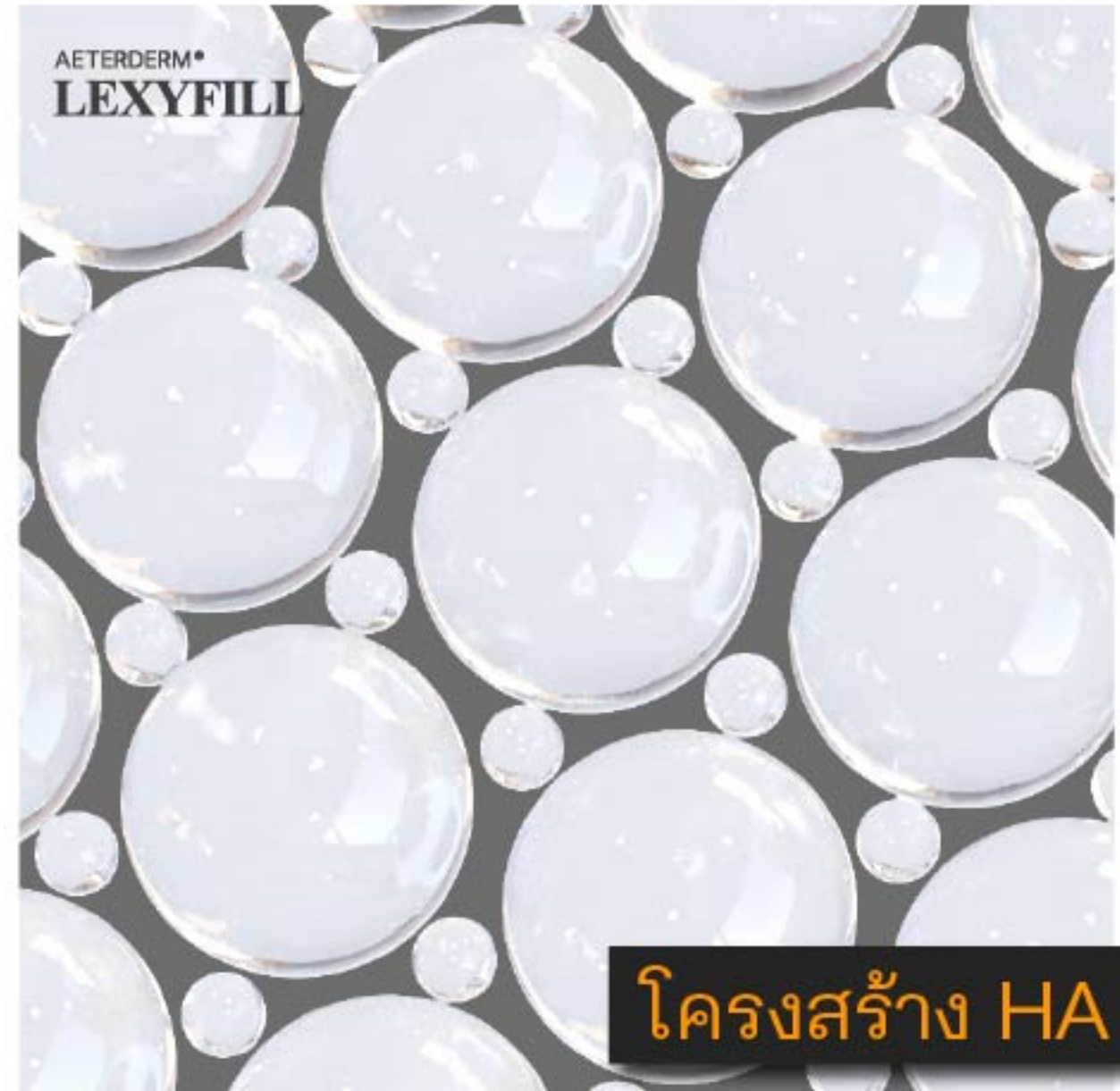


โมเลกุลขนาดเล็กของ HA อยู่ระหว่าง
 กลาง. ทำให้มีความชุ่มชื้นและยืดหยุ่นสูง.

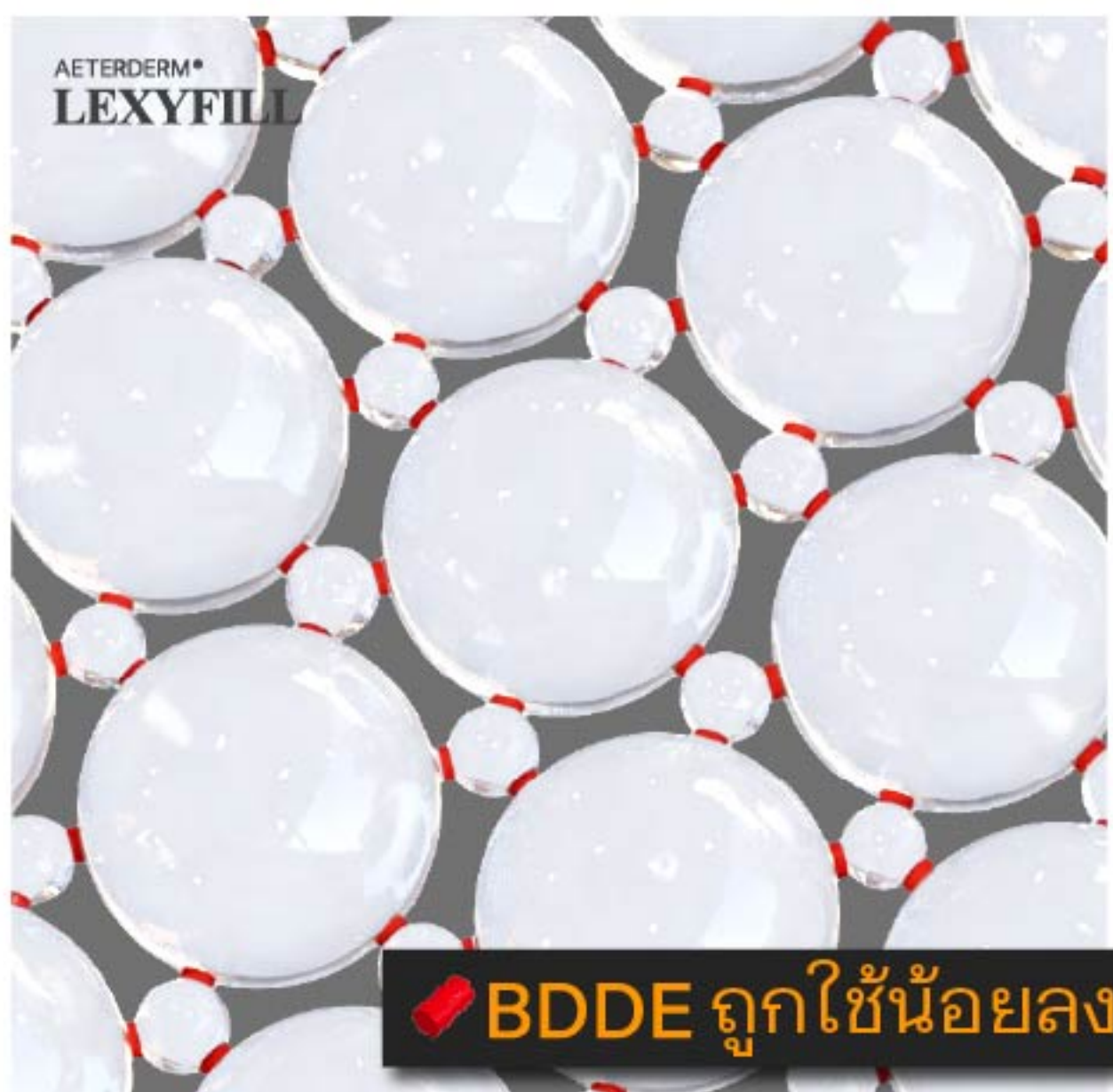

เป็นเพราะว่าโครงสร้าง HA แบบนี้ ในการ
 คลอสลิงค์จึงสามารถทำได้โดยใช้
BDDE ที่น้อยลงดังนั้นความน่าจะเป็น
 ของการ เกิดผลข้างเคียงจึงลดลงเป็น
 อย่างมาก.

ดังนั้นความน่าจะเป็นของการเกิดผลข้าง
 เคียงจึงลดลงเป็นอย่างมาก.

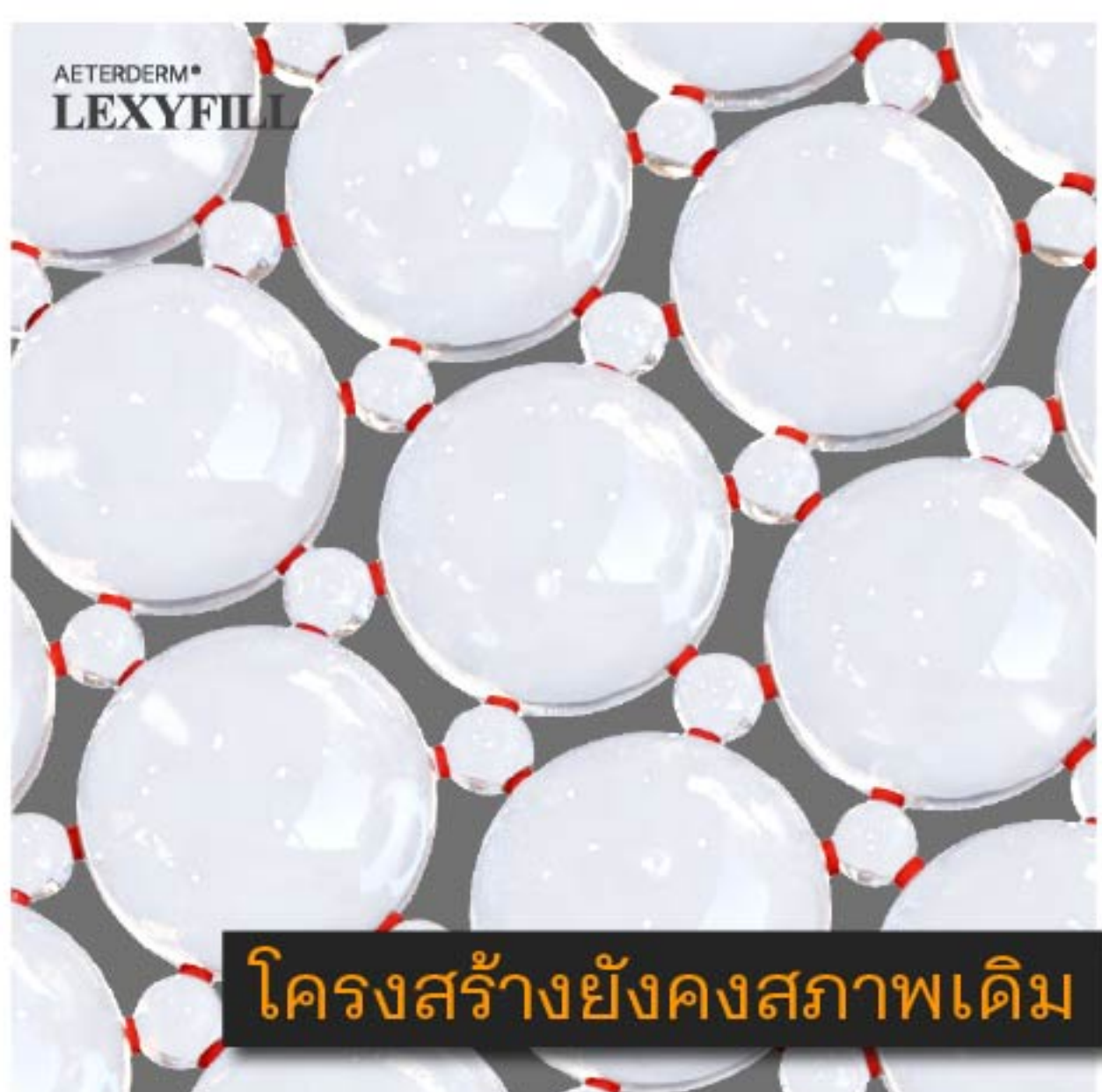

LEXYFILL สามารถดึงออกมาใช้ได้
 อย่าง ง่ายดายด้วยเข็มฉีดยาโดยไม่ต้อง
 ผสม น้ำเกลือ ดังนั้นจึงสามารถฉีดเข้าไป
 โดย ไม่ส่งผลต่อโครงสร้าง HA.

ส่วนผสมที่สำคัญ

กรดไฮยาลูรอนิก (HA)

การคลอสลิงค์ HA ที่แน่นหนา เข้าด้วยกัน
เหมาะสำหรับเพิ่มวอลลุ่มให้กับร่างกาย



ทำการทดลองซ้ำ 14 ครั้ง เพื่อขจัดสารพิษ 3 ชนิด
เพื่อป้องกันผลข้างเคียงได้อย่างสมบูรณ์

- ◎ BDDE ตกค้าง
- ◎ เอนโดทอกซิน
- ◎ โปรตีน

เพิ่มความยืดหยุ่นและการเก็บรักษาสูงสุด
โดยการผสมโมเลกุล HA ขนาดเล็กและใหญ่ เข้าด้วยกัน



HA Concentration	24 mg / mL
MOD (Degree of Modification, mol%)	3.85 %
Gel type	Biphasic
Storage Modulus(G')	100 - 250 Pa
Injection Force(N) (30G UTW)	20 N

การศึกษานอกเหนือจากการแพทย์

การทดสอบความหนืดและความยืดหยุ่น



เริ่มต้น



ผ่านไป 1 ชั่วโมง



ผ่านไป 6 ชั่วโมง



ผ่านไป 12 ชั่วโมง



ผ่านไป 24 ชั่วโมง

ข้อมูลอ้างอิง) Sci Rep 2024:(5)





AETERDERM®



LEXYFULL

การทดสอบทางการแพทย์

กระบวนการเสริมหน้าอก

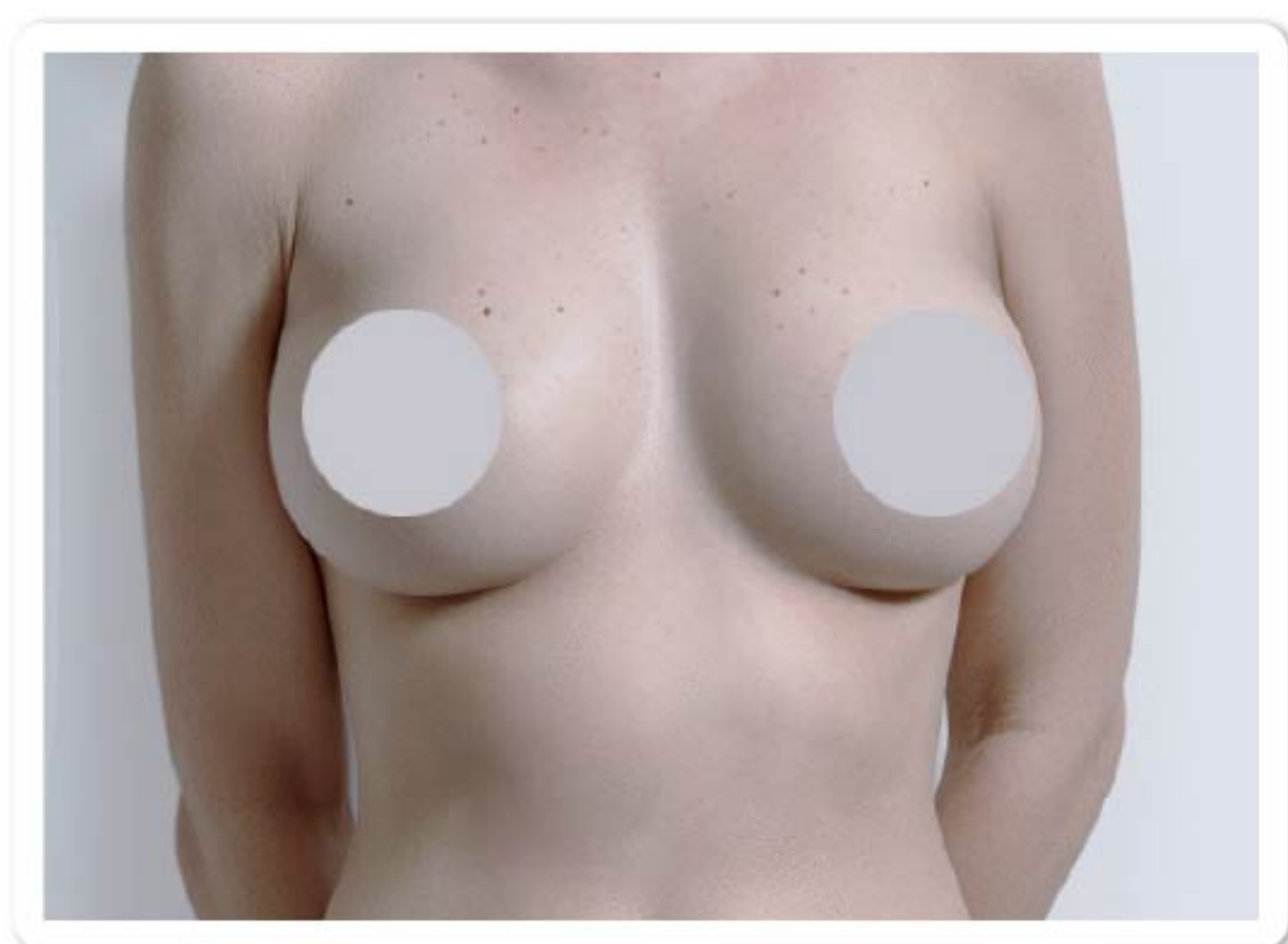
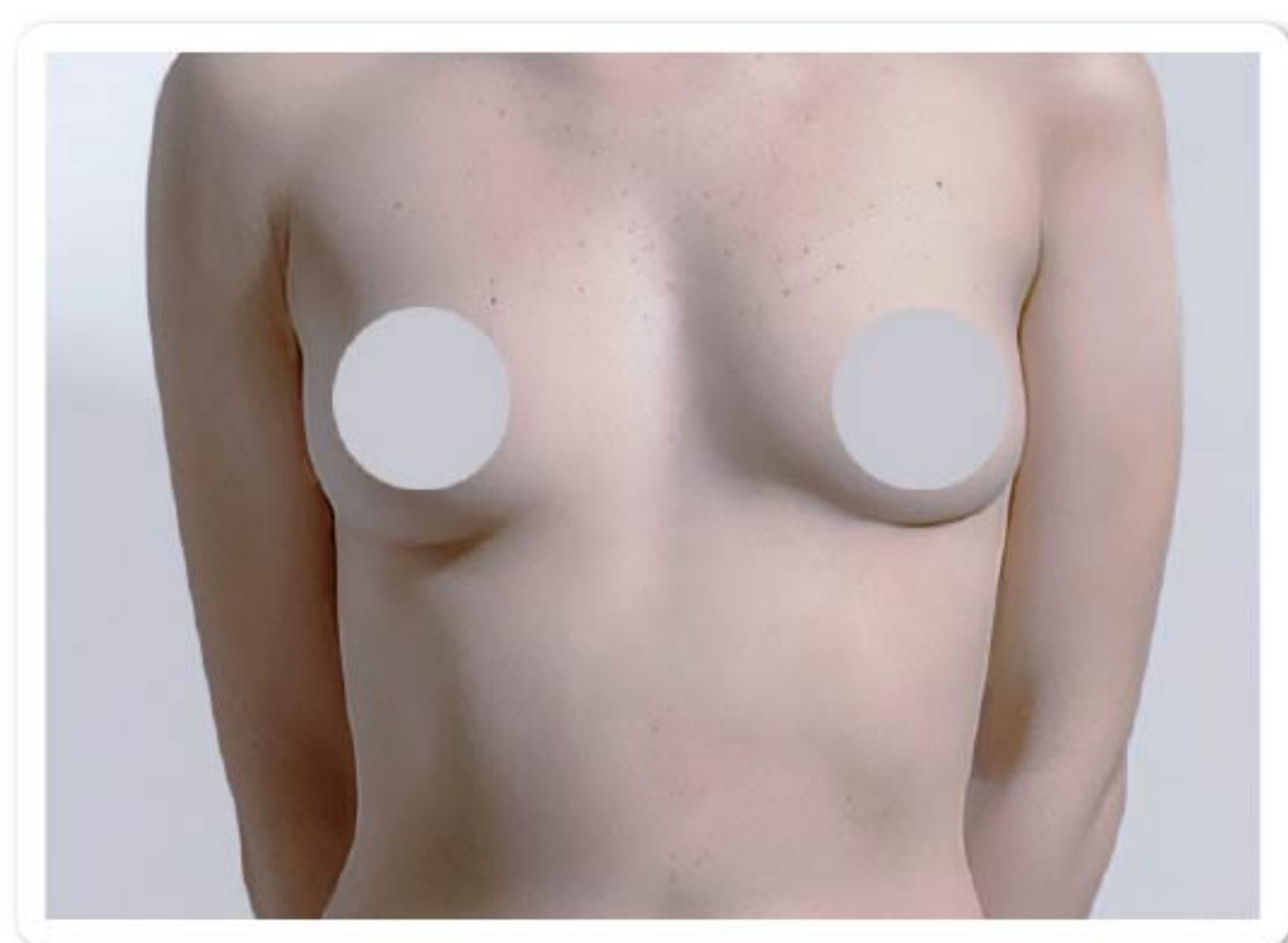


อ้างอิง) การเพิ่มขนาดหน้าอกโดยการทดลองทางการแพทย์ VISIA-CR
โดย Dermatol Ther 2022;11:3-13

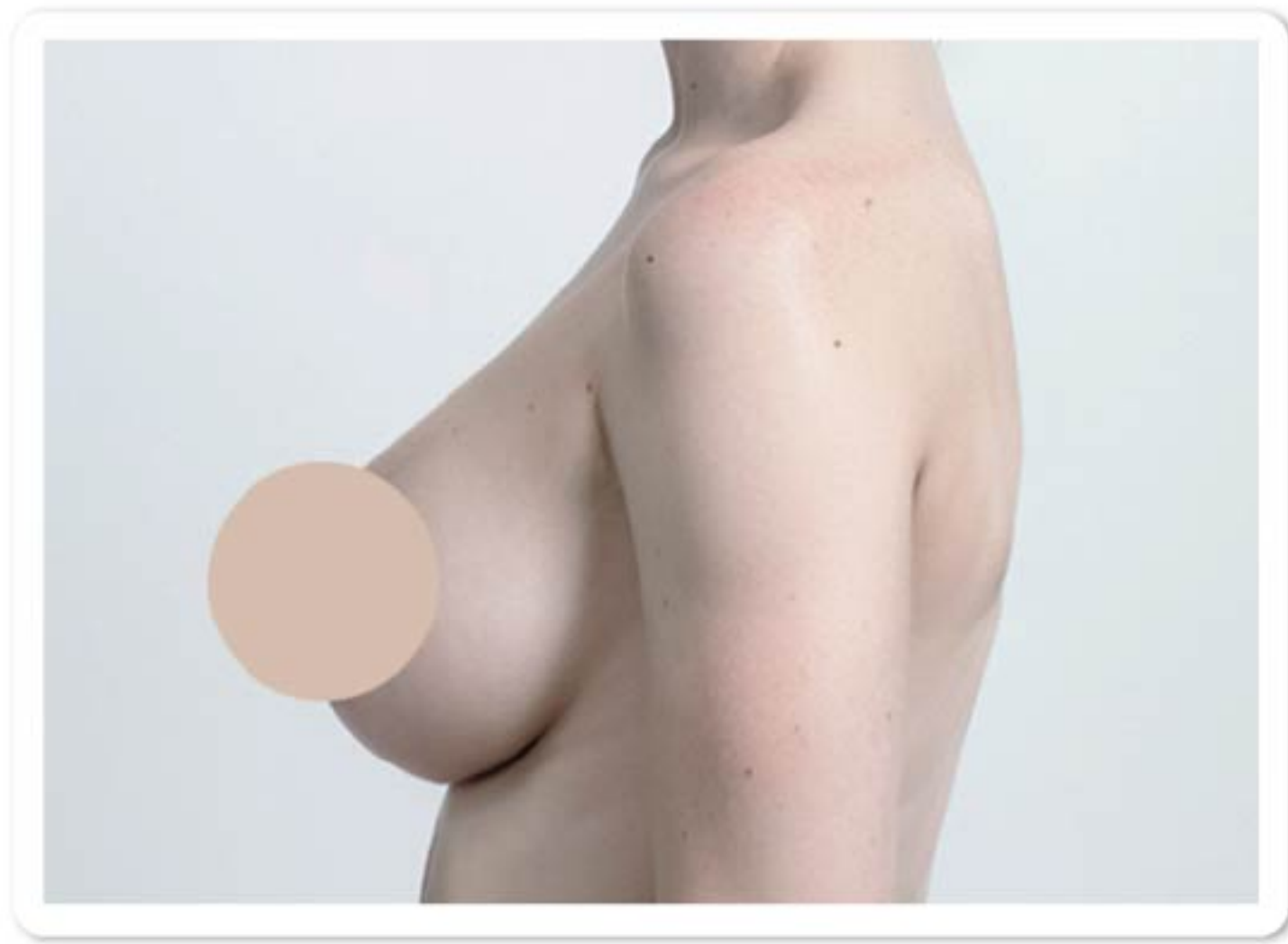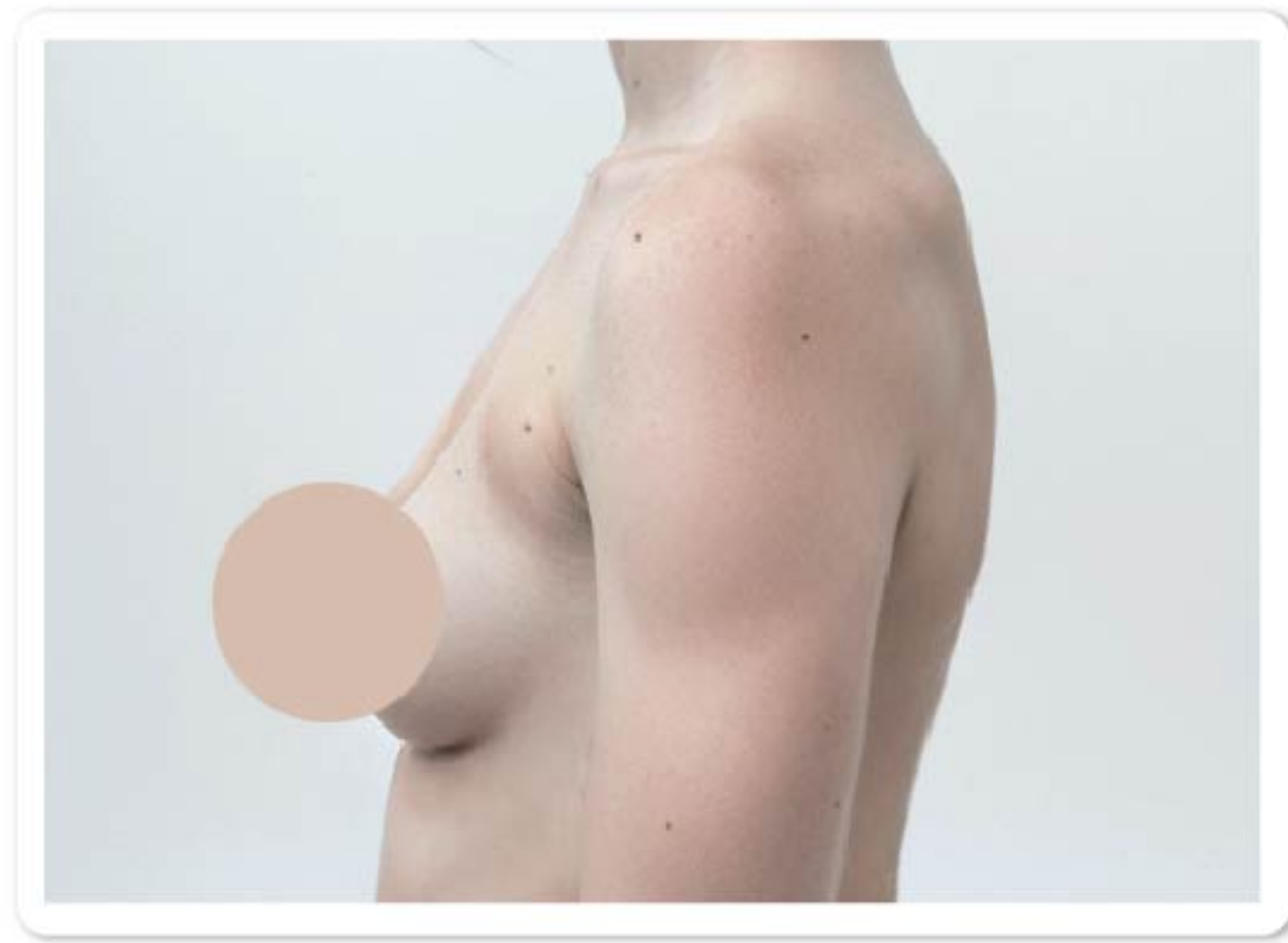

อ้างอิง) การเพิ่มขนาดหน้าอกโดยการทดลองทางการแพทย์ VISIA-CR
โดย Dermatol Ther 2022;17:10-15

กระบวนการเสริมบั้นท้าย

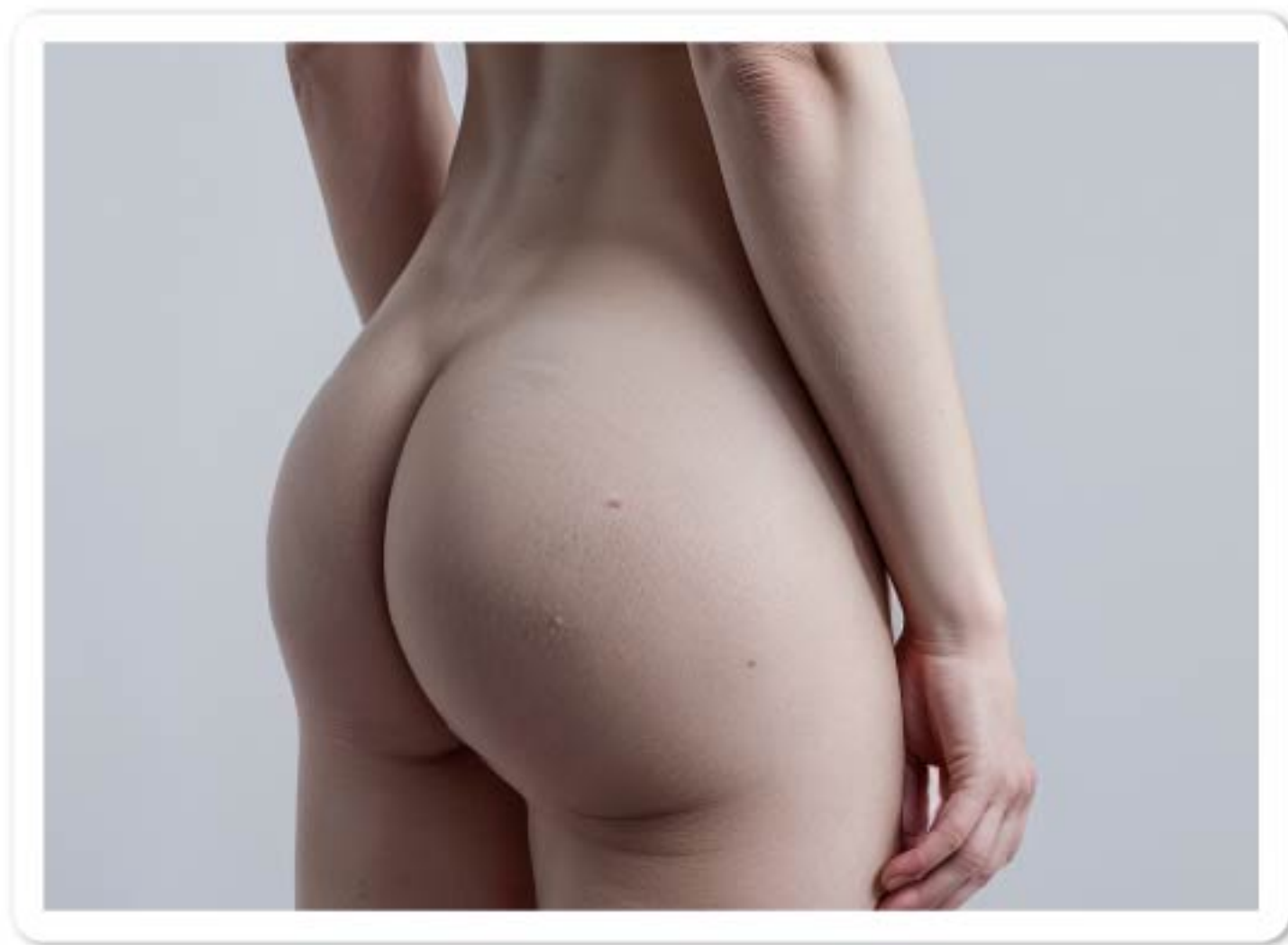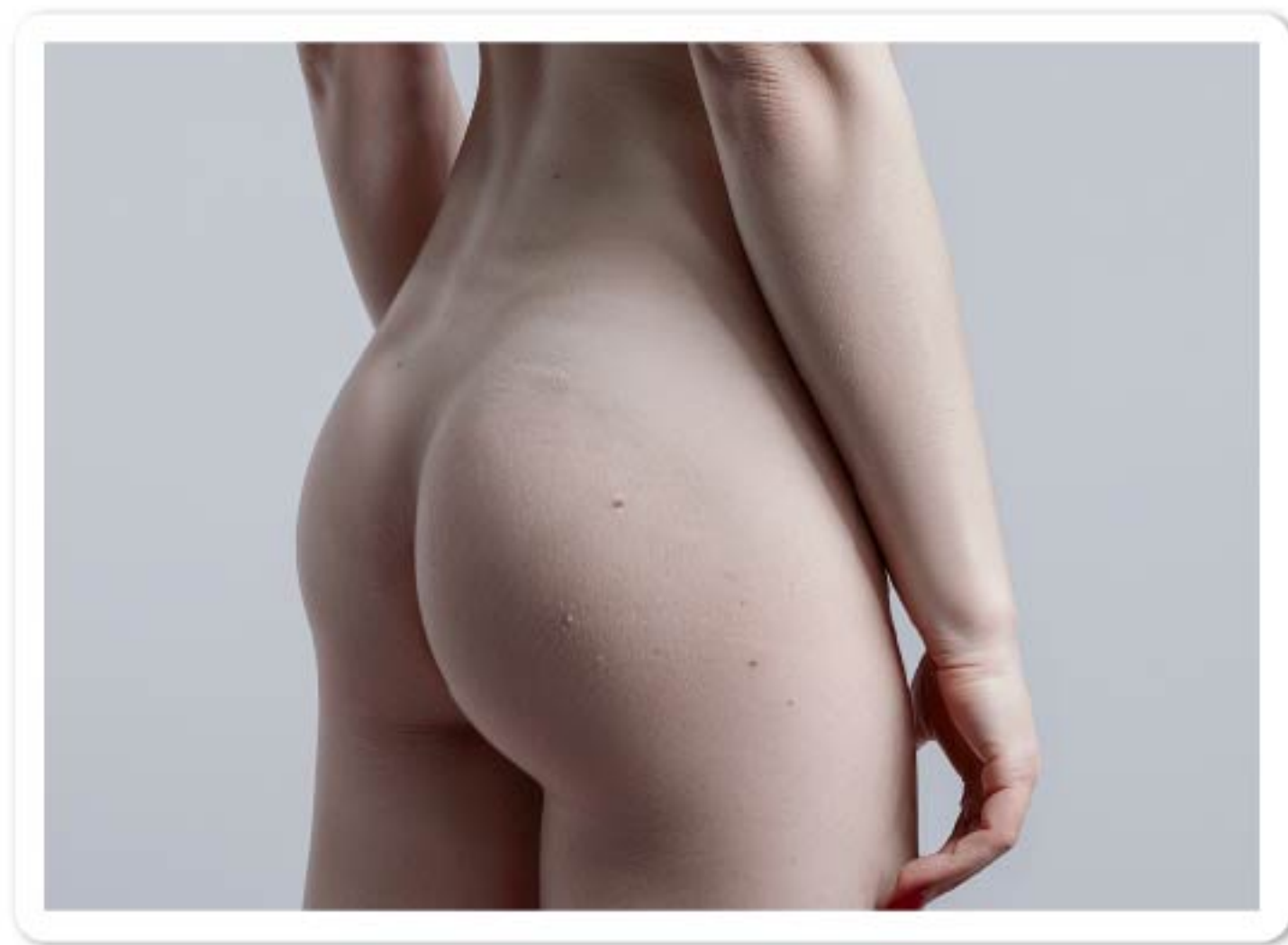


อ้างอิง) การเพิ่มขนาดบั้นท้ายโดยการทดลองทางการแพทย์ VISIA-CR
โดย Dermatol Ther 2022;21:35-19


คู่มือการทำหัตถการ

บริเวณที่ทำหัตถการ


ลำตัว ด้านหน้า

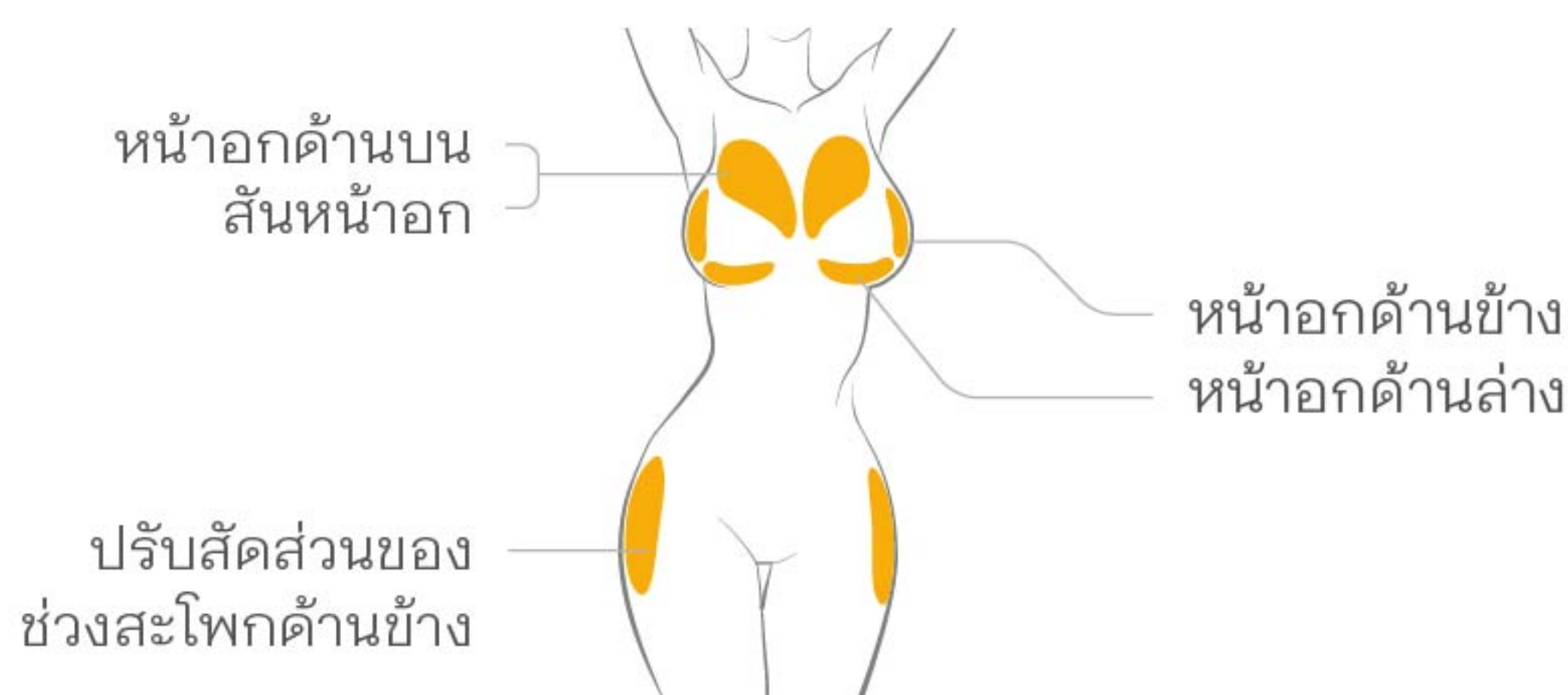

ด้านข้าง

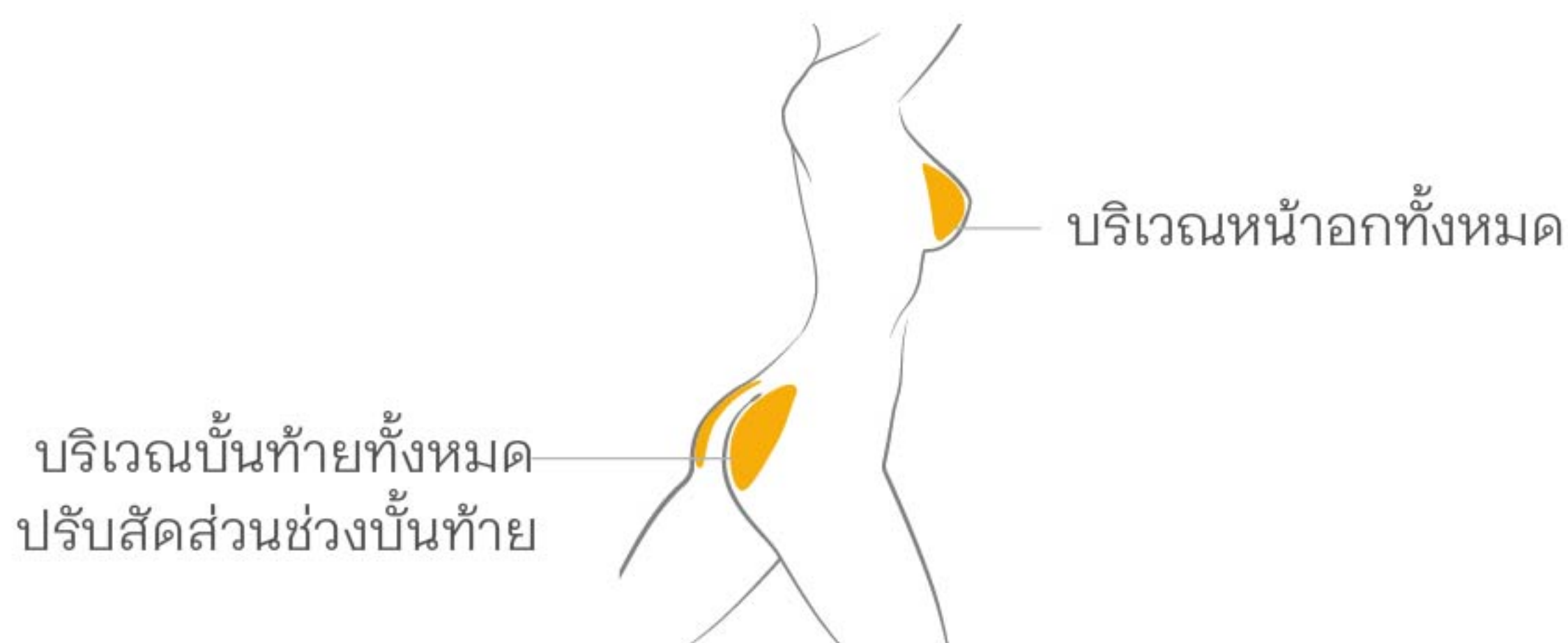


ด้านหลัง

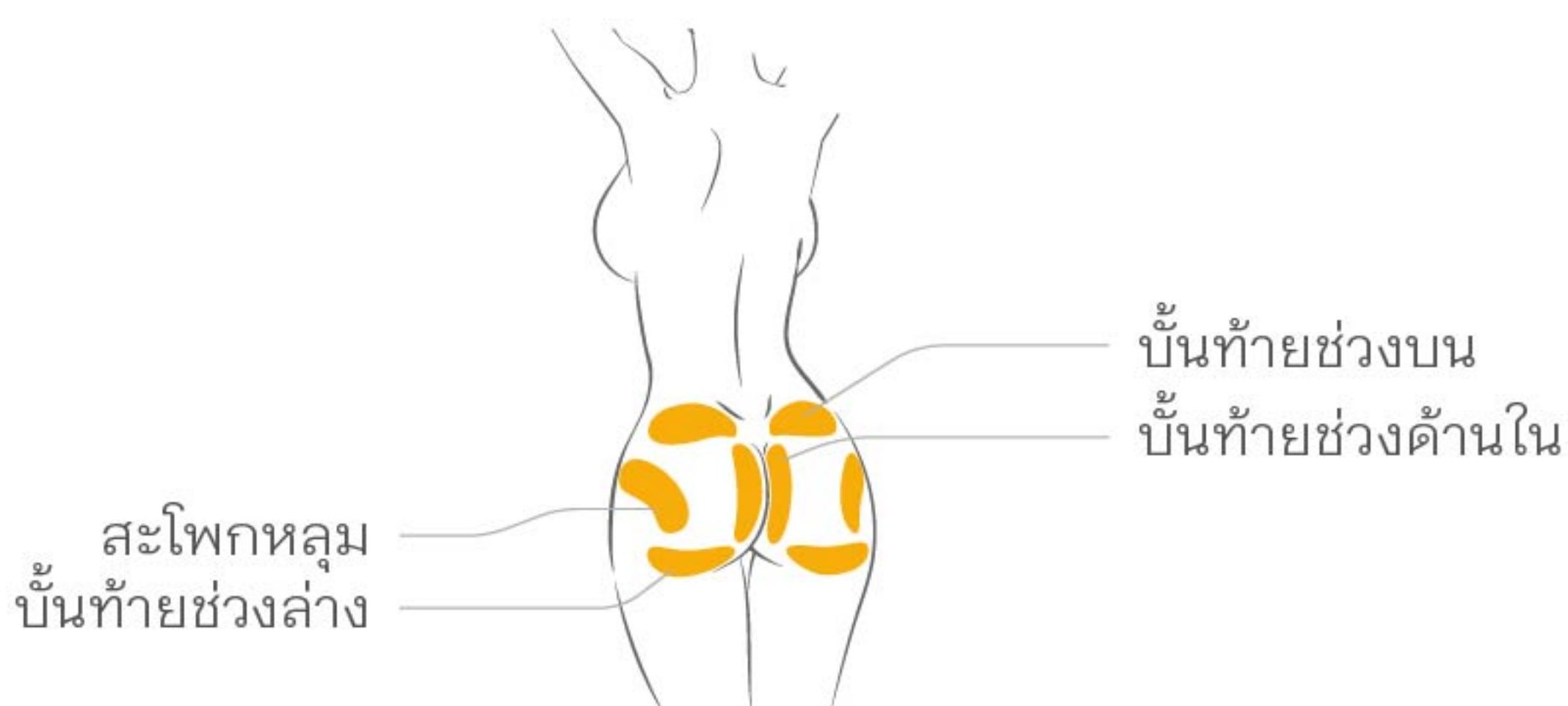

※ หากคนไข้มีผิวบั้นท้ายไม่เรียบเนียนหรือมีอาการบั้นท้ายหย่อนคล้อยอย่างรุนแรง
ไม่แนะนำให้ฉีด HA ฟिलเลอร์ ในบริเวณบั้นท้ายส่วนล่างอย่างยิ่ง

บริเวณที่ทำการฉีด

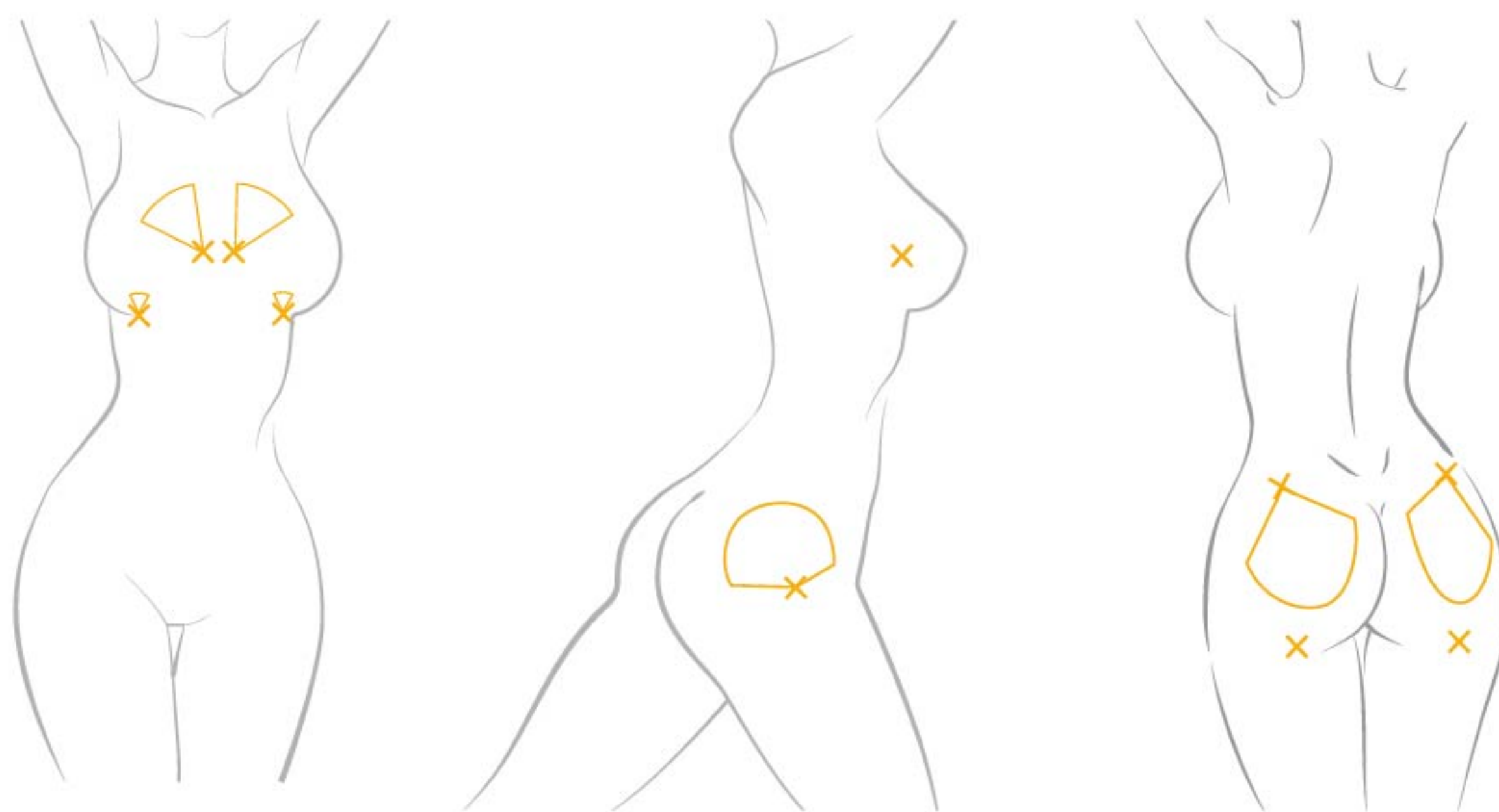

ประเภทเข็มที่แนะนำ

- บริเวณหน้าอก — แนะนำ เข็ม micro-cannula ขนาด 14G 90mm
- บริเวณหน้าอกด้านข้าง — แนะนำ เข็ม micro-cannula ขนาด 20G 70mm
- บริเวณบั้นท้าย — แนะนำ เข็ม micro-cannula ขนาด 18G 70mm หรือ 18G 90mm

ขั้นตอนในการทำหัตถการ

- ตรวจสอบว่าคนไข้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทำหัตถการหรือไม่
- ทำความสะอาดบริเวณทำหัตถการด้วยสบู่และน้ำสะอาด.
- ฆ่าเชื้อบริเวณที่จะทำหัตถการด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ
- ฉีด Lexyfill HA บอดีฟิลเลอร์ เข้าไปในเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิว ในบริเวณที่จะทำหัตถการ โดยใช้เข็มที่มีขนาดเล็กหรือเข็มแคนนูล่า.
- เมื่อทำหัตถการเสร็จสิ้น ควรนวดเบาๆ บริเวณที่ทำหัตถการเพื่อให้ฟิลเลอร์ประสานตัวกับเนื้อเยื่อโดยรอบได้ดี

※ คำแนะนำโดยละเอียดมีให้ในคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังหลังการทำหัตถการ

- ประคบเย็นในบริเวณที่ทำหัตถการเป็นเวลา 15 - 20 นาที ต่อครั้ง หลายครั้ง ต่อวัน เพื่อช่วยลดอาการบวมและฟกช้ำ
- หลีกเลี่ยงการกด บีบ บริเวณหัตถการอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมเหล่านี้หลังหัตถการ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 - กิจกรรมที่ต้องใช้แรง หรือการออกกำลังกาย
 - ดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
 - แช่น้ำร้อน , ซาวน่า , อบไอน้ำ

※ ข้อควรระวังโดยละเอียดมีให้ในคู่มือด้านในบรรจุภัณฑ์

วอลลุ่มที่ยิ่งกว่าวอลลุ่ม

LEXYFILL VOLUME CREAM

พวกเราผลิต ^{AETERDERM®} **LEXYFILL VOLUME CREAM**

เพื่อผลลัพธ์ที่ควบคู่กับ ^{AETERDERM®} **LEXYFILL**

ด้วยการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
และป้องกันผลข้างเคียงของฟิลเลอร์

■ การทำงานที่ 1

เพิ่มวอลลุ่มให้ร่างกายของคุณ
ผ่านการเพิ่มจำนวนของเซลล์ไขมัน
ด้วย VOLUFILINE

■ การทำงานที่ 3

ป้องกันและการรักษารอยแตกลาย

■ การทำงานที่ 2

ทำให้ผิวกระชับและยืดหยุ่นขึ้นโดย
การสังเคราะห์คอลลาเจนและอีลาสติน

■ การทำงานที่ 4

ให้ความชุ่มชื้นและผ่อนคลายผิว



ทาครีมอย่างเบามือบนบริเวณที่ทำหัตถการ
LEXYFILL วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10-20 นาที.

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำหัตถการ
บอดี้ฟิลเลอร์คงไว้ซึ่งวอลลุ่มในระยะยาวและ
สร้างรูปร่างที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยการ
เพิ่มจำนวนของเซลล์ไขมันตามธรรมชาติ.

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM


Fill Your Luxury Beauty



การทำงานที่ 1


การเพิ่มจำนวนเซลล์ไขมันโดย **VOLUFILINE™**

ประกอบด้วย VOLUFILINE 50,000 ppm ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสากลที่ได้รับการทดสอบทางการแพทย์ ในการขยายตัวของจำนวนเซลล์ไขมัน, เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ของบอดีฟิลเลอร์ให้สูงสุด รักษาผลลัพธ์ในระยะยาว และสร้างรูปทรงที่เป็นธรรมชาติ

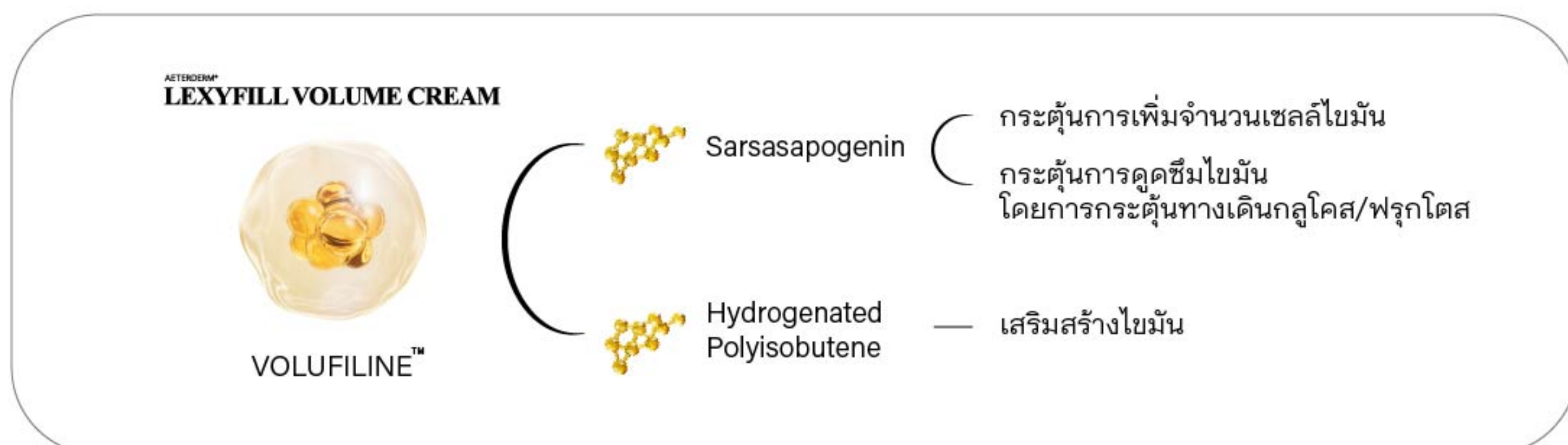


การทดสอบทางการแพทย์ของ VOLUFILINETM

T1 อัตราการเพิ่มขึ้นของเซลล์ไขมันด้วย VOLUFILINE

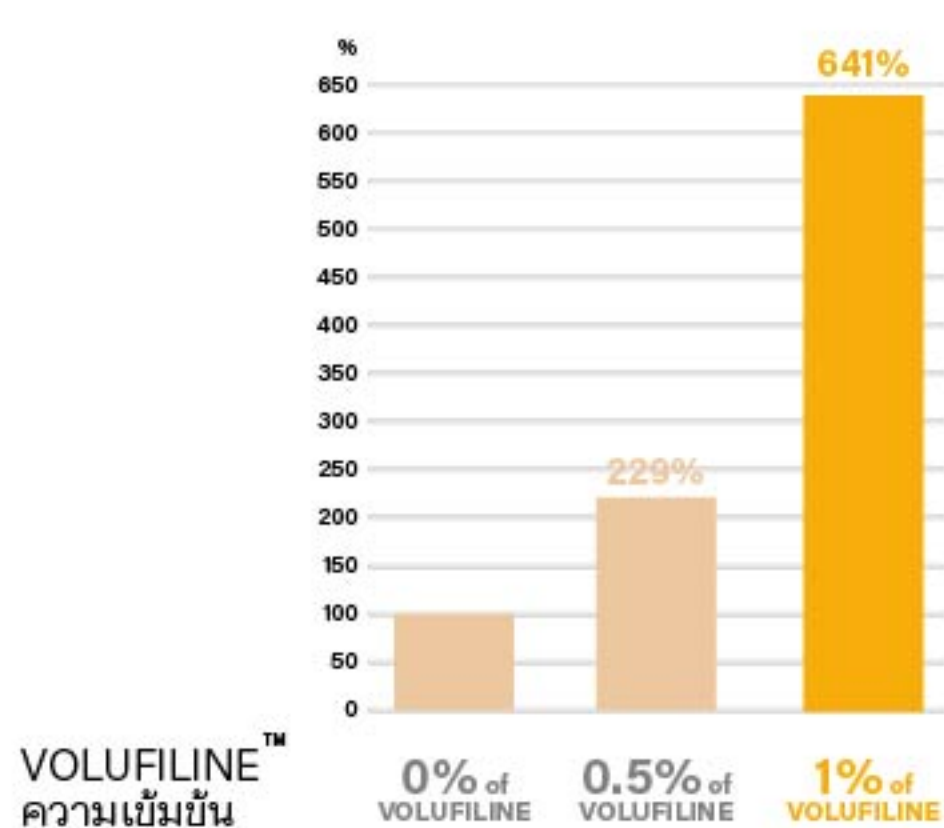


T2 อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาตรเซลล์ด้วย VOLUFILINE

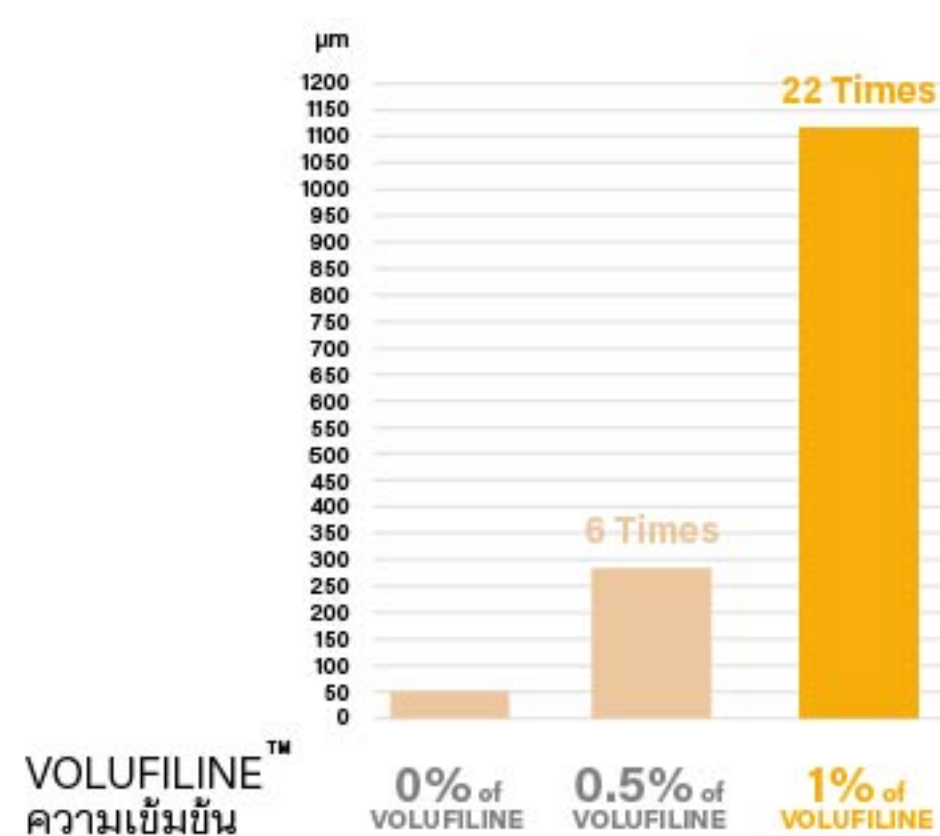

ข้อมูลอ้างอิง) Sci Rep 2024:(22)


T1 ภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์ของเซลล์ไขมันด้วย **VOLUFILINE**

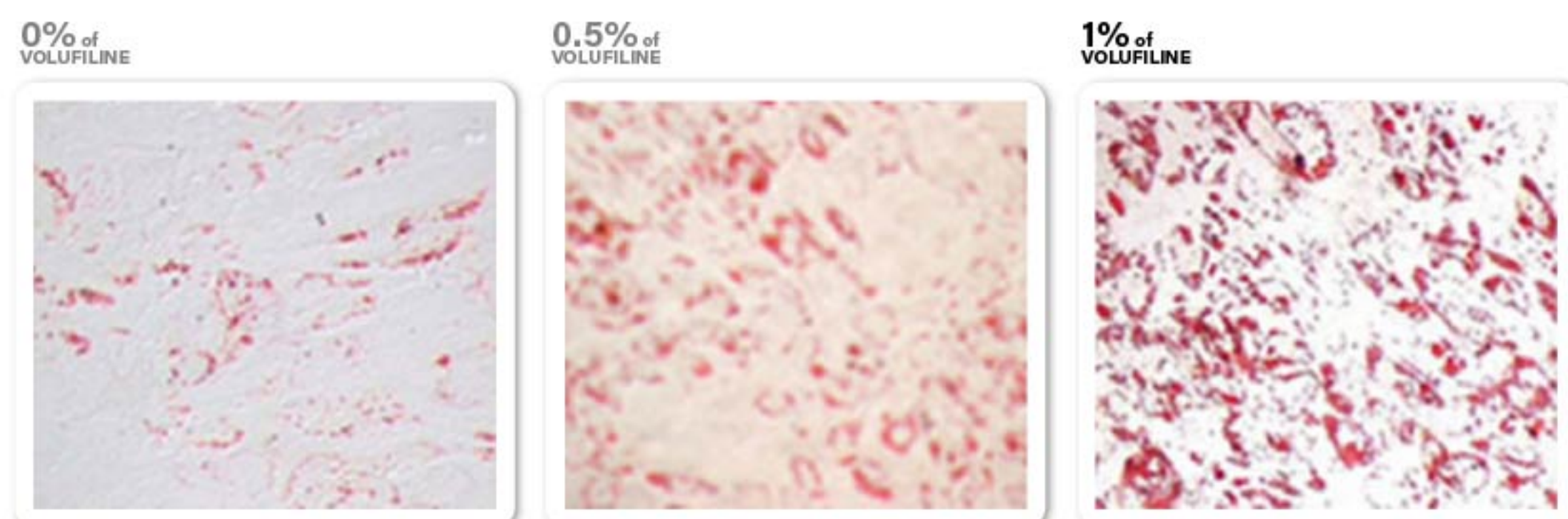

■ สีแดง : เซลล์ไขมัน

ข้อมูลอ้างอิง) Sci Rep 2024:(27)

T2 ภาพถ่าย MRI ของเซลล์ไขมันด้วย VOLUFILINE

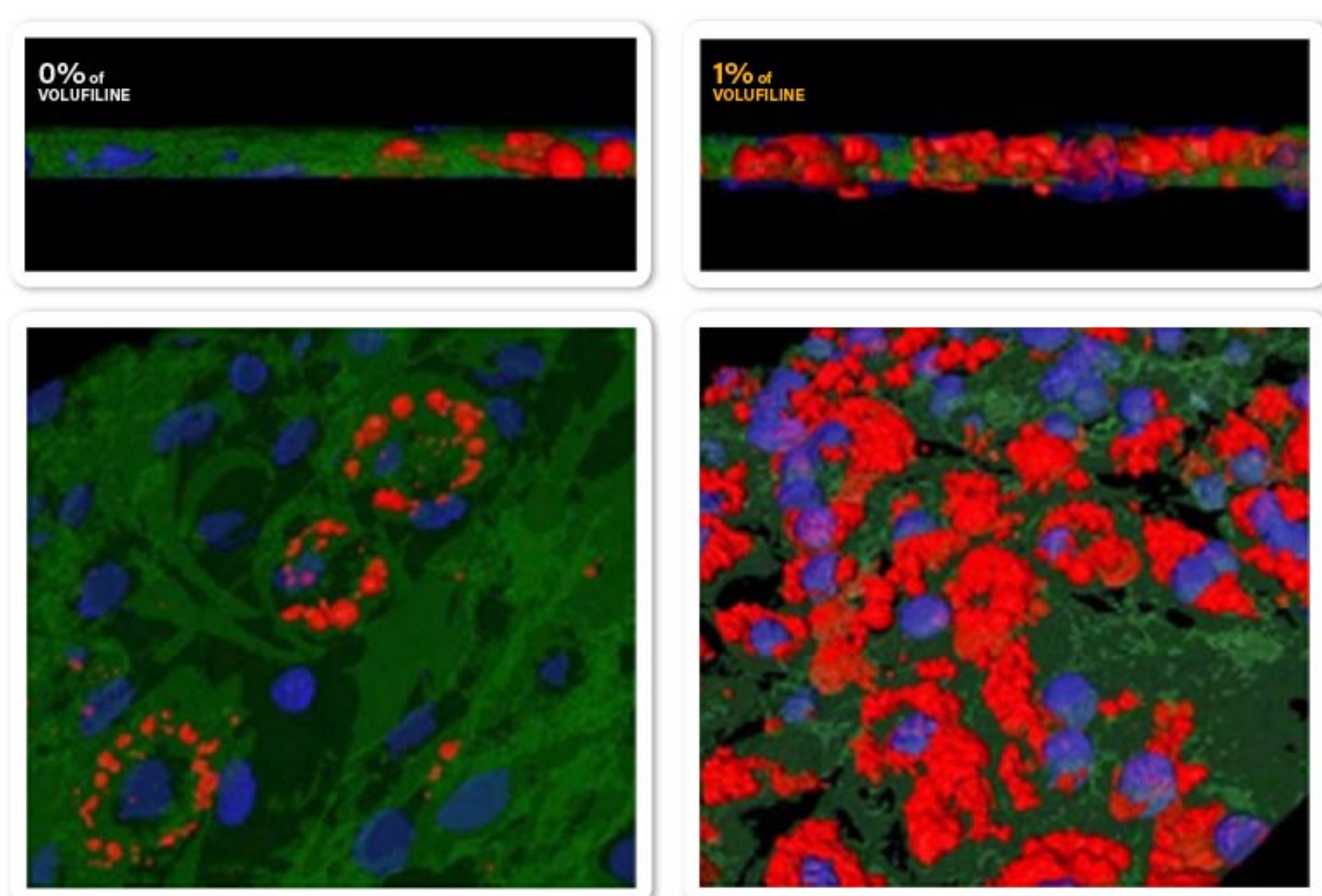


■ เซลล์ไขมัน


ข้อมูลอ้างอิง) Sci Rep 2024:(31)

การสังเคราะห์คอลลาเจน & อิลาสติน

เมื่อเทียบกับกรดไฮยาลูรอนิกที่เติมผ่านฟิลเลอร์, ไม่มีคอลลาเจนและอิลาสตินเพียงพอที่จะรองรับ ดังนั้นความยืดหยุ่นและการกักเก็บจึงอ่อนตัว
 LEXYFILL VOLUME CREAM แก้ปัญหาเหล่านี้จากรากฐานด้วยความยืดหยุ่น

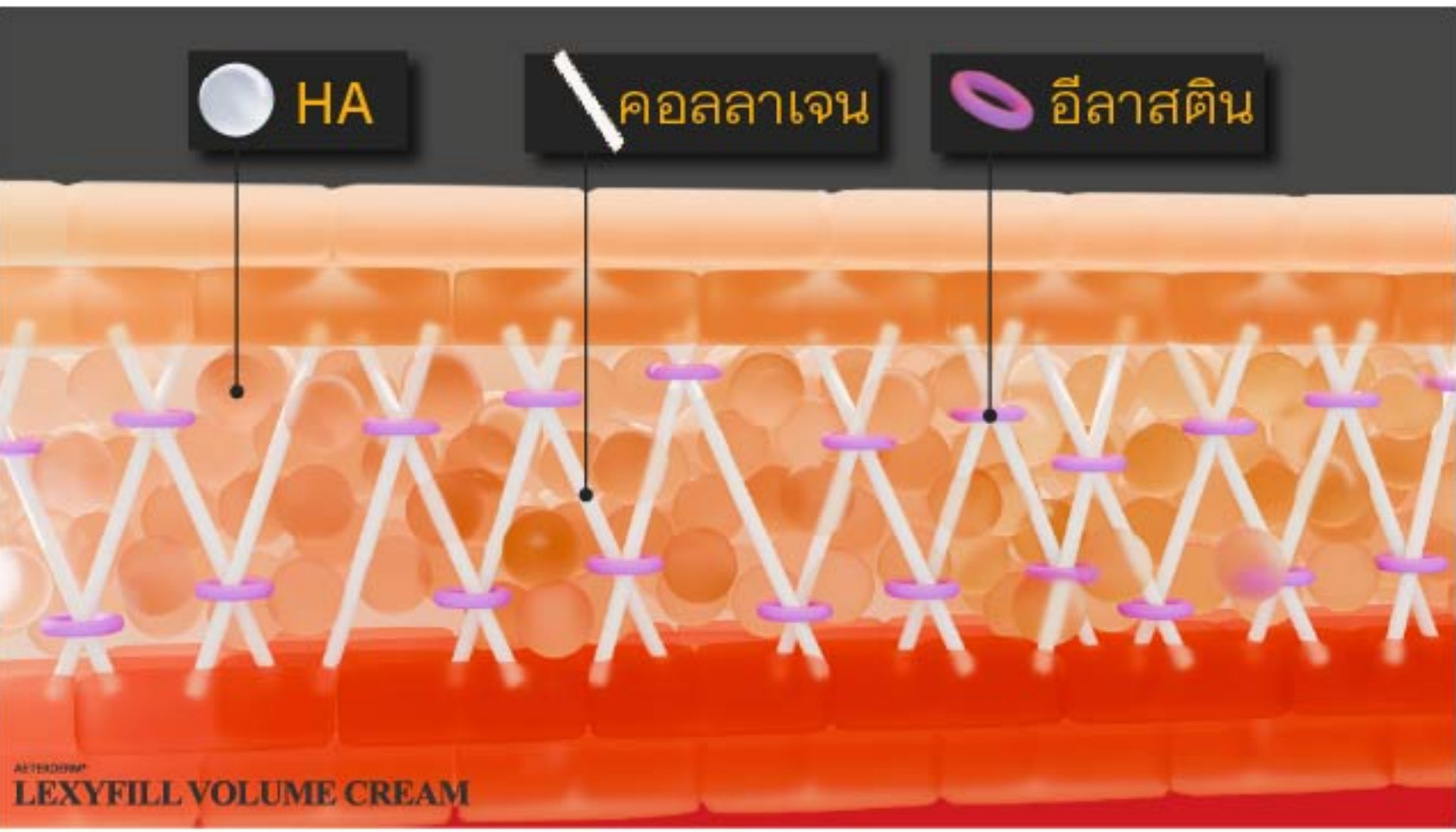

โครงสร้างเนื้อเยื่อผิวหนังธรรมชาติ
 ส่วนประกอบหลักสำคัญ 3
 ประการของผิวหนัง
 - กรดไฮยาลูรอนิก
 - คอลลาเจน
 - อิลาสติน

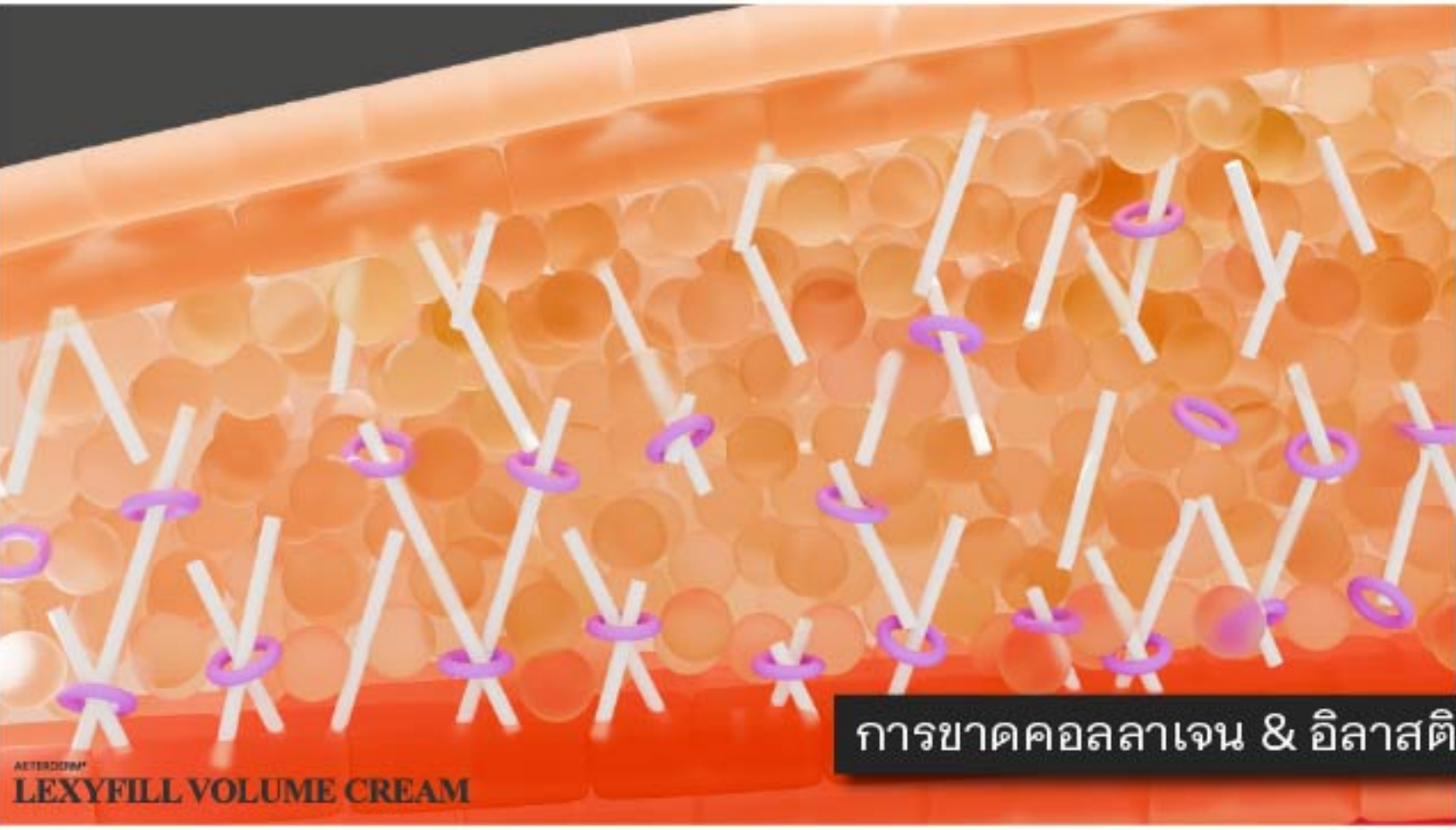


เติมเต็ม HA Filler เข้าสู่ผิว



กระตุ้นการผลิตคอลลาเจน & อิลาสตินผ่านไลโปโซม
 ๐ โครงสร้างไลโปโซม
 สารออกฤทธิ์ (Active ingredient)
 โครงสร้างฟอสโฟไลปิด 2 ชั้นที่สามารถผ่านเยื่อหุ้มด้วยตัวมันเองได้อย่างง่ายดาย

โครงสร้างไลโปโซมช่วยให้สารออกฤทธิ์สามารถซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังได้.

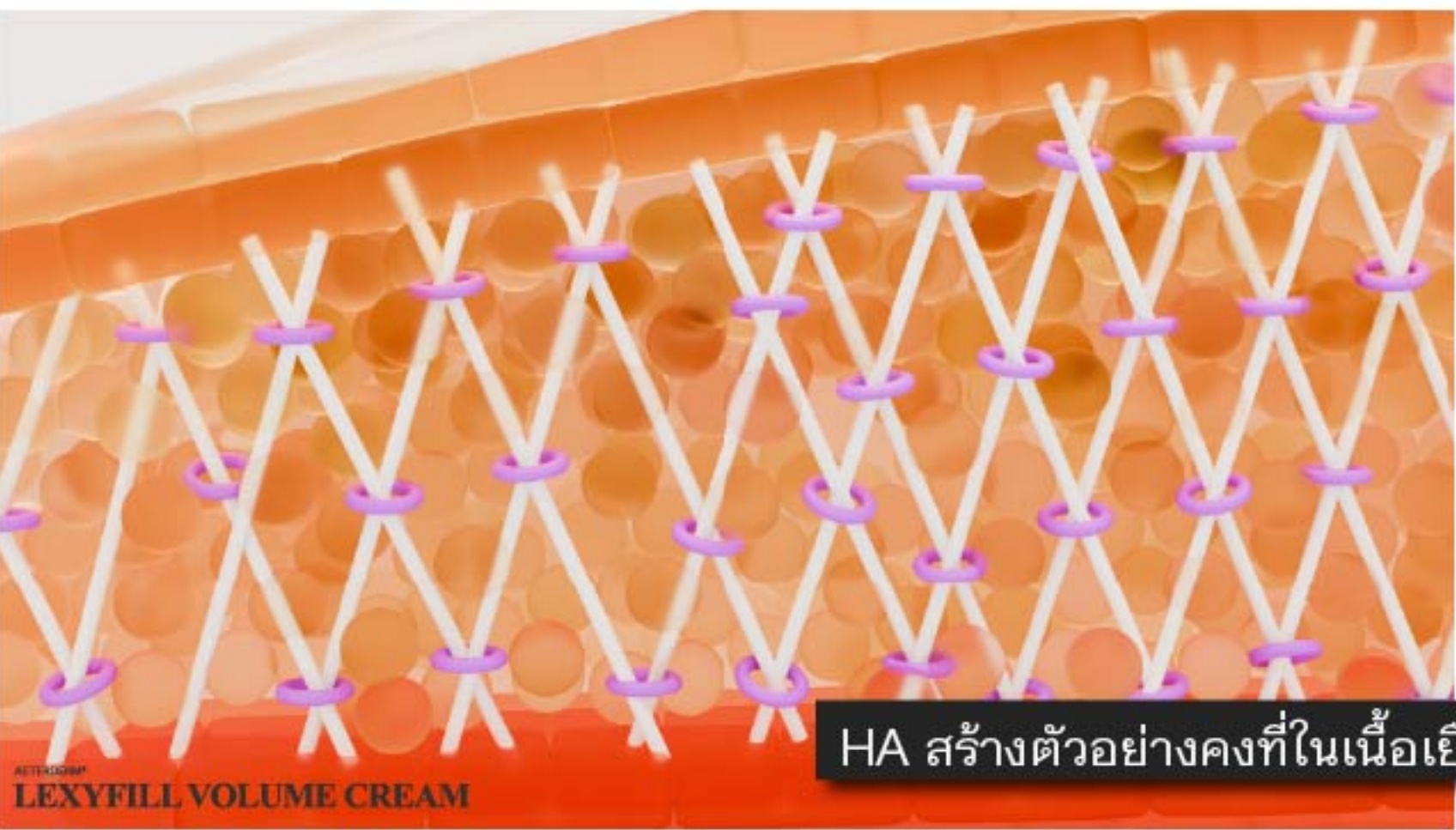

ทำให้ผิวกระชับและยืดหยุ่นมากขึ้น
 เสริมสร้างความยืดหยุ่นของผิวและกักเก็บฟิลเลอร์ HA

PTMA-Oligomer Plus

Copper Tripeptide-1

Palmitoyl Tripeptide-1

Palmitoyl Tetrapeptide-7

Palmitoyl Pentapeptide-4

๐ เพิ่มประสิทธิภาพของการสังเคราะห์คอลลาเจน & อิลาสติน

๐ กระตุ้นการทำงานของ EGF (Epidermal Growth Factor)

การทำงานที่ 3

ป้องกันและลดเลือนรอยแตกกลาย



หลังจากทำหัตถการ, รอยแตกอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการเพิ่มวอลลุ่มอย่างกระทันหัน LEXYFILL VOLUME CREAM จึงถูกผลิตและปรับสูตรมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

LEXYFILL VOLUME CREAM

◎ ฟื้นฟูบำรุงผิว

◎ ลดรอยแดงและป้องกันแผลเป็น

LEXYFILL VOLUME CREAM

◎ เสริมเกราะป้องกันผิว (เพิ่ม SPT)

◎ ซ่อมแซมผิวหน้าที่เสียหาย

การทำงานที่ 4

ความชุ่มชื้น&การปกป้องประโลมผิว



แม้ว่าขั้นตอนจะดำเนินการด้วยการใช้เข็มแคนนูล่า การกระตุ้นชั้นผิว ทำให้เกิดความร้อนระเหยความชุ่มชื้นของผิวผิวที่แห้งกร้านจะสูญเสียความยืดหยุ่นของผิวได้โดยง่ายและทำให้เกิดรอยแตกกลาย.

LEXYFILL VOLUME CREAM มีประสิทธิภาพป้องกันผลข้างเคียงเหล่านี้.

LEXYFILL VOLUME CREAM

◎ ความชุ่มชื้นอย่างลุ่มลึก

◎ ลดการระเหยของความชื้นในผิว

Fill Your Luxury beauty



AETERDERM®

LEXYFILL

[ส่วนประกอบสำคัญ]

Cross-linked hyaluronic acid	_____	24 mg / mL
Phosphate-buffered saline	_____	q.s.

[บรรจุภัณฑ์]

60 ซีซี. x 1 ขวด / กล่อง

[การเก็บรักษา]

เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (1~30°C) หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง

AETERDERM®

LEXYFILL VOLUME CREAM

[ส่วนผสม]

Water, Hydrogenated Polyisobutene, Butylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Glyceryl Stearate SE, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vinyl Dimethicone, Panthenol, C14-22 Alcohols, Ceramide NP, C12-20 Alkyl Glucoside, Dipropylene Glycol, Carbomer, Arginine, Xanthan Gum, Glyceryl Polyacrylate, Magnolia Officinalis Bark Extract, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Sodium Stearoyl Glutamate, Hydrogenated Lecithin, Adenosine, Glyceryl Stearate, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Cholesterol, Ceramide NS, Ceramide AS, Ceramide AP, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Althaea Rosea Root Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Glucose, Caulerpa Lentillifera Extract, Codium Fragile Extract, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Tocopherol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Pentapeptide-4, Potassium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Oligopeptide-1, Ceramide EOP

[บรรจุภัณฑ์]

150mL / กล่อง